

本格派

フットマッサージャー

疲れた足に  
贅沢なマッサージをプレゼント。

# Air magic

フットマッサージャー  
AM-22

小さいのに、フルパワー。実感できる **3**つのポイント

**1** エアーバッグと指圧突起    **2** 充実のマッサージ機能    **3** 選べるコースと強さ

**22** 枚のエアーバッグと  
**28** 個の指圧突起を搭載。

ふくらはぎ包み込みマッサージ  
&  
足首～足裏ポイントマッサージ

**4** つの自動コースと  
**2** 段階の強弱調節機能

本格派マッサージを支えるマッサージ機能！

### ふくらはぎ包み込みマッサージ



※イメージCG

片側につき4枚配置されたエアーバッグがふくらはぎを包み込みながらもみほぐします。同時に、ふくらはぎ裏の4つの指圧突起でしっかりとマッサージします。

### 足首～かかとマッサージ



※イメージCG

片側1枚のエアーバッグと4つの指圧突起でしっかりとポイントケアが可能です。

### 足の甲のマッサージ



※イメージCG

片側4枚のエアーバッグでしっかりとつかみもみ。足の甲までしっかりしたマッサージが可能です。

### 足裏のマッサージ



※イメージCG

片側2枚のエアーバッグと6つの指圧突起が足裏をしっかりと指圧マッサージします。

# わかりやすく使いやすい 操作パネル

4つの自動コースをご用意いたしました。シンプルな操作パネルでお好きなコースを簡単にお選びいただけます。また、それぞれのコースで、強・弱の2段階からお好みの強さをお選びいただけます。

## 足裏コース

### 「足裏」マッサージ

足裏〜かかと部を重点的にケアする集中コースです。

## 強弱調節

エアーマッサージの強さは、それぞれ強・弱2段階より選択できます。

## 全体コース

### 「しっかり」マッサージ


指圧突起部分を小刻みに動作させるしっかりマッサージコースです。

### 「もみほぐし」マッサージ

足裏・かかと・ふくらはぎを中心に、じっくりほぐす感覚のマッサージコースです。

### 「やすらぎ」マッサージ

各部位を交互に動作させるゆったりとしたコースです。

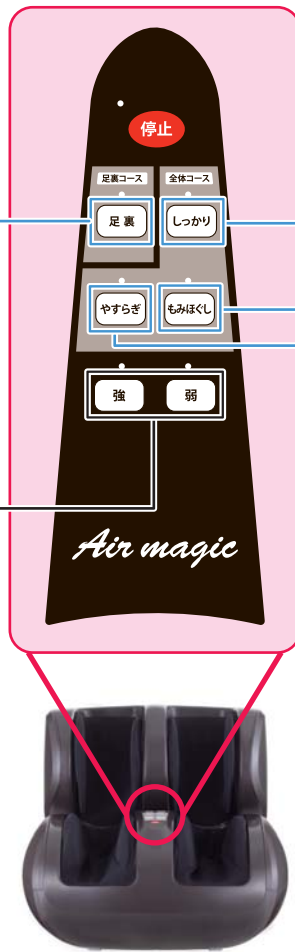

エアーマジック  
フットマッサージャー AM-22

## 【仕様】

メーカー希望小売価格：55,371円（税抜き）  
医療機器認証番号：219AGBZX00023A03  
本体寸法（約）：幅550×奥行530×高さ460mm  
本体質量（約）：12.5kg  
定格時間：15分  
電源：AC100V（50/60Hz）  
消費電力：50W



\*デザイン、仕様は改善のため予告なく改良することがありますのでご了承ください。\*印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

効能・効果 **あんま・マッサージの代用** 疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓[そく]栓]症、重度の動脈リゅう[溜]、急性静脈リゅう[溜]、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など）
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう[腫瘍]のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状[けん]（瘧）怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期、衰弱しているとき。
- 骨粗しょう[鬆]症の人、せきつい[脊椎]の骨折、急性[とう]（疼）痛性疾患の人
- 背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- 温度感覚喪失が認められる人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

## ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

0120-027-612

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分  
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、  
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、  
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品の  
お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール  
<http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる!  
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

ご応募は、フジ医療器HPから!  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード  
ケータイから  
カンタンアクセス



●お求めは…



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記の販売店にご相談ください。  
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。