



ゆらりフットマッサージャー

FUJIRYOKI

# AM-60

## 足首周辺を 伸ばしてほぐす ストレッチ マッサージ\*

詳しくは製品サイトへ



### 足首周辺をしっかりと伸ばして、足裏をくまなくほぐす。


#### 足首周辺をストレッチマッサージ\* 「足首ゆらりストレッチ機能」

足先が上下方向に自動で傾くことで足首周辺をストレッチマッサージをしてほぐします。また、お好みの角度で止めてご使用いただけます。



#### 足全体を心地よくほぐす 「足裏2連ローラー+エアーマッサージ」

足裏を広範囲にほぐすため足先とかかどに指圧突起を配置した「足裏2連ローラー」を搭載しました。足全体を包み込む「エアーマッサージ」を行いながら、心地よくほぐします。

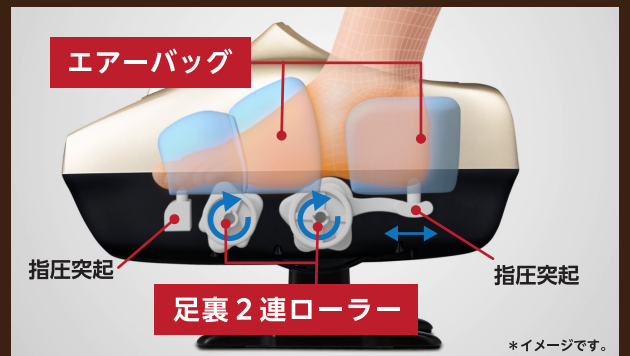

\*「ストレッチマッサージ」とは、ストレッチ(伸ばす)動きを取り入れたマッサージ動作です。

# 足首周辺の筋肉を伸ばしてほぐす ストレッチマッサージ※

## 足首ゆらりストレッチ機能



\*イメージです。  
足先が上下方向に自動で傾くことで足首周辺をストレッチマッサージをしてほぐします。  
※「ストレッチマッサージ」とは、ストレッチ(伸ばす)動きを取り入れたマッサージ動作です。

## 足裏2連ローラー×エアーマッサージ



\*イメージです。  
足の甲・足首・かかとを包み込む計6枚のエアバッグで圧迫と解放を繰り返すかむようにほぐします。2つの足裏ローラーと、足先とかかとの指圧突起が心地よくほぐします。

## エアの強さ 強弱調節3段階

## 足裏ローラー 速さ調節2段階

## 操作



### ①「コース選択」

3種類のコースからお好みのコースを選択できます。

### バランスコース

足裏マッサージとストレッチマッサージをバランスよく組み合わせたコース

### 足裏爽快コース

足裏のマッサージを重視したコース

### ストレッチコース

ストレッチマッサージを重点的に行うコース

### ②「ストレッチ/ヒーター」

ストレッチ動作の「入/切」を行います。長押しでヒーターの「入/切」を行います。

### ヒーター機能 (足の甲とかかと)

設定温度約40℃

\*設定温度と体感温度は異なります。



\*イメージです。

### ③「足裏」

足裏ローラーの「入/切」と2種類の速さ「遅/速」を選択できます。

### ④「エア」

エアマッサージの「入/切」と3段階の強さを選択できます。

### ⑤「急停止」

すぐにすべての動作を停止します。

## 仕様

### フットマッサージャー T23 ゆらりフットマッサージャー AM-60

メーカー希望小売価格: 52,800円(税込)

- 本体寸法: 幅 約38×奥行 約40×高さ 約28.5cm (ストレッチ動作時: 幅 約38×奥行 約39.5~40.5×高さ 約26.5~29.5cm)
- 質量: 約6.5kg
- 対応サイズ(めやす): 足のサイズ約30cm以下
- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 30W(ヒーターのみ11W)
- 定格時間: 15分(オートタイマー: 約15分)
- 医療機器認証番号: 305AHBZX00025000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- 付属品: ACアダプター(型番: XH2400-2000WJ)



JANコード: 4951704134866



洗える  
布カバー

足部カバーはファスナーで取り外して手洗うことができます。

### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。  
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(疑)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(とう(疼)痛性)疾患の人 ●捻挫、内臓など炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎️ 0120-027-612 受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。  
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ [www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年9月現在のものです。