

シンプルLEDリモコン

カテゴリ別のボタン配置と光るLEDが使いやすい。

コリや疲れに合わせて選べる

マッサージコース

- 全身
- 肩
- 腰
- じっくり
- ストレッチ

各部位のコリを集中的にほぐす

専用技

- 首ほぐし
- 肩ハード
- 肩甲骨
- 腰ハード
- NEW** 坐骨集中
- 尻ほぐし

筋肉を伸ばしてほぐすストレッチ

- 脚ストレッチ
- 骨盤ひねり

じんわり温めるヒーター

- 温浴背ヒーター
- 足裏ヒーター



リラックスマスター AS-R610 マッサージチェア E22

メーカー希望小売価格：オープン価格

詳しい商品情報や
紹介動画を公開中



【商品仕様】

- 本体寸法：
(脚部収納時)
幅 約70×奥行 約107×高さ 約107cm
(肩部を上げ脚部最大使用/リクライニング時)
幅 約70×奥行 約181×高さ 約83cm
- リクライニング角度：約118～約150度
- 質量：約61kg
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：141W (ヒーター：40W)
- 定格時間：20分 (オートタイマー 約15分)
- 医療機器認証番号：
302ABBZX00057A01
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック (BK)

ベージュ×ブラウン (CB)

JANコード
4951704171427

JANコード
4951704171434

- 電気代の目安：約57円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安：約41円/月 (マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価：27円/kWh (税込) で算出。(2022年1月現在、当社調べ)

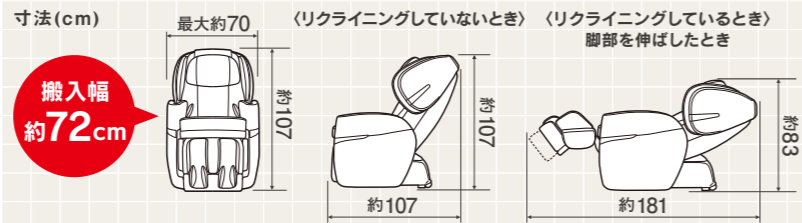

搬入幅：本体幅 約70cm+2cm (養生のため) 以上が必要です。



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈粥状硬化(動脈硬化)、急性静脈血栓(静脈血栓)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症[けん(瘧)熱]、急慢性炎症[けん(瘧)熱]、悪寒、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(骨)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎️ 0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。	Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
FAX番号	06-4793-0818	修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!	ソリエコール ☎️ 0120-113-706 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)	フジ医療器製品の消耗品・別売品は!	フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop
---------------	---	-------------------	---------------------------------------

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。

22.4.5M.BQ.BB.A [注文No.1657]

FUJIIRYŌKI

リラックスマスター
RELAX MASTER
マッサージチェア AS-R610


充実の機能をコンパクトに さらに充実の毎日へ



多機能 & コンパクトな癒しのパートナー。

リラックスしたスタイルで全身をしっかりケアしてよりアクティブに、充実した毎日を楽しむために。多彩な機能をコンパクトに詰め込んだAS-R610でとびきり心地のいい時間をご満喫ください。

スライドクライニング機能

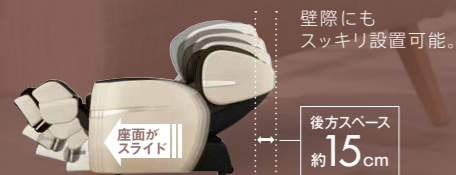

肩部収納機能



反転式フットレスト & 脚部収納機能




ソファスタイル(フットレスト状態)

※実際にご使用の際は、枕を外して体感することにより効果を感じやすくなります。


MECHANICAL MASSAGE 上半身の部位にフィットするマッサージ。

GRIP式メカ4.0 肩をしっかりつかみほぐす事を追求し開発した独自のつかみ機構を採用。6つのもみ玉が部位ごとに適した多彩なもみ心地を実現。

肩のつかみ動作
肩は手でつかむように上下から挟み込む。

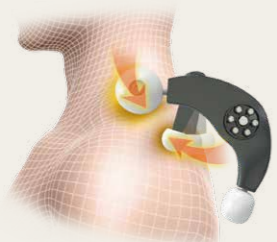

360°回転もみ玉
滑らかなもみ心地を実現。

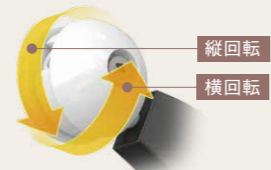

S字フィットフレーム
背すじの曲線に沿ったフレームで身体にフィットしたもみ心地を実現。




多彩なもみ技 基本技 もみ たたき さざなみ 背すじ伸ばし 専用技 首ほぐし 肩ハード 肩甲骨 腰ハード 坐骨集中 尻ほぐし

肩位置自動検出 & プログラムフィードバック
身長や体形に応じて適切なマッサージポイントを予測しマッサージを行います。

肩の位置を自動検出

背・腰部の位置を自動予測

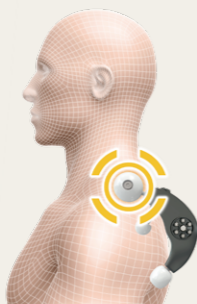

部位別強弱調節機能


部位ごとにお好みの強さに調節できます。



AIR MASSAGE 全身を包み込むエアーマッサージでリフレッシュ。

エア-強弱調節3段階

お好みでエア-の強さを3段階から選べます。

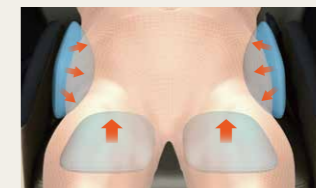

骨盤ひねりモード 座りっぱなし等で固まった骨盤まわりの筋肉を包み込んでひねるようにマッサージ。



※当社製品AS-R600比較

お尻、もも裏、骨盤まわりの筋肉を大型エア-バッグでしっかりマッサージ。

NEW 大型座面エア-バッグ

大型のエア-バッグでお尻からもも裏の筋肉を広範囲にもみほぐしたり、骨盤まわりの筋肉をひねるようにマッサージし、腰周辺の疲れをほぐします。




※当社製品AS-R600比較(大きさは表面積、膨らみは無負荷状態で給気した時の高さで比較)

NEW 坐骨集中(専用技)

腰やお尻の筋肉は座面/腰横のエア-バッグともみ玉でしっかりとほぐし、太もも裏は座面/腰横のエア-バッグでマッサージします。

疲れの溜まりがちなお尻の筋肉をしっかりケア
座り姿勢や寝姿勢など、長時間同じ体勢していると腰やお尻の筋肉に負担がかかります。お尻の「大臀筋」「中臀筋」「小臀筋」は3層構造のようになっており、じっくりと圧をかけながらケアすることが重要です。

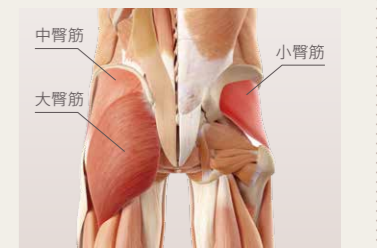

FEATURE

独自機能 温浴背ヒーター/足裏ヒーター



背中を包むように心地よく温めます。



※設定温度:約43度(設定温度と体感温度は異なります。)

全身ストレッチ [ストレッチコース]
エア-バッグで身体を固定し、もみ玉で伸ばしてほぐします。



脚ストレッチ
ふくらはぎを固定し、脚部を下方に伸ばします。

