

# FUJIIRYŌKI

リラクスマスター  
**RELAX MASTER**  
マッサージチェア AS-R620

簡単操作で自分好みのもみ心地に  
コンパクトな多機能マッサージチェア





# 多機能 & 簡単操作で スムーズに全身セルフケア。

ストレスフルな毎日を、ストレスフリーな毎日に。  
使いやすく進化したAS-R620は簡単操作でラクに使えて  
自分にぴったりの心地いいマッサージができる  
コンパクトなマッサージチェアです。

## 簡単ワンタッチで強弱調節



NEW ワンタッチ強弱モード

NEW エアー強さ一括調節

全身のもみの強さ、各部位ごとのエア어의強さをボタン一つで自分好みの強さに簡単に調節できます。




## MECHANICAL MASSAGE 上半身の部位にフィットするマッサージ。

### GRIP式メカ4.0 肩をしっかりつかみほぐすことを追求し開発した独自のつかみ機構を採用。6つのもみ玉が部位ごとに適した多彩なもみ心地を実現。

#### 肩のつかみ動作

肩は手でつかむように上下から挟み込む。

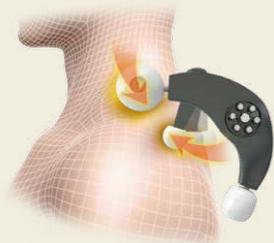

※動作イメージです。

#### 360°回転もみ玉

滑らかなもみ心地を実現。



※左右の上玉のみ

#### S字フィットフレーム

背すじの曲線に沿ったフレームで身体にフィットしたもみ心地を実現。




多彩なもみ技 基本技 もみ たたき さざなみ 背すじ伸ばし 専用技 首ほぐし 肩ハード 肩甲骨 腰ハード 坐骨集中 尻ほぐし

### 肩位置自動検出 & プログラムフィードバック

身長や体形に応じて適切なマッサージポイントを予測しマッサージを行います。

肩の位置を自動検出 → 背・腰部の位置を自動予測 → マッサージプログラムに反映

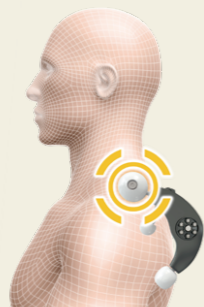

### 部位別強弱調節機能

部位ごとにお好みの強さに調節できます。



## AIR MASSAGE 全身を包み込むエアーマッサージでリフレッシュ。

エアー強さ一括調節 / 部位別強弱調節機能 エアーマッサージの強さをお好みで一括または部位別に3段階から選べます。




肩 両肩4個のエアークッションで肩から腕までをマッサージ。



腕 大型エアークッションが腕全体をしっかりとほぐします。



腰 骨盤まわりを座面/もも横から心地よく締めつけます。

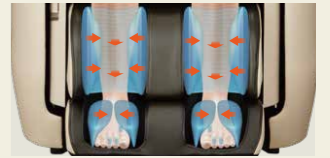


脚 ふくらはぎと足先を圧迫し、足裏は突起で刺激します。

骨盤ひねりモード 座りっぱなし等で固まった骨盤まわりの筋肉を包み込んでひねるようにマッサージ。



### NEW 大型もも横エアークッション

座面の両側には大型もも横エアークッションを新たに搭載し、腰まわりや太ももの大きな筋肉を引き締めるように圧迫し疲れをほぐします。

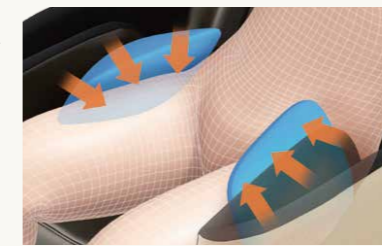

### NEW エアークース

刺激の少ないエアークッションによるゆったりとしたマッサージで疲れをじっくりと癒します。



## FEATURE

### 独自機能 温浴背ヒーター / 足裏ヒーター



背中を包むように心地よく温めます。



足先をじんわり温めます。

※設定温度: 約43度(設定温度と体感温度は異なります。)

### 全身ストレッチ [ストレッチコース]

エアークッションで身体を固定し、もみ玉で伸ばしてほぐします。



### 脚ストレッチ

ふくらはぎを固定し、脚部を下方に伸ばします。



## COMPACT

### スライドリクライニング機能

壁際にもスッキリ設置可能。



後方スペース 約15cm

### 反転式フットレスト & 脚部収納機能

レバーを上げ、脚部を反転させてフットレストに。さらに収納も可能。



ソファスタイル(フットレスト状態)



## LEDダイレクトリモコン

カテゴリー別のボタン配置と光るLEDが使いやすい。

### NEW ワンタッチ強弱モード

全身のマッサージの強弱調節を簡単ワンタッチで操作できます。

ソフト バランス ハード

コリや疲れに合わせて選べる

### 6種類のマッサージコース

全身 じっくり  
肩 ストレッチ  
腰 NEW エアー

各部位のコリを集中的にほぐす

### 6種類の専用技

首ほぐし 腰ハード  
肩ハード 坐骨集中  
肩甲骨 尻ほぐし

### NEW エアー強さ一括調節

肩・腕・座・脚のエアーマッサージの強さをまとめて一つのボタンで3段階に調節できます。

エアー一括(弱・中・強)

肩 腕 座 脚



## リラックスマスター AS-R620 マッサージチェア E23

メーカー希望小売価格：オープン価格

詳しい商品情報や  
紹介動画を公開中



### 【商品仕様】

- 本体寸法：  
リクライニングしていないとき(脚部収納時)  
幅 約70×奥行 約107×高さ 約107cm  
リクライニングしたとき(脚部最大使用時)  
幅 約70×奥行 約181×高さ 約83cm
- リクライニング角度：約118～約150度
- 質量：約61kg
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：141W (ヒーター：40W)
- 定格時間：20分 (オートタイマー 約15分)
- 医療機器認証番号：  
305ABBZX00002000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)

ベージュ×ブラウン(CB)


JANコード  
4951704171816

JANコード  
4951704171823

- 電気代の目安：約66円/月(ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
  - 電気代の目安：約47円/月(マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※電力料金目安単価：31円/kWh(税込)で算出。(当社調べ)

寸法(cm)

〈リクライニングしていないとき〉 〈リクライニングしているとき〉  
脚部を伸ばしたとき

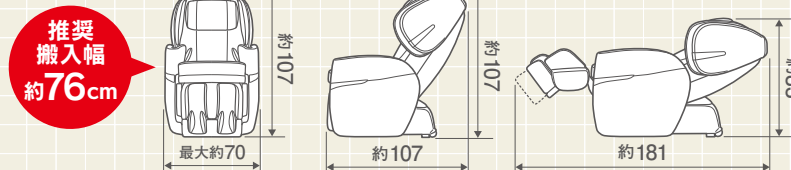

推奨搬入幅：本体幅 約70cm+養生幅 約6cm

筋肉を伸ばしてほぐすストレッチ

骨盤ひねり 脚ストレッチ

じんわり温めるヒーター

背・足裏ヒーター



## ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅ(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(瘧)]怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)]痛性疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール ☎0120-113-706  
受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の  
消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ  
[www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年3月現在のものです。

23.3.5M.BQ.BC.A [注文No.1694]