

簡単操作で自由自在! 使えるリモコン

コース選択や部位動作の選択など、多彩な機能をわかりやすく、使いやすく配置しました。また、薄暗い場所でも操作しやすいように、機能ボタンを右端に配置しました。

コース選択

おやすみ前コース


1日の疲れが溜まった下半身から上半身へ血流を促してリフレッシュ

おめざめ後コース

からだの隅々まで血流を促して、からだを目覚めさせて朝からスッキリ

ゆったりコース

ストレッチとひねりのコンビネーションでゆったりリラックス

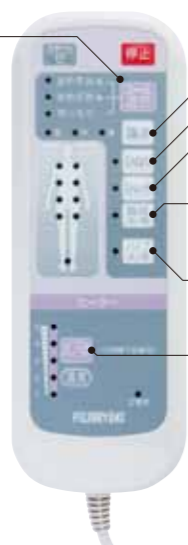

強さ

強・中・弱の3つから、心地よい強さが選べます。

お好みコース

ひねり…ひねりの動きで緊張をほぐします。
ストレッチ…背中から腰の筋肉を伸ばします。

脚枕機能

血行促進に役立つ脚部マッサージ機能が選べます。

パイプ機能

血行促進に効果的な脚部のパイプ動作が選択できます。

ヒーター機能

約25度～50度まで5段階で温度調節ができます。
12時間オフタイマー付き。

最短コード、最適の配置

眠りを妨げず収納しやすいように、リモコンコードをできるだけ短くし、上部横側に配置。コードの絡みつきを防ぎます。



標準価格:270,000円(税抜257,143円)

- 本体寸法(約):幅950×長さ2,000×厚み80(mm)
- 質量(約):14kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:エアーマッサージ器/68W・ヒーター/75W
- コード有効長:電源/2.3m・コントローラー/(約)1.0m
- タイマー時間:[エアーマッサージ器]15分
[ヒーター]12時間
- 素材:[本体カバー生地]ポリエステル100%
[クッション材]ウレタンフォーム
- 付属品:専用シーツ(CF-10PU)
- JANコード:4951704752275
- 医療機器認証番号:221AGBZX00246000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

3つ折収納

ふとん感覚で3つに折りたたむことができ、押し入れにも収納できて場所を取りません。

■付属品

専用シーツ CF-10PU

耐洗濯性・寸法安定性にすぐれているので、シワになりにくく、お手入れが簡単。さらに抗菌加工が施されているので、清潔。取り外しが簡単なフィットシーツタイプです。

- 寸法(約):幅1,050×長さ2,000(mm)
- 素材:ポリエステル100%



安全のために必ずお守りください

- 次の方は、ご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている方[例]血栓症、重度の動脈硬さ、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など
- 次の方は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ●妊娠中の方または出産直後の方 ●悪性腫瘍のある方 ●心臓に障害のある方 ●安静を必要とする方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方 [例]急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ●治療部位に創傷のある方 ●骨粗しょう症の方 ●知覚障害の方 ●背骨に異常のある方や曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●温度感覚喪失が認められる方、または皮膚に異常のある方 ●低温やけどをしやすい方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用機器を使用している方 ●高血圧の方 ●喘息の方 ●睡眠時無呼吸症の方 ●上記以外に特に異常を感じている方
- ヒーターは設定温度「4」以上で長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れさせない。比較的低い温度でも、長時間の使用は低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。
- 次のような方は特に気をつけてください。
- お子様 ●お年寄り ●皮膚や皮膚感覚の弱い方 ●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方 ●深酒・疲労の激しい方
- ご使用中、身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止してください。

■保証期間 本体1年(保証書、取扱説明書に記載内容を十分に確認のうえ、大切に保管してください。)



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口
0120-027-612

受付時間:9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)
URL:<http://www.fujiiryoki.co.jp>

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成22年4月現在のものです。

●お求めは…

FUJIIRYOKI

すこやかに生活はじめます。
ピースリープで、
朝の目覚めが心地よく、
終わりを心地よく。

Peace Sleep

ピースリープ

エアーマッサージ器 DF-313

あなたの睡眠は、「質の良い睡眠」ですか？

健康な生活を維持するためには、「質の良い睡眠」が不可欠です。

睡眠の質を高めるコツは、


「すぐ眠りにつけて」「ぐっすり眠り」「翌朝すっきりと目が覚める」
そんな環境を作ることが大切です。

ピースリープは、お休み前やお好きなときに、

ゆったりと横になりながらマッサージ。

血行を促進させ、筋肉の疲れを癒して

リフレッシュします。

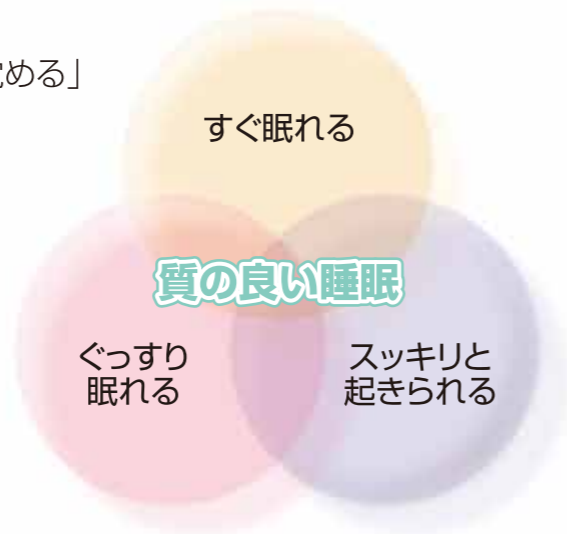


ココがすごい シーンにあわせて選べる充実の自動コース

今日の疲れは今日のうちに。選べる3つの自動コース設定で、いつでもリフレッシュ！




おやすみ前コース

下半身から上半身へのストレッチマッサージ。
下半身にうっ血した血流を戻し、1日の疲れをリフレッシュ。

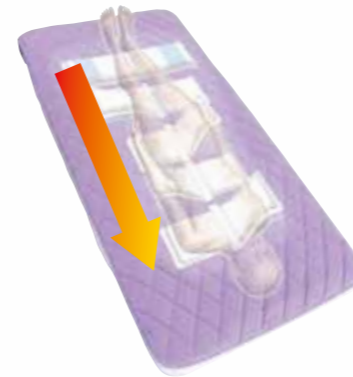


おめざめ後コース

上半身から下半身へのストレッチマッサージ。
体のすみずみまで血行を促進させることで
からだを目覚めさせ、スッキリした目覚めへ。

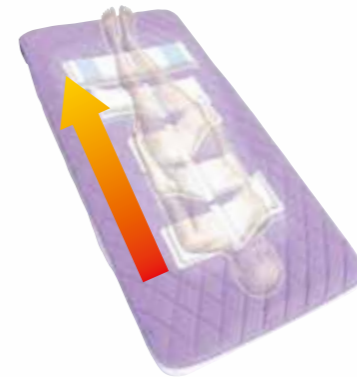



ゆったりコース

筋肉の緊張を解きほぐす「ストレッチ」と、
筋肉のバランスを整える「ひねり」の組み
合わせ。ゆったりとリラックスしたい時に。

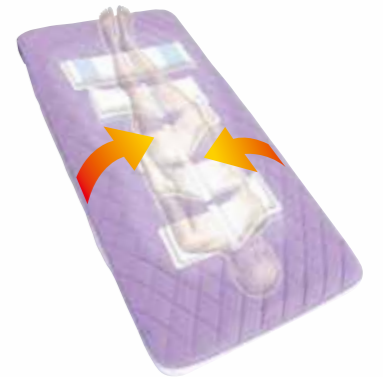

ココがすごい からだにやさしい本格エアーマッサージ


9つのエアータグが、1日の疲れをやさしくマッサージ。
ストレッチ&ひねりの動作で、筋肉の緊張をしっかりとほぐして
リフレッシュ。

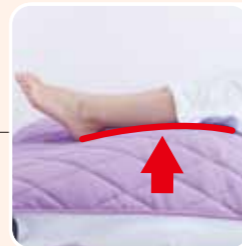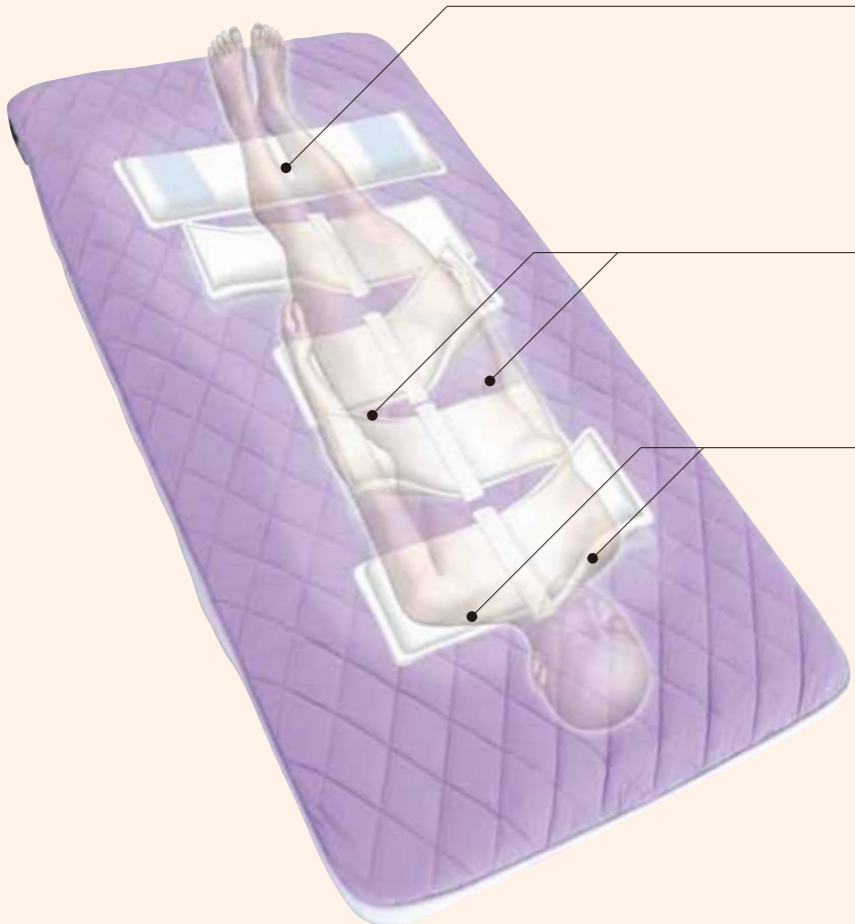

脚枕 (パイプ機能)
疲れがたまりやすい脚に、
脚上げ&微振動で
血行を促進。
足元の冷えが気になる方
にもおすすめです。



腰ストレッチ
腰周りから背中まで
しっかりとストレッチ。
腰の緊張を緩和し、
筋肉の疲れを取ります。

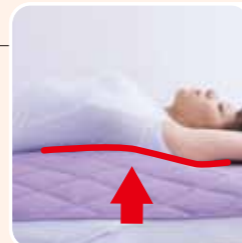

背ストレッチ
エアータグで
肩から背中をストレッチ。
コリを感じやすい部分を
集中的にほぐします。

あんま・マッサージの代用

効能効果

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みを緩和

ココがすごい こだわりの寝具環境

「質の良い睡眠」には、快適な環境が必要です。よりリラックスしていただけるよう、
ピースリープはより快適な寝具環境にもこだわりました。

● 抗菌加工

ピースリープは、繊維上で皮膚常在菌や有害細菌が増えないようにコントロールし、
寝具内を清潔で衛生的な状態に保つことで、いつでも爽やかな朝を迎えられます。

抗菌加工繊維製品の品質と安全性を保証する
信頼のマーク、繊維評価技術協議会の
「S:清潔」「E:衛生」「K:快適」を取得しています。




● フラットエアータグ

ピースリープは、内部の凹凸感も気にならないフラットなエアータグを使用している
ので、ナチュラルな寝心地をお楽しみいただけます。

● ヒーター機能

約25度～約50度までの5段階調節が可能。
12時間タイマー自動
オフ設定も可能です。

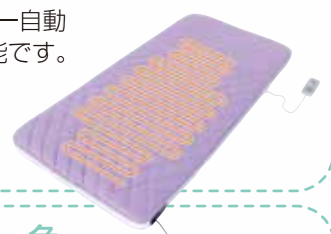

● ラベンダー色

ストレス、不安などを和らげ、気分を穏やかに
してくれるラベンダー色を採用。