


リモコン

片手でも持ちやすく、
薄暗い場所でも
操作しやすい。

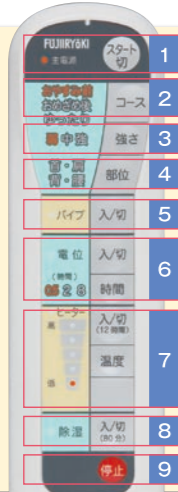

- 1 スタート／切**
エアーマッサージの「入／切」を切り替えます。
- 2 コース選択**
「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」の3コースから選択できます。
- 3 強さ調節**
強・中・弱の3つから、心地よい強さが選択できます。
- 4 部位コース**
「首・肩」「背・腰」の2コースから選択できます。
- 5 バイブ機能**
血行促進に効果的な脚部のバイブ機能を追加できます。
- 6 電位治療**
体調に合わせて、0.5時間・2時間・8時間から選べます。
- 7 ヒーター機能**
約25～50℃の温度調節が可能。12時間オフタイマー付。
- 8 除湿機能**
蓄積した寝具内の湿気を排出します。
- 9 停止ボタン**
全ての動作を停止します。

メーカー希望小売価格：350,000円(税抜333,334円)

- 本体寸法(約):幅950×長さ2,000×厚み80mm
- 質量(約):14kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:最大125W(電気マッサージ器 64W
ヒーター 75W、電位治療器 5W)
- コード有効長(約):[電源]2,300mm
[コントローラー]1,000mm
- タイマー時間:[マッサージ]15分
[電位]0.5・2・8時間
[ヒーター]12時間 [除湿]80分
- 素材:[本体カバー生地]ポリエステル100%
[クッション材]ウレタンフォーム
- 付属品:専用シーツ(CF-12MG)
- JANコード:4951704752282
- 医療機器認証番号:222AGBZX00297A01
(管理医療機器、電位・電気マッサージ組合せ
家庭用医療機器)



PeaceSleepDX

ピースリープデラックス

電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器
エアーマッサージ器 DF-513



【3つ折収納】
ふとん感覚で3つに
折りたたむことができ、
押し入れにも収納できて
場所もとりません。

付属品 爽やかで快適な肌ざわり
専用シーツ (CF-12MG)

- 寸法(約):幅1,050×長さ2,000(mm)
- 素材:ポリエステル100%



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている方
(例) 血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)
- 皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●温度感覚喪失が認められる方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器
フリーダイヤル **0120-027612** 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-6644-9103**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずご購入先にお問い合わせ下さい。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp>
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品
のお取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる! **最大30万円相当!!**
プレゼントキャンペーン 毎月実施中!

フジ医療器 HP からはコチラ!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>
ケータイからはコチラ!
http://www.fujiiryoki.co.jp/_m/

QRコード
ケータイから
カンタンアクセス



●お求めは…

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。



いい眠りは背中から。
～心地よいめざめのために、毎日の背すじリラクゼーション～

PeaceSleepDX

ピースリープデラックス

電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器 エアーマッサージ器 DF-513

横になりながら、
 気軽に健康づくり。
 背すじからはじまる、
 毎日のリラックス習慣。



マッサージ機能

空気チカラで身体を持ち上げ、ひねり・ストレッチなど多彩な動きでマッサージ。
 違和感の少ないエアバッグを使用していますので、寝具としても心地よくご利用いただけます。



背すじのサポートからはじまる、
 体幹リラクゼーション

センターエアバッグシステム

センターエアバッグシステムとは

ふだんの生活を送る上で、身体を支えたり動かしている背すじ周辺の筋肉は、常に緊張しやすい状態にあります。

ピースリープデラックスは、この背すじ周辺の筋肉を重点的にケアするための新方式「センターエアバッグシステム」を採用。

横たわった状態で背すじ周辺の筋肉をじっくりと持ち上げストレッチ。この準備の後、肩から腰までの背中全体をマッサージすることで、身体の中央からコリや疲れを癒していきます。



センターエアバッグからはじまる多彩なマッサージ

【脚部】

足元の冷えが
 気になる方に


疲れが溜まりやすい脚部を、
 脚上げ動作&パイプで血行を促進。



【背・腰】

エアバッグの
 多彩な動き

“ひねり”や“ストレッチ”動作で
 筋肉のコリをほぐします。

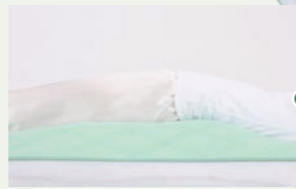

【首・肩】

立体的な動きで
 首肩を挟み込む

首から肩にかけて、
 じっくりと挟み込んでマッサージ。



【電気マッサージ器の効能・効果】◎あんま・マッサージの代用

疲労回復、血行促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

寝心地の良い寝具環境

マットレスとして毎日使うことを考えた「より快適な寝具内環境」*を実現。
 あなたを心地よい睡眠へと導きます。*当社比


新機能

ご使用後の簡単メンテナンスで
 いつでも快適

除湿機能

寝具内に蓄積した湿気を
 寝具外へ排出。
 毎日の心地よい睡眠をお届けします。

※人や物を乗せていない状態でご使用下さい。

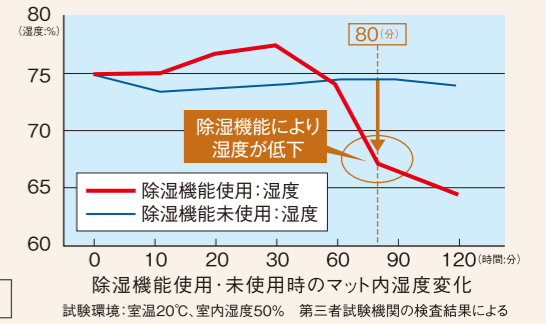


新機能

沈み込みを和らげた、
 より快適な寝心地

縦横3層クッション構造


硬さの異なるウレタンを
 縦横3層に配置することで、圧力を分散。
 肩や腰の沈み込みを和らげた、
 心地よい寝心地です。

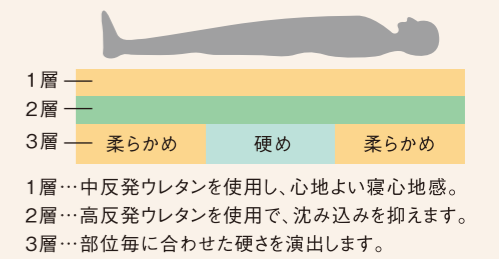

寒い季節でもポカポカ

ヒーター機能

約25～50℃までの5段階調節が可能。
 12時間のタイマー自動オフ機能付。

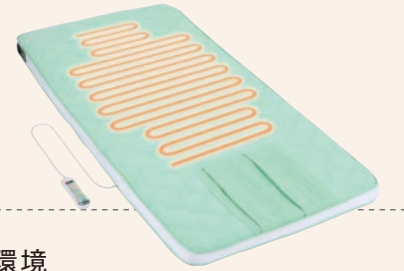

毎日使うことを考えた、快適な生地環境

抗菌加工 表生地 Wラッセル生地 裏生地

表生地には抗菌加工を施し、繊維上で常在細菌が増えないようコントロール。
 裏生地はクッション性と通気性の高いWラッセル生地を採用しました。



抗菌加工繊維製品の品質と安全性を保証する信頼のマーク、
 繊維評価技術評議会の「S:信頼」「E:衛生」「K:快適」を取得しています。

爽やかで快適な肌ざわり 付属品

専用シーツ(CF-12MG)

吸汗速乾素材「クール・コンフォート」を採用。快適な寝心地をご提供します。
 また、フィットシーツタイプなので取り外しも簡単です。

電位治療機能

電位治療とは、身体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

【電界】



電位治療イメージ図

【電位治療の効能・効果】◎頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩解

※電位治療機能とマッサージ機能は、同時使用できません。