


FUJIROYOKI

マッスルショットプレミアム

FG3800P



新感覚の
Wパワフル振動が
全身に高速アプローチ

MUSCLE SHOT PREMIUM

マッスルショットプレミアム FG3800P



独自のツインアタッチメントによる Wパワフル振動が広範囲の筋肉を徹底ケア

心地よい振動でリフレッシュから、運動前後のコンディショニング ケアまで幅広いボディケアに。




FG3800P 商品情報



最大3800回/分*の高速 振動で新感覚ボディケア

独自開発のツインアタッチメントで心地よい高速振動が気になる筋肉を広範囲にケア、さらに5種類のアタッチメントを付け替えることで全身の様々な部位の筋肉にアプローチができます。

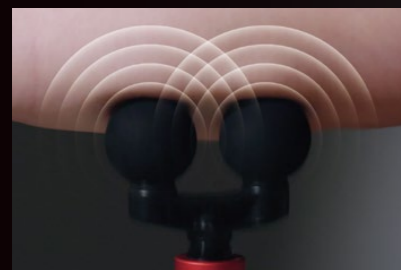

最大振動数
3800
回/分*

※実際の振動回数は、使用環境や使用状況により異なります。



ブラシレスモーター搭載で安定した振動速度を実現

高精度のブラシレスモーターを搭載し、振幅ストローク6mmの心地よい振動が1分間最大3800回の安定した高速振動を実現しました。振動速度はレベル1(1600回/分)の弱い刺激からレベル5(3800回/分)の強い刺激までの5段階で調節することが可能です。



※実際の振動回数は、使用環境や使用状況により異なります。

心地よく広範囲を刺激する「ツインアタッチメント」

ピンポイントで刺激したい部位には1個のアタッチメントでケアします。広範囲に刺激したい場合はツインアタッチメントを使って2個のアタッチメントでケアします。



安心の自動オフ機能

電源がオンになってから約10分経過すると自動的に振動が停止し電源がオフになります。

※写真・イラストはイメージです。

多彩なアタッチメントで全身を徹底ケア

5種類の形状、9パターンの組み合わせができるアタッチメント



首・肩など

ソフト [シングル/ツイン]

弾力性が高く、振動が優しく伝わるため様々な部位に使用できます。



太もも・ふくらはぎなど

ドーム形 [シングル/ツイン]

太もも、ふくらはぎなどを面で刺激したいときに使用します。



腕など

U字形 [シングル]

上腕、前腕などの筋肉のケアに使用します。



足裏・手のひらなど

凸形 [シングル/ツイン]

足裏や手のひらなど、ピンポイントに刺激したいときに使用します。



肩・背中


腰・お尻など

球形 [シングル/ツイン]

肩、背中、お尻など全身の大きい筋肉のケアに使用します。



アタッチメントの取り付けと取りはずし方

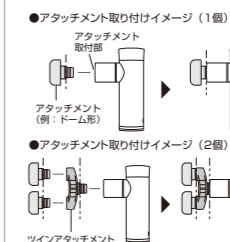

【アタッチメントの取り付け方】
・図のように点線(―)の位置までアタッチメントをしっかり差し込んでください。
・ツインアタッチメントを使用する場合は、必ず同じ形状のアタッチメントを2個差し込んでご使用ください。

【アタッチメントの取りはずし方】
・アタッチメントを取りはずす際は、付け根部分を持ち、まっすぐ引き抜いてください。

優しくケアするソフトアタッチメント

柔らかく弾力性のある「ソフト」アタッチメントは、身体への振動を和らげ、優しい刺激でアプローチできます。



高級感のある質感と持ちやすい安定感

アルミ合金の本体はさらりとした触り心地と、程よい重みが部位にしっかりとフィットし安定したケアができます。



充電式でどこでもボディケア

電池持続時間は最大約5時間の2200mAhリチウムイオン電池を搭載。使う場所を選ばず持ち運びにも便利です。

電池持続時間: 最大約5時間
(充電所要時間: 約3.5時間)

※実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。
※充電時はLED点灯色が「ピンク」、充電完了すると「緑」になります。



専用巾着ポーチ

本体とアタッチメントが入る専用巾着ポーチ付きで、旅行や出張先、移動の際の持ち運びにも便利です。

旅行や外出先に
ジムやゴルフに
職場や出張先に



マッスルショットプレミアム FG3800P

- メーカー希望小売価格:オープン価格
- 本体寸法:幅 約9×奥行 約4.6×高さ 約15.1cm
- 質量:約500g(本体のみ)
- 電源:充電式(リチウムイオン電池 DC11.1V 2200mAh)
- タイマー:約10分
- 電池持続時間*:約1.5~5時間
- 充電時間*:約3.5時間
(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
- 充電電池:リチウムイオン DC11.1V 2200mAh
- 充電可能回数*:約300回
- 付属品:アタッチメント×9個、ツインアタッチメント×1個、USBコード(Type-C)、専用巾着ポーチ

*実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。



メタリックレッド(MR)
JANコード:4951704134859

ACアダプターは付属しておりません。ACアダプターで充電する際は下記の仕様をご確認のうえ、市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。

【対応可能なACアダプター仕様:定格出力DC5V 2A 推奨】

※2Aを超えるものは使用しないでください。また、2A未満のものをご使用の場合、充電時間が長くなります。

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。●視覚障害のある人は1人で使用しない。けがや体調不良の原因になります。●医師からマッサージを禁じられている人は使用しない。身体に異常が起こる場合があります。例:血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)●腹部、胸部、頭部、顔、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には使用しない。体調不良やけがの原因になります。●首周辺に使用するときには特に注意し、首の前方には使用しない。事故やけがの原因になります。●他の器具、機器などと同時に使用しない。けが、体調不良の原因になります。●高温になる場所(火のそば、こたつ、ホットカーベット、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。発火や発熱、やけど、故障の原因になります。●アクセサリなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しない。事故やけがの原因になります。●乳幼児や子供、自分で意思表示できない人には使用させたり、遊ばせたりしない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。事故やけが、体調不良の原因になります。●付属のアタッチメント以外は使用しない。事故やけがの原因になります。●他人にしてみもらったり、他人にしてみせたりすることをしない。●ペースメーカーなどの電子障害の受けやすい体内挿込み型医用電子機器をご使用の人や、医師の治療を受けていたり、手術をされた人、気になる症状や部位がある人は、必ず医師にご相談のうえご使用ください。その他の禁止事項や注意すべき点は、製品同梱の取扱説明書に記載しております。製品をご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp FAX番号 **06-4793-0818**

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。
Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・別売品はコチラ! フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011
大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年4月現在のものです。

23.04.5M.JP.BC.A [注文No.1695](#)