

FUJIIRYŌKI

マッスルショットウェイブ
FGW3200

もつと深く、もつと広く。



MUSCLE SHOT WAVE

全身にしっかり届く、パワフル振動ケア。

ハンディタイプで深層筋まで
ベルトを付け替えることで、手が届きにくい肩甲骨

ピンポイントに深く刺激。
や背中などの表層筋を広範囲にケアします。



ピンポイント

PINPOINT

「縦」振動で深層筋に深くアプローチ

肩

腕

ふくらはぎ

足裏

広範囲

WIDE RANGE

「横」振動で表層筋を広くケア

肩甲骨

背中

腰

お尻

気になる部位を ピンポイントで刺激。

最大約3,200回/分の
パワフル振動と専用アタッチメントで
気になる筋肉へピンポイントに
アプローチします。



最大振動数
3200
回/分*

11mmのストロークで深層筋にアプローチ

振幅11mmの大きなストローク
とブラシレスモーターのパワフル
振動が気になる筋肉をしっかりと
深くケアします。



*実際の振動回数は、使用環境や使用状況により異なります。

ハンディタイプ HANDY TYPE

部位毎の筋肉をしっかりとメンテナンス。アタッチメントを
付け替えることで、より効果的にケアできます。



4種類のアタッチメント



球形 大きな筋肉を
バランスよく
刺激

U字形 筋肉をはさむ
ようにケア

円形 あらゆる箇所を
面で刺激

円錐形 ピンポイントに
刺激

届きにくい背中も 広範囲にアプローチ。

パワフルな振動を広範囲に伝える
ベルトが表層筋を刺激。
「面」で筋肉をとらえてケアします。




マッスルベルトはお好みの長さに調節できます。



マッスルベルト MUSCLE BELT

ベルトアタッチメントに付け替えると、背中や腰、お尻など
の広い面積の筋肉を「面」で振動させ一度に広範囲をケア
することができます。

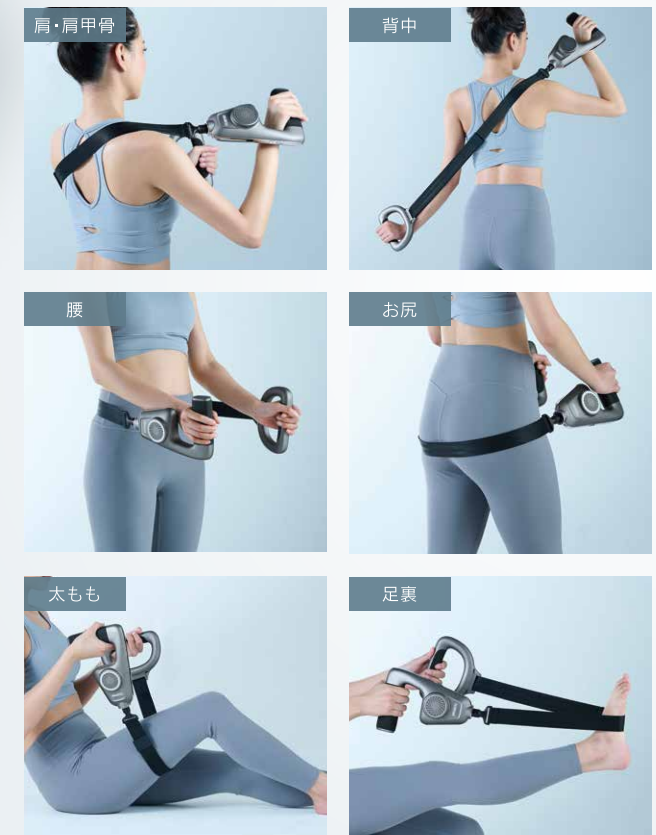

選べる6段階の速度調節

振動速度は弱い刺激から強い刺
激までの6段階で調節すること
が可能です。またLEDランプで振
動レベルを確認することができ
ます。



充電式で場所やシーンを選ばずにボディケア

電池持続時間は最大約2.9時間
です。また約10分の使用で自動
で振動が停止します。

*実際の時間および回数は、
使用環境や使用状況により異なります。
*充電中は本体を使用できません。



自動オフ
機能付き

MUSCLE BELT HOW TO 1

肩甲骨集中ケア

肩甲骨をベルトでホールドしなが
らしっかりケアします。



MUSCLE BELT HOW TO 2

脚部集中ケア

太ももにベルトを巻き付けるこ
とで大きな筋肉を広範囲にケア
します。



マッスルショットウェイブ FGW3200

- メーカー希望小売価格：オープン価格
 - 本体サイズ：幅 約25.6×奥行 約15.6×高さ 約6.7cm
 - 本体質量：約690g
 - 電源：充電式 ●タイマー：約10分
 - 電池持続時間※：約2.4～2.9時間
 - 充電所要時間※：約4時間
(満充電まで、DC5V 2A出力アダプター使用時)
 - 充電電池：リチウムイオン電池 DC11.1V 2000mAh
 - 充電可能回数※：約500回
 - 付属品：アタッチメント4種類＋ベルトアタッチメント、
充電用USBケーブル×1個 (Type-C to Type-A)
- ※実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。



グレー
JANコード：4951704134897

ACアダプターは付属していません。ACアダプターで充電する際は下記の仕様をご確認のうえ、市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。

【対応可能なACアダプター仕様：定格出力 DC5V 2.0～2.5A以下】

※2.5Aを超えるものは使用しないでください。異常な発熱の原因となります。また、2.0A未満のアダプターを使用すると、充電できないおそれがあります。

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。●視覚障害のある人は1人で使用しない。けがや体調不良の原因になります。●医師からマッサージを禁じられている人は使用しない。身体に異常が起こる場合があります。例：血栓（塞栓）症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）●腹部、胸部、頭部、顔、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には使用しない。体調不良やけがの原因になります。●首周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しない。事故やけがの原因になります。●ベルトは首周辺には使用しない。また、首や頭に巻き付けない。事故やけがの原因になります。●他の器具、機器などと同時に使用しない。けが、体調不良の原因になります。●高温になる場所（火のそば、こたつ、ホットカーペット、布団、炎天下の車内など）で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。発火や発熱、やけど、故障の原因になります。●アクセサリなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しない。事故やけがの原因になります。●乳幼児や子供、自分で意思表示できない人には使用させたり、遊ばせたりしない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。事故やけが、体調不良の原因になります。●付属のアタッチメント以外は使用しない。事故やけがの原因になります。●他人にしてみもらったり、他人にしてあげたりすることをしない。●ペースメーカーなどの電子障害の受けやすい体内植込み型医用電気機器をご使用の人や、医師の治療を受けていたり、手術をされた人、気になる症状や部位がある人は、必ず医師にご相談のうえご使用ください。その他の禁止事項や注意すべき点は、製品同梱の取扱説明書に記載しております。製品をご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付：平日9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp FAX番号 **06-4793-0818**

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・別売品はコチラ！ [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー

〒540-0011

株式会社 **フジ医療器**

大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年3月現在のものです。

24.3.5M.BQ.BD.A 注文No.1721