


キッチン環境に
合わせて
取り付けできます


付属の分岐栓を
取り付けした場合▶

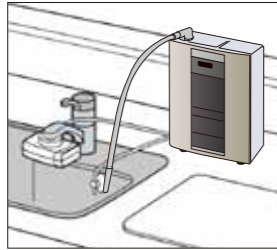

別売品


シングル
分岐栓

シャワー式などで
付属の分岐栓が
取り付け
できない場合

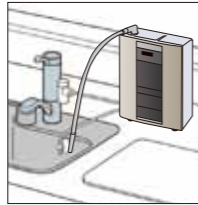

2way
(リターン)
分岐栓

・分岐栓から
アルカリイオン水
を出したい場合
・少し離れた場所に
設置したい場合

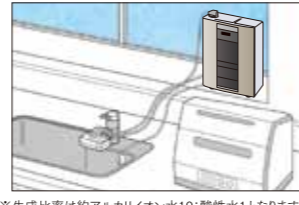

※生成比率は約アルカリイオン水10:酸性水1となります。

トレビ FW-5050 アルカリイオン整水器F8 [管理医療機器]
医療機器認証番号 221AKBZX00045000

仕様

- 本体寸法(約)/幅255×奥行120×高さ347mm
- 質量(約)/5.7kg(満水時6.6kg)
- 定格/AC100V(50-60Hz)
- 消費電力/250W(待機時:約0.4W)
- 電源コード(約)/2.5m
- 給水接続/レバー切替
- 給水方式/吐水蛇口分岐栓
- 使用可能水道圧/約70~750kPa[約0.7~7.5kgf/cm²]
- 電解

●浄水カートリッジ(FW-13CM)

- ＜ろ過材料＞中空糸膜・銀添粒状活性炭、繊維状活性炭等
- ＜ろ過能力＞遊離残留塩素約16,000L^{※1} 濁り 約16,000L^{※2} 総トリハロメタン約6,500L^{※1} など、JIS規格指定13物質を除去
- ※1: 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)による除去率90%の値
- ※2: 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)によるろ過流量の50%の値



- [同梱付属品]
- ・分岐栓
 - ・分岐栓取付用付属品
 - ・衛生水生成用食塩
 - ・pH測定液セット 他

＜寿命＞遊離残留塩素・濁りを対象とした場合:約2年間^{※3} 総トリハロメタンを対象とした場合:約10ヶ月^{※3} など ※3:1日の使用水量約20Lとして

メーカー希望小売価格:**260,400円**(税抜:248,000円)
標準工事費:**15,000円**(税込)

【追加部品が必要な場合は別途費用がかかります。】

【専用カートリッジ】FW-13CM(上下セット):14,700円(税込)

【別売品(税込)】クリセロリン微カクシウム 1,155円

カルシウムケース 720円 2WAY(リターン分岐栓) 15,750円



シャンパンゴールド

JAN:4951704417259



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■アルカリイオン整水器のご注意 ●腎疾患(腎不全、カリウム排せつ障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体の弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1~2杯)、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。



使用上のご注意

- 水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によってカートリッジ寿命に差があります。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

アルカリイオン水の
最新情報が
ご覧いただけます。



AAIWA アルカリイオン整水器
協議会ホームページ

<http://www.3aaa.gr.jp/>

- アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
- アルカリイオン水の効能・効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行なっています。

株式会社フジ医療器は、アルカリイオン整水器協議会へ加盟しています。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612 受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-6644-9103**

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お求めは…

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

FUJIRYOKI

アルカリイオン整水器F8

トレビ

FW-5050

ALKALINE IONIZED WATER APPARATUS

きれいな”水”で
暮らしに潤いを。



家族の健康のために 毎日の暮らしに欠かせない水を見直すことから始めませんか？



アルカリイオン水は胃腸の症状を改善へと導きます

アルカリイオン水の大きな特長は胃腸症状の改善に働きかけることです。

アルカリイオン水の効能・効果 胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます

胃腸の働きを助け、お通じを良好にします

目的に合った「7つの水」が お手軽に選べます



ボタンひとつで用途に合った水が選べます。

● **強アルカリ pH10.5**
野菜のアク抜きなど、料理の下ごしらえに。

● **アルカリ3 pH9.5**
料理やお茶など、ひと味違うおいしさに。

● **アルカリ2 pH9.0**
米とぎ、炊飯に。ご飯をふっくら炊きあげます。

● **アルカリ1 pH8.5**
アルカリイオン水の飲みはじめはここから。


● **浄水**
薬を飲むときや赤ちゃんのミルクにオススメです。

● **酸性水 pH5.5**
お肌を引き締める洗顔水としても利用できます。

● **衛生水 pH2.5**
食器の洗浄除菌、キッチンや浴室の洗浄に使えます。
※食塩の添加が必要です

水道水を電気分解し、 アルカリイオン水を作り出します

アルカリイオン水とは「水素」を含んだ「電解還元水」です。

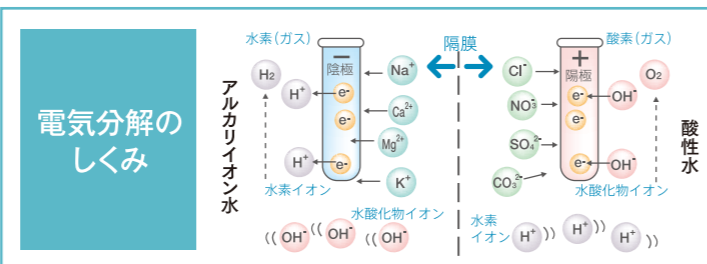

家族みんなが使いやすい親切設計

切替レバーで水道水と「トレビ」をカンタン切り替え



たっぷり水量

5.5L(最大吐水量)
電気分解のできるアルカリイオン水の量は、毎分約5.5L。水量を気にすることなくご使用できます。

2つの自動クリーニング機能で手間いらず

● **リアルタイムリフレッシュ機能**
電極の極性を瞬時に入れ替えることで、電極板へのカルシウムの付着を減らし、電解能力をバックアップします。

● **オートリフレッシュ機能**
アルカリイオン水を10L使うと毎回、水を止めてから30分後、自動的に10秒間の電極板のクリーニングを行います。


衛生水ミニ情報
衛生水とは、「強酸性水」ともい、洗浄除菌作用のある水です。
● 洗浄除菌に ● カビ対策に
● 消臭に ● 掃除に

環境に配慮しながらこんなにオトク

もったいない排水(酸性水)は、ほんの少し

アルカリイオン水を生成する時に必ず発生する排水(酸性水)。トレビは業界トップクラス※のわずかな排水でアルカリイオン水をたっぷり作ります。(アルカリ1、2、3を選択した場合の流量比率、約 アルカリイオン水19:酸性水1)

※2012年2月現在(当社調べ)

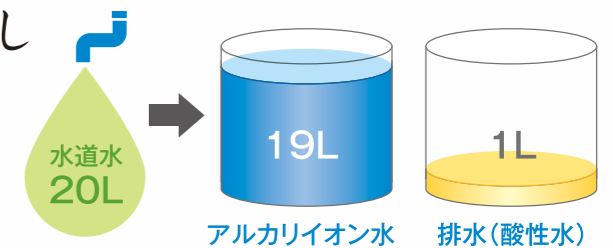

電気代もエコ!

- 待機電力はわずか約0.4W
- 使用後30分で自動電源オフ



1ヶ月の電気代はわずか約**18円**※

※1日20Lのアルカリイオン水を1ヶ月生成した場合
[東京電力(従量電灯B 第二段階料金)]


NEW

30分以内なら捨て水なし!

浄水、アルカリ1、2、3で30分以内に再度同じ水質の水を使用する場合、整水器内に残っていた通水始めの捨て水が出ることなく、すぐに使えます。


年間約**3.4t**の節水※(FW-205比較)

※1日3回の食事と、毎食後30分以内のお茶にアルカリイオン水を使用した場合

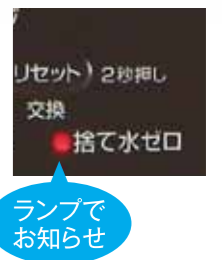

優れた浄水機能でさらにきれいな水を作り出します


JIS規格指定13物質を除去

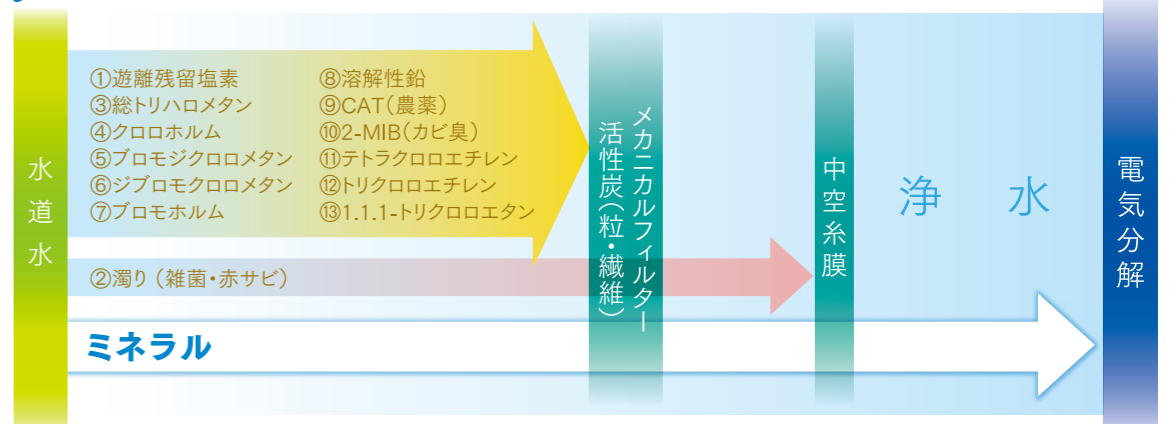

お定期的な交換を お知らせします

《通常時》

1 止水時にカートリッジ使用可能通水量を表示します。

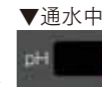

▼通水中




▼水を止めると



《交換時期がきたら》

2 止水時にアラーム音と交換ランプでお知らせします。

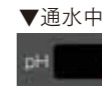

▼通水中



▼使用可能通水量



- 使用可能通水量0リットル到達時
- 使用開始から2年経過時



▼通水中



▼使用可能日数(15日前から表示されます)



ろ過能力は
16,000L
(遊離残留塩素・濁りを対象とした場合)

交換目安は
約2年に1回
(1日20L使用の場合)