

低周波・電位組合せ家庭用医療機器


FX-14000

エレドック 14000

メーカー希望小売価格 **602,800円(税込)**


- 寸法(約) / ■ 本体:幅39×奥行34×高さ14.5cm
■ 絶縁マット:幅120×長さ200cm ■ 通電シート:縦28×横59.5cm
- 本体質量(約):7.8kg ● 電源電圧:AC100V(50/60Hz)
- 電源コードの長さ(約):3m ● 通電シートのコードの長さ(約):1.5m
- 医療機器認証番号:227AKBZX00119000(管理医療機器)
- JANコード:4951704432122

- **電位治療器**
 - 消費電力(約):最大20W(14000Vp時)
 - 出力電圧:1000Vp, 4500Vp, 9000Vp, 14000Vp
 - タイマー時間:20分、40分、60分、8時間
- **低周波治療器**
 - 消費電力(約):最大10W
 - 発振周波数(約):1.2KHz以下
 - タイマー時間:15分

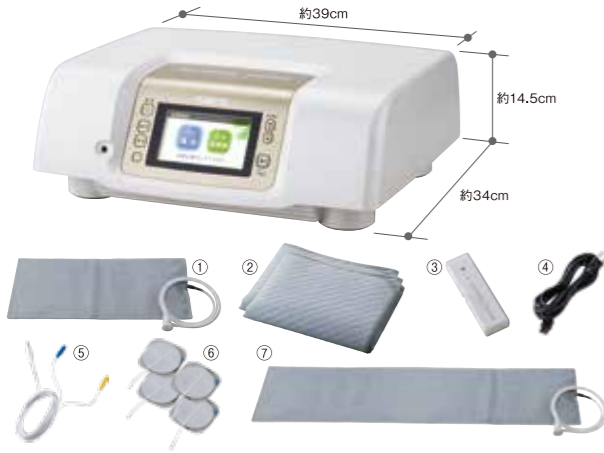

同梱付属品	① 通電シート1枚 ② 絶縁マット1枚 ③ 検電器1個 ● 単3形マンガン乾電池1個 ④ 電源コード1本 ⑤ 低周波コード1本 ⑥ 低周波パッド(4枚入)1個
消耗品	① 通電シート1枚/20,130円(税込) ⑥ 低周波パッド(4枚入)1個/2,200円(税込)
別売品	⑦ 通電シート(ロング:縦28×横100cm)/26,400円(税込)

画面を見ながらのボタン選択で、操作も簡単！

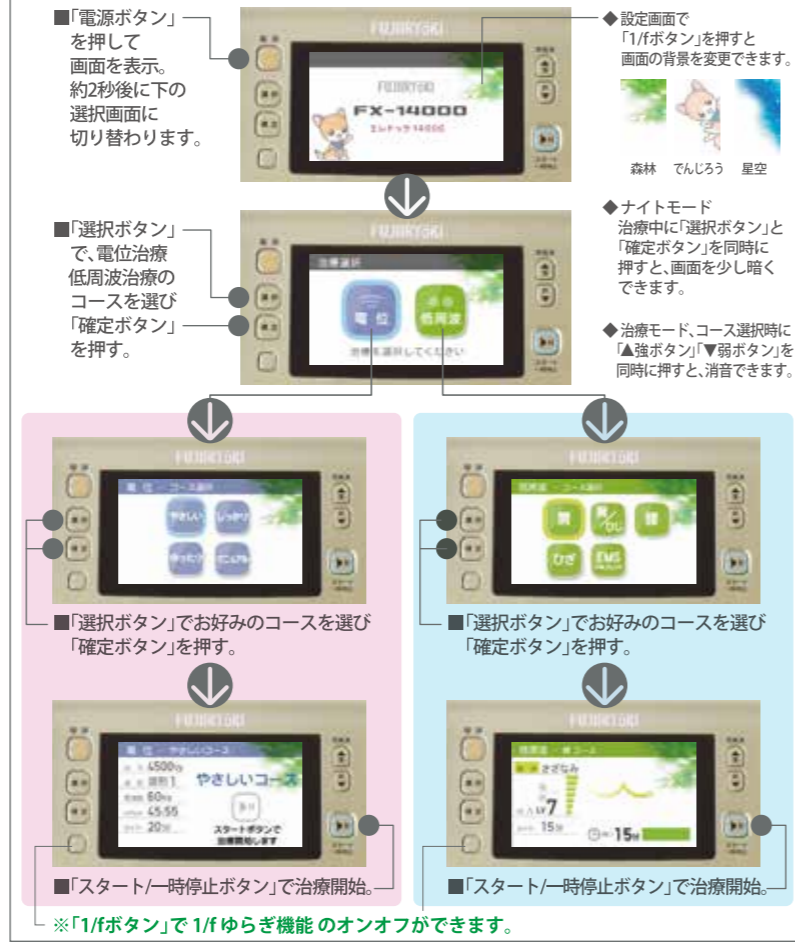

安全のために必ずお守りください

- 危険**
- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、ご使用にならないでください。
 - ペースメーカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器 ● 心電計等の装着形医用電気機器
 - 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、ご使用にならないでください。
- 警告**
- 次の方はご使用をさけるか、必ず医師にご相談のうえご使用ください。● 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ● 妊娠初期の不安定期、または出産直後の方 ● 悪性腫瘍のある方 ● 心臓に障害のある方 ● 安静を必要とする方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方 ● 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ● 感染症疾患のある方 ● 自分で意思表示できない方 ● 酒気帯びしている方 ● 医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じているとき
 - 次の方は、取り扱える人が必ず付き添ってご使用ください。● 介護が必要な方、子供 ● 取扱説明書の内容を理解できない方 ● 自身以外(友人など)の方がご使用されるときは、付き添うか、よく説明してご使用させてください。お使いになる方に、取扱説明書を読んでもらうようにご説明ください。 ■ 乳幼児および身体に障害のある方にはご使用にならないでください。 ■ 飲酒時や、睡眠薬を飲んだときはご使用にならないでください。 ■ 褥子(おしり)が濡れている時は、ご使用にならないでください。 ■ ご使用中の人には触れないようにしてください。 ■ ご使用中、身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。

- !**
- 保証期間 本体1年(保証書、取扱説明書に記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。付属品、消耗品は保証対象外です。)
 - 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 - 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。	Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。
FAX番号	06-4793-0818	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！ **フジ医療器オンラインショップ** www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目21-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

FUJIIRYŌKI

低周波・電位組合せ家庭用医療機器

FX-14000

エレドック 14000

くつろぐ治療
という贅沢な時間



「1/f ゆらぎ波形」と高性能な「慣れ防止」を搭載。
ご家庭でできる、電位治療・低周波治療。

ゆらぎ機能

搭載



NEW

「1/f ゆらぎ」は、心身にリラックス状態を生み出すリズムと言われています。

1台で2つの治療機能。切り替えて使用できます

スタイリッシュなボディに
電位治療機能と
低周波治療機能を搭載

電位治療機能

人体を絶縁状態に置き電位(電界)を与えて治療する治療法です。


低周波治療機能

皮膚表面より微弱な低周波電流を流して患部を治療する治療法です。

多彩な機能、シンプルな操作性

○ 変化のある通電治療を実現する 3つの波形

常に効果的な治療を続けていただくために、3つの波形を採用しています。変化のある通電治療で身体の慣れを低減します。

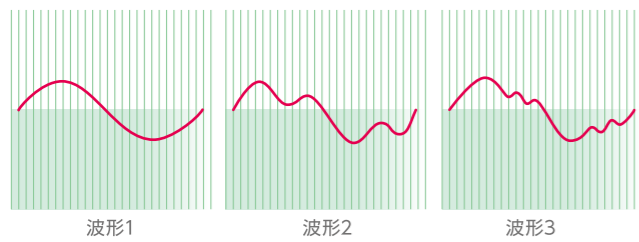

○ 自動的に電圧を変化させる 1/f ゆらぎ波形を採用 NEW

波の音や小川のせせらぎ音等に代表されるような、心身にリラックス状態を生み出すリズムです。「1/fボタン」で、治療のリズムを変化させます。1/f ゆらぎは、「1/fボタン」でオン・オフが可能です。

○ 体調やお好みに合わせた、治療コース

電圧の強さは1000Vp、4500Vp、9000Vp、14000Vpの4段階、波形は3つ、通電時間は20分、40分、60分、8時間の4種類から選べます。初めての方は短時間、低電圧から始めてください。

○ 検電器

電位治療は、体感の少ない治療法です。治療中であることを忘れて、治療の終了に気づかないことを防ぐために、検電器を採用しています。



○ 多彩な治療モード4コースを搭載 (やさしい・しっかり・ゆったり・マニュアル)

コース名	やさしい	しっかり	ゆったり	マニュアル
対象	はじめての方に	慣れた方に	長時間	自分で設定したい方に
出力電圧 (波高値)	4500Vp 固定	14000Vp 固定	1000Vp 固定	4500Vp 9000Vp 14000Vp ランダム 選択
出力波形	波形1 固定	波形1~3 ランダム	波形1 固定	波形1~3 選択
オフセット比率 NEW	45:55 固定	45:55 35:65 25:75 ランダム	50:50 固定	45:55 35:65 25:75 選択
周波数 NEW	60Hz 固定	40・60・100Hz ランダム	60Hz 固定	40・60・100Hz 選択
タイマー時間	20分 固定	60分 固定	8時間 固定	20・40・60分 選択

※しっかりコース：(出力波形・オフセット比率・周波数)が3分毎に自動で切り替わります。同じ出力波形・オフセット比率・周波数になる可能性もあります。

○ 慣れ防止のための新機能 NEW

同じ治療を繰り返し行うことで起こる、身体の「慣れ防止」を目的とした機能を搭載。使用される方の体力や体調に合わせて、効果的な設定ができます。※マニュアルコースのみ。

- 周波数
40、60、100Hzから選択できます。(1秒あたりの振動回数)
- オフセット比率
45:55、35:65、25:75から選択でき、プラスとマイナスの比率を変えることで慣れを防止をします。

○ 操作性

液晶画面を見ながら、画面横のボタンを操作することで、簡単にセッティングすることができます。




体力・体調に合わせてご使用ください。無理な使用は体調を悪くする原因になります。

⚠ 通電中に他の人や物(金属性)に触れると痛みをともなう刺激を感じる場合がありますのでご注意ください。

痛みやコリにやさしい刺激。 使いやすい低周波機能

○ 患部の特性に対応した 5つの自動コース設定

「肩」、「腰」、「ひざ」、「腕/ひじ」、「EMS+M.カレント」の5つの自動コース。それぞれの患部に合わせたプログラムを設定しています。

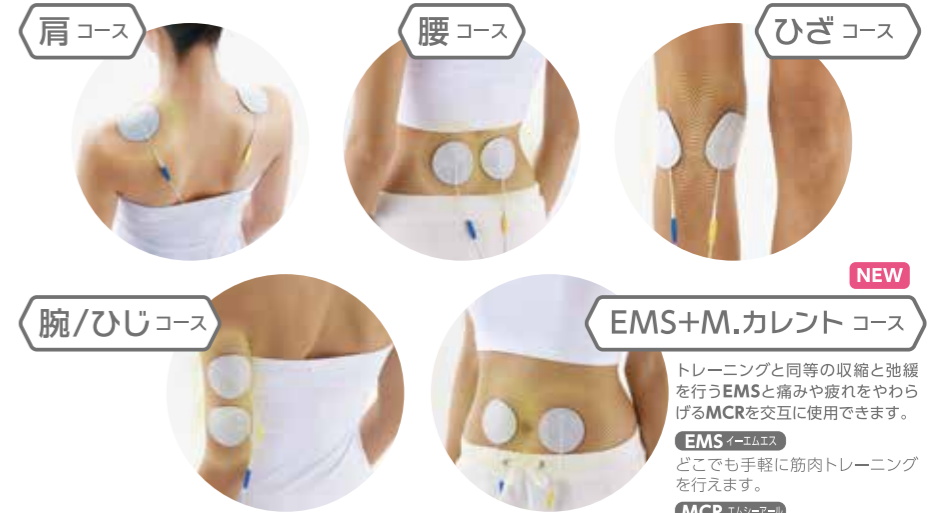

トレーニングと同等の収縮と弛緩を行うEMSと痛みや疲れをやわらげるMCRを交互に使用できます。
NEW
EMS イーエムエス
どこでも手軽に筋肉トレーニングを行えます。
MCR エルシーアール
運動後の疲労回復や関節の痛みをやわらげます。

○ 患部の特性に合わせて 出力される多彩なもみ波形

自動コースは患部の特性に合わせて、さざなみ・たたくA・もむA・もむB・おす・パイプA・パイプBの8つの中から選択された波形から出力されます。



電位治療器 使用目的又は効果

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解・一般家庭で使用すること

●家庭用電位治療器の作用仮説
効果又は効果に影響を与えていると思われる作用は、ヒトに電界を掛けると、体毛が揺れて皮膚を刺激することや、皮膚温の上昇が確認されています。「電界作用が皮膚の触覚や圧を感じる感覚受容器を刺激し、血液の循環とからだの調節機能に働きかける」と考えられます。この「作用仮説」とは、文献等を調査した結果を基に、医学・科学・工学の専門家による評価委員会にて得た作用の仮説であり、効果効果ではありません。出典：(社)日本ホームヘルス機器協会「家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドIII」平成23年度版

低周波治療器 使用目的又は効果

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果(血行を良くする、疲労回復、筋肉痛・神経痛の痛みの緩解、筋肉のコリをほぐす、筋肉の疲れをとる。)・一般家庭で使用すること