

足裏から太ももまで パワフルな贅沢マッサージ




足裏から太ももまで集中ケアできるフットロイド機構^{※1}

ラチェットウィング



気になるふくらはぎから太ももまでのマッサージ位置を手動で5段階の角度調節ができます。

ふくらはぎから太もも集中ケア

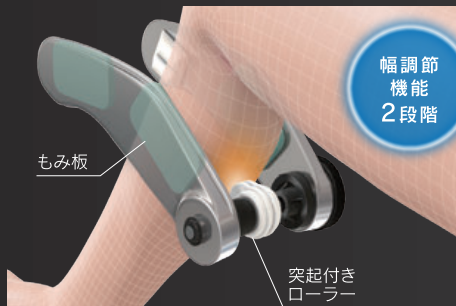

もみ板でもみほぐし、ふくらはぎ裏の突起付きローラーで押しこむようにマッサージします。

足裏つかみ指圧^{※2} & パワーパイプ




もみ板でつかみながら、足裏を突起付きローラーがもみほぐし、同時に強力な振動で心地よく刺激します。

※1 「フットマッサージのアンドロイド」をコンセプトにしたマッサージ機構。人の手のようなきめ細やかな施術動作と、メカだから実現する力強さや細かい振動を掛け合わせた動きで脚部マッサージを行います。
 ※2 指圧はローラーによる動作を応用した表現です。

ご自宅で贅沢フルレッグマッサージ

ラチェットウィング

ふくらはぎ下・上、ひざ下・上、太ももの5つのポイントの集中ケアができます。筋肉をもみ板と先端の指圧突起でもみほぐし、ふくらはぎ使用時はふくらはぎ裏を突起付きローラーが心地よく刺激します。

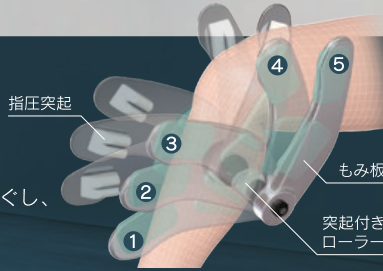

①ふくらはぎ下 ②ふくらはぎ上 ③ひざ下 ④ひざ上 ⑤太もも
もみ板でギュッと絞り、ふくらはぎ裏を突起付きローラーでしっかりマッサージ
もみ板と先端の指圧突起でグイッとほぐすようにマッサージ

足裏つかみ指圧※+パワーパイプ

独自のもみ板で足をつかみながら突起付きローラーで足裏をほぐし、足先とかかとに搭載されたハイブレードで足裏から足全体を刺激します。
※指圧はローラーによる動作を応用した表現です。



2段階の幅調節機能

ふくらはぎ部のもみ板幅を2段階(広・狭)で選択することで、マッサージの強さを調節できます。

足裏ヒーター

冷えやすい足先をじんわりやさしく温めます。



お好みに合わせて選べる4種類のコース
リラックス：ゆったりとした動きでじっくりマッサージ
リフレッシュ：緩急のある動きでリズムカルにマッサージ
ハード：刺激感の強い動きでパワフルにマッサージ
強圧もみ：連続的に速い動きでもみほぐすマッサージ

パワーパイプ
速、遅、または自動(速いと遅いを組み合わせた振動)からお好みで選べます。
※コース中に速、遅を設定できるのは強圧もみコースのみ

洗える布カバー(ふくらはぎ部・足部)
ファスナーで取り外して手洗いができます。



モミーナ フットマッサージャー R22 KC-330

メーカー希望小売価格：オープン価格

- 本体寸法:(収納状態)
幅 約48.5×奥行 約40×高さ 約43.5cm
(ふくらはぎ部を上げたとき)
幅 約48.5×奥行 約53×高さ 約68cm
- 適応ふくらはぎ周囲の目安:約38cm以下
※ふくらはぎの周囲サイズによっては、強く感じる場合があります。
※適応サイズを超えると一緒に動作が制限される場合があります。
- 質量:約11kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:57W(ヒーターのみ:6W)
- 定格時間:20分(オートタイマー約15分)
- 医療機器認証番号:303ABBZX00056000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

MOMONA
モミーナ



JANコード
4951704134774

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)]症、重度の動脈けいゆう(痛)、急性静脈けいゆう(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゆう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきついで(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル

0120-027-612 受付:平日9:00~17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます。また、プライバシーマークを採択しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…