

# マイリラ シートマッサージャーS56 MRL-1200

メーカー希望小売価格：オープン価格

背もたれ寸法：(寝かせた状態・肩部を倒しているとき)  
幅 約46×奥行 約84×高さ 約18cm

座面寸法：幅 約44×奥行 約34×高さ 約8cm

質量：約8.8kg

電源：AC100V(50/60Hz)

消費電力：50W

定格時間：20分(オートタイマー：約10分)

適応体重：100kg以下

医療機器認証番号：301AKBZX00054000

(家庭用電気マッサージ機・管理医療機器)

シートマッサージャー用

専用イス MRL-10C

メーカー希望小売価格：オープン価格

本体寸法：幅 約60×奥行 約81.5

×高さ 約89cm

本体質量：約7.5kg

適応体重：90kg以下

JANコード：4951704324533

使用目的  
または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

## 安全に関するご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(そく(塞)栓)症、重度の動脈(りゅう(瘤)、急性静脈(りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状(けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(とう(疼)痛性)疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：平日9:00~17:30  
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp) FAX番号 **06-4793-0818**

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・別売品はコチラ! [フジ医療器オンラインショップ](http://フジ医療器オンラインショップ) [www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー

〒540-0011

株式会社 **フジ医療器**

大阪府中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。

または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2020年1月現在のものです。

20.07.3M.JP.BJ.B [注文No.1596]

# FUJIIRYŌKI

シートマッサージャー  
MRL-1200

進化を遂げた  
心地よさの新領域へ



マイリラ  
my relax



NEW

首・肩と背中・腰をほぐす2つのメカユニット

ダブルメカ搭載

# FLAT STYLE

フラットスタイル

リラックスした寝姿勢で  
首から腰までをしっかりほぐす。



寝姿勢で  
体圧をかけた  
マッサージ

# CHAIR STYLE

チェアスタイル

2つの専用メカが首・肩と背中・腰を  
やさしく丁寧にほぐす。



肩と背中  
ダブルメカ  
搭載

※写真の椅子は別売品となります。  
(シートマッサージャー用 専用イス MRL-10C)

# COLOR

高級感のある落ち着いた色合いと  
ソフトレザーの質感がインテリアに調和する。



レッド(RE)

JANコード:4951704134583



ネイビー(NB)

JANコード:4951704134576



ブラック(BK)

JANコード:4951704134569

身体をリラックスさせて、首・肩と、背中・腰を同時にほぐす。

# 寝姿勢マッサージで新たな癒し体験を。

寝姿勢になることで身体を支える筋肉の緊張がほぐれリラックス状態になりさらに体圧が加わることで、より密着したマッサージが味わえます。

首や肩を丹念にもみながら、肩甲骨から腰までの広範囲を丁寧にほぐす。

今までにないプレミアムな心地よさをお届けします。



NEW

操作性の高い  
LED液晶リモコン

マッサージの動作や残り時間など、分かりやすく表示します。



自動コース概要

全身

全身をくまなくマッサージするコースです。

肩

肩をメインにじっくりマッサージするコースです。

腰

腰をメインに広範囲にマッサージするコースです。

肩もみボタン


首肩つかみもみメカ

首と肩のマッサージをします。

背・腰ボタン

背腰メカ


「もみ」「たたき」「さざなみ」からもみ技を選択できます。もみの速度や範囲・幅の設定ができます。

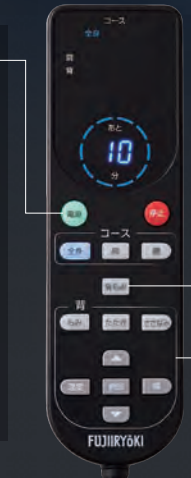

NEW

首・肩と背中・腰に、最適化されたマッサージを実現。

## ダブルメカ搭載

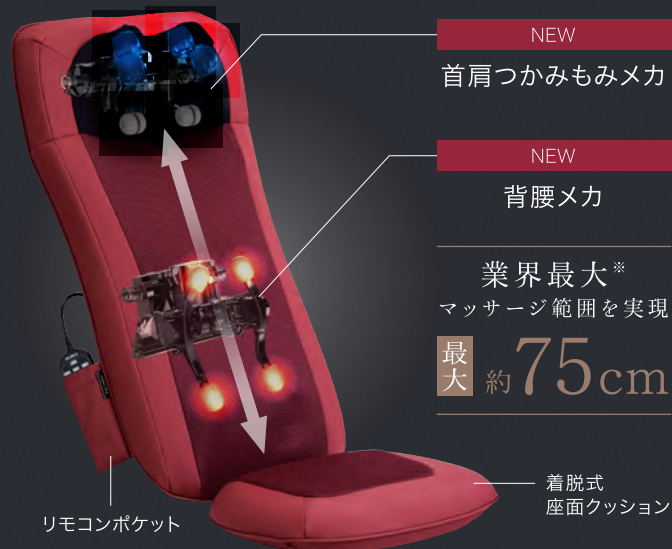

NEW

首肩つかみもみメカ

NEW

背腰メカ

業界最大\*  
マッサージ範囲を実現

最大約75cm


着脱式  
座面クッション

リモコンポケット

※当社調べ(2020年1月現在)

### 背腰メカ

肩甲骨から腰まで広範囲のコリを丹念にマッサージします。

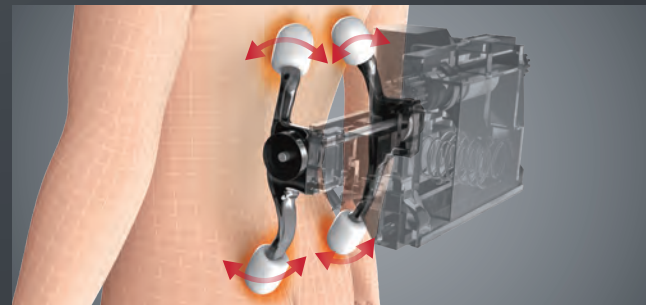

肩甲骨～腰

広い範囲をほぐす4つのもみ玉と、もみ心地にこだわった4種類のもみ技を搭載しています。

もみ

背中を内側からもみ広げるように、ほぐします。

たたき

リズムカルな連打で、筋肉をほぐします。

さざなみ

もみながらたたくように広範囲をマッサージします。


背すじ伸ばし

ローリングするように背すじをマッサージします。

※背範囲の設定をすると、背すじ伸ばしを行います。

### 首肩つかみもみメカ

6つのもみ玉で首・肩をしっかりつかみ、もみほぐします。

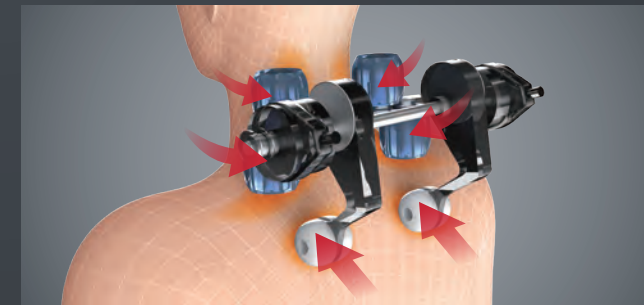


首・肩

弾力性にこだわり厳選された材質のもみ玉で粘りのあるもみ心地を実現しました。

### 肩こりと首こり

スマホやPC作業を続けると、首を前に出す前傾姿勢になり、首に負担が集中し肩こりの原因になると言われています。肩と首の両方をケアすることが重要です。

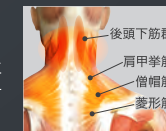


あなたにフィットするマッサージを実現。

NEW 肩位置フィット機構

首・肩の高さに合わせて手でヘッド部分の角度を3段階に調節できます。

着脱式座面クッション

身長に合わせて座面クッションを着脱する事でマッサージのフィット感を更に調節できます。

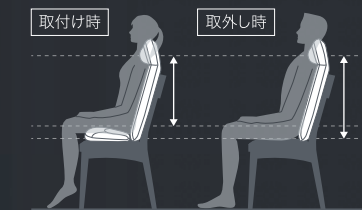

身長が低い方

身長が高い方

