

実力派のもみ技を
スリムボディに凝縮。

3 MOTORS CONTROL

ポイントを
狙ってもめる。

もみ、たたき、上下移動を制御する
3つのモーターを搭載。お好みの高さで
集中的に力強くマッサージ。



57cm STROKE WIDE

首から尻まで
くまなくもめる。


57cmのワイドな施療範囲を実現。
首から肩、背、腰、尻まで、
幅広いポイントをカバー。



15 MODES REAL

お好みの速さで
もめる。

もみ:3種類 たたき:3種類

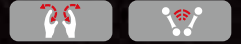

さざなみ:9種類



「もみ」「たたき」は各3種類、
「さざなみ」は9種類、

計15種類の速度調節を可能に。(もみ×たたきの組み合わせ)

肌触りのいい
PUレザー



実力派のもみ技を実現する、フジ医療器 8つの技術。

One Touch

① 手軽さを追求

ボタンひとつで自動コースをスタート。だから、好きなときにすぐもめる。

3種類のコースが選べます。




- 1回押しと **青色** もみコース
- 2回押しと **緑色** さざなみコース
- 3回押しと **赤色** たたきコース

Real Massage

② 力強さを追求

マッサージチェアと同じ3種のもみ技を搭載。だから、薄型なのにもしっかりもめる。

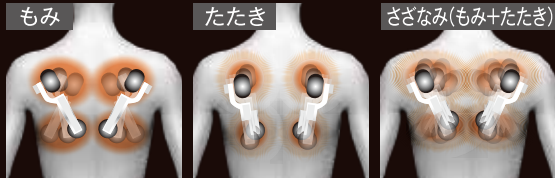

Control

③ 繊細さを追求

「もみ」「たたき」は各3種類、「さざなみ」は9種類(もみ3種類×たたき3種類)の速度調節を搭載。だから、その日のコリや疲れに合わせてもめる。

Stroke ④ 広さを追求

上下57cmの施療範囲を実現。だから、1台で首から尻までくまなくもめる。



Heater ⑤ 温かさを追求


もみ玉にヒーターを搭載。だから、じんわり温めながらじっくりもめる。

Pinpoint ⑥ 自由度を追求

もみ玉の上下の動きを好きな高さで止められる。だからコリやすいポイントを集中的にもめる。

Comfort ⑦ 心地よさを追求

お手入れしやすく高耐久性で、肌触りのいいしなやかなPULゼーを使用。

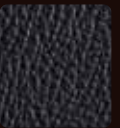

Vibrator ⑧ 充実度を追求

座面にバイブレーターを内蔵。だから、臀部をマッサージできる。

フジ シートマッサージャー OH-S1

メーカー希望小売価格：64,800円(税抜)
 本体寸法(約)：〈背部〉幅460×奥行180×高さ810mm
 〈座面〉幅410×奥行350×高さ50mm
 〈全体〉幅460×奥行460×高さ810mm
 質量(約)：7.0kg
 電源：AC100V(50/60Hz)
 消費電力：40W(ヒーター：10W)
 定格時間：15分
 医療機器認証番号：228AABZX00119000
 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



JANコード:4951704134385

消耗品

背パッド

2,200円(税抜)

枕

1,000円(税抜)

使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほくす

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(どう(疼)痛性)疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル

0120-027-612

受付：月曜～金曜午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

FAX番号 06-4793-0818

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器モール <http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる！プレゼントキャンペーン毎月実施中！

ご応募は フジ医療器HPから！
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード スマホ・ケータイから
かんたんアクセス



●お求めは…



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。