

「深層^{きわみ} 極メカPRO」搭載 まるで手技のようなもみ心地

各部位を集中的にほぐす

部位集中技 **12**種類

様々な要望に合わせて選べる

自動コース **22**種類

腰まわりやお腹まわりを温める
即熱マルチヒーター搭載

Relax Solution

リラックスソリューション SC-25


フルカラータッチ
パネル液晶リモコン

洗練されたこだわりの機能 至福のマッサージ体験



深層 極(きわみ)メカPRO

筋肉の深層にアプローチする最大約12.5cm
のもみ玉突出量を実現。まるで手技のような
もみ心地を体感することができます。

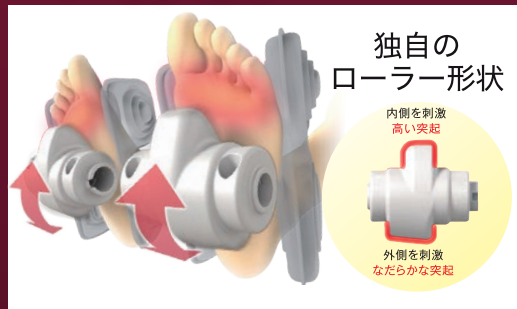

足裏つかみ指圧

足裏のアーチに沿った専用ローラーを採用。
足首と甲に配置したエアバッグを同時作動させ、
足をつかむようにマッサージします。

※指圧はもみ動作を応用した表現です。



全身を心地よくほぐす こだわりの機能

全身エアーマッサージ

31個のエアバッグで全身をやさしく包み込んでマッサージ。疲れを心地よく解放します。部位別の5段階の強弱調節機能を搭載しました。
(腕マッサージのみ3段階)



12種類の部位集中技

独自機能

コリや疲れを集中的にほぐす7分間のミニコース。6種類の部位集中「もみ技」、3種類の部位集中「体幹技」、3種類の部位集中「伸ばし技」の合計12種類搭載。


体幹技 3種類

体幹をケアして身体のバランスを整える

背 体幹ほぐし

腰 体幹ほぐし

骨盤コアストレッチ

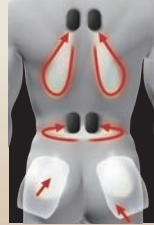

パワーストレッチ

筋肉をやわらげてほぐす新習慣。マッサージ効果を高める多彩なストレッチをご用意。



エアバッグやもみ玉で身体を固定し、脚を引っ張り伸ばすことでそれぞれの部位に力強いストレッチを行います。

リラクソソリューション マッサージチェア SC-25

メーカー希望小売価格:628,540円(税込)

- 本体寸法:
(オットマン収納時)幅 約76×奥行 約138×高さ 約125cm
(腕・脚最大使用時)幅 約96×奥行 約200×高さ 約74cm
- 組立前最小幅:約68cm ●リクライニング角度: 約110~157度
- 質量(約):78kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 定格時間:30分(オートタイマー:約7/16/30分)
- 消費電力:130W(ヒーター:40W)(待機電力:0.3W)
- 医療機器認証番号:229ABBZ00091A01
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 電気代の目安:約53円/月
(ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安:約36円/月
(マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安:約32円/月
(ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。
(2021年7月現在、当社調べ)



ブラック(BK)
JANコード:4951704171380



[付属品]

- フロアマット 幅 約80×奥行 約120cm
- 着脱式背パッド・枕

搬入幅
約70cm

[搬入・設置]

- 搬入幅
本体幅 約68cm+2cm(養生のため)以上必要です。
- 設置
リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置する。足方向に35cm以上、頭方向に50cm以上必要です。

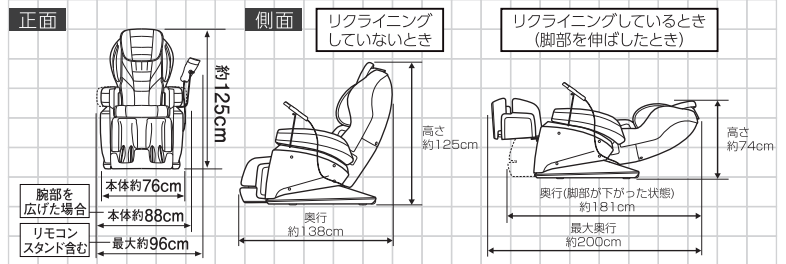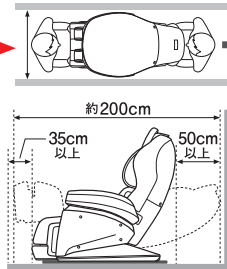

使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(どう(疼)痛性)疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。◎リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web **www.fujiiryoki.co.jp** フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

SC-25の使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール **0120-113-706** 受付:平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ **www.fujiiryoki.shop**

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…