

多彩な機能がうれしい。簡単操作がうれしい。

最適マッサージが、思いのままに楽しめます。

コース選択

- もみ/たたきコース
- もみ玉でマッサージします。
- エア-コース
- エア-でマッサージします。
- 複合コース
- フロの手順を参考にエア-&もみ玉マッサージを組み合わせて全身を効果的にほぐします。

もみ/さざなみ動作選択

8種類のもみ玉マッサージが選べます。

もみ

リズムカルな刺激が疲れやコリに直接響きます。

連続ローリング

背筋をすっきり伸ばすような心地よさです。

もみ&連続ローリング

さざなみ

【もみ下げ】と【たたき】を同時に行います。

部分ローリング

気になるポイントを集中的に押し伸ばします。

もみ&部分ローリング

さざなみ&連続ローリング さざなみ&部分ローリング

もみ/さざなみ位置&スピード調節

もみ玉の位置・スピードを調節します。

着脱式パッド&枕

マッサージ体感をやわらげます。取り外し可能で、ドライクリーニングも簡単。

SUPER RELAX

スーパーリラックス SC-361 (マッサージチェア)

- 寸法(約): [リクライニングしていない時(脚部収納)] 幅84×奥行119×高さ108 (cm)
[リクライニングした時(脚部は水平)] 幅84×奥行166×高さ64 (cm)
[折畳時] 幅84×奥行104×高さ65 (cm)
- 質量(約): 53kg ●電源: AC100V (50/60Hz)
- 定格時間: 30分 ●消費電力: 130W (50/60Hz)
- 医療用具許可番号: 27BZ 0878

標準価格 398,000円(税別)



【別売品】

専用カバー SC-1

標準価格 9,500円(税別)



⚠️安全に関するご注意

※ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。
※医師の治療を受けている場合は、必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

●お求めは…



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号
(後継のメットアール) 札幌・仙台・青森・盛岡・秋田・山形・福島・東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・新潟・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪府・大阪府・和歌山・奈良・徳島・香取・山口・高松・松山・高知・福岡・長崎・大分・宮崎・鹿児島・熊本・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷後の変更はできません。また、製品の改良により、価格が変動する場合があります。
※本カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。

FUJIIRYOKI

SUPER RELAX

スーパーリラックス SC-361



エア-動作選択

5つの部位ごとにエア-マッサージが行えます。

背中




腰



尻



もも

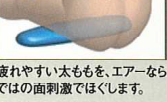

脚



エア-強さ調節

エア-の刺激の強さを2段階調節できます。

もみ玉/エア-同時動作選択

お好み・体調に合わせて、エア-&もみ玉マッサージを自由に組み合わせられます。
※背中・腰のエア-と、もみ玉の同時使用の組み合わせは不可。

電動無段階リクライニング

リモコン操作で、お好みの姿勢を自由に設定できます。(116~160°)
※脚部の使用はワンタッチレバー(手動)で。

マッサージ機能は、 どこまで進化するのだろうか。

全身の血行促進に役立つ「エアバッグ」、そしてコリに効く「もみ玉」を1台に搭載。
体調に合わせて、使い分けはもちろんのこと同時マッサージも。
マッサージチェアは、もうここまで進化している。



SUPER RELAX

スーパーリラックス SC-361

面刺激とホールド刺激の「エアーマッサージ」


お尻や太ももは、エアバッグが筋肉全体を押し上げるように刺激。「面ではなく」自然なタッチが体感できます。背中や腰は、左右からエアバッグがはさみ込む「ホールド」マッサージ。空気のほどよい圧力に、全身が包み込まれるような心地よさです。

ふくらはぎには「ミルキング」

ふくらはぎには、エアバッグが両側から包み込み適度な圧迫と開放を繰り返す「ミルキング」を。たまりがちな下半身の血液を心臓に押し戻すことで、下半身が軽くなる爽快感が味わえます。



コリや疲れには本格派の「もみ玉マッサージ」

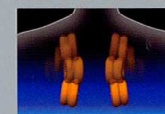

もみ玉の動きは、背中や腰の気になる部分を力強くマッサージする「ほぐしもみ」。もみ玉は、身体のラインに沿うように曲線移動。背筋を押し伸ばすような「曲線ローリング」が堪能できます。



もみ玉が“もみ下げ”と“たたき”を同時に行う「さざなみ」は、プロのもみ技に学んだ本格派。フジ医療器独自のもみ技です。

エア-ともみ玉を組み合わせて「同時マッサージ」



ふくらはぎを包み込むミルキングと、背筋を強い刺激でマッサージするローリング(さざなみ)を同時に行えば、心地よいストレッチ感覚が味わえます。またエア-の面刺激でお尻と太もも、ローリング(さざなみ)で背筋マッサージ。上半身・下半身の違った刺激で、全身の筋肉のコリや疲れを同時にほぐします。

効能・効果

疲労回復、血行促進、
筋肉の疲れをとる、
筋肉のコリをほぐす、
神経痛・筋肉痛の
痛みの緩和