

温めながら、もみほぐす。
今日の疲れに、
ごほうびマッサージ。



FOOT MASSAGER

フットマッサージャー SG-520



じんわり温めながらマッサージ
ヒーター機能搭載

足先、足裏、ふくらはぎまでリフレッシュ!

ふくらはぎを、ぐぐっともみほぐす!

まるで羽根のように動く左右のもみ板が、スウィングしながらしっかりふくらはぎをもみほぐす。




ぎゅっ
ぎゅっ

ぎゅっ
ぎゅっ

突起が
ぐいぐい刺激!



もみ板で
人の感覚の
心地よさを実現!

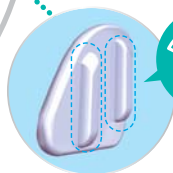

ぐいぐい

背面から足をらくらくスルーイン!

ご高齢者の方でも、スカートの方でも、
背面スルーインだから機械をまたがず使えます。



背面スルーイン!

らくらく

足裏全体をぐいぐい刺激!

突起付マッサージャーが足裏のマッサージポイントをぐいぐい刺激。

もみ効果+ヒーターで
心地よさアップ!

疲れた足全体の筋肉を、まるで手のひらで包み込むようにマッサージ。
ヒーター機能搭載で、より快適にお使いいただけます。

※イラストはすべてイメージ図です。

シンプルで簡単な 操作方法

もっと快適に、目的に合わせて使える 「自動3コース」搭載!



手動ボタン

もみ板と足裏マッサージの連続動作を「遅」「中」「速」の3段階に速度調節できます。



【操作パネル】

自動ボタン

もみの速度変化や保持の組合せで3つの自動コースを選択できます。

しっかりコース

速い動きでふくらはぎをもみ上げます。運動後や立ち仕事の疲れなどに。

ランダムコース

遅い動き、早い動き、緩急使い分けたりズミカルな動作が楽しめます。

ゆったりコース

ゆっくりとした動き&じっくり保持(ホールド動作)。やさしく、しっかりもみほぐします。

約15度の角度調節

本体スタンドを使えば、椅子の高さや座った姿勢などに合わせて約15度の角度調節が可能です。



外して洗える 着脱式布カバー

ファスナーを外せば中のカバーを取り外して丸洗いすることができ、常に清潔な状態でご利用いただけます。



布カバーは 制菌加工

制菌加工は、繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定してコントロールすることを目的とした加工です。

フットマッサージー SG-520

[管理医療機器]

医療機器認証番号:222AGBZX00172000

JANコード:4951704134019

メーカー希望小売価格: **56,952円(税抜)**
※税抜価格です。

仕様

- 本体寸法(約):幅480×奥行390×高さ440mm
- 質量(約):13.5Kg ● 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:180W(ヒーターのみ:110W)
- 定格時間:20分



効能・効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 血行促進
- 筋肉のコリをほぐす



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ● 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

☎ **0120-027-612**

受付時間:9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.fujiiryoki.co.jp>

パソコンからもお得なプレゼントキャンペーンを毎月実施中

●お求めは…