

FUJIIRYŌKI

Smart Seat Style!

いつでも、どこでも、
スマートマッサージ。

シートマッサージャー
SS-100

あなたのチェアを、
マッサージチェアに！



業界最軽量※


ソファも、チェアも、座椅子も。
サッと敷くだけで、
マッサージチェアに大変身！
女性でも軽々と持ち運べるから、
いつでも、どこでも、
マッサージチェアと一緒にです。

※当社調べ。2016年2月現在。
シート型マッサージャーにおいて。

一日の終わりに、至福のひとつとき。



家事のあいまに、ホットひととき。

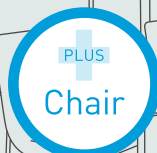

コリをほぐして、さあ もうひと頑張り。




※使用例はイメージです。椅子でご使用する際は、固定用ベルトを
椅子の背もたれに固定して使用してください。

Massage

パワフル&繊細な、選りすぐりのもみ技。

もみ

上下・左右のパワフルな動きで、コリをじっくりもみほぐします。

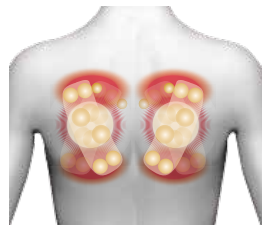

背筋伸ばし

指圧のような上下の動きで、肩から腰までなぞるように押しほぐします。



「お好み」が選べる、きめ細かな調節機能。

「時間」が選べる。

10分/15分/20分の3種類のタイマーを搭載。ちょっとした時間に手軽にマッサージが楽しめます。



「ポイント」が選べる。

全身/背中/腰の3つの施療範囲が選択可能。コリやすいポイントを集中的にほぐします。



「強さ」が選べる。


シートカバーを掛ければ、マッサージの強さがソフトになります。



「もみ幅」が選べる。

もみ玉の幅を調節できるため、狙ったコリをピンポイントでマッサージできます。

※背筋伸ばし選択時のみ。

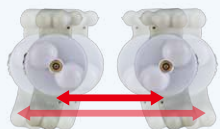


グイグイ迫る、回転式[※]の8つのもみ玉！

※中央のみ。



◎写真は合成によるイメージです。

Heater

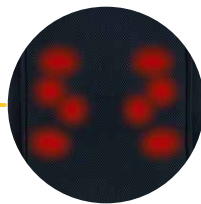

じんわり温めて、じっくりほぐす。

ヒーターを内蔵したもみ玉を採用。まるで人の手のような温もりで、コリを心地よくもみほぐします。

※ヒーターのみの使用はできません。設定温度: 約40度(設定温度と体感温度は異なります)。

ボタンひとつで、マッサージをスタート!



電源

15分のもみマッサージ(ヒーターなし/バイブレーターなし)をスタートします。

動作位置

もみ玉が上下移動する範囲を、全身/背中/腰から選べます。もう一度ボタンを押すと、上下移動が止まります。

矢印

▲押し続けるともみ玉が上へ移動します。

■動作中に押すと、もみ玉がその位置に留まります。

▼押し続けるともみ玉が下へ移動します。

Vibrator

強弱調節
3段階



おしりのコリもすっきり!

座面シートにバイブレーターを内蔵。きめ細かな振動で臀部のコリをほぐします。



レッド(RE)

ブラック(BK)

JANコード: 4951704134323 JANコード: 4951704134316

シートマッサージャー SS-100

メーカー希望小売価格: 34,800円(税別)
 本体寸法(約): (全体)幅410×奥行460×高さ650mm
 (背部)幅410×奥行140×高さ650mm
 (座面)幅400×奥行370×高さ40mm
 質量(約): 3.7kg(ACアダプター含まず)
 電源: AC100V(50/60Hz)
 消費電力: 30W(ヒーター:6W)
 定格時間: 20分
 医療機器認証番号: 228AGBZX00018000
 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

使用目的
または
効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

⚠安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(とう(疼)痛性)疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって
◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818**

E-mail

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

- デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの記載内容は、平成28年2月現在のものです。