

FUJIIRYŌKI

DOCTOR MICRO

ドクターマイクロ

家庭用超短波治療器 SW-500



くつろぎながら、しっかり治療。
パルス発振の超短波(マイクロ波)治療を、ご家庭で。

ご家庭で使いやすい
コンパクトサイズ



毎日使うものだから
操作もカンタン



- ① 電源を入れる
 - ② タイマーを設定
 - ③ 出力を設定
- 治療スタート!

DOCTOR MICRO ドクターマイクロ 家庭用超短波治療器 SW-500



- 本体寸法(約): 幅280×奥行360×高さ240(mm)
※自在アームと照射アンテナは含まない。
 - 本体質量(約): 15kg
 - 消費電力: 95W
 - 出力: 強25W、弱10W(ピーク50W)
 - 医療機器認証番号: 221ACBZX00049000(管理医療機器)
 - メーカー希望小売価格: 512,500円(税抜:488,095円)
 - 電源: AC100V(50/60Hz)
 - 発振周波数: 2450MHz
 - タイマー: 10分・20分
- 付属品
① 防護メガネ(1個) ② 電源コード(1個) ③ アースコード(1個)
④ シールドカーテン(1セット)

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。医師の治療を受けている場合は、必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

●ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器	●出血部位または月経時の腹部	●急性(疼痛性)疾患の人	●熱の高い人(38℃以上)	●低温やけどをしたことのある人
●心電計等の装着型の医用電気機器	●頭部・目・男性生殖器への使用	●悪性腫瘍のある人	●血圧に異常のある人	●適用部位の皮膚に異常のある人
●人工心肺等の生命維持用医用電気機器	●体内に金属・プラスチックを埋め込んである部位	●妊娠している人	●知覚障害のある人	●その他、医師の治療を受けている人や体に異常を感じている人
		●心臓に障害のある人	●安静を必要とする人	

次の人は必ず医師とご相談の上、使用してください。

⚠️ 使用上のご注意

使用場所や状況について: 感電、火傷などの事故や物的損害、故障の原因となります。

- 使い捨てカイロや金属類(ネックレス、ベルト、時計、メガネ、イヤリングなど)は、体から外すこと。火傷などの事故の原因となります。
- 本体は水平な場所へ置くこと。傾斜面など不安定な場所での移動は転倒等に注意すること。
- 他の電気製品とはできるだけ距離をあけて使用すること。携帯電話、電子手帳等を身につけたまま使用しないこと。また、使用中の照射アンテナを直接本体や他の電気製品(テレビやラジオ、電話、ステレオなど)に向けないこと。電気製品が誤作動や故障したり、記録内容が消去される場合があります。

お客様相談窓口のご案内
フジ医療器 フリーダイヤル **0120-027612** 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-6644-9103**
E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!
フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

美と健康に関するコラムや、
イベント情報を発信
ほほえみ生活
<http://www.hohoemi-life.com/>

応募方法
①携帯サイト「ココワン フジ医療器」にアクセス
<http://koko1.mobi/user/join.php?id=795121>
②アンケートに答えてご応募

携帯サイト「ココワン フジ医療器」では、毎月、フジ医療器の人気商品をプレゼント!!
年間プレゼント総額**100万円以上!!**

●お求めは...

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階


このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

超短波(マイクロ波)が、気になる部分を温熱治療。 痛みやコリを、からだの深部から集中ケアできます。

からだの表面だけを温めるのではなく、
超短波(マイクロ波)がからだの深部に達して熱を発生させる
超短波治療器ドクターマイクロ。
痛みのある部分を直接温め、温熱効果で治療します。

専門家も使う治療法。 それが、超短波治療器。

病院や診療所でも使用される超短波治療器は、赤外線
などの温熱療法ではとどきにくいからだの深部にまで、
超短波(マイクロ波)エネルギーを透射できます。からだに
やさしい療法として広く使われており、温熱効果で血行を
促進させ、コリや痛みをケアします。

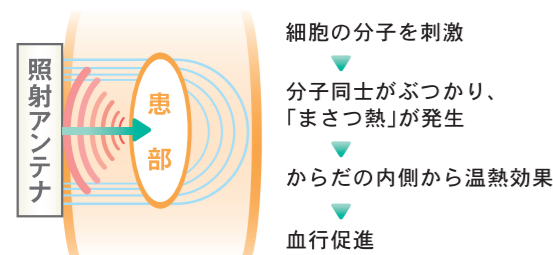

家庭用超短波治療器の效能効果

超短波による局所の温熱効果。
一般家庭で使用すること。

- 胃腸の働きを活発にする ■ 血行を良くする
- 筋肉の疲れをとる ■ 筋肉のコリをほぐす
- 疲労回復 ■ 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

服の上から
当てるだけ

体に密着させるから
エネルギーが効率よく届く!




※導電性の衣類を着用しての使用はできません。

ドクターマイクロはここが違う!

パルス発振により 高効率に深部にとどく。

断続的に50W(ピーク値)の超短波(マイクロ波)エネルギーを照射するパルス発振で、からだの深部へエネルギーをしっかりと届けます。皮膚がチリチリする感じもほとんどなく、効率のよい治療がおこなえます。

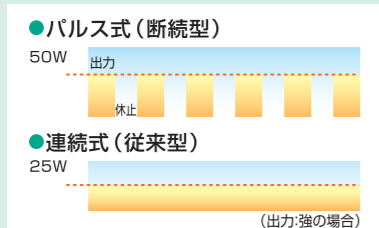

超短波(マイクロ波) + パルス発振で 高効率に温める。

- ポイント1 アンテナをからだに密着させるため、エネルギーが拡散せず効率よくからだに入ります。
- ポイント2 パルス発振による超短波(マイクロ波)エネルギーが、からだの深部から効果的に温めます。

超短波の約100倍振動する マイクロ波のちから。

超短波とは1秒間に数千万回も振動する電波の一種です。ドクターマイクロの超短波(マイクロ波)は、さらにその上の1秒間に約24億回振動(2450MHz)を起こしてからだを温めます。

肩、腰、ヒザ、お腹...。他にもさまざまな部分に使えます。



自由自在に動くアームとアンテナで
ラクな姿勢で使用できます。



冷えがたまりやすいお腹を温め血行をよくし、
胃腸の働きを活発にします。

ドクターマイクロは、コンパクトサイズで移動に便利なキャスター付き。家中どこでも、くつろぎながら治療ができます。自在アームを伸ばしたり、角度を変えて気になる部分へ照射面を服の上から当てるだけで、手軽に治療がおこなえます。

- ・好きな時に、好きな場所で。
- ・キャスター付き(2カ所)で移動もラク。
- ・コンパクトで、場所をとりません。



DOCTOR MICRO