
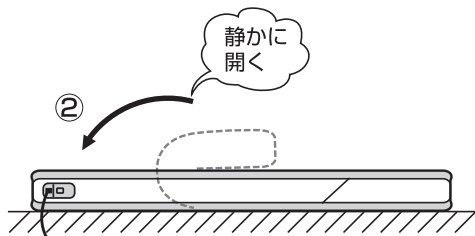


ここではエアーマッサージ器の設置方法と操作方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

操作方法

1 本体を広げる


上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする

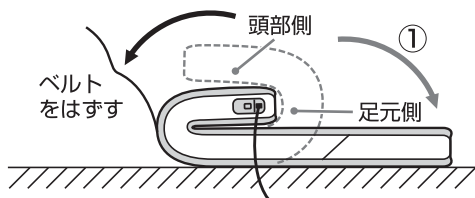

- 折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。


お願い

- ベルトをはずした後は、本体を広げる前にマジックテープを必ず元に戻してください。
また、ベルトを掛けるときはマジックテープカバーをはずしてください。

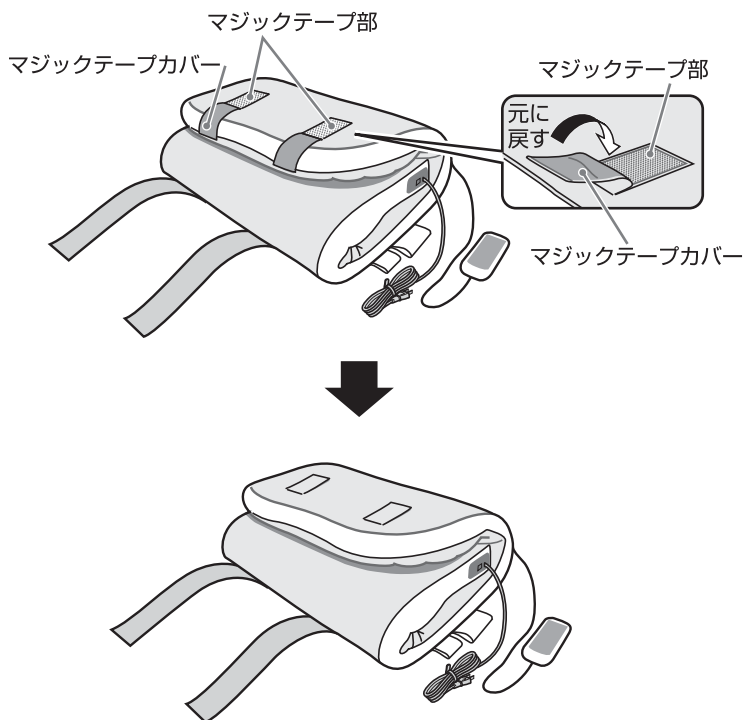

2 電源を入れる

①電源プラグをコンセントに差し込む

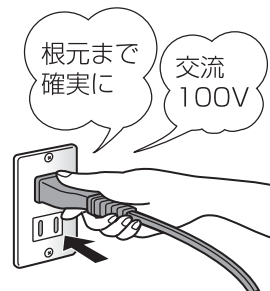

②電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。



- リモコンの主電源ランプが点灯します。



3 本体に横たわる

①本体の頭側を確認して本体に横たわる



②肩位置を合わせる

- 首・肩マッサージ部を肩の位置に合わせます。



- 背・腰のマッサージをするときは、取扱説明書の「背・腰コースのマッサージ位置」をご確認ください。