


## 電位治療の操作方法

### 1 本体を水平な場所に置きます。

### 2 通電シートを接続します。

本体背面 / 通電シートプラグ差込口

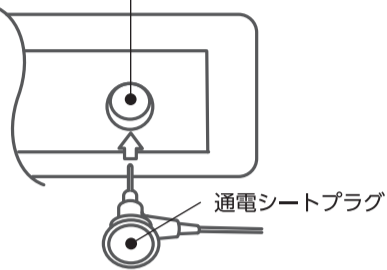


**注意** 通電シートプラグは通電シートプラグ差し込み口に根元まで確実に差し込んでください。低周波コードは必ず抜いてください。

### 3 絶縁マットを準備します。(絶縁マットは折りたたまずに全て広げた状態で敷いてください。)


#### 木製イスに座って治療を行う場合

絶縁マットの上にイスを置き、イスの座面に通電シートを広げて置きます。※イスは壁から5cm以上離してください。

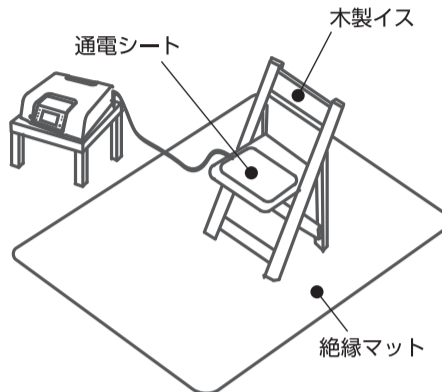


#### 横になって治療を行う場合

絶縁マットの上にお手持ちの布団を敷き、腰のあたりに通電シートを広げて置き、お手持ちのシーツなどを敷きます。

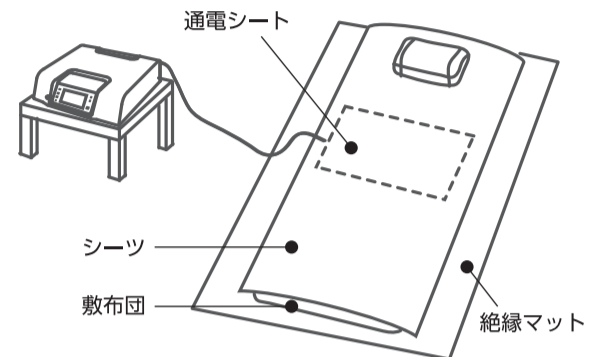

### 4 電源コードを接続します。

本体背面 / 電源コード差込口

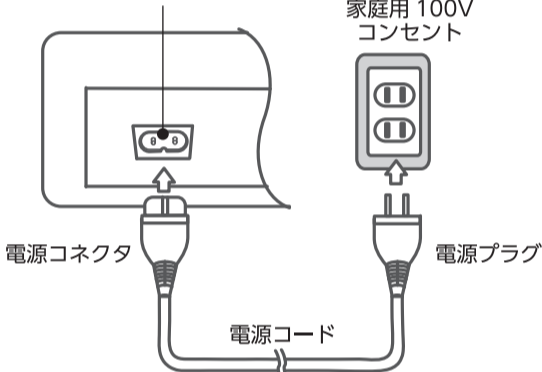

**注意** 根元まで確実に差し込まれていることを確認してください。


### 5 電源を入れます。

本体の「電源ボタン」を押し、電源を入れます。「電源ボタン」を押すと表示パネルに下の画面が表示され2秒後に治療選択画面に切り替わります。



### 6 治療選択画面で、電位を選択します。

「選択ボタン」で電位を選択し、「確定ボタン」を押します。※「選択ボタン」を押すごとに治療アイコンの枠が「電位」→「低周波」と交互に移動します。

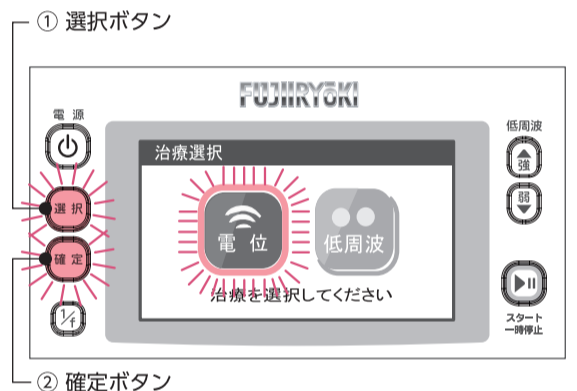

### 7 おこのみのコースを選択します。

「選択ボタン」で治療を行いたいコースを選択し「確定ボタン」を押し、決定します。  
※「選択ボタン」を押すごとに治療アイコンの枠が「やさしい」→「しっかり」→「ゆったり」→「マニュアル」の順で移動します。

#### ① 選択ボタン



#### ② 確定ボタン

#### やさしいコース



「やさしいコース」は以下の設定でスタートします。

出力	4500Vp
波形	波形1
周波数	60Hz
offset	45:55
タイマー	20分

#### しっかりコース




「しっかりコース」は以下の設定でスタートします。

出力	14000Vp
波形	ランダム
周波数	ランダム
offset	ランダム
タイマー	60分


### 8 治療を開始します。

「スタート/一時停止ボタン」を押すと治療を開始します。  
※治療中に「スタート/一時停止ボタン」を押すことで一時停止することができます。再度押すと、再開できます。  
※一時停止状態が10分以上続くと自動的に電源が切れます。

スタート / 一時停止ボタン

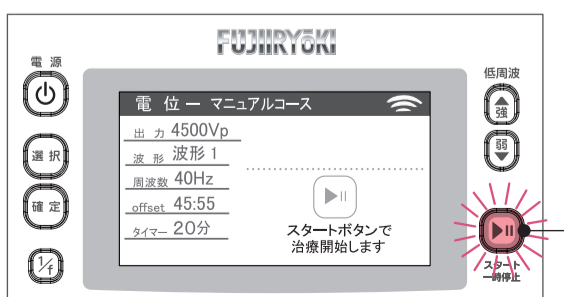


#### ゆったりコース

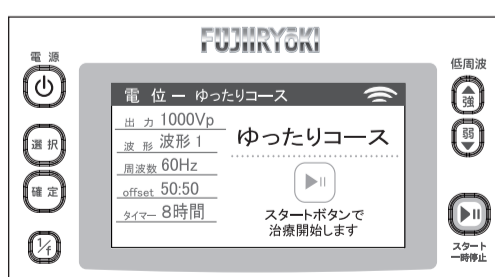

「ゆったりコース」は以下の設定でスタートします。

出力	1000Vp
波形	波形1
周波数	60Hz
offset	50:50
タイマー	8時間

#### マニュアルコース

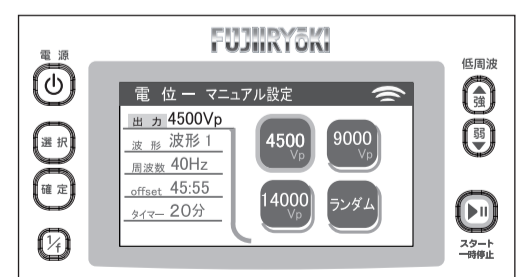


マニュアルコースはおこのみの設定を選択することができるコースです。

※マニュアルの設定方法については、取扱説明書をご参照ください。


# 低周波治療の操作方法

## 1 本体を水平な場所に置きます。

## 2 低周波ピンに低周波パッドを取付けます。

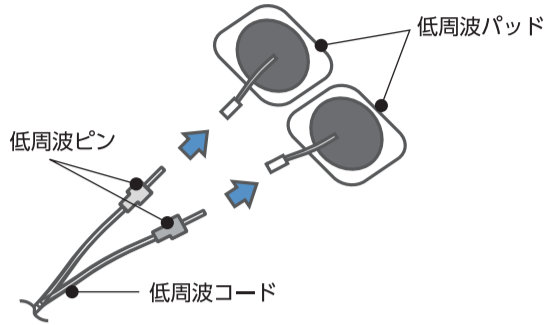


## 3 低周波コードを接続します。

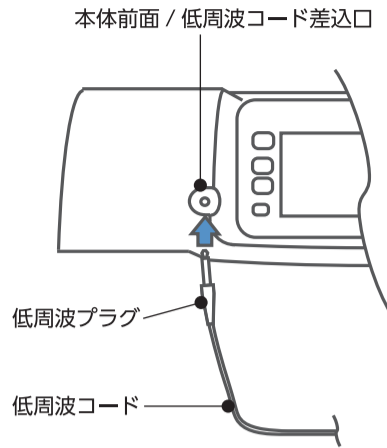


**注意** 低周波プラグは低周波コード差し込み口に根元まで確実に差し込んでください。

## 4 電源コードを接続します。

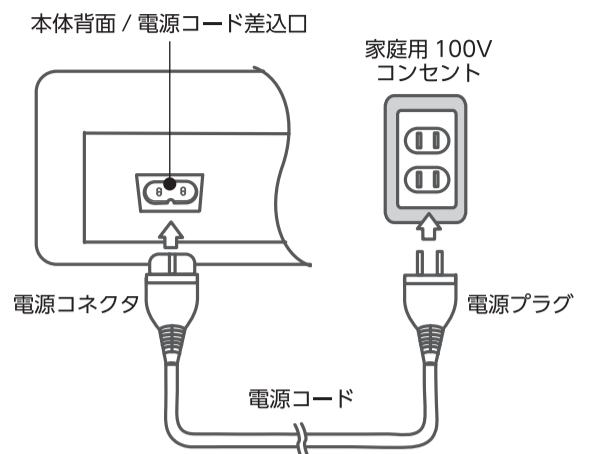

**注意** 根元まで確実に差し込まれていることを確認してください。

## 5 身体に低周波パッドを貼付けます。

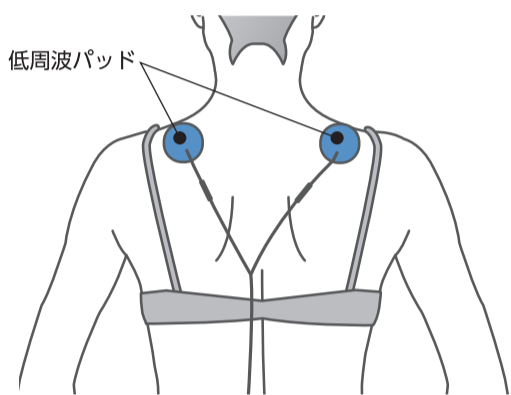


## 6 電源を入れます。

本体の「電源ボタン」を押し、電源を入れます。「電源ボタン」を押すと表示パネルに下の画面が表示され2秒後に治療選択画面に切り替わります。



## 7 治療選択画面で、低周波を選択します。

「選択ボタン」で低周波を選択し、「確定ボタン」を押します。※「選択ボタン」を押すごとに治療アイコンの枠が「電位」→「低周波」と交互に移動します。


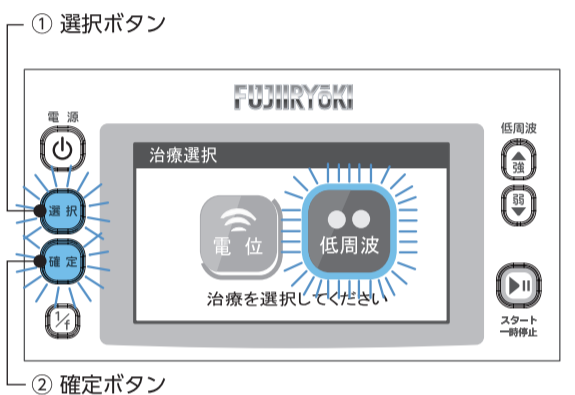


## 8 おこのみのコースを選択します。

「選択ボタン」で治療を行いたいコースを選択し「確定ボタン」を押し、決定します。※「選択ボタン」を押すごとに治療アイコンの枠が「肩」→「腕/ひじ」→「腰」→「ひざ」→「EMS-M.カレント」の順で移動します。

### 患部の特性に対応した5つの自動コース設定

「肩」、「腕/ひじ」、「腰」、「ひざ」、「EMS+M.カレント」の5つの自動コース。それぞれの患部に合わせたプログラムを設定しています。

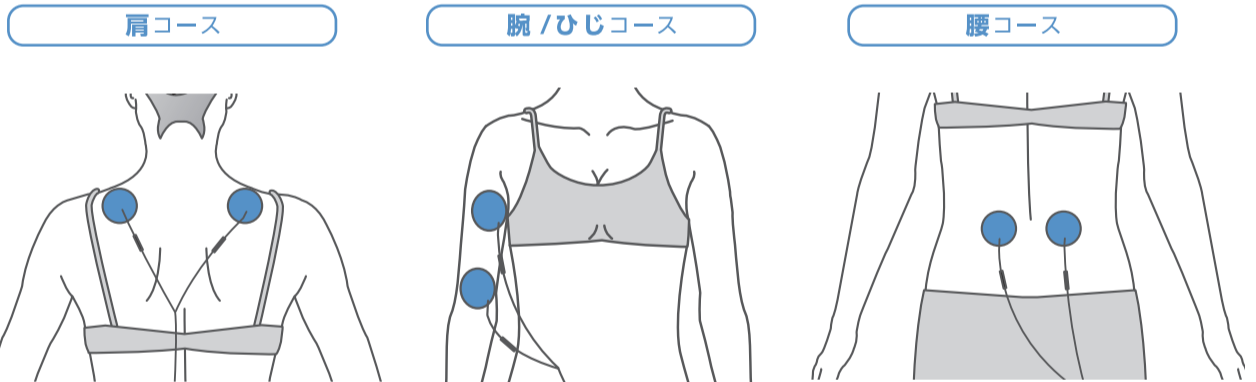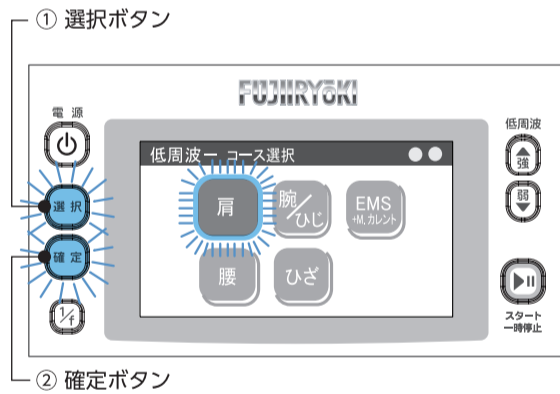

## 9 治療を開始し、出力レベルを設定します。

「スタート/一時停止ボタン」を押し、「低周波強弱ボタン」を設定すると治療を開始します。※治療中に「スタート/一時停止ボタン」を押すことで一時停止することができます。再度押すと、再開できます。※一時停止状態が10分間以上続くと自動的に電源が切れます。

※イラストは肩コースの場合です。



① スタート/一時停止ボタン  
② 低周波強弱ボタン

トレーニングと同等の収縮と弛緩を行うEMSと痛みや疲れをやわらげるMCRを交互に使用できます。

### EMS イーエムエス

どこでも手軽に筋肉トレーニングを行えます。

### MCR エムシーアール

運動後の疲労回復や関節の痛みをやわらげます。※MCR(M.カレント)出力時は体感がありません。



必ず安全のために  
お守りください

### 危険

- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- ペースメーカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、ご使用にならないでください。

### 警告注意

- 次の方はご使用をさけるか、必ず医師にご相談のうえご使用ください。● 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ● 妊娠初期の不安定期、または出産直後の方 ● 悪性腫瘍のある方 ● 心臓に障害のある方 ● 安静を必要とする方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方 ● 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ● 感染症疾患のある方 ● 自分で意思表示できない方 ● 酒気帯びしている方 ● 医師の治療を受けている方、特に身体に異常を感じているとき ● 次の方は、取り扱える人が必ず付き添ってご使用ください。● 介護が必要な方、子供 ● 取扱説明書の内容を理解できない方 ● ご自身以外(友人など)の方がご使用される場合は、付き添うか、よく説明してご使用させてください。お使いになる方に、取扱説明書を読んでからお使いになるようにご説明ください。● 乳幼児および身体に障害のある方にはご使用にならないでください。● 飲酒時や、睡眠薬を飲んだときはご使用にならないでください。● 導子が濡れている時は、ご使用にならないでください。● ご使用中の人に触れないようにしてください。● ご使用中、身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止してください。

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
お客様相談窓口のご案内  
フジ医療器フリーダイヤル  
**0120-027-612**  
受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分  
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。