

ここではエアーマッサージ器「ND-900 (N)」の設置方法と操作方法を簡単に表示しています。
ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

操作方法

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

スタート/切ボタン

エアーマッサージの「入/切」を切り替えます。

停止ボタン

ただちにすべての動作を止めます。

コース表示ランプ

選択されたコースが点灯します。

コース選択ボタン

「Aマッサージ」「B徐々に遅く」「C徐々に速く」の3種類のコースが選べます。

強さ表示ランプ

選択された強さが点灯します。

強さ選択ボタン

「強」「中」「弱」のマッサージ強さが選べます。

マッサージ動作位置ランプ

マッサージ部位が点滅します。

首・肩ボタン

首・肩のみのマッサージが選べます。

背・腰ボタン

背・腰のみのマッサージが選べます。

リピートボタン

首・肩、背・腰でお好みの動作を繰り返します。

ヒーター

入/切ボタン

ヒーターの「入/切」を切り替えます。

設定温度ランプ

選択されたヒーターの設定温度を表示します。

温度設定ボタン

押すごとに5段階の設定温度が選べます。

バイブレータ

入/切ボタン

バイブレータの「入/切」を切り替えます。

表示ランプ

バイブレータが動作すると点灯します。

電位治療

入/切ボタン

電位治療の「入/切」を切り替えます。

設定時間ランプ


設定した電位治療の時間を表示します。

時間設定ボタン

押すごとに設定時間が「1時間(1h)」「4時間(4h)」「8時間(8h)」と設定できます。

主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れると点灯します。


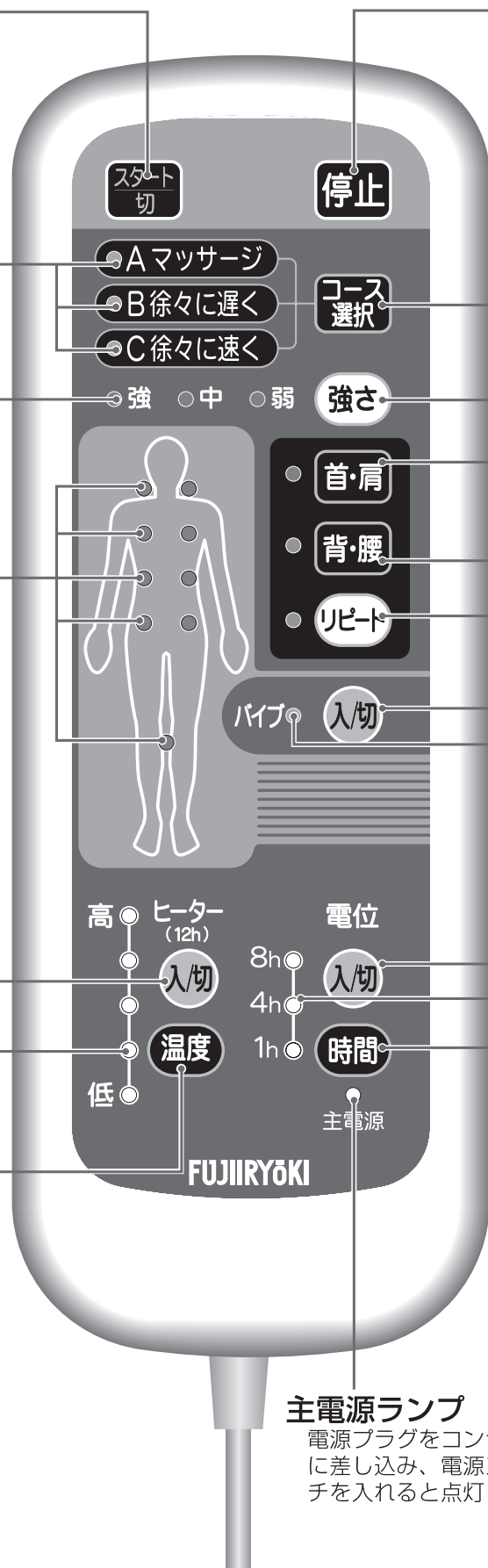


ここではエアーマッサージ器「ND-900 (N)」の設置方法と操作方法を簡単に表示しています。
 ご使用前には付属の取扱説明書を必ずお読みいただき「安全上のご注意」をお守りください。

設置方法

1 本体を広げる


上向きに寝たときに、電源コードのある方を左側の足元にする

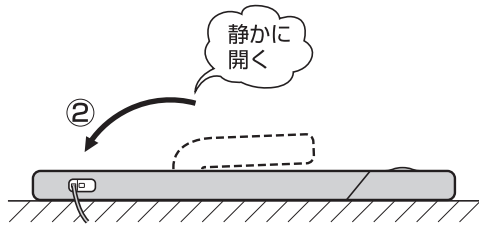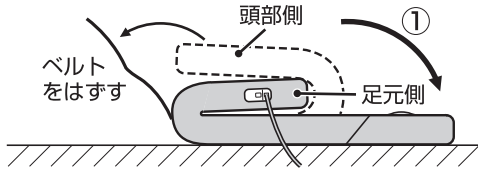

●折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。


お願い

●ベルトをはずした後は、本体を広げる前にマジックテープを必ず元に戻してください。
 また、ベルトを掛けるときはマジックテープカバーをはずしてください。

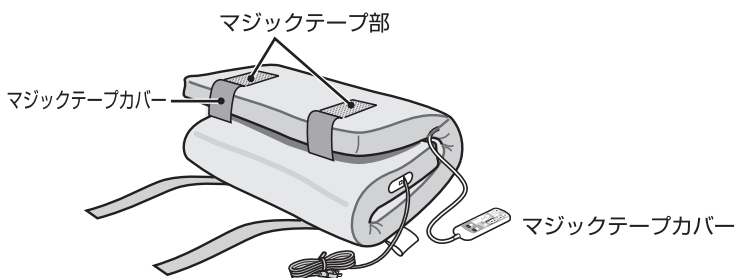



2 電源を入れる

①電源プラグをコンセントに差し込む

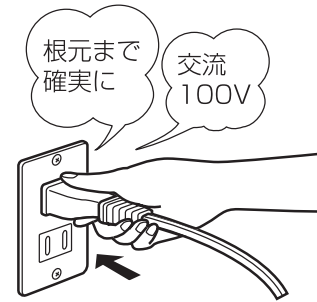

②電源スイッチを入れる

●電源スイッチは本体足元左側面にあります。

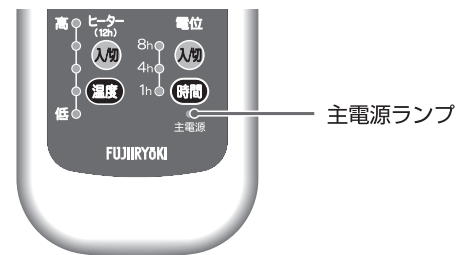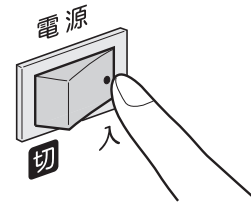

●リモコンの電源ランプが点灯します

3 本体に横たわる

①本体の頭側を確認して本体に横たわる



②肩位置を合わせる

●首・肩マッサージ部を肩の位置に合わせます。

