


# OH-5000 カンタン操作ガイド

1 本体後側の下部にある電源スイッチを「ON」にする。

2 枕を後に回して、座る。

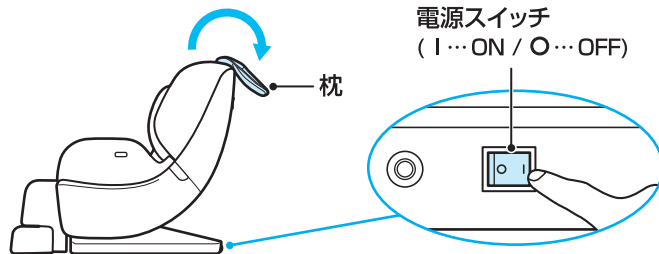

3  を押して、リモコンの電源を入れる。

- メニュー画面が表示されます。
- 3分以上操作がないと自動で電源が切れます。

4 お好みのコースを選択する。

- 「ヒーリング」「リフレッシュ」「リラックス」の3種類から選択できます。
- マッサージ開始時自動リクライニング角度で設定した角度まで背もたれが倒れ、脚部が上がります。リクライニング角度の調節、設定についての詳細は取扱説明書をご参照ください。



※画面はタッチパネルになっています。指で押して操作してください。

5 コースを選択すると、肩位置の自動検出（センシング）を行う。

検出完了後、「スタート」を押すとコースが始まる。検出した肩位置が合わないときは、「再検知」または「手動調節」で調節する。



# マッサージコース動作中の調節

## 部位別エアースettingボタン

各部位のエアーマッサージの入/切を選択できます。

- 各部位を押すごとに「入」→「切」と切り替わります。

【例】肩・腰エアースettingを切にした場合



## 戻るボタン

マッサージを停止し、メニュー画面へ戻ることができます。



## エアースetting調節ボタン

エアーマッサージの強弱を3段階から調節できます。

- +/-ボタンで強さを調節します。


## 自動リクライニングボタン

押すと、設定した角度まで自動で背もたれが倒れ、脚部が上がります。


さらに押すと、背もたれが起き上がり、脚部が下がります。(収納)




マッサージは約15分で終了します。

マッサージを途中で終了する場合、 を押してください。

- 背もたれ部と脚部が自動で収納位置に戻り、もみ玉が収納位置まで移動し、終了します。

ただちにマッサージを停止する場合、 を押してください。

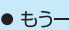- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- もう一度 を押すと、メニュー画面へ移行します。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- 使用前には、必ず背もたれ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。  
破れがあった場合は、どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。
- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服(ズボンなど)のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- 手や腕をマッサージするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。
- 次の人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人  
(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師と相談のうえ、使用する。(詳しくは取扱説明書を参照)
- お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。
- お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
- リクライニングするときは、必ず周囲(本体の後部、前部、側部、下部など)に人やペット、物がいないことを確認する。
- 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。