


TR-20 カンタン操作ガイド

主電源ランプ

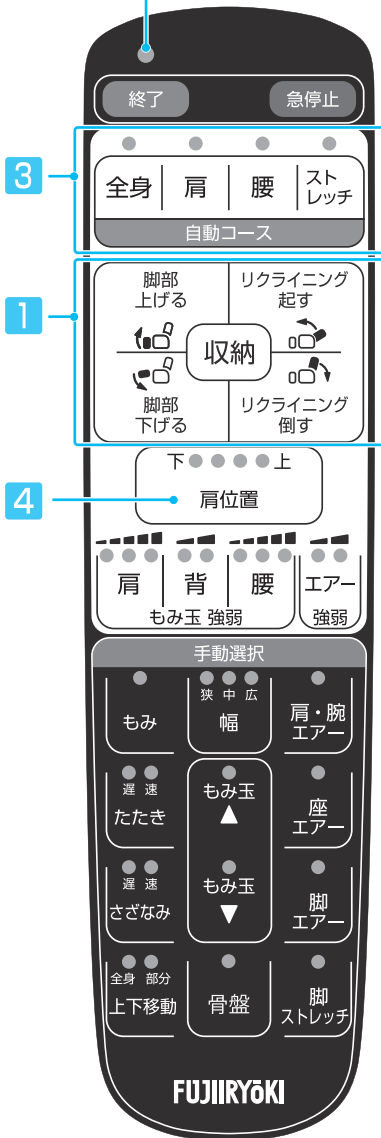

- 主電源ランプが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、本体の主電源を入れてください。
- 枕を後ろに回して、お座りください。

自動コース

1 背部と脚部をお好みの位置に合わせてください。

脚部： を押すと脚部が上がります。

を押すと脚部が下がります。

背部： を押すと背もたれ部が起き上がります。

を押すと背もたれ部が倒れ、脚部が上がります。

2 脚部右側の脚部反転レバーを引いて回転させ、お好みの状態(脚もみ、フットレスト)でお使いください。

3 **全身** **肩** **腰** **ストレッチ** からお好みのコースを選択してください。

※選択した自動コースのランプが点灯します。

4 自動コースを押すともみ玉が肩位置を自動的に検知します。検知した肩位置は、**肩位置** を押すと変更できます。



自動コースの種類

- 全身** 全身のコリや疲れをやわらげるコースです。
- 肩** 肩・背部のコリや疲れをやわらげるコースです。
- 腰** 腰のコリや疲れをやわらげるコースです。
- ストレッチ** ストレッチ動作を中心としたマッサージコースです。

自動コース動作中の調節

肩位置を調節したいとき

肩位置 でお好みの肩位置に調節します。
● 肩位置は、7段階から選択できます。

肩の強さを調節したいとき

肩 でお好みの強さに調節します。
● 肩強さは、5段階から選択できます。

背の強さを調節したいとき

背 でお好みの強さに調節します。
● 背強さは、2段階から選択できます。

腰の強さを調節したいとき

腰 でお好みの強さに調節します。
● 腰強さは、5段階から選択できます。

骨盤モードを「入・切」したいとき

骨盤 を押します。
● ボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。
※ 座エアーを「切」にすると、骨盤モードも同時に「切」に切り替わります。

エアースタレートを調節したいとき

エアースタレート でお好みの強さに調節します。
● エアースタレートの強さは、2段階から選択できます。
※ エアースタレートの強さは部位ごとに調節できません。

肩・腕・座・脚エアースタレートを「入・切」したいとき


肩・腕 エアースタレート **座 エアースタレート** **脚 エアースタレート** を押します。

● それぞれボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。
※ 脚ストレッチが「入」の状態では脚エアースタレートを「切」にすると、脚ストレッチも同時に「切」に切り替わります。

脚ストレッチをしたいとき

脚 ストレッチ を押します。

● ボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。
※ 脚ストレッチが「入」の状態では脚エアースタレートを「切」にすると、脚ストレッチも同時に「切」に切り替わります。

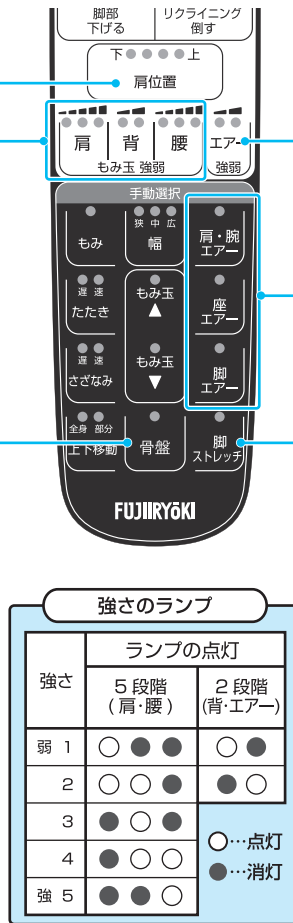

強さのランプ

強さ	ランプの点灯	
	5段階 (肩・腰)	2段階 (背・エアースタレート)
弱 1	○ ● ● ●	○ ●
2	○ ○ ● ●	● ○
3	● ○ ● ●	○ ● ●
4	● ○ ○ ●	○ ● ●
強 5	● ● ● ●	● ● ●

○…点灯
●…消灯

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 使用前には、必ず背もたれ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。
破れがあった場合は、どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。
- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- 手や腕をマッサージをするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。
- 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など)
- 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師に相談する。
(詳しくは取扱説明書を参照)
- お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。
- お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
- リクライニングするときは、必ず周囲（本体の後部、前部、側部、下部など）に人やペット、物がいないことを確認する。
- 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。