

FUJIROYOKI

家庭用

医療機器認証番号：219AGBZX00023A03
類別：機械器具 77 バイブレーター
管理医療機器 一般名称：家庭用エアマッサージ器

フットマッサージャー

品番：AM-22

取扱説明書

添付文書

保証書付
裏表紙にあります。

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用の前に、使い方	8
お手入れ・保管について	9
故障かなと思ったら、愛情点検	10
保証とアフターサービス、仕様	11
保証書	裏表紙



使用目的・効能または、効果

〔 あんま、マッサージの代用 〕
〔 一般家庭で使用する こと 〕

- このたびは当社のフットマッサージャーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見ることでできるところに必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。



安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

* 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

<絵表示の例>



	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 （左図は、分解禁止）
	● 記号は、強制（必ず守ること）を示します。 （左図は、電源プラグをコンセントから抜く）

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保存してください。



お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。



警告

	<p>次の人は、使用前に医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温 38℃以上（有熱期）の人 （例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。 衰弱しているとき。） ● 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
	<p>動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、勝手に修理せず、ご購入先または当社のお客様相談窓口にて点検・修理を依頼する。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは直ちに使用を中止する。</p>
	<p>使用前には、必ずマッサージ機構部分の布カバーが破れていないか確認し、その他の部分にも破れないかを確認する。（小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。）カバーが破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>次の人は、使用しない。身体に異常が起こる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師からマッサージを禁じられている人 （例：血栓 [そく（塞）栓] 症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
	<p>本体の布カバーを故意に外したり、破いたり、切り取ったりしない。 本体の生地が外れたり破れた状態で使用すると、衣服が巻き込まれけがのおそれがあります。</p>
	<p>交流 100V 以外の電源は、使用しない。火災や感電のおそれがあります。</p>
	<p>破損している電源コードや電源プラグを使用しない。 感電やショート、火災のおそれがあります。 破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
	<p>電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。 感電やショート・発火のおそれがあります。</p>
	<p>お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。 感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>お子様を本体の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。</p>

⚠ 警告

	浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しない。 感電・火災・故障・カビの原因になります。
	絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

	マッサージは1回15分以内とする。また同一箇所への連続使用はさける。 続けて使用する場合は、30分以上あけて使う。 長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となるおそれがあります。 ＜お願い＞1日の使用は30分以内にしてください。
	健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ● 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人 ● 骨や内臓に起因する腰痛の人 ● 打ち身やねんざしやすい人 ● 乗物酔いの激しい人 ● 過去に心臓や内臓の手術をされた人 守らないと健康をそこなうおそれがあります。
	本体は静かに設置する。床面に傷がつくおそれがあります。
	水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。
	操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。
	しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。
	使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。事故やけがのおそれがあります。
	使用中に身体に異常を感じたときや、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
	使用後は本体の電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 お子様のいたずらなどによる事故のおそれがあります。
	持ち運ぶときは、持ち手に手をかけ、両手で持ち上げて運ぶ。 守らないと落下により、故障やけがのおそれがあります。
	停電のときは直ちに電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故のおそれがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く。 感電や、ショートして発火の原因になります。
	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。 感電やけがのおそれがあります。

注意

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

- 傷つけない ● 破損させない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない ● 束ねない ● 重いものを載せない ● 挟み込まない

感電や火災、故障のおそれがあります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない。

気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

本器が動作中に脚を入れたり、抜いたりしない。

けがのおそれがあります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。

また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。

火災のおそれがあります。

布団や、毛布をかぶせて使用しない。

火災のおそれがあります。

キャスター付きの椅子や回転椅子などで使用しない。

椅子が回転したり、移動して、事故やけがのおそれがあります。

リクライニングのできる椅子を使用する場合は、マッサージを停止してから、リクライニングをしてください。

本体の上に座ったり、立ったりしない。

利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。

本体に脚を入れたまま立ち上がらない。故障やけがのおそれがあります。

マッサージをするときは、装飾品をつけたまま使用しない。けがのおそれがあります。

素肌で使用しない。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

脚以外には使用しない。体調不良やけがのおそれがあります。

マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。

けがのおそれがあります。

使用中は眠らない。無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。

ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。

変色・変形・ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

マッサージの目的以外には使用しない。故障や事故のおそれがあります。

本器を使用しながら他の治療器を同時に使用しない。故障や事故のおそれがあります。

木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずって移動しない。床面に傷がつくおそれがあります。

本体を倒したり、強い衝撃をあたえない。故障やけがのおそれがあります。

電源コードに脚を引っ掛けない。故障やけがのおそれがあります。

布カバーを外したり破れた状態では使用しない。




けがのおそれがあります。

本体背面のアームと本体接続部の穴には指を入れない。

けがをするおそれがあります。



各部のなまえとはたらき

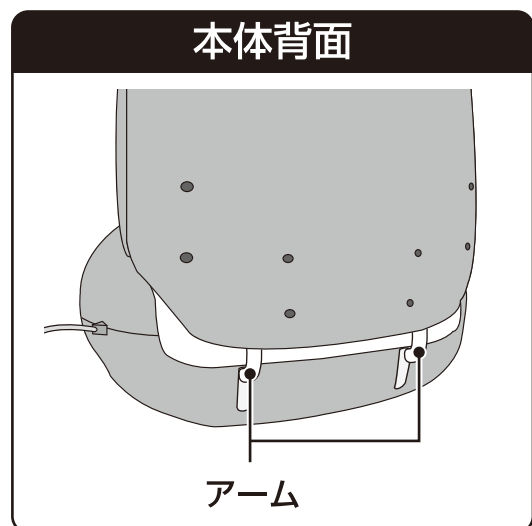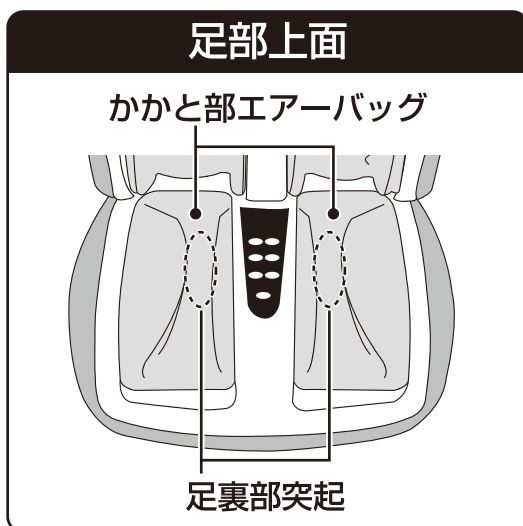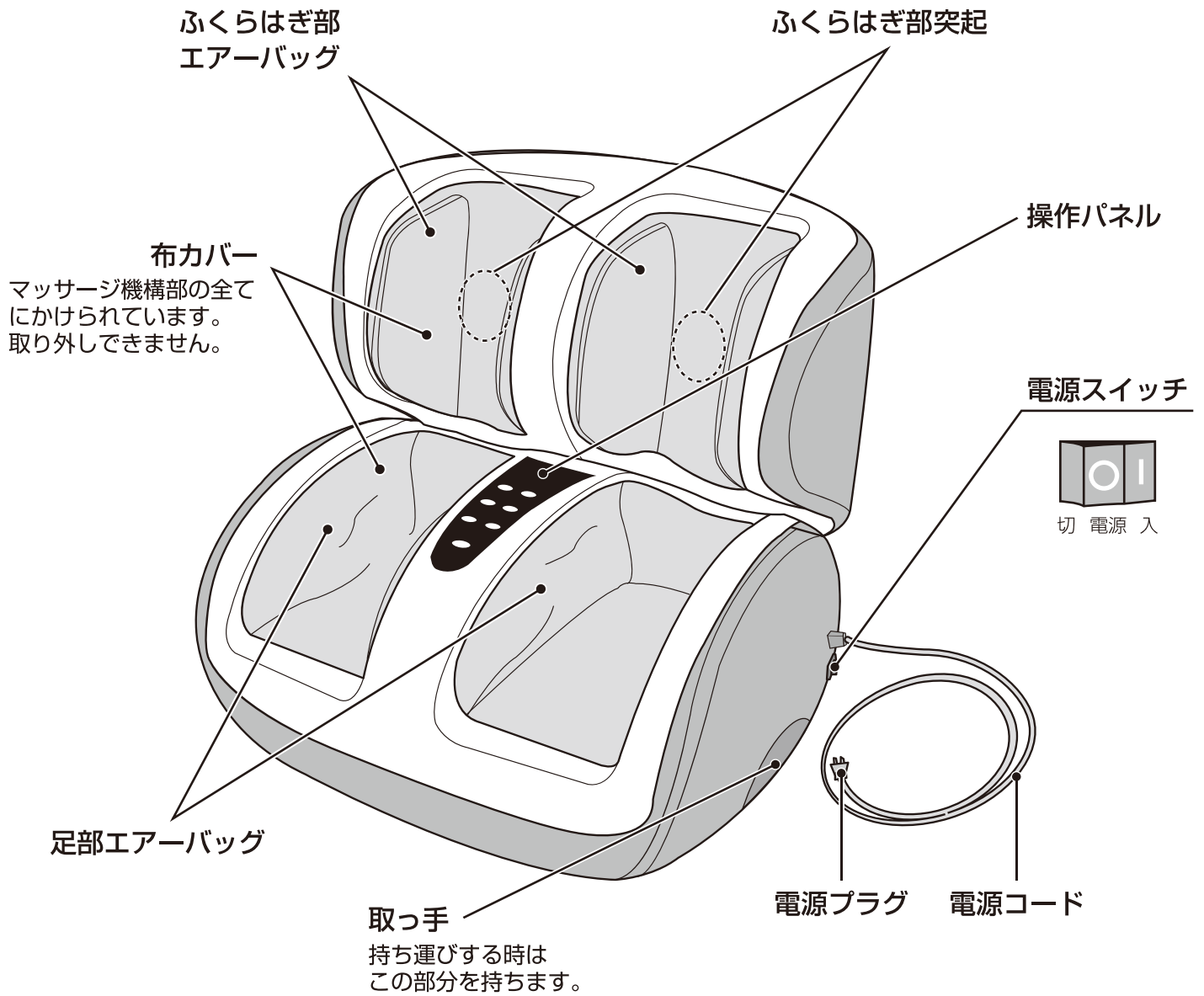

操作パネル

- 動作中はそれぞれ動作中のランプが点灯します。

電源ランプ

電源スイッチを「入」にするとランプが点灯します。

停止ボタン

すべて停止状態になります。

足裏コース

足・足裏・かかと部のエアーマッサージが自動で始まり、約15分で切れます。

●足裏 ボタン

足、かかと部のエアバッグでしっかり包み込み、足裏部突起を小刻みに押し上げる事で主に足裏を重点的にマッサージします。

強弱調節 ボタン

マッサージの強さを2段階で設定できます。
最初にマッサージコースを選択したとき「弱」のランプが点灯します。

全体コース

足・足裏・かかと部・ふくらはぎ部のエアーマッサージが自動で始まり、約15分で切れます。

●しっかり ボタン


足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグでしっかり包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を小刻みに押し上げる事で、主に足裏、ふくらはぎを重点的にマッサージします。

●もみほぐし ボタン

足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグで同時に包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を一定時間押し上げ、圧迫・開放を繰り返す事で、足、ふくらはぎ全体を念入りにもみマッサージします。

●やすらぎ ボタン

足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグで交互に包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を規則的に押し上げ、圧迫・開放を繰り返す事で、足、ふくらはぎ全体をやさしくマッサージします。

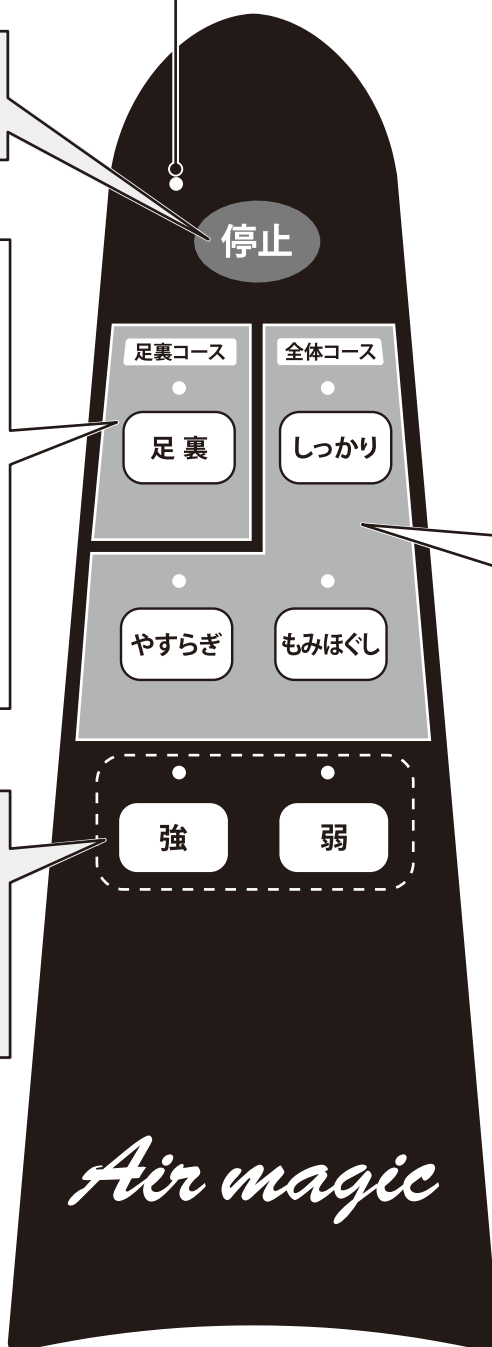

ご注意


- 電源を切るときは停止ボタンではなく、本体の電源スイッチでお切りください。
- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さないでください。故障のおそれがあります。

ご使用の前に

- 本体を安定した場所においてください。
- テレビやラジオなどの AV 機器から 1 m 以上離してください。また、同じコンセントを使用しないでください。AV 機器に雑音が入ることがあります。
- 布カバーが破れたり、はずれていないか確認してください。

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

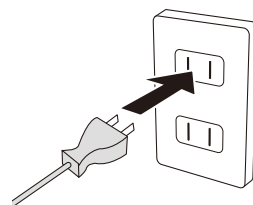

2 電源スイッチを入れます。

操作パネルの電源ランプが点灯します。




切 電源入




3 足を本体にのせます。

イスなどに座り、下のイラストのように足を置きます。

使用例

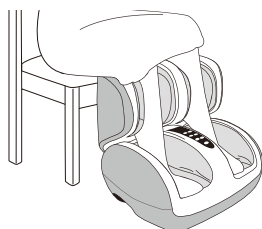

かかとが下図のように、本体後側に当たるように置いてください。

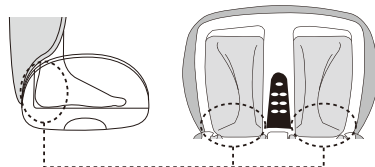

注意

- キャスター付きのイスに座って使用しないでください。転倒によるけがをするおそれがあります。
- 床に座って使用しないでください。故障、けがをするおそれがあります。

4 お好みのマッサージコースを選択します。

操作パネル (P7 参照) のボタンを押して、お好みのマッサージコースを選択します。止めるときは **停止** を押します。

足裏コース

足裏

足、かかと部のエアバッグでしっかり包み込み、足裏部突起を小刻みに押し上げる事で、主に足裏を重点的にマッサージします。

しっかり

足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグでしっかり包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を小刻みに押し上げる事で、主に足裏、ふくらはぎを重点的にマッサージします。

もみほぐし

足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグで同時に包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を一定時間押し上げ、圧迫・開放を繰り返す事で、足、ふくらはぎ全体を念入りにもみマッサージします。

やすらぎ

足、かかと、ふくらはぎ部のエアバッグで交互に包み込み、足裏、ふくらはぎ部突起を規則的に押し上げ、圧迫・開放を繰り返す事で、足、ふくらはぎ全体をやさしくマッサージします。

全体コース

5 マッサージの強さを選択します。

強 弱 ボタンを押して強さを調節します。
選択された強さに切り替わり、ランプで表示します。

6 タイマーがはたらき、マッサージが自動的に終わります。


● 各コースともに動作開始から約 15 分経過すると停止します。

動作中にコース変更されると、タイマーが一度リセットされ
15 分以上動作するおそれがありますのでご注意ください。

マッサージを途中でやめたいときは **停止** ボタンを押します。

● エアーバッグからエアーが抜け停止します。

7 電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

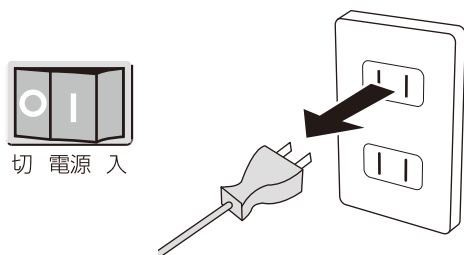


注意

- マッサージは 1 回 15 分以内とする。
また同一箇所への連続使用はさける。
続けて使用する場合は、30 分以上あけて使う。
長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要
以上の刺激となるおそれがあります。 **!**
- <お願い> 1日の使用は30分以内にしてください。

お手入れ・保管について

お手入れ

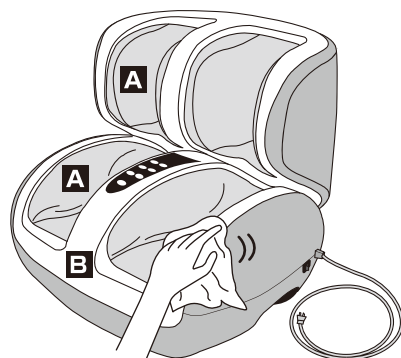

A 布カバー一部

- ① 水または中性洗剤をしみこませてよくしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- ② 自然乾燥させよく乾かしてください。(布カバーは取り外しできません。)

B 本体(プラスチック部)

- ① 乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ② 汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみこませてよくしぼった布で拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。

警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。 **!**

注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・
漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

保管

- 汚れやホコリを取った後、湿気の少ないところに保管してください。カビやシミが発生するおそれがあります。
- しばらくご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。

注意

- 直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの近くの高
温になる所、湿気・ホコリの多い所には保管しないで
ください。変色・変質のおそれがあります。

故障かなと思ったら

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた
動作しない	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを「入」にしてください。
	タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか？	もう一度スイッチを操作してください。続けて使用する場合は30分以上あけてから使用してください。
正常に動作しない	電源の状態等により誤作動している可能性があります。	電源スイッチを「切」にし、電源プラグを差し直してください。
動作時の音が気になる	エアバッグがふくらむときの音、しばむときの音などの動作音。	構造上やむをえず発生するもので機能などに影響はありません。

⚠ 警告

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

愛情点検について

⚠ 注意

- しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客さま相談窓口までお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

- 保証書（取扱説明書の裏表紙にあります。）
お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

- 補修用性能部品の保有期間
当社はこのマッサージ器の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

10ページに従ってしらべていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

- 保証期間中に修理を依頼される場合
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

- その他ご不明な場合
アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

仕様

品名	フットマッサージャー	
品番	AM-22	
類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般的名称	家庭用エアマッサージ器	
医療機器認証番号	219AGBZX00023A03	
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	15分
	消費電力 (50/60Hz)	50W
オートタイマー	約 15分	
エアーマッサージ空気圧	最大 約 45kPa	
寸法	幅 550mm× 奥行 530mm× 高さ 460mm	
質量	約 12.5kg	
電源コード長さ	約 2.0m	
材質	本体：ABS樹脂 布カバー：ポリエステル 94% ポリウレタン 6%	
製造元	株式会社惣田製作所 滋賀県彦根市鳥居本町 492	
製造販売元	株式会社惣田製作所 滋賀県彦根市鳥居本町 492	

FUJI RYŌKI フットマッサージャー 保証書

持込修理

商品名	フットマッサージャー AM-22	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間	保証対象	本体 (但し、消耗品は除く)
ご購入者	フリガナ	お買い上げ日	年 月 日
	ご芳名		様
	ご住所	〒	ご購入先
	電話 ()		

【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の呈示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

- ※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-027612

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

0120 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mail での受け付けも行っております。

FAX番号 06-4793-0818

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

発売元



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2014年10月24日 (第1版)