


温熱マット

Wellshape

ウェルシェイプ

BH-053

もくじ

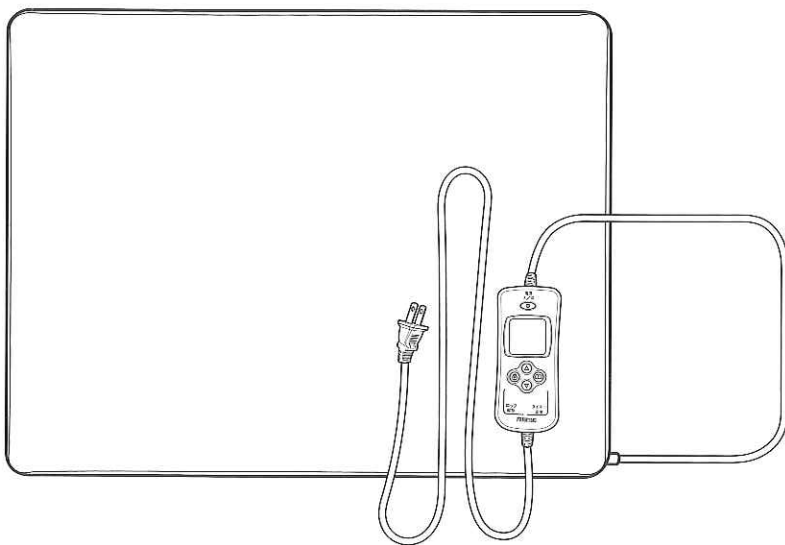



| | |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1~3 |
| 特長・仕様 | 3 |
| 各部のなまえとはたらき | 4 |
| 使い方 | 5 |
| お手入れ方法 | 6 |
| 故障かなと思ったら | 6 |
| 修理・サービスと保証 | 裏表紙 |

- このたびは当社の温熱マットBH-053をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に安全上のご注意(1~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いいたします。




安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




| | |
|---|--|
|  警告 | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。 |
|  注意 | 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または*物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。 |

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。




〈絵表示の例〉

| | |
|---|---|
|  | △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は一般的な警告・注意) |
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。 |



- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

| | |
|---|---|
|  警告 | |
|  | 次の人は、使用前に医師に相談すること。 <ul style="list-style-type: none"> ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 妊娠中や出産直後の人 ● 温度を感じにくい障害の人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人 ● 急性疾患[とう痛性]患者の人 ● 上記以外に身体に特に異常を感じているとき ● 心臓や呼吸器に障害のある人 ● 安静を必要とする人 ● 貧血症の人 ● 変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 |
|  | 乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。 低温やけどや脱水症状などをする恐れがあります。 |


警告




| | |
|--|--|
|  | 使用中、気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。症状が悪くなることがあります。 |
| | 通電しなくなったり、異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼すること。感電や漏電・ショートなどによる火災事故の恐れがあります。 |
|  | 高温で長時間使用しないこと。 低温やけどの恐れがあります。 |
| | 比較的低い温度(40～45度前後)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。 (次のような方は特にご注意を) お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・過労の激しい方。糖尿病などの疾患のある方。 |
|  | 絶対に改造しないこと。また、ご自分で分解したり、修理をしないこと。 火災・感電・異常動作によるけがの恐れがあります。 |


注意

| | |
|---|--|
|  | 交流100V以外は使用しないこと。 火災・感電の原因になります。 |
| | 洗濯物の乾燥など、暖房目的以外には使用しないこと。 火災や発火の恐れがあります。 |
| | 他の暖房器具との併用はしないこと。 あんか、こたつ、電気毛布、電気カーペットなどと併用しますと、本体の温度が高くなり、故障や、やけどの恐れがあります。 |
| | 折りたたんだり、重ねたりした状態で使用しないこと。 やけどや感電の恐れがあります。 |
| | 犬や猫などのペットには使用しないこと。 ペットが本体やコードを傷め、火災や発火の原因となる恐れがあります。 |
| | マットの上に重い物をのせたり、局部的に大きな圧力がかかる物を置かないこと。 内部が破損する恐れがあります。 |
| | 就寝用暖房器具としては使用しないこと。 低温やけどの恐れがあります。 |
|  | 浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと。 感電・火災・故障・カビのおそれがあります。 |

安全上のご注意

⚠ 注意
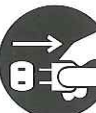
| | |
|--|--|
|  | 電源コードを傷めないこと。電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたりしないこと。また重いものを載せたり、特に移動中は挟み込んだりしないこと。 電源コードが破損し、火災・感電の恐れがあります。 |
| | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
|  | しばらく使用しなかった場合、機器が正常に動作することを確認してから使用すること。 事故の原因になります。 |
|  | 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電・火災の原因になります。 |
| | お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと。 感電やけがの恐れがあります。 |
| | 停電の時は直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。 再通電されたとき事故の原因になります。 |
| | 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くこと。また、濡れた手で抜き差ししないこと。 感電やショートして発火することがあります。 |

特長

- カバー表面のセラミックが遠赤外線を発生し、身体を温めます。
- 急速加熱ですばやく加熱し、内部の風化珊瑚でおだやかに身体を温めます。
- 脱臭に利用される備長炭と古来より神秘の石とされる水晶を混入しています。
- ヒーターの温度・タイマー設定には、あやまってボタンに触れて変わらないよう、ロック機能が付いています。

仕様

| | |
|--------|-----------------|
| 品名・品番 | ウェルシェイプ BH-053 |
| 本体寸法 | 幅62cm × 奥行48cm |
| 電圧/周波数 | AC-100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |
| タイマー | 0.5～8時間(30分単位) |
| 制御温度 | 30～53℃ |

各部のなまえとはたらき

本体

リモコン本体

ロックボタン

・時間と温度の設定をロックする、又はロック解除します。

電源プラグ

電源ボタン

・電源の入り切りを行います。

表示パネル

上設定ボタン

・タイマー時間や設定温度を上げます。

選択ボタン

・タイマー時間、又は設定温度を選択します。

下設定ボタン

・タイマー時間や設定温度を下げます。

マット本体

マットカバー

注意タグ

・このタグがある面が身体に当たるようにしてください。

表示パネル

セットアップ表示

・ロック解除中、表示されます。

時間マーク

温度マーク

ヒーター表示

・加熱中、表示します。

ロック表示


・設定のロック・解除を表示します。

タイマー表示

・タイマーの設定時間を表示します。

温度表示

・その時の温度、設定時の温度を表示します。

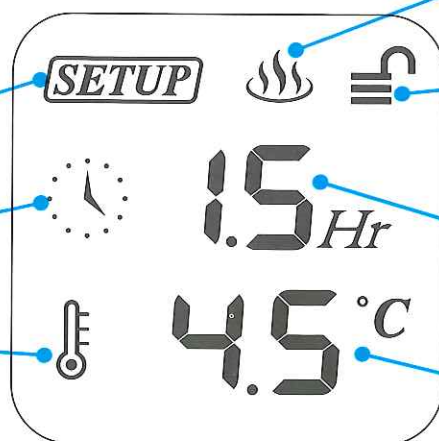

使い方


準備

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2.マットカバーの注意タグが付いている側を身体に当てます。

操作

1.電源ボタンを押す


パネルが表示されます。
(電源ON時は45℃、1.5時間に設定されています)
温度が5回点滅した後、この時のマットの温度が表示されます。

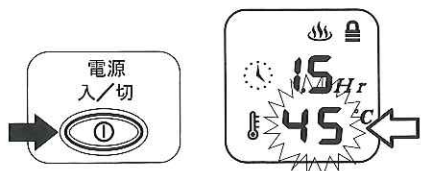

2.上設定ボタン、又は下設定ボタンを押し、温度を設定します


設定されると温度が4回点滅し、この時のマットの温度が表示されます。

<お願い>
低めの温度での使用をおすすめします。

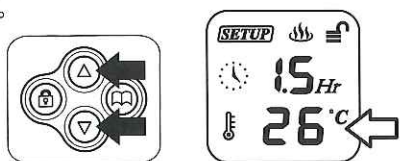


3.次に、選択ボタンを押す

タイマー時間が5回点滅して止まります。

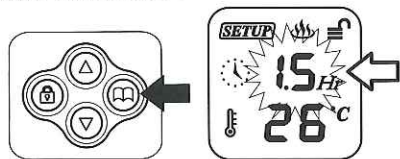


4.上設定ボタン、又は下設定ボタンを押し、タイマー時間を設定します

タイマー時間は0.5時間単位で設定できます。設定されると、タイマー時間が4回点滅して止まります。

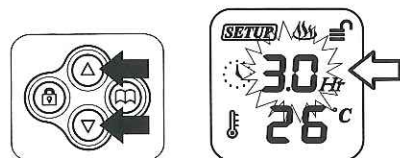

5.次に、ロックボタンを2秒ほど押す


ピー音が鳴り、設定がロックされます。

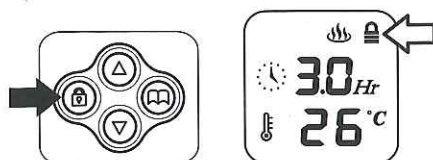

6.設定ロック完了


ロックされると、上下ボタン、設定ボタンを押しても設定は変わりません。
*電源入り切りはロックされません。

7.設定時間がくると、ピー音が鳴り、パネルの表示が消え、電源が自動的に切れます(ヒーターが停止)

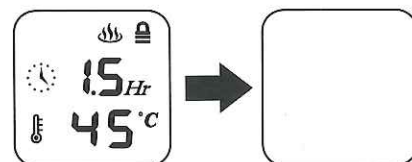

お願い

*途中で設定を変える場合は、ロックボタンを2秒ほど押し続けてロックを解除してから、再度設定しなおしてください。ロックしたままでは、再設定はできません。

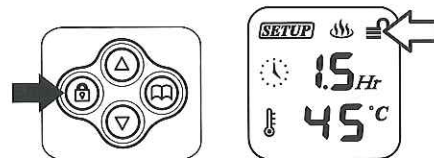


*リモコンには記憶機能がついており、コンセントを抜かずに再度電源ボタンを押すと、前回設定した表示内容で始まります。

*ロックをせず、使用することもできます。その際は途中で上下ボタン、設定ボタンを押すと設定が変わってしまいますので、ご注意ください。

お手入れ方法・故障かなと思ったら

カバーの取外し・取付け方

1. 本体カバーのファスナーを開き、本体と本体カバーをむすんでいる入り口近くのひも(2箇所)を解いてください。
2. 本体カバーを裏返ししながら、本体と本体カバーをむすんでいる奥のひも(2箇所)を解き、本体カバーを取り外してください。
3. 取り付ける際は、取り外し方と逆の手順で本体と本体カバーをしっかりむすびながら、取り付けてください。

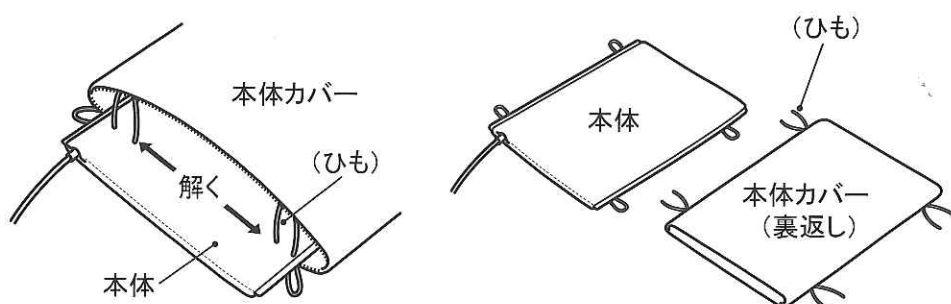

お手入れ方法

[本体カバーのお手入れ]

本体カバーが汚れた場合は固く絞った濡れ雑巾で、表面を軽く拭いてください。
 汚れが落ちない場合は、洗濯機を使わず、かるく手もみ洗い程度に洗ってください。
 洗濯の際は、他の洗濯物といっしょに洗濯しないでください。
 漂白剤は使わないでください。

[本体のお手入れ]

本体はサンゴや備長炭、水晶などが入っていますので、布表面に粉末状が出てくる場合があります。その場合は、叩かないで表面のほこりを取り除く程度にしてください。

故障かなと思ったら

●ご使用中に異常を生じたときは次の点をお調べください。

| こんなときは | ここを点検してください | |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| 電源が入らない | 電源コードのプラグが抜けていませんか。 | 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。 |
| 温まらない | タイマーの設定時間が終了していませんか。 | 電源ボタンを押して、再度設定してください。 |
| | 設定温度が低くありませんか。 | 設定温度を高く設定しなおしてください。 |
| ボタンを押しても表示が変わらない | 設定がロックされていませんか。 | ロックボタンを押し、ロックを解除してください。 |

修理・サービスと保証

愛情点検



愛情点検

長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご購入先、またはフジ医療器に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスについて

6ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから、ご購入先にご連絡ください。またこのとき、品番BH-053とお買い上げ時期をお知らせください。

①保証書(別に添付してあります)

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり、「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

②保証期間中に修理を依頼される場合

この商品の保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。

(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

③保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。

修理により、製品機能が維持できる場合は、ご要望に従い有料にて修理いたします。


④その他ご不明な場合

保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、ご購入先、またはフジ医療器サービス網までお問い合わせください。

●補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談窓口

 フリーダイヤル

0120-027612

受付：月曜～金曜 午前10時～12時
午後 1時～ 5時

※但し、祝祭日、年末年始、夏期休暇は
休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号：06-6644-9103

E-mail：fj_soudansitu@fujiiryo.co.jp

※FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様への
ご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

| | |
|--------|-------|
| ご購入年月日 | 年 月 日 |
| ご購入店名 | TEL |

 美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

大阪市浪速区日本橋東3-15-1

2006年12月8日(第1版)