

# FUJIROYOKI

## ウェルナイト カールロック DX

温熱・電位治療器

### CL-3030

#### 取扱説明書

安全上のご注意	1
特長	6
本体の名称	7
ご使用の前に	8
コントローラーの名称と機能	9
ご使用方法	11
温熱を使用される場合	11
低温やけどについて	12
温熱/電位を使用される場合	13
コースを使用される場合	14
電位を使用される場合	15
ご使用後は	16
本体の折りたたみ方	16
愛情点検	17
お手入れ方法	17
アフターサービスについて	18
仕様	18
フジ医療器サービス網	裏表紙



#### 効果・効能

##### 温熱効果

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 胃腸の動きを活発にする
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和




##### 電位効果

- 肩こり
- 慢性便秘
- 不眠症
- 頭痛

- このたびは当社のウェルナイトカールロックDXをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。




# （安全上のご注意）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表 示	表示の意味
 <b>危険</b>	人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容が記載されています。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例

記 号	記号の意味と例
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



## ⚠ 危険

### 電位治療器において

下記のような医用電子機器などとの併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。



禁止

- ペースメーカー等の体内埋込型  
医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用  
電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけでのご使用はお避けください。



禁止

低温やけどや脱水症状などを起こす恐れがあります。

## ⚠ 警告

次の人は、必ず医師とご相談の上で使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 急性疾患の人
- 心臓に障害のある人
- 知覚障害のある人
- 妊娠している人
- 安静を必要とする人
- 熱の高い人
- 低温やけどをした人
- 適用部位の皮膚に異常のある人



相談

分解や修理・改造を行なわないでください。

発火したり、事故や故障の原因になります。



分解禁止

### 温熱治療器において

比較的低い温度(40~60°C)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



禁止

(次のような方は特にご注意を)  
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や、深酒・疲労の激しい人。

### 温熱治療器において

温度調節「高」目盛りで長時間使用しないでください。

低温やけどの恐れがあります。



禁止

# （安全上のご注意）

## ⚠ 注意

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。



禁止



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

プラグを持って抜く



電源コードを傷つけたり破損したり加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止



使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。

プラグを抜く



交流100V以外では使用しないでください。

火災や感電の原因になります。




禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



感電やケガをすることがあります。

プラグを抜く

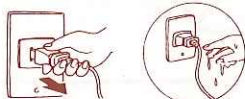

作動しなくなったり、異常がある場合（こげ臭いなど）は、電源プラグを抜いてください。

異常のまま使用を続けると、感電や火災の原因

になります。お買い上げの販売店、または「フジ医療器サービス網」にご相談ください。



プラグを抜く



## ⚠️ 注意

使用中に身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。



症状が悪くなることがあります。

使用中止

コントローラーに水やお茶などをこぼさないでください。



禁止

万一こぼした時は過熱の恐れがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

治療目的以外には使用しないでください。



禁止

事故や故障の原因になります。

他の暖房器具との併用はしないでください。



禁止

湯たんぽ、あんか、こたつ、電気毛布などと併用しますと、本体の一部だけ温度が高くなり故障や、やけどの原因となります。

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。



禁止

感電・引火の原因になります。

浴室等の湿気の多い場所では使用しないでください。



禁止

感電及び故障の原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。



禁止

折りたたんだまま使用しないでください。

コントローラーの上に掛ぶとんなどをかけて使用しないでください。



禁止

異常発熱や故障の原因となります。

# (安全上のご注意)

## ⚠ 注意

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。



禁止

ペットが本体やコードをいため、火災の原因となることがあります。

寝たばこはおやめください。



禁止

火災の原因となります。

針やピンで治療器本体を突き刺したり、刃物で傷を付けないでください。



禁止

発熱体をいため発火の原因となります。

重いもの・局部的に大きな圧力がかかるものを置かないでください。



禁止

事故や故障の原因になります。

中芯を扱う際は手袋等の保護具を使用してください。



保護具を使用

中芯の白いフェルト(不織布)の接合部(融着部)の硬い箇所皮膚をこすらないようにしてください。場合によってはスリ傷を負う場合があります。

中芯の白いフェルト(不織布)を傷つけないようにお取扱いください。



傷つけないように

白いフェルトが伸びたり破れたりするとカールロックの太い繊維が露出し、皮膚等を刺激・負傷することがあります。

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。



確実に

ショートや発火の恐れがあります。

# (特長)

1

## 温熱・電位効果が全身に

温熱効果で体を温め、血行をよくし、筋肉の疲れをとり、胃腸の働きを活発にします。又、電位効果によって体へマイナス電位がひろがり、不眠症・肩こり・頭痛・慢性便秘に効果があります。

2

## 「カールロック」使用で自然&衛生的な眠り

適度なスプリング機能がある「カールロック」を採用。背骨が自然に伸び理想的な姿勢で、おやすみいただけます。又、通気性や放湿性もバツグン。取り出して、洗濯・日干しもできます。

3

## コントローラーはリモコンスイッチになってらくらく操作

スイッチ機能とタイマーをハンディなリモコンスイッチにドッキング。お気軽にお使いいただけます。

4

## 温熱・電位の切替えはワンタッチ

スイッチを温熱又は、電位に合わせるだけの簡単操作で切替えOK。2つの治療器機能を体調に合わせてお選びいただけます。

5

## 「全面→周囲」で、爽やかな目覚め

「温熱」・「温熱/電位」時に「全面→周囲」を選択すると約3時間後には、中央部のヒーターのみ通電が切れ、周囲部のヒーターだけが働くため気持ちよくお眠りいただけます。「温熱/電位」時の最後の1時間は「電位モード」になり、ヒーターの通電は全て切れます。

6

## 快適温度をキープ

スライド式温度調節スイッチで約25～48℃まで、お好みの温度をキープ。又、オレンジのバックライトで暗がりでも、簡単に調節できます。

7

## コンパクトな3つ折り収納

3つ折りにたたんで収納できるので、場所をとらず、押し入れにもコンパクトに収納できます。

8


## 4重安全装置付

- 自動温度調節回路
- ヒーター線短絡検知回路
- 感熱線断線検知回路
- 電流ヒューズ



# (本体の名称)

## 各部の名称

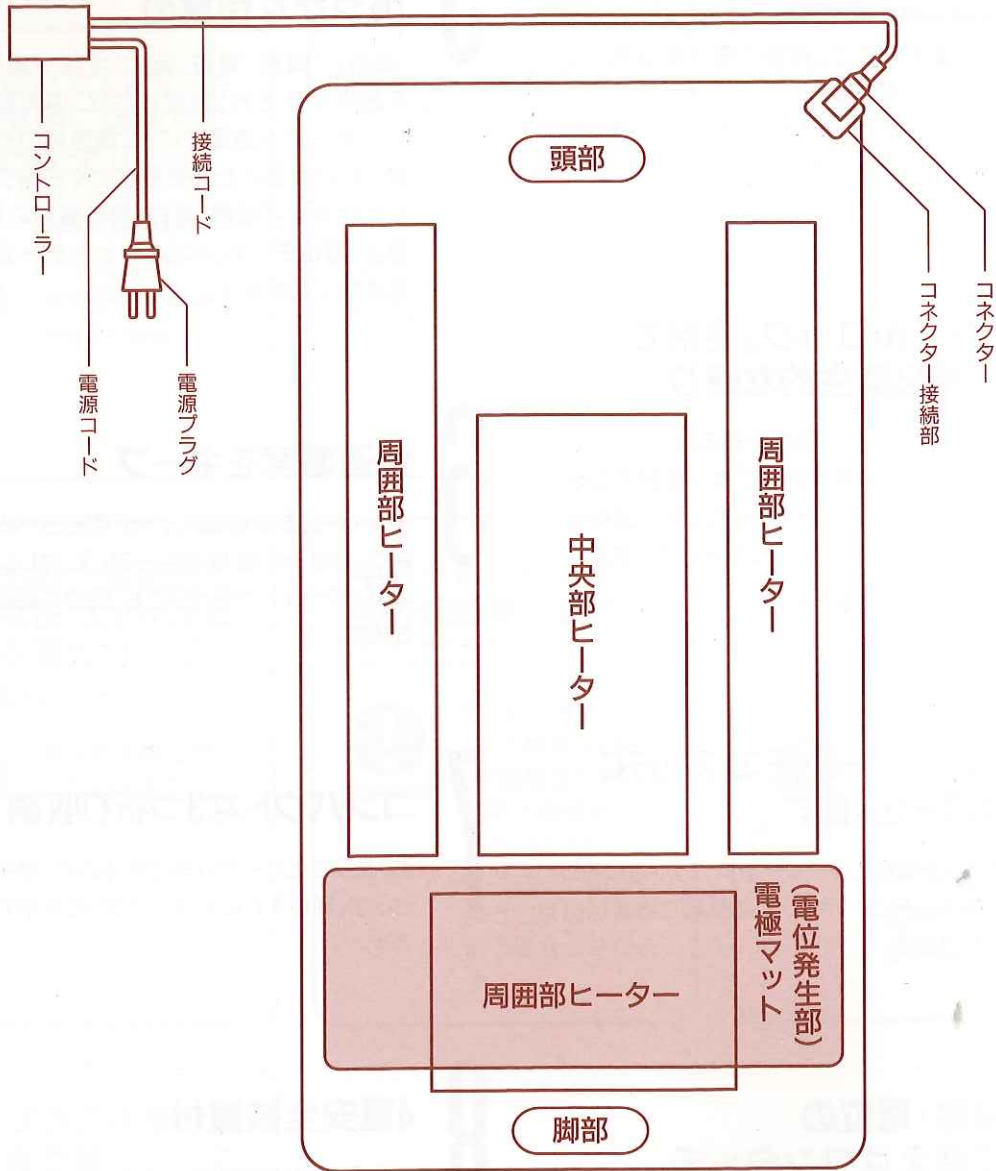

### リバーシブル

生地がリバーシブルタイプのオールシーズンで使用になっていますので、夏の季節などは裏面で快適にお過ごしいただけます。




# （ご使用前に）

1


## コネクターの接続

本体を広げ接続コードのコネクターを図のように、突起部が合うように本体のコネクター接続部に、キッチリと最後まで差し込んでください。

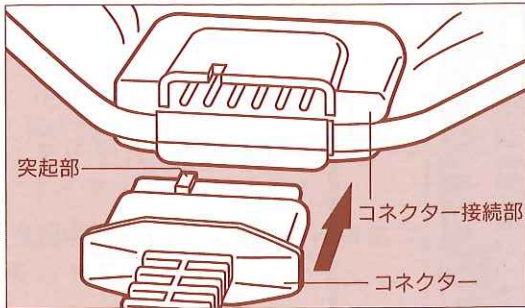

2

電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに差し込んでください。

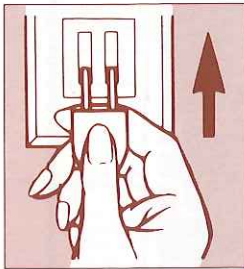

3

頭部左側にコネクター接続部がくるように敷いてご使用ください。  
裏面でご使用の場合はコネクター接続部が右側にきます。

**お願い** 本体が汚れないように付属の専用シートなどをかぶせてご使用ください。



## ⚠ 注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電、ショート、  
発火の原因になります。

禁止



## ⚠ 注意

電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。



禁止



## ⚠ 注意

電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。


ショートや発火の恐れがあります。



確実に

# （コントローラーの名称と

## 各部の名称

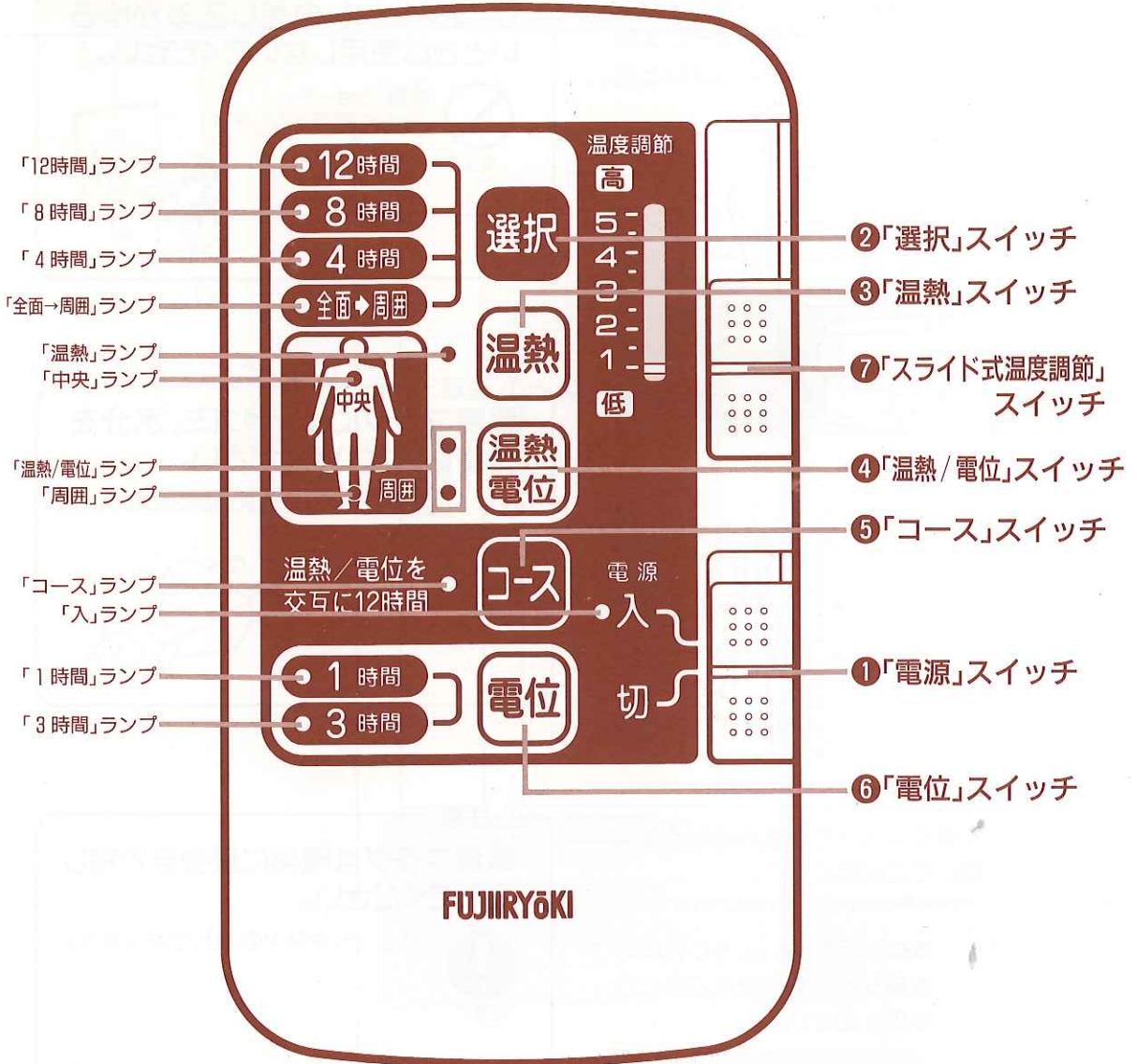

### 動作記憶

「電源」スイッチを切ってもそれ以前の動作状態を記憶していますので、次に「電源」スイッチを入れた時、自動的に前回と同じ動作状態となります。記憶時間は3日間で、記憶がない時には、「電源」スイッチを入れると、タイマーは「12時間」、モードは「温熱」となります。



## 機能

### ①「電源」スイッチ


電源「入」「切」を行う。

電源を「入」にした場合「入」ランプ以外に、「温熱」ランプ・「12時間」ランプが点灯します。

### ②「選択」スイッチ

タイマー時間を選択する。

4種類の時間設定をお選びいただけます。

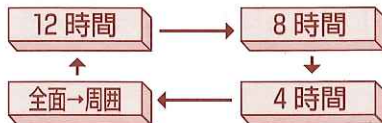

### ③「温熱」スイッチ

温熱モードとなる。

ヒーターの部分のみ動作を行い電床板は停止しています。


### ④「温熱 / 電位」スイッチ

温熱動作後、最後の1時間自動的に電位に切替わる。



### ⑤「コース」スイッチ

温熱と電位を自動的に交互に切替え作動する。

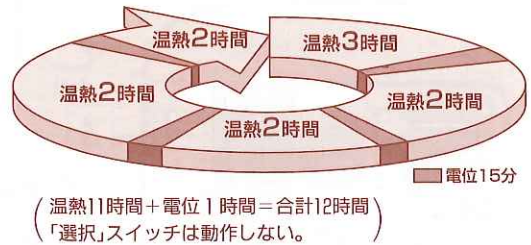

### ⑥「電位」スイッチ

電位モードとなる。

一回押すと1時間、もう一回押すと3時間に切替わります。

(「選択」スイッチは動作しない。)



### ⑦「スライド式温度調節」スイッチ

スライドスイッチを動かして温度を調節する。

- ご使用される前にスイッチを「高」にセットして、布団をあらかじめ温めておいてください。(ご使用になる約30～60分前) その際、布団の温まりを早くするため、掛布団を掛けておいてください。
- 本体が湿度を含んでいる時や室温が低い時は温まるのに時間がかかる場合があります。


#### お願い

「低」の位置では、温度がなかなか上がらない場合がありますのでご注意ください。  
「低」で約25℃、「高」で約46℃が目安の温度です。

# （ご使用方法）

（ご使用前に）8ページを必ずお読みください。


## 温熱を使用される場合

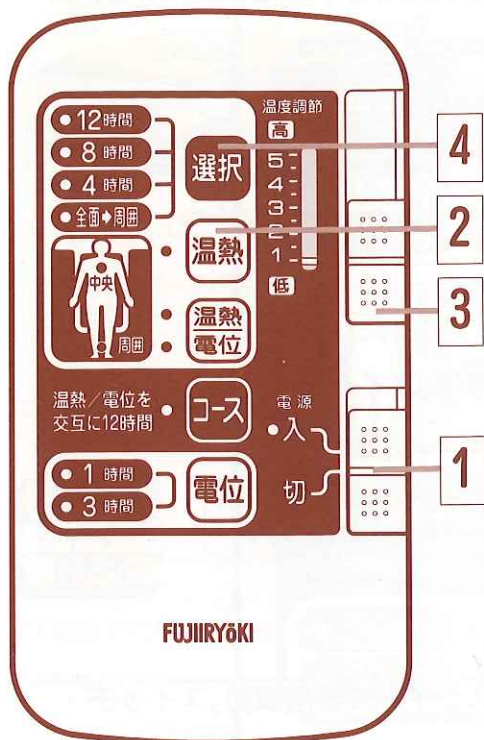

**1** 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** 温熱スイッチを押してください。

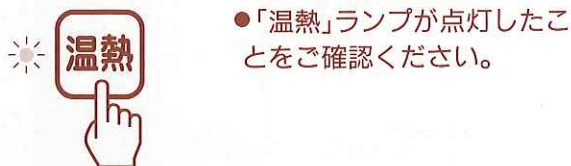

- 「温熱」ランプが点灯したことをご確認ください。


**3** スライド式温度調節スイッチで温度をセットしてください。



10ページ 7参照

- 「低」で約25°C、「高」で約48°Cが目安の温度です。


**4** 選択スイッチでお好みの時間にセットしてください。

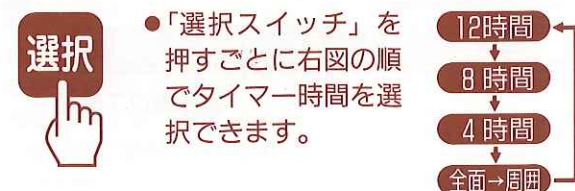

- 「選択スイッチ」を押すごとに右図の順でタイマー時間を選択できます。

### 動作説明

「全面→周囲」:最初はヒーターの全面(中央・周囲)が動作しますが、3時間後中央が動作を停止し、12時間後周囲も動作を停止します。

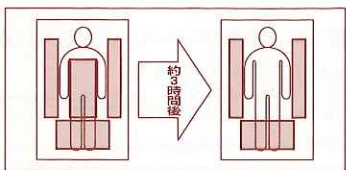

(3時間後、中央部のヒーターのみが切れます。)



⚠危険

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。



禁止

低温やけどや脱水症状などを起こす恐れがあります。

⚠警告

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



禁止

(次のような方は特にご注意ください)

お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や、深酒・疲労の激しい人。

⚠警告

温度調節「強」目盛りで長時間使用しないでください。



禁止

低温やけどの恐れがあります。

⚠警告

次の人は、必ず医師とご相談の上ご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 熱の高い人
- 心臓に障害のある人
- 適用部位の皮膚に異常のある人
- 妊娠している人



相談

- 急性疾患の人
- 知覚障害のある人
- 安静を必要とする人
- 低温やけどをした人

⚠注意

他の暖房器具との併用はしないでください。



禁止

湯たんぽ、あんか、こたつ、電気毛布などと併用しますと、本体の一部だけ温度が高くなり故障や、やけどの原因となります。

## 低温やけどについて


- 一般にやけどといえば火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度(40℃~60℃)のものでも長時間皮ふの同じ個所にふれていると(状態や個人差によっても異なりますが)「低温やけど」をおこすことがあります。
- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一赤くはれたり、水ぶくれができたり、やけどをした場合には直ちに専門医の診断を受けてください。
- 次のようなかたが使用するときには、周囲のかたがあらかじめ低めの温度に調節したり、使用状態に異常がないか常に注意してください。
  - \* 疲労の激しいときや、酒、睡眠薬、ねむ気を誘うかぜ薬を使用されたとき。
  - \* お年寄り、ご病人、からだの不自由なかた。
  - \* 皮ふ感覚の弱っているかた。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがありますので低めの温度にするなどして、使用温度に注意してください。

# （ご使用方法）

（ご使用の前に）8ページを必ずお読みください。

## 温熱/電位を使用される場合

温熱動作後、自動的に電位の治療モードへ切替わる機能です。

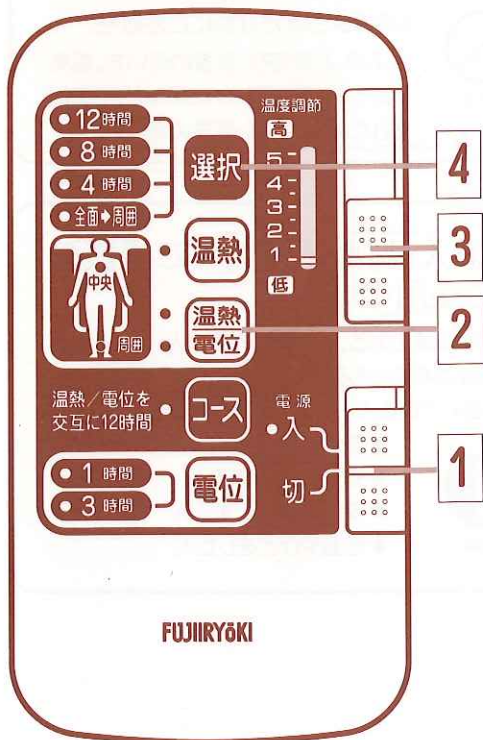

**1** 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** 温熱 / 電位スイッチを押してください。


- 「温熱 / 電位」の温熱側のランプが点灯したことをご確認ください。



温熱モード終了後、温熱側のランプが消え、自動的に電位側ランプが点灯し、電位モードに切替わります。

**3** スライド式温度調節スイッチで温度をセットしてください。

10ページ 7参照

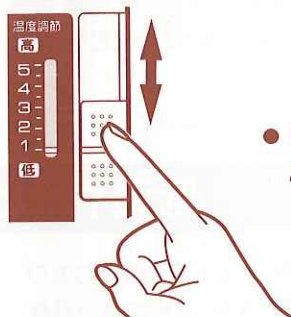

- 「低」で約25℃、「高」で約48℃が目安の温度です。

**4** 選択スイッチでお好みの時間にセットしてください。



- 「選択スイッチ」を押すごとに右図の順でタイマー時間を選択できます。



### 動作説明

温熱 / 電位時の「選択」スイッチ  
温熱動作後、最後の1時間自動的に電位に切替わります。






(ご使用の前に) **8ページ** を  
必ずお読みください。

## コースを使用される場合

温熱と電位が自動的に交互に切替わる機能です。

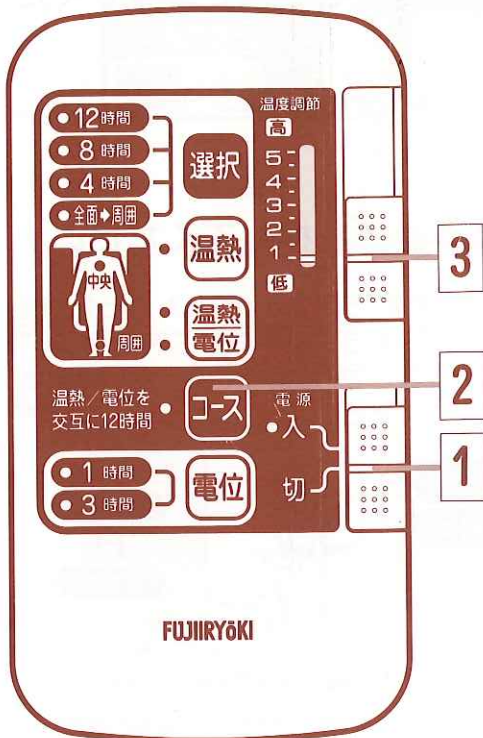

**1** 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

**2** コーススイッチを押してください。

- 「コース」ランプが点灯したことをご確認ください。




- 「温熱」と「電位」が自動的に、交互に切替わります。

- 選択スイッチは動作しません。

**3** スライド式温度調節スイッチで温度をセットしてください。

**10ページ** ⑦参照

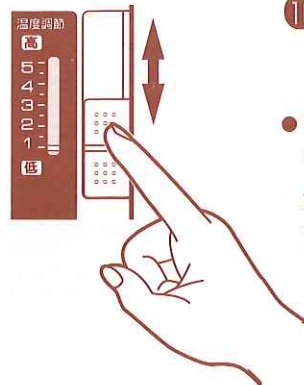

- 「低」で約25°C、  
「高」で約48°C  
が目安の温度  
です。

### 動作説明

#### 「コース」スイッチ

温熱と電位を自動的に交互に切替え作動します。




(温熱11時間+電位1時間=合計12時間)

# （ご使用方法）

（ご使用の前に）8ページを必ずお読みください。

## 電位を使用される場合

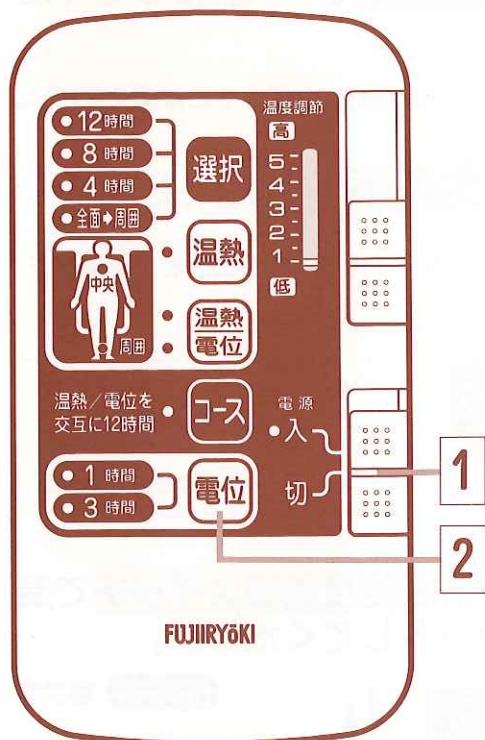

1 電源スイッチを「入」にしてください。

- 「入」ランプが点灯したことをご確認ください。

2 電位スイッチを押してください。

- 電位の「1時間」ランプが点灯したことをご確認ください。もう一回押すと「3時間」ランプが点灯しますので、お好みのタイマー時間にセットしてください。



- 選択スイッチは動作しません。
- 「温熱」は働きませんので布団は温もりません。

### ⚠危険

下記のような医用電子機器などとの併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。



禁止

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器

### ⚠警告

次の人は、必ず医師とご相談の上ご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 熱の高い人
- 心臓に障害のある人
- 適用部位の皮膚に異常のある人
- 妊娠している人
- 急性疾患の人
- 知覚障害のある人
- 安静を必要とする人
- 低温やけどをした人



相談




# （ご使用後は）

1 電源スイッチを「切」にしてください。



2 電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントより引き抜いてください。

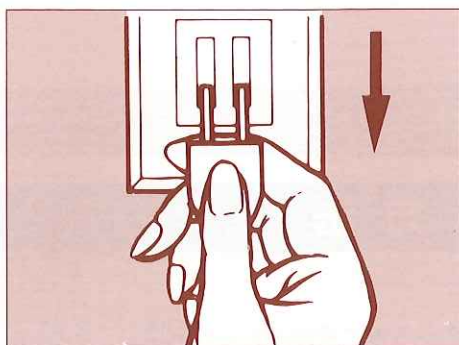

⚠注意

使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。




プラグを抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。



## 本体の折りたたみ方

接続コードのコネクターがコネクター接続部から抜けていることを確認し、本体脚部の方から図のように折りたたんでください。

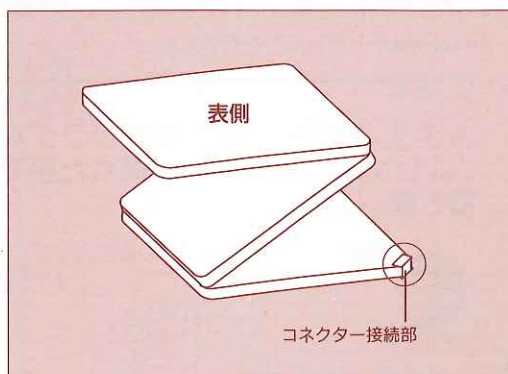

## 愛情点検



### 愛情点検

長年ご使用の場合は  
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 温度調節がきかず、異常に熱い
- その他の異常がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店又はフジ医療器サービス網に点検・修理をご相談ください。

**お願い** しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

### 警告



分解、修理は行なわないで  
ください。

分解禁止 発火したり、事故や故障の原因になります。

## お手入れ方法

- 本体側布地（表地：綿100%、裏地：綿100%）
- 表面布地部分のお手入れは、中性洗剤または衣服専用のシミ抜き程度のものをお使いください。（使いすぎると布地をいためることがあります。）
- コントローラーは乾いた布でふいてください。
- 機器は清潔にし、温度・湿気・ほこりなどの悪影響が少ない所に保管してください。
- 長時間保管するときは「電源」スイッチを入れ、スライド式温度調節スイッチを「高」にし、よく乾燥させた後保管してください。
- 本体は絶対に洗濯しないでください。故障や事故の原因となります。
- 時々日陰干しにしてください。

### 注意

お手入れの際は必ず電気プラグを  
コンセントから抜く。また、ぬれた手で  
抜き差ししないでください。



プラグを抜く

感電やケガをすることがあります。



### 注意

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫  
剤をかけないでください。

感電・引火の原因になります。



禁止





## アフターサービスについて

異常がある時は、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

### ①保証書(別に添付してあります)

お買い上げの際に保証書を販売店からお受け取りになり、「お買い上げ日」「販売店名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ②保証期間中に修理を依頼される場合

この商品の保証期間は、お買い上げの日から1年間です。お買い上げの販売店にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

### ③保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずお買い上げの販売店にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

### ④その他ご不明な場合

保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げの販売店、又はフジ医療器サービス網迄お問い合わせください。

### ●補修用性能部品の保存期間

当社はこの製品の補修用性能部品の、製造打切り後、最低6年保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 仕様

品名	温熱・電位治療器	素材	〈表地〉綿100% 〈裏地〉綿100% 芯材(繊維スプリング体、商品名カールロック)
形式	CL-3030	電気代 (温熱「強」の時、 1時間のコスト)	約3円60銭 ※1kWh28円での計算
電源	AC100V(50/60Hz)		
消費電力	(温熱時)130W (電位時)5W以下	コード有効長	電源コード(2芯)約2m
サイズ(約)	幅100×長さ200×厚み7(cm)	付属品	専用シート
重量	約7.5kg	医療用具 承認番号	20700BZZ00791000

# フジ医療器サービス網

本社	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋5-5-21	☎ 06-6644-5233
札幌営業所	〒003-0013	札幌市白石区中央3条2-1-50 M32BLD	☎ 011-825-0051
帯広営業所	〒080-0013	帯広市西3条南15-11	☎ 0155-25-3817
青森営業所	〒030-0845	青森市緑2-14-1	☎ 017-775-3122
盛岡営業所	〒020-0173	岩手郡滝沢村滝沢字穴口57-9	☎ 019-646-7878
秋田営業所	〒011-0901	秋田市寺内字三千刈269	☎ 018-866-3757
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町2-9-19	☎ 022-235-6330
山形営業所	〒990-2331	山形市飯田西1-2-14 ベルソーレ山形1F	☎ 023-626-4171
福島営業所	〒963-0205	郡山市堤1-131-2 ドウエルY	☎ 024-961-1195
東京営業所	〒165-0034	中野区大和町1-11-12	☎ 03-3330-2421
山梨営業所	〒400-0047	甲府市德行4-6-10	☎ 055-231-2491
埼玉営業所	〒330-0021	大宮市東大宮5-29-8	☎ 048-686-9181
千葉営業所	〒260-0842	千葉市中央区南町3-2-1 青木ビル2F	☎ 043-209-2008
神奈川営業所	〒243-0017	厚木市栄町1-12-17	☎ 046-296-0125
高崎営業所	〒370-0047	高崎市高砂町71-10	☎ 027-324-1292
長野営業所	〒390-0842	松本市征矢野2-7-16 上條ビル	☎ 0263-25-1833
新潟営業所	〒940-0064	長岡市殿町1-1-5 近藤ビル3F	☎ 0258-37-2633
土浦営業所	〒305-0021	つくば市古来1452-1 五頭ビル2FB	☎ 0298-57-6539
栃木営業所	〒321-0901	宇都宮市平出町1291-1 グランドコーポ・ヒライデ1F	☎ 028-662-2881
名古屋営業所	〒452-0805	名古屋市中区市場木町472	☎ 052-504-7901
静岡営業所	〒422-8021	静岡市小島313-1	☎ 054-264-8448
金沢営業所	〒920-0362	金沢市古府1-217 3F	☎ 076-269-4422
富山営業所	〒939-8064	富山市赤田590-1	☎ 076-420-0251
三重営業所	〒510-8012	四日市市茂福町24-5	☎ 0593-61-2556
岐阜営業所	〒500-8212	岐阜市日野南4-17-3	☎ 058-249-3787
福井営業所	〒910-0011	福井市経田1-304	☎ 0776-30-1536
大阪営業所	〒556-0006	大阪市浪速区日本橋東3-16-26 第1三水ビル2F	☎ 06-6644-5251
神戸営業所	〒673-0003	明石市鳥羽字三味西1394-1	☎ 078-921-0678
京都営業所	〒601-8133	京都市南区上鳥羽薬田23	☎ 075-672-3370
和歌山営業所	〒640-8272	和歌山市砂山南2-7-18	☎ 073-427-2115
広島営業所	〒734-0015	広島市南区字品御幸3-2-2 安井マンション1F	☎ 082-251-8232
岡山営業所	〒703-8216	岡山市栄甘62-3	☎ 086-279-9117
松江営業所	〒690-0011	松江市東津田町1731-10	☎ 0852-31-2601
鳥取出張所	〒680-0821	鳥取市瓦町707	☎ 0857-29-6888
山口営業所	〒754-0002	吉敷郡小郡町大字下郷3374-3	☎ 083-972-7761
高松営業所	〒761-8071	高松市伏石町317-1	☎ 087-868-2260
松山営業所	〒791-1114	松山市井門町556-1	☎ 089-958-1281
高知営業所	〒781-5102	高知市大津平田甲514-1	☎ 088-866-5222
福岡営業所	〒816-0088	福岡市博多区板付6-12-63	☎ 092-501-6882
九州商事営業所	〒816-0088	福岡市博多区板付6-12-63	☎ 092-575-1241
長崎営業所	〒851-2126	西彼杵郡長与町吉無田郷5040-10	☎ 095-883-5480
熊本営業所	〒862-0935	熊本市御領5-2-109	☎ 096-389-3130
大分営業所	〒870-0882	大分市竹の上4組	☎ 097-545-2966
宮崎営業所	〒880-0867	宮崎市瀬頭2丁目11-1	☎ 0985-22-1503
鹿児島営業所	〒891-0113	鹿児島市東谷山3-16-4	☎ 099-260-5311
沖縄出張所	〒902-0073	那覇市上間370-1 エンゼルハイツ1F	☎ 098-853-4120

※住所・電話番号は、ご通知なく変更することがありますのでご了承ください。

## お客様相談窓口

☎ フリーダイヤル

**0120-027612**

受付：月曜～金曜 午前10時～12時  
午後 1時～ 5時

\*但し、祝祭日は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号：06-6644-9103

E-mail：fj\_soudansitu@fujjiro.co.jp

\*FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名	TEL		



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**



# ウェルナイトカールロックDX CL-3030

## 温熱を使用される場合について

本器の温熱回路は、速熱方式を採用してる為、運転直後は設定温度までヒーターがフルパワーで動作します。

緩やかな温度上昇がお好みの場合には、解除もできます。

### 「緩やかな温度上昇」に設定する場合（速熱方式を解除する場合）


電源が切れた状態から温熱スイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にしてください。

- \* 「温熱ランプ」が5秒間点滅し、その後点灯に切替わります。
- \* 動作記憶により、以後電源を入れる毎に「温熱ランプ」が5秒間点滅し、点灯に切替わります。（「緩やかな温度上昇」の設定になっています）
- \* 動作記憶の記憶時間は3日間です、3日間本器を使用しなかった場合は通常運転に戻ります。

### 「緩やかな温度上昇」の設定を解除する場合（通常の運転状態に戻す場合）

設定時と同じ操作で、温熱スイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にしてください。

- \* 「温熱ランプ」がすぐに点灯します。（通常の運転状態になります）

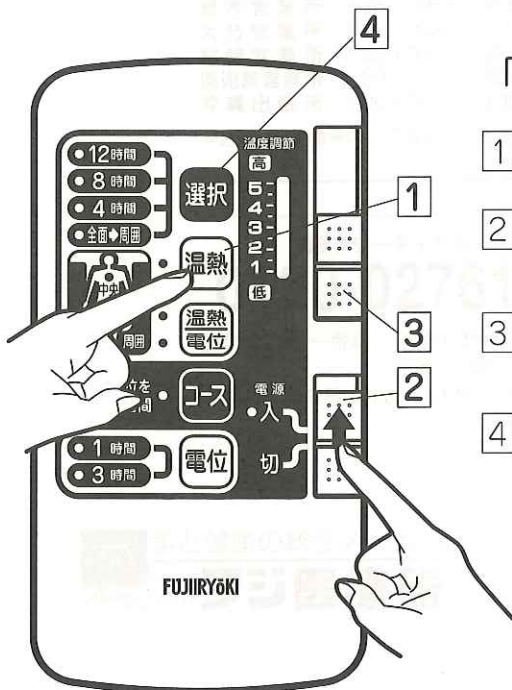

### 「緩やかな温度上昇」設定及び運転手順

- 1 温熱スイッチを押しながら
- 2 電源スイッチを「入」にする  
「温熱ランプ」が5秒間点滅し点灯に切替わる
- 3 スライド式温度調節スイッチで温度をセットする
- 4 選択スイッチでお好みの時間をセットする