

修理サービスと保証

警告



分解禁止

分解・改造・修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。ご購入先に
点検・修理を依頼してください。

修理サービスを依頼する前に

使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

こんなとき	次の点をお調べください。	
動作しない	電源プラグがぬけていませんか。 リモコンの「スタート」ボタンを押しましたか。 タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか。	電源プラグをコンセントへ入れてください。 リモコンの「スタート」ボタンを押してください。 もう一度リモコン操作をしてください。
リモコンが正常に動作しない	電源の状態などにより誤動作している可能性があります。	電源プラグをいったんコンセントから抜き、もう一度電源プラグを差し込んでください。
座部や背部のエアバッグが膨らまない または、膨らみが悪い	座部とふくらはぎ部の間のホースが折れ曲がったり、ねじれていませんか。	座部とふくらはぎ部の結合部分に、無理な力が加わると、ホースが曲がったりねじれたりします。本体をセットし直してください。
動作時の音が気になる	マッサージ部位の切り替えのカチ音、エアーを排気するときのプシュー音、ポンプが動くときのブーン音です。	構造上発生するもので、機能などに影響はありません。

修理サービスについて

上の表でお調べいただいても異常があるときは、ご購入先にご相談ください。

このとき、形名CM-500とお買い上げ時期をお知らせください。

その他ご不明な点は、ご購入先またはお近くのフジ医療器サービス網にご相談ください。

エアーマッサージ器CM-500の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ちきり後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

一般家庭用以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。保証期間経過後の修理については、ご購入先にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証（保証書）について

このエアーマッサージ器には「保証書」がついています。

保証書は、必ず「ご購入先・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。

万一、故障したときには、保証書の記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。

保証期間はお買い上げから1年間です。

お客様相談窓口

フリーダイヤル

0120-027612

受付：月曜～金曜 午前10時～12時
午後1時～5時

但し、祝祭日は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号：06-6644-9103

E-mail：fj_soudansitu@fujiiryo.co.jp

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

お客様へ...ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	

2005年3月15日（新様式第2版）

FUJIIRYOKI



取扱説明書 家庭用

エアーマッサージ器

形名 **CM-500**

医療用具許可番号：14BY5034

器具機械77パイプレーター 家庭用エアーマッサージ器



もくじ


安全上のご注意	1～4
特長	5
各部のなまえとはたらき	6
ご使用前に	7～9
マッサージの種類と内容	10
マッサージのしかた	11～12
お手入れ	13
収納	13
保管のしかた	14
仕様	14
修理サービスと保証	15

このたびは、エアーマッサージ器CM-500をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書を必ずお受け取りください。（別添）

包装に使用している段ボールは、分別のうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。

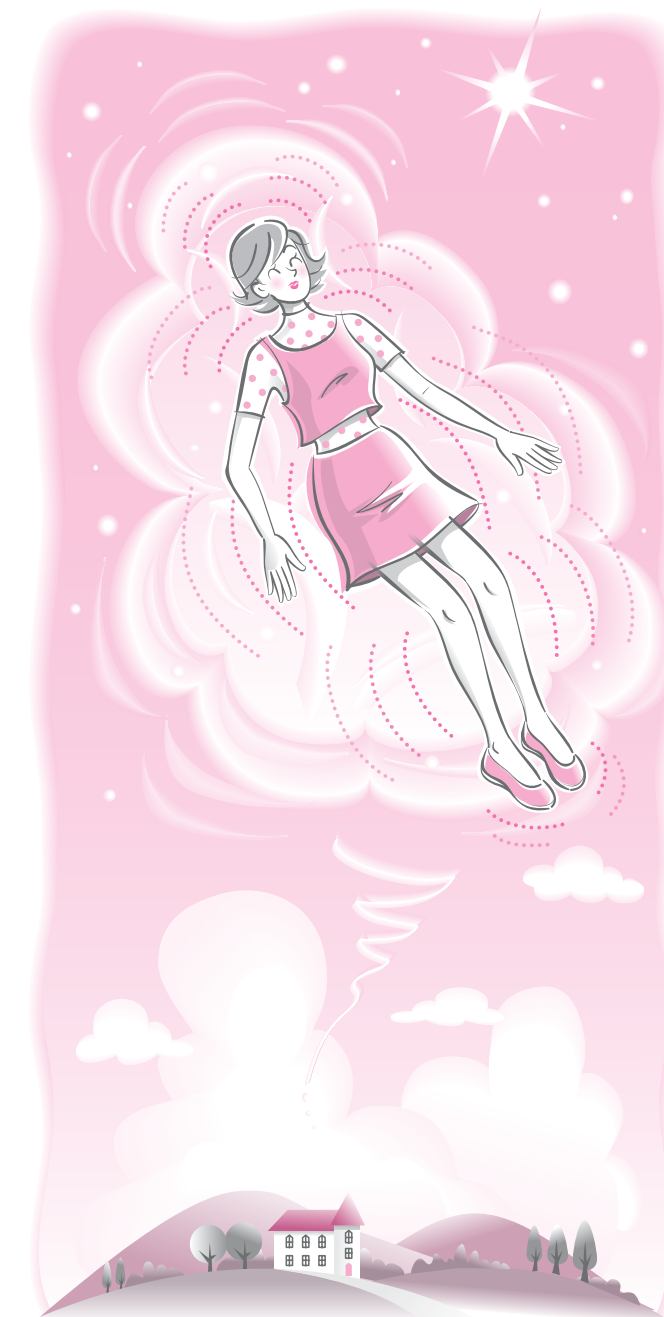

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**




〒556-0005








大阪市浪速区日本橋5-5-21









安全上のご注意









必ずお守りください

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	図記号の説明
<p>警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。</p>	<p> 禁止 ○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</p>
<p>注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。</p>	<p> 指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</p>
<p>*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。</p> <p>*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。</p> <p>*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。</p>	<p> 注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</p>

警告	
<p> 禁止 次の人は、使用しない 身体に異常が起こる場合があります。</p> <p>医師からマッサージを禁じられている人 （例）血栓症、重度の動脈りゅう、急性静脈りゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など</p>	<p> 禁止 子供だけで使わせたり、遊ばせたりしない また、幼児を近づけない 感電・けがの原因になります。</p>
<p> 医師に相談 次の人は、必ず医師と相談の上使用する 身体に異常が起こる場合があります。</p> <p>悪性腫瘍のある人 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人 体温38 以上（有熱期）の人 （急性炎症症状、けん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき） 施療部位に創傷のある人 急性疾患（疼痛性）のある人 骨粗しょう症の人 捻挫、肉離れなど炎症性の人 知覚障害の人 心臓に障害のある人 ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内の植込み型医用電子機器を使用している人 背骨に異常のある人や曲がっている人 貧血症の人 かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人 安静を必要とする人 上記以外に特に身体に異常を感じている人</p>	<p> 分解禁止 分解・改造・修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 ご購入先に点検・修理を依頼してください。</p> <p> 禁止 本体足部、ふくらはぎ部、座・背部の上に立ったり、座ったり、強い衝撃を与えない けが・故障の原因になります。</p> <p> 禁止 カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態では使用しない けが・感電の原因になります。直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、ご購入先に修理を依頼してください。</p> <p> 確認する ふくらはぎ部の角度を調節するときは、まわりに子供や動物がいないことを確認する ふくらはぎ部と本体足部の間に手や指がはさまれ、けがの原因になります。</p>






警告	
<p> 禁止 キャスター付の椅子や回転椅子などで使用しない 椅子が回転したり移動して、けがの原因になります。リクライニングのできる椅子を使用する場合は、マッサージを停止してから、リクライニングしてください。</p>	<p> 禁止 電源コードを傷めない 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、椅子でつぶしたり、重い物を載せたり、はさみ込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p> 禁止 浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない 感電・火災・故障・カビ発生の原因になります。</p>
<p> プラグを抜く 動かなくなったり、異常を感じたときは、すぐに電源プラグを抜く 漏電・ショートなどによる火災・感電の原因になります。ご購入先に点検・修理を依頼してください。</p>	<p> 禁止 子供を本体の上で遊ばせない けが・故障の原因になります。</p>
<p> 禁止 自分で意志表示できない人、自分で操作できない人には使用させない 感電・けがの原因になります。</p>	<p> 交流100V 交流100Vで使用する 守らないと火災・感電の原因になります。</p>

注意	
<p> 禁止 マッサージ以外の目的で使用しない けが・故障の原因になります。</p>	<p> 禁止 本製品をご使用になりながら他の治療器を同時に使用しない けがの原因になります。</p>
<p> 禁止 頭・肘・腹部には使用しない けがの原因になります。</p>	<p> ベルトで固定する 座・背部を椅子に取り付けるときは、必ずベルトで固定する 使用中、座・背部がずれて転倒し、けがの原因になります。</p>
<p> 禁止 手などを本体足部へ入れて使用しない けがの原因になります。</p>	<p> 両手で持つ 持ち運ぶときは、本体足部側面の指かかり部を両手で持って運ぶ 守らないと落下によるけが・故障の原因になります。</p>
<p> 禁止 生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突きさしたりしない けが・故障の原因になります。</p>	<p> 禁止 本体を転がしたり、強い衝撃を与えない けが・故障の原因になります。</p>

⚠ 注意

 <p>2人以上で使用しない けが・故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>本製品が動作中に足を入れない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>木床や畳など傷つきやすい床面で引きず っての移動はしない 床面に傷がつきます。傷つきやすい床面では、マ ットなどを敷いて設置してください。</p> <p>禁止</p>	 <p>食後すぐに使用しない 気分が悪くなることがあります。</p> <p>禁止</p>
 <p>本体やリモコンに水やお茶をこぼさない 感電・故障の原因になります。 万一、こぼしたときは使用を中止し、ご購入先に 点検・修理を依頼してください。</p> <p>禁止</p>	 <p>ぬれた体やぬれた足で使ったり、ぬれた 手で操作しない 感電・故障の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>
 <p>リモコンコード、電源コードに足を引っ 掛けない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>リモコンに重い物を置いたり、落としたり、踏 みつけたり、強い衝撃を与えない 感電・破損・故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>マッサージが強すぎると感じたときは、 強さを弱めるか、使用を中止する マッサージを強くすると、筋肉や神経を傷める原 因になります。 特に高齢者や骨が弱いと思われるかたは、十分気 をつけてください。</p> <p>使用を 中止する</p>	 <p>ベンジン・シンナーなどで拭いたり、殺 虫剤をかけない 感電・引火の原因になります。 汚れは、やわらかい乾いた布でふいてください。 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤にひたした 布をかたくしぼってからふいてください。</p> <p>禁止</p>
 <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに先端の電源プラグを持って引き 抜く 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>プラグを 抜く</p>	 <p>電源プラグは確実に最後まで差し込み、 ピンやごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>窓の近くや転倒しやすい物のそばに設置 しない けがの原因や家財を傷めることがあります。</p> <p>禁止</p>	 <p>リモコンコードで本体を引っ張らない 故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>足に装飾品をつけて使用しない けが・故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>使用中以外は電源プラグをコンセントから 抜く ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因 になります。</p> <p>プラグを 抜く</p>


⚠ 注意

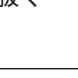 <p>足を本体足部に入れたまま立ち上がらない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>マッサージは1回15分以内にする 長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になり ます。 1日の使用は30分以内にしてください。</p> <p>15分以内</p>
 <p>マッサージの使用中は眠らない 無意識での使用は、けがや体調不良の原因になり ます。</p> <p>禁止</p>	 <p>マッサージ使用中に電源プラグを抜かない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>付属品および指定の別売品以外は使用し ない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>ふくらはぎ部、座・背部を持って運ばな い 落下してけが・故障・エアホースの破損の原因 になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>布団の中・ホットカーペットの上・暖房 器具の近くでは使用しない また、たばこを吸いながら使用しない 火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>水平な場所で使用する 不安定な場所では本製品が転倒し事故・故障の原 因になります。</p> <p>水平な場所</p>
 <p>落雷の可能性があるときは、直ちに使用 を中止して、停止ボタンを押し、電源プ ラグをコンセントから抜く 感電・故障の原因になります。</p> <p>プラグを 抜く</p>	 <p>使用中に身体に異常が現れたり、感じた ときには、直ちに使用を中止し医師に相 談する 守らないと事故や体調不良の原因になります。</p> <p>医師に相談</p>
 <p>停電のときは、直ちに使用を中止して、 停止ボタンを押し、電源プラグをコンセ ントから抜く 再通電されたときに事故の原因になります。</p> <p>プラグを 抜く</p>	 <p>お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントから抜く 感電・けがの原因になります。</p> <p>プラグを 抜く</p>
 <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>	 <p>足カバーを取りかえるときに、ふくらは ぎ部と本体足部の間に手をはさまない けがの原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>椅子やソファなどに本製品を設置したまま長時間放置しない 色移りするおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	

特長

脚をほぐす

「コース」マッサージでは多彩な動作により、脚全体（足裏・ふくらはぎ）をほぐします。
「部位」マッサージでは、特徴のある動作を繰り返すことにより、脚全体（足裏・ふくらはぎ）をマッサージします。

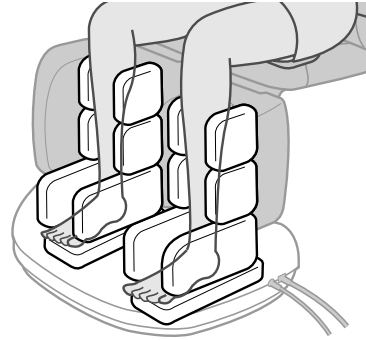

全身をほぐす

「コース」マッサージで全身をほぐします。
「部位」マッサージで脚部と座・背の使い分けをしながら、集中的にご希望の部位をマッサージします。




いろいろな場面で
いろいろな使いかた


手軽に
椅子にセットして手軽に使用できます。

リラックスして
ソファにセットして、リラックスした状態で使用できます。

楽に
あおむけの姿勢で、リラックスしながら効果的な背面マッサージがおこなえます。

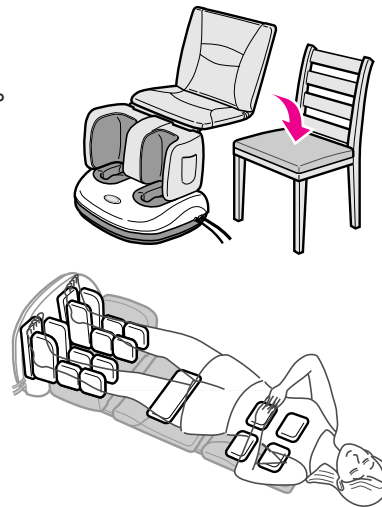

効能・効果

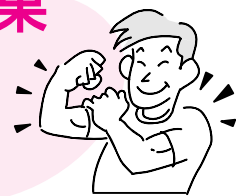


あんま・マッサージの代用
疲労回復 筋肉のこりをほぐす
血行をよくする 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
筋肉の疲れをとる


各部のなまえとはたらき

本体

このマークの中の数字は掲載ページを示しています。

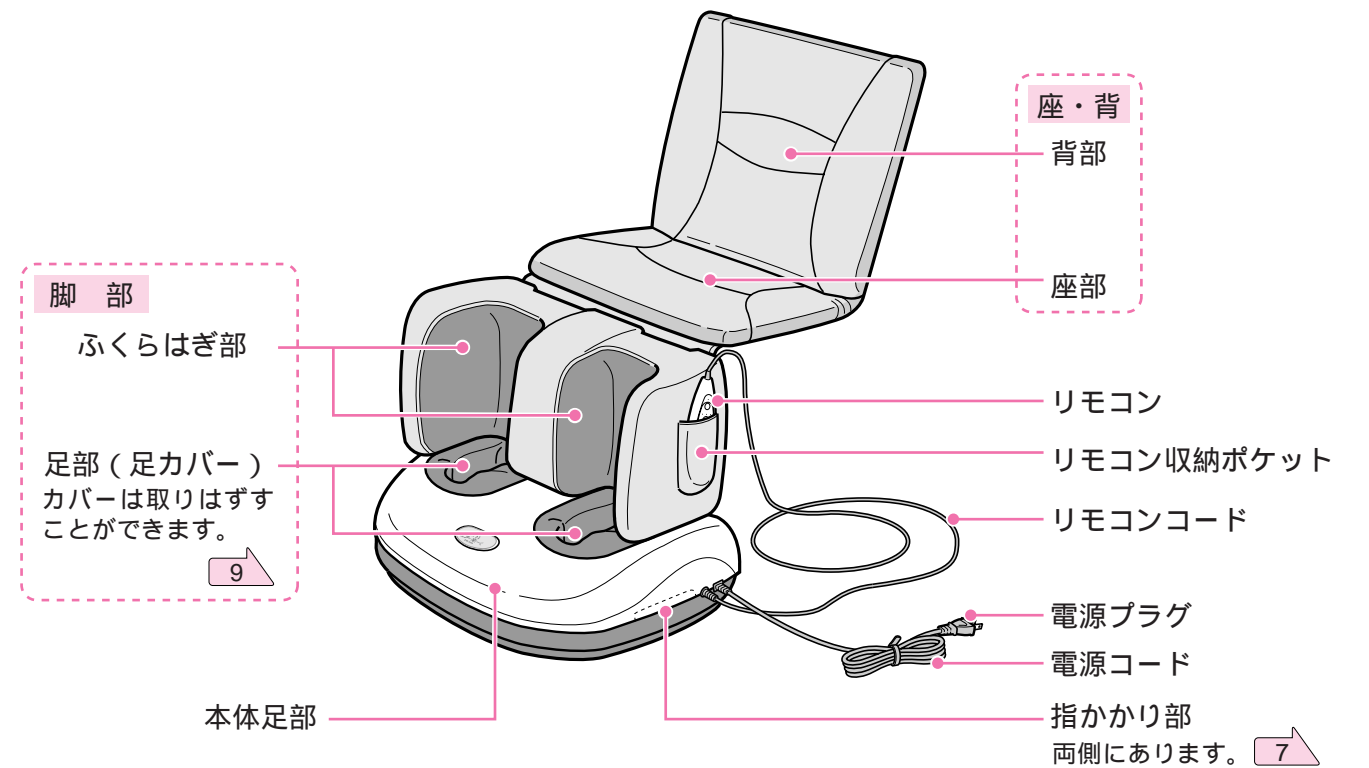


リモコン

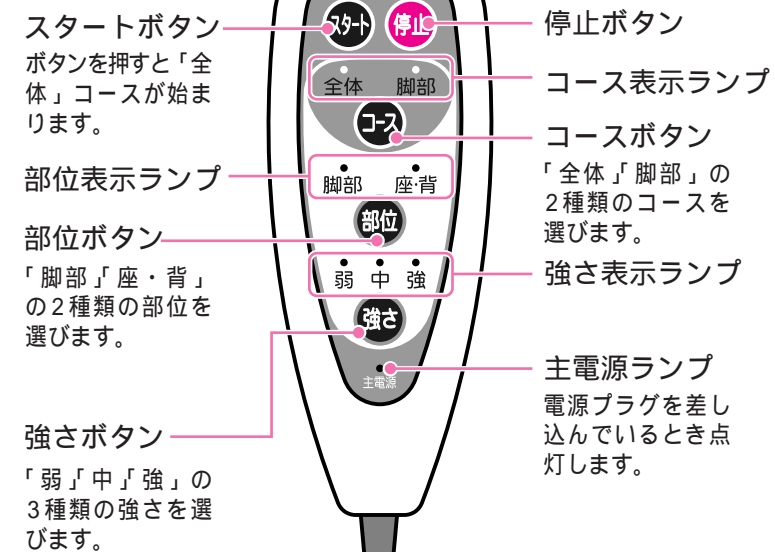

付属品

ベルト（1本）

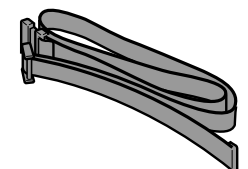

ご使用前に

このマークの中の数字は掲載ページを示しています。

警告

! ふくらはぎ部の角度を調節するときは、まわりに子供や動物がいないことを確認する
ふくらはぎ部と本体足部の間に手や指がはさまれ、けがの原因になります。

禁止 キャスター付の椅子や回転椅子などで使用しない
椅子が回転したり移動して、けがの原因になります。
リクライニングのできる椅子を使用する場合は、マッサージを停止してから、リクライニングしてください。

注意

! 水平な場所で使用する
不安定な場所では本製品が転倒し事故・故障の原因になります。

禁止 木床や畳など傷つきやすい床面で引きずっての移動はしない
床面に傷がつきます。傷つきやすい床面では、マットなどを敷いて設置してください。

! 座・背部を椅子に取り付けるときは、必ずベルトで固定する
使用中、座・背部がずれて転倒し、けがの原因になります。

! 持ち運ぶときは、本体足部側面の指かかり部を両手で持つ
守らないと落下によるけが・故障の原因になります。


設置場所について

本体は凹凸のない平らな床やたたみの上に設置してください。
周囲に窓や壁、家具などが無い場所に設置してください。
傷つきやすい床面で使用するときは、マットなどを敷いて設置してください。
椅子にセットして使うときは、椅子を準備してください。 **8**

設置できない場所

次の場所には設置しないでください

浴室など湿気の多い場所
布団の中
ホットカーペットの上
暖房器具のそば
直射日光の当たる場所
(変色する場合があります)

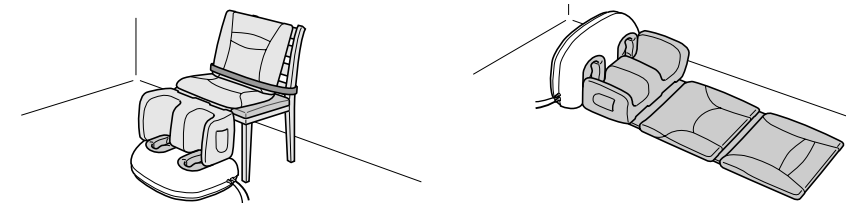


持ち運びかた

電源コードやリモコンコードなどを挟み込まないようにしてください。

1 背部を本体足部と座部の間に折りたたむ

2 座・背部とふくらはぎ部をベルトで固定する

3 本体足部側面の指かかり部を両手で持つ

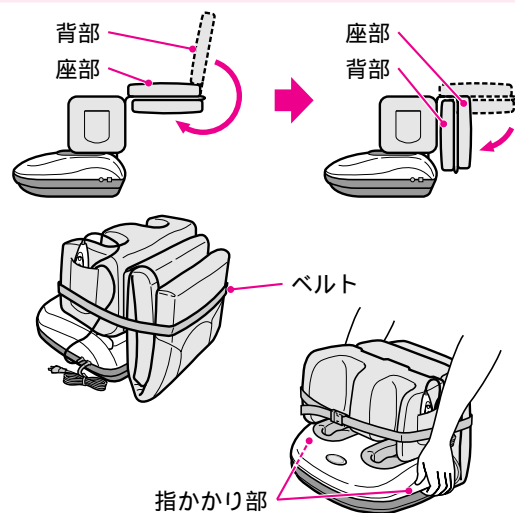

椅子にセットして使うとき

1 本体と椅子をセットする

本体足部を椅子の前に設置する
座・背部を椅子の座面と背もたれにセットし、ベルトをしめる
ベルトを引っ張って調整し、椅子に固定する
座・背部を椅子に取り付けるときは、必ずベルトで固定してください。ベルトを固定する位置は、椅子のタイプやサイズにより異なりますが、右図のように背部の下で固定してください。

2 座・背部に腰掛ける


座・背部に腰掛ける
不安定な腰掛けかたをすると、ずれ落ちる場合があります。
ゆっくりと確実に腰掛けてください。

3 足とふくらはぎを本体足部とふくらはぎ部に入れる

足部(2ヶ所)に左右それぞれの足を入れ、ふくらはぎをふくらはぎ部に入れる
ふくらはぎが合うように調整してください。


4 セット完了

マッサージを開始する **11**

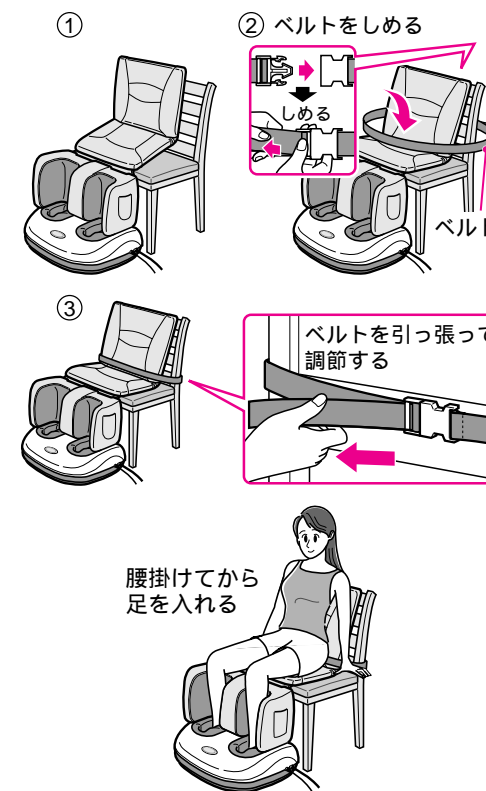

使用できる椅子のサイズと種類

	範囲	
座面高さ	38cm ~ 50cm	
座面奥行	35cm ~ 50cm	
座面幅	肘掛けが無い椅子	40cm以上
	肘掛けがある椅子	45cm以上
背もたれ幅	40cm以上	
背もたれ高さ	35cm以上	

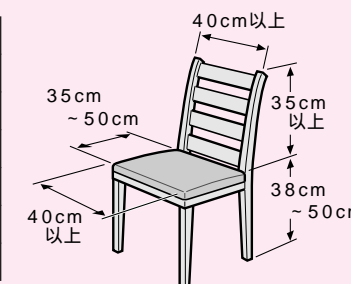

使えない椅子

次のような椅子は使用できません

キャスター付の椅子
回転椅子
背もたれのない椅子
など

取り付ける椅子の硬さによって、体感が変わる場合があります。
取り付け範囲内の椅子のサイズであっても、椅子形状によっては取り付けられない場合があります。

あおむけに寝た状態で使うとき

本体を寝かせた場合、若干、本体足部からの音が変わることがあります。故障ではありません。

1 本体をセットする


本体足部を横に寝かした状態で、座・背部を床面に敷く

2 あおむけの姿勢で寝る

座・背部の上に身体を載せ、あおむけに寝る
足部(2ヶ所)に左右それぞれの足を入れ、ふくらはぎをふくらはぎ部に入れる
あおむけに寝た場合は、もも・腰・背の位置が変わります。

3 セット完了

マッサージを開始する **11**

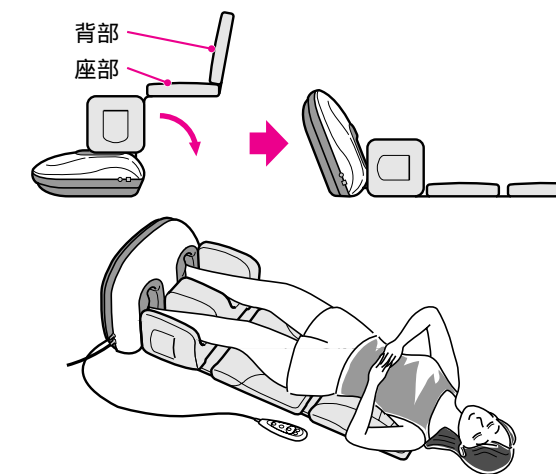

ご使用前に（つづき）

⚠ 注意




足カバーを取りかえるときに、ふくらはぎ部と本体足部の間に手をはさまない
けがの原因になります。

足カバーの取り付け・取りはずしかた


足カバーは、足部（右・左とも）についています。取りはずしが可能です。足部に足を入れる前に、必ず足カバーが取り付けられていることを確認してください。足カバーは消耗性部品です。

足カバー

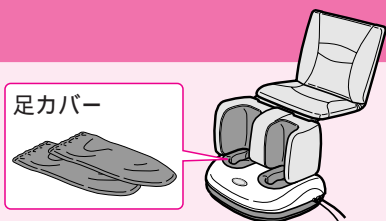


取り付けかた 取りはずしかたは、取り付けかたと逆の手順です。


1 本体の電源コードをコンセントから抜き、足部内に異物がないことを確認する

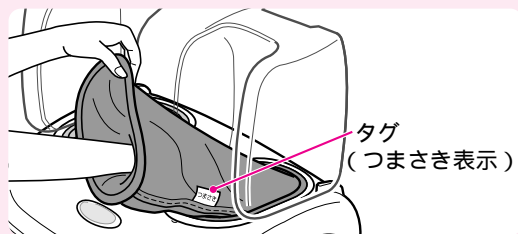


2 足カバーの縫い目を外側にし、つまさき表示のタグをつまさき側に合わせて足部に入れる

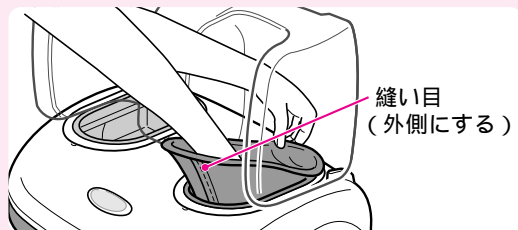


3 足カバーの口元のゴムが入っている部分を後ろのすき間から、とおして後部側へ少し押しだす

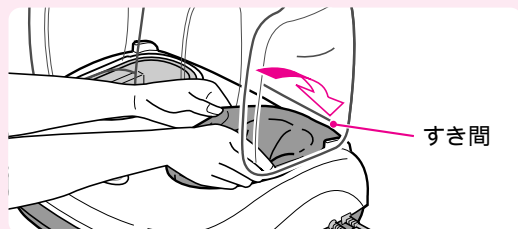


4 後ろの溝に足カバーの口元のゴムが入っている部分をしっかりと引っ掛ける

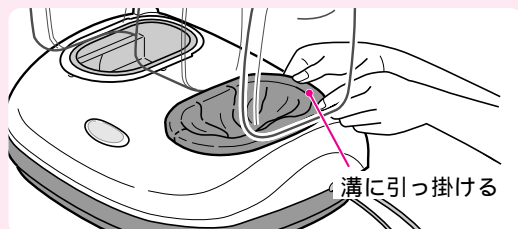

5 前側に引っ張りながら、溝全体に足カバーのゴムが入っている部分をしっかりと入れる

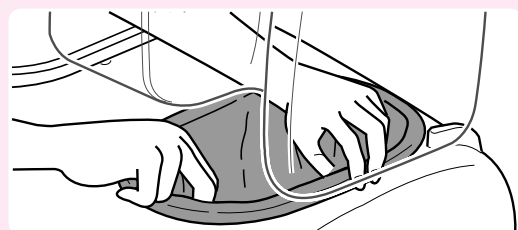

6 足カバーを足部の奥までしっかりと入れて、しわを取る

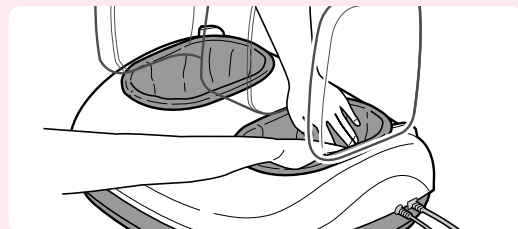

マッサージの種類と内容

このマークの中の数字は掲載ページを示しています。

「コース」マッサージ

コースボタン


全体 脚部
コース

コースボタンを押すたびに「全体」「脚部」の動作が切り替わります。

全体

全体 脚部
コース


全身疲労が気になる方に「足裏」から「背」までをマッサージします。

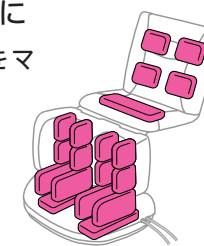

脚部

全体 脚部
コース

脚の疲労が気になる方に「足裏」から「ふくらはぎ」までを多彩な動作でマッサージします。

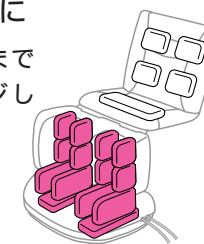

「部位」マッサージ

部位ボタン


脚部 座・背
部位

部位ボタンを押すたびに「脚部」「座・背」の動作が切り替わります。

脚部

脚部 座・背
部位



特に脚部の疲労が気になる方に「足裏」から「ふくらはぎ」までを特徴のある動作で繰り返しマッサージします。

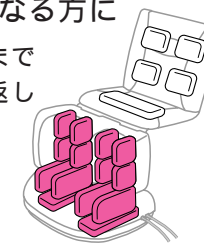

座・背

脚部 座・背
部位

特にももから背腰までの疲労が気になる方に「もも」「腰」「背中」を集中的にマッサージします。

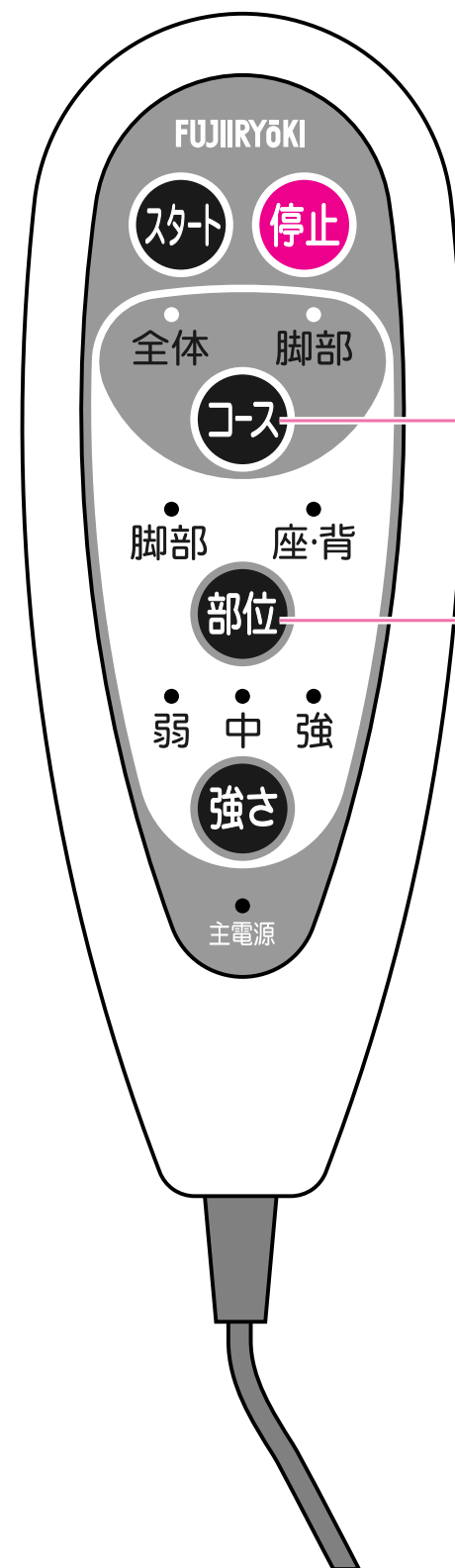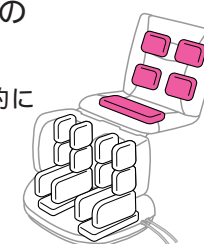

マッサージのしかた

このマークの中の数字は掲載ページを示しています。

⚠️ 注意

! 15分以内
 マッサージは1回15分以内にする
 長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。
 1日の使用は30分以内にしてください。

! 医師に相談
 使用中に身体に異常が現れたり、感じた
 ときには、直ちに使用を中止し医師に相
 談する
 守らないと事故や体調不良の原因になります。

! 使用を
 中止する
 マッサージが強すぎると感じたときは、強さを弱めるか、使用を中止する
 マッサージを強くすると、筋肉や神経を傷める原因になります。特に高齢者や骨が弱いと思われるかたは、十分気をつけてください。

! プラグを
 抜く
 使用中以外は電源プラグをコンセントから抜く
 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因
 になります。

! 禁止
 本製品が動作中に足を入れない
 けがの原因になります。

マッサージの動作時間


マッサージの動作時間は約15分です。
 最大連続使用は30分です。

オートタイマー機能（自動停止機能）について

マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。ただし、マッサージ途中でマッサージの種類を切り替えると（コース内での切り替え / 「コース」から「部位」への切り替え / 「部位」から「コース」への切り替え）タイマーは再スタートし、さらに約15分、マッサージ時間が延長されます。また、マッサージ開始から連続で最大30分になると、自動的にマッサージが停止します。オートタイマー機能が働くと、約2秒間「スタート」ボタンを受け付けません。

1 準備


電源プラグをコンセントに差し込む
 リモコンの電源ランプが点灯します。

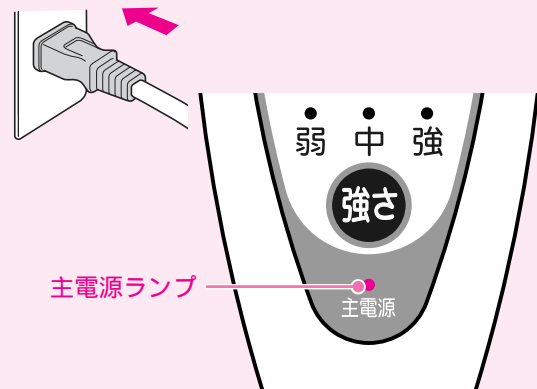

本体をセットする

マッサージをする姿勢に合わせて、本体をセットする
 椅子にセットして使うとき **8**
 あおむけに寝た状態で使うとき **8**

セットの状態に合わせて、リモコンコードの長さを調整してください。余ったコードは丸めてリモコン収納ポケットに入れてください。

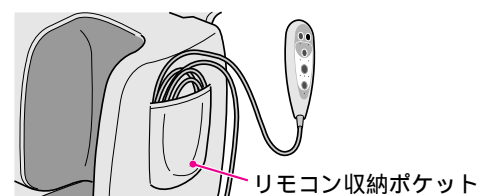

2 マッサージを開始する

リモコンの「スタート」ボタンを押す

スタート
 約2秒後に「全体」コース、強さ「弱」で動作を開始します。
 マッサージの種類や強さをお好みで設定するときは、「コース」ボタン、「部位」ボタン、「強さ」ボタンで切り替えることができます。

マッサージの種類と内容 **10**

マッサージの種類を選ぶ

「コース」マッサージをするとき

「コース」ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ


コース
 「コース」ボタンを押すたびに「全体」「脚部」の順で切り替わります。
 選択したコースの表示ランプが点灯します。



「部位」マッサージをするとき

「部位」ボタンを押し、お好みの部位を選ぶ

部位
 「部位」ボタンを押すたびに「脚部」「座・背」の順で切り替わります。
 選択した部位の表示ランプが点灯します。

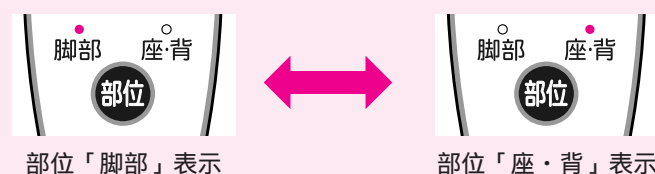

途中で中止したいとき

停止
 「停止」ボタンを押す
 マッサージが中止されます。
 「停止」ボタンを押した後、約2秒間、すべてのボタンを受け付けません。その間、動作していたマッサージの表示ランプが点滅します。

強さを選ぶ

「強さ」ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ

強さ
 「強さ」ボタンを押すたびに「弱」「中」「強」の順で切り替わります。
 選択した強さの表示ランプが点灯します。




3 使い終わったら

本体足部から脚を抜く


椅子にセットして使ったとき

椅子に座ったままの状態、足部から脚を抜く
 脚が完全に抜けたことを確認してから、立ち上がる

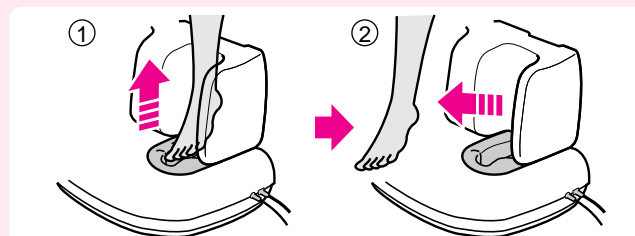


あおむけに寝た状態で使ったとき

寝たままの状態、足部から脚を抜く
 脚が完全に抜けたことを確認してから、立ち上がる

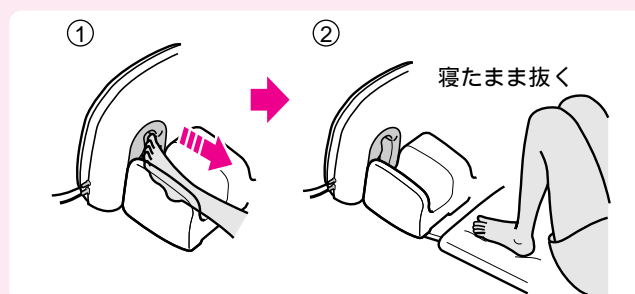

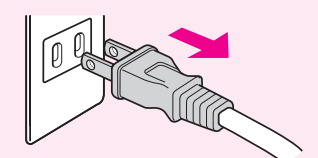

電源プラグからコンセントを抜く



お手入れ

⚠ 注意

 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
プラグを感電・けがの原因になります。抜く

 **禁止** ベンジン・シンナーなどで拭いたり、殺虫剤をかけない
感電・引火の原因になります。汚れは、やわらかい乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤にひたした布をかたくしぼってからふいてください。

本体

本体のレザー部・プラスチック部の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふき取り、そのあとすぐに、乾いた布でよくふき取ってください。レザー部は洗剤を使いすぎると傷めることがあります。

リモコン

リモコンの汚れは、乾いた布でふき取ってください。

足カバー


足カバーはご家庭での洗濯（またはドライクリーニング）が可能です。
足カバーは消耗性部品です。




収納

収納のしかた


1 背部を本体足部と座部の間に折りたたむ

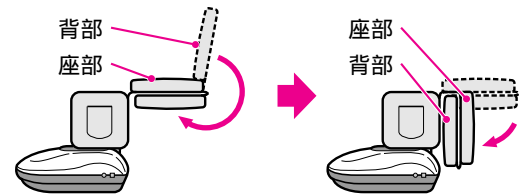

2 座・背部とふくらはぎ部をベルトで固定する

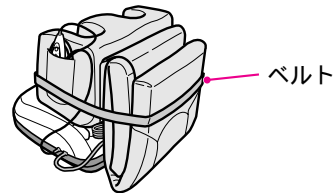


3 本体足部と座部の間に、背部をはさむようにセットする

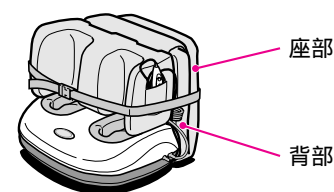


リモコン収納のしかた

お使いにならない場合は、リモコン収納ポケットにリモコンおよびリモコンコードを丸めて入れてください。

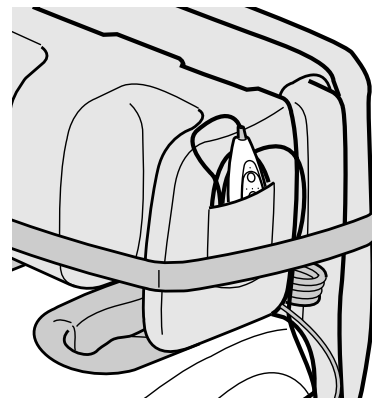

保管のしかた

汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
(カビやシミの原因になります。)
直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所はさけてください。
(樹脂部・レザー部の変色・変質の恐れがあります。)
本体足部を座・背部の上に載せた状態で、保管しないでください。
(故障の原因になります)

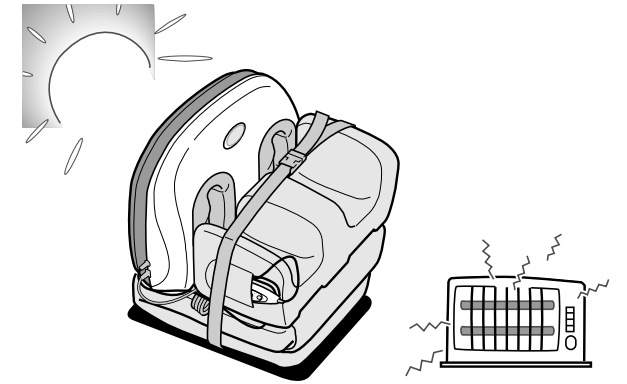

仕様

品名	エアーマッサージ器	形名	CM-500
定格	電源	AC100V 50-60Hz	
	定格時間	30分	
	消費電力	52W	
オートタイマー	約15分		
機能	「コース」：全体、脚部 「部位」：脚部、座・背		
強さ	強・中・弱（3種類）		
生地	レザー（合成皮革）		
脚部角度	垂直から後方へ約40度		
寸法	全長	約幅530mm×奥行1370mm×高さ450mm	
	収納時	約幅530mm×奥行630mm×高さ455mm	
質量（重さ）	約14kg		
電源コード	約2.0m	リモコンコード	約1.6m
付属品	ベルト		

消耗性部品

品名	足カバー（1足入り）	形名	AK-50
----	------------	----	-------