

取扱説明書

保証書付

品名・品番

リラックスポール FRP90



(ヒーター機能付き)

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用前の準備	7
使いかた	8
お手入れと保管のしかた	10
仕様	12
保証書	裏表紙

- このたびはリラックスポールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、必ずいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。



安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性のある内容を示します。


* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

＜絵表示の例＞





	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 （左図は、分解禁止）
	● 記号は、強制（必ず守ること）を示します。 （左図は、電源プラグをコンセントから抜く）

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることでできるところに、必ず保管してください。

警告

	<ul style="list-style-type: none">●医師から運動を制限されている方は使用しない。 症状を悪化させる原因になります。●ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。事故やけがのおそれがあります。●お子様に使用させたり、遊ばせたりしない。また、幼児を近づけない。故障や事故、けがのおそれがあります。●腹部、胸部、頭部、首の前方、顔には使用しない。 体調不良やけがの原因になります。●身体に過度の負担をかけて使用しない。 事故や体調不良の原因になります。●ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。低温やけどを起こすおそれがあります。比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。 低温やけどについて 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができていのが特徴です。万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに専門医の診察を受けてください。●高温になる場所（火のそば、こたつ、ホットカーペット、布団、炎天下の車内など）で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 発火や発熱、やけど、故障の原因になります。
--	--


警告

	<ul style="list-style-type: none"> ● アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しない。事故やけがの原因になります。 ● 本体のすきまやコネクタなどに、ピンのような鋭いもの、異物、ゴミ、水分を付着させない。火災や感電、故障の原因になります。 ● 交流 100V 以外の電源は使用しない。火災・感電の原因になります。 ● 付属の AC アダプター以外は使用しない。また、他の機器には使用しない。事故や故障、やけどのおそれがあります。 ● AC アダプターやコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しない。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしない。火災や感電の原因になります。 ● 破損している AC アダプターを使用しない。感電やショート、火災のおそれがあります。破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。 ● AC アダプターのプラグを確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。感電やショート・発火のおそれがあります。 ● ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。 ● 本製品の耐荷重は 100kg のため、耐荷重をオーバーして使用しない。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の高い場所で使用したり、保管しない。感電、ショート、発火、故障の原因になります。 ● 本体および付属品を水につけたり、水洗いしない。またぬれた手で本体に触れたり、ぬれた体に使用しない。感電、ショート、発火、故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。感電やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の人は、使用前に必ず医師に相談する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 悪性腫瘍のある人 ・ 心臓に障害のある人、血栓のある人 ・ 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある人 ・ 薬を服用中の人、妊娠中や妊娠の可能性のある方、出産直後の人 ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環器障害による知覚障害のある人 ・ 肌に傷、湿疹、はれものなど異常のある人 ・ 安静を必要とする人、四肢の不自由な人 ・ 体温 38℃ 以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているとき ・ 骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の人 ・ 腱鞘炎の人 ・ 椎間板ヘルニア症の人 ・ 背骨に異常のある人、背骨が左右に曲がっている人 ・ かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ・ 体力が極端に衰えた人 ・ 温度感覚喪失が認められる人 ・ その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ● この機器はヒーターを内蔵し表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用する。下記に該当する場合は特に注意する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ お年寄り、ご本人、ご自分で操作ができない人 ・ 皮膚の温感（温度感覚）の弱い人 ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人 ・ 深酒・疲労の激しい人 ・ 血行障害（糖尿病など）の人 ・ 医師より注意を受けている人 <p>低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。</p>

安全上のご注意

警告



- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因になります。
- 使用中に身体に異常があらわれたり感じたりしたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。
事故や体調不良の原因になります。
- 使用前に必ず、本体に破損や異常がないか確認する。破損や異常が発見された場合は使用せず、ご購入先または当社のお客様相談窓口にご相談ください。
- 操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。
事故やけがのおそれがあります。
- 異常が発生したら、直ちに電源を切り、AC アダプターを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口にて点検・修理を依頼する。
感電や漏電・ショートなどによる火災、事故やけがのおそれがあります。

注意



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。
- 他の器具、機器などと同時に使用しない。また、使用中はほかの作業を行わない。
事故やけが、体調不良の原因になります。
- 不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。火災や感電、破損、故障の原因になります。
- 本体の上に立たない。事故やけがの原因になります。
- 肌の弱い方は素肌で使用しない。体調不良の原因になります。
- 次のようなときは使用しない。
 - ・疲労が激しいとき
 - ・食後すぐや飲酒後
 - ・睡眠中
 - ・皮膚に異常のあるとき事故やけが、体調不良の原因になります。
- 睡眠時に使用しない。無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。
- 本体を故意に強く押し当てるなどの無理な力はかけない。
事故やけが、体調不良の原因になります。
- 同時に2人以上で使用しない。事故や故障の原因になります。
- 本体を移動させる際は、本体のコネクタやコードを持って引っ張らない。
断線による火災や感電、故障の原因になります。
- 収納時に AC アダプターのコードを本体などに巻き付けない。
断線による火災や感電、故障の原因になります。



- 使用時間は、1回 15 分以内にする。長時間のご使用は、筋肉や神経を痛めることがあります。
- 定期的に本体と AC アダプターのお手入れを行う。
特に AC アダプターの電源プラグやアダプタープラグにほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。
- 使用しないときは電源を切る。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないように保管する。ほこり、湿気などで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。


注意



- 本体を移動させる際は、電源を切り、ACアダプターおよびアダプタープラグを抜いてから行う。
事故やけが、故障のおそれがあります。
- 停電が起こったときは直ちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。
再通電されたとき事故のおそれがあります。
- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って抜く。
感電や、ショートして発火のおそれがあります。
- 使用後や使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災のおそれがあります。
また、お子様のいたずらなどによる事故のおそれがあります。
- お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。

各部のなまえとはたらき


本体

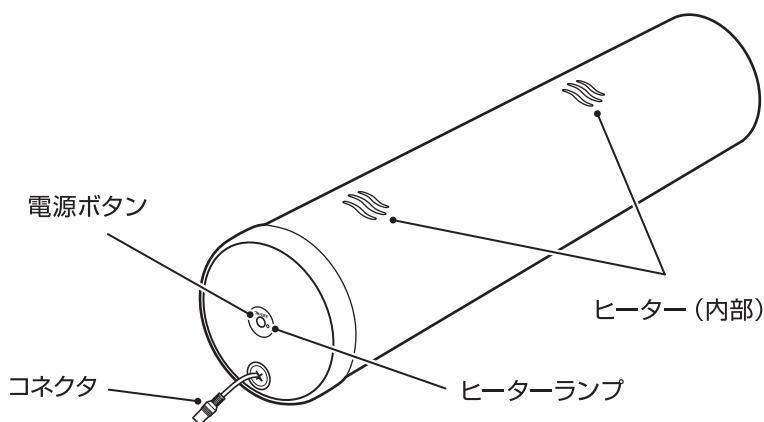

付属品

ACアダプター
リラクスポール FRP90 専用
(IVP1200-1500WP)

取扱説明書
(保証書付き)

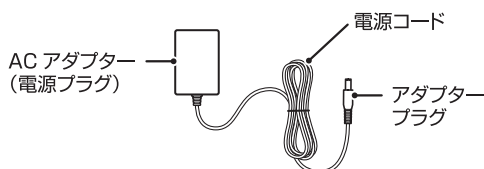

※付属のACアダプター以外は使用しないでください。

ご使用前の準備

ACアダプターを取り付ける




警告

- 交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。
- 付属品の AC アダプター以外は使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。
- AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、火災のおそれがあります。
破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。


1. 本体のコネクタと、ACアダプターのプラグをつなぐ。

- コネクタとアダプタープラグを持って、しっかり差し込んでください。
※ 抜くときも、コードを持たずにコネクタとアダプタープラグを持って、抜いてください。
- 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- AC アダプターやコードが傷んだり、プラグにゴミがついていないか確認してください。

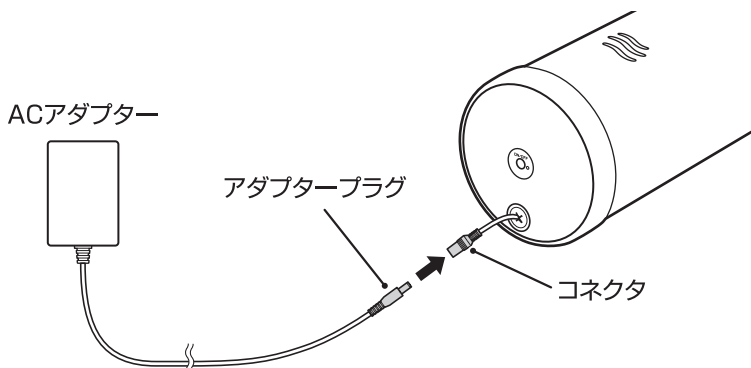

2. ACアダプターをコンセントに差し込む。

- しっかり差し込んでください。

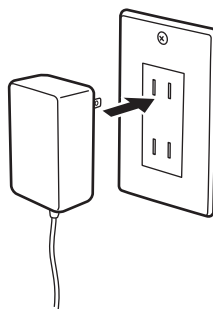

使いかた

ヒーターの使いかた

警告

ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所^①に長時間触れるような使い方をしない。
低温やけどを起こすおそれがあります。比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所^①に触れていると、低温やけどのおそれがあります。


低温やけどについて

低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができていくのが特徴です。万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに専門医の診察を受けてください。

電源ボタンを長押しすると、ヒーターランプが点灯し
ヒーターが「オン」になります。

ヒーターは約 15 分で終了します。




ヒーターランプ点灯中に再度長押しすると、ヒーターが切れます。

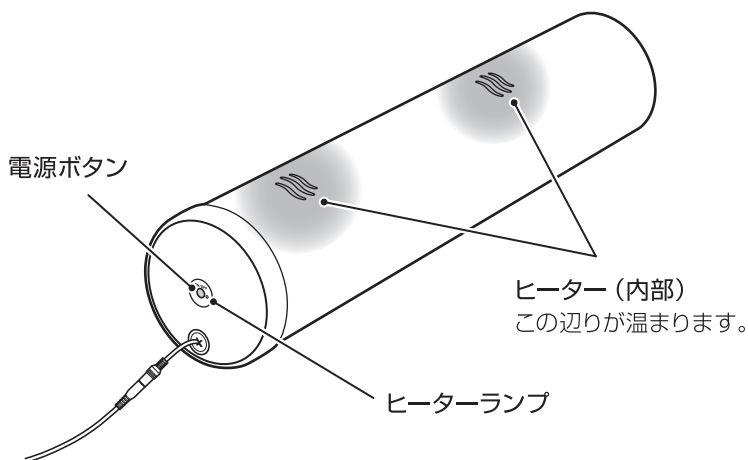

リラクスポールの使いかたの一例




乗りかた

1. ポールの端にお尻を乗せ、両手を床につけます。
2. 両手で体を支えながら、ゆっくりと仰向けになります。
3. ポールから頭がはみ出さないように調整してください。

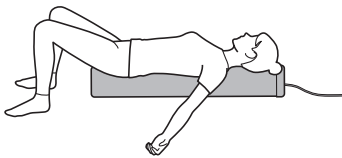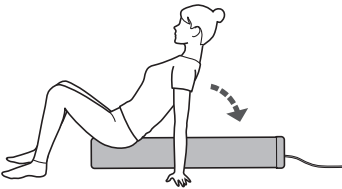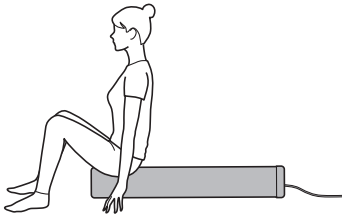

降りかた

お尻をずらし、ゆっくりとすべるようにして降ります。

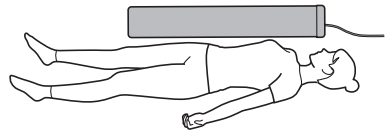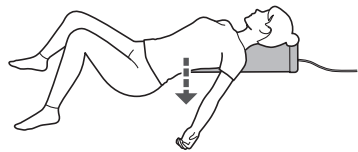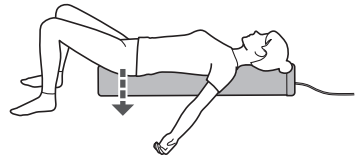

- ・ AC アダプターを繋いだまま使用する場合、コードに負荷がかからないようにご注意ください。
- ・ 本体を移動させる際は、電源を切り、AC アダプターおよびアダプタープラグを抜いてから行ってください。

お手入れと保管のしかた

本体のお手入れのしかた

⚠ 警告

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

お願い 定期的にお手入れを行ってください。

本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

本体

1. 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
2. 水を含ませて、固くしぼった布で洗剤をふき取る。
3. 乾いたやわらかい布でふき、自然乾燥させる。

- 張地などに色が移ることがありますので、色落ちしやすい衣類でのご使用はご注意ください。
- 整髪料・ヘアケア用品・保湿クリームなどに含まれている成分により、レザー部分がひび割れや劣化するおそれがあります。変色や色移りの原因にもなりますので、上記のような商品をご使用の場合は、触れる部分にタオルをあてるなど、直接触れないようにご使用ください。また、固くしぼったタオルなどで、定期的なふき取りを行うことをおすすめします。

コネクタ

1. 乾いたやわらかい布でふく。

- 濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

保管のしかた

⚠ 警告

浴室など湿気が多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビの原因になります。

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体から抜いて保管してください。
- 汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
- 長い間使用されない場合は、汚れやほこりが付かないように購入時の箱等に入れて保管してください。
 - ・ 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。変色・変質のおそれがあります。
 - ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

●保証書 保証期間：1年

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

修理を依頼される時

異常があるときは、使用を中止してください。

電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

●保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。

(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。

修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

●その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。



愛情点検

長年ご使用の場合は
点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- ・ げくさい臭いがする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ 本体に変形や破損がある
- ・ その他の異常がある



ご使用中

故障や事故防止のため本体の電源をオフにし、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

仕様

品名	リラックスポール	
品番	FRP90	
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	15分
	入力 (消費電力)	20W
付属品	リラックスポール FRP90専用 ACアダプター (型番：IVP1200-1500WP)	
アダプター定格	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V 1.5A	
タイマー	約15分	
ヒーター表面温度 (目安)	45℃～48℃ (室温20℃～25℃の場合) ※室温等により体感温度が異なる場合があります。	
本体寸法	約φ150×H900mm	
質量	約0.9kg (本体のみ)	
耐荷重	約100kg	
張地	PVC	
生産国	中国	
発売元	株式会社フジ医療器	

MEMO

MEMO

お客様相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

フリーダイヤル  0120-027-612

受付：平日 9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日を除く)

FAX・Web での受付も行っております。

FAX番号：06-4793-0818

Web：フジ医療器ホームページのお問合せフォームにて
受け付けております。
フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

※FAX・Webの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡は
フリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入先を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

品名	リラックスポール	品番	FRP90	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体（但し、消耗品は除く）	
フリマ			お買い上げ日	年 月 日	
ご購入先	ご芳名 様		ご購入先		
	ご住所				
	電話 ()				電話 ()

※製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください（記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、シートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください）。

【無料修理規定（一部抜粋）】 保証の範囲や消耗品について、詳しくは富士医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申し付けください。
 - ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答等で本保証書に記入してある購入先に修理をご依頼できない場合には取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理となります。

※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。

 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害等異常電圧による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - 本書の呈示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、ご購入名、ご購入先の記入のない場合、
或いは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容をご利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **富士医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

美と健康の総合メーカー
株式会社 **富士医療器**

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL