

FUJIIRYŌKI

家庭用

取扱説明書

添付文書

医療機器認証番号：226AKBZX00151000


類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般名称：家庭用電気マッサージ器

Relacoro

マッサージャー

品番：**MK-100**

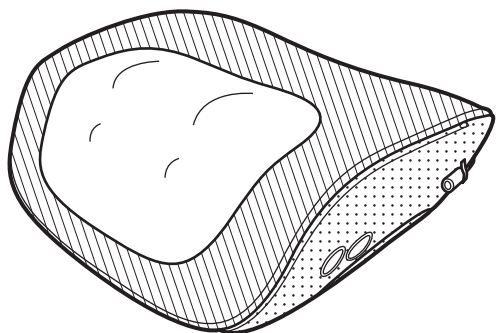

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	6
ご使用の前に	7
マッサージャーの使い方	8
保管とお手入れ・故障かなと思ったら	9
保証とアフターサービス	10
仕様	11
保証書	裏表紙



使用目的・効能または、効果

〔 あんま、マッサージの代用 〕
〔 一般家庭で使用する こと 〕

- このたびは当社のマッサージャーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見ることできる場所に必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。



安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

* 物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

<絵表示の例>



	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 （左図は、分解禁止）
	● 記号は、強制（必ず守ること）を示します。 （左図は、電源プラグをコンセントから抜く）

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保存してください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。


警告

	<p>次の人は、使用前に医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温 38℃以上（有熱期）の人 （例：急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。 衰弱しているとき。） ● 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人、ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人 ● 背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
	<p>動かなくなったり異常がある場合はすぐに AC アダプターを抜いて、ご購入先または当社のお客さま相談窓口にご依頼・修理を依頼する。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強いマッサージはしない。事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは直ちに使用を中止する。</p>
	<p>使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れないか確認する。（どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。） 本体の生地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>次の人は、使用しない。身体に異常が起こる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師からマッサージを禁じられている人 （例：血栓 [そく（塞）栓] 症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
	<p>本体の生地を故意に外したり、破いたり、切り取ったりしない。 本体の生地が外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれけがのおそれがあります。</p>
	<p>交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電のおそれがあります。</p>
	<p>専用の AC アダプター以外は使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。</p>
	<p>AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災のおそれがあります。 破損している場合は、ご購入先または当社の「お客さま相談窓口」に修理を依頼してください。</p>
	<p>AC アダプターは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。 感電やショート・発火のおそれがあります。</p>
	<p>AC アダプターのプラグとコネクターを確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。 感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>お子様を本体の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。</p>

安全上のご注意

警告



浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
感電・火災・故障・カビのおそれがあります。



絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

注意

使用時間は1回15分以内にする。続けて使用する場合は、30分以上あけて使用する。
長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。
<お願い> 1日の使用は30分以内にしてください。

健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。

- 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
 - 骨や内臓に起因する腰痛の人
 - 打ち身やねんざしやすい人
 - 乗物酔いの激しい人
 - 過去に心臓や内臓の手術をされた人
- 守らないと健康をそこなうおそれがあります。

操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。
事故やけがのおそれがあります。



しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。

使用前に、本体に異物がはさまっていないか確認する。事故やけがのおそれがあります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

使用後は本体の電源ボタンを「OFF」にし、ACアダプターをコンセントから抜く。
お子様のいたずらなどによる事故のおそれがあります。

本体からACアダプターを抜くときは、プラグとコネクターを持って抜く。
故障のおそれがあります。

停電のときは直ちに、ACアダプターをコンセントから抜く。
再通電されたとき事故のおそれがあります。



ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って抜く。
感電や、ショートして発火のおそれがあります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く。
ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災のおそれがあります。

お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。

注意

コードや AC アダプターを破損するようなことはしない。
● 傷つけない ● 破損させない ● 加工しない ● 無理に曲げたり、引っ張らない
● ねじらない ● 束ねない ● 重いものを載せない ● 挟み込まない
感電や火災、故障のおそれがあります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない。
気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。
また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。
火災のおそれがあります。

布団や、毛布をかぶせて使用しない。
火災やモーターの温度上昇のおそれがあります。

本器を落としたり、強い衝撃を与えない。
故障やけがのおそれがあります。

付属品以外は使用しない。
故障のおそれがあります。

マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。けがのおそれがあります。

頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
けがのおそれがあります。

うつぶせや横向きで使用しない。
体調不良やけがのおそれがあります。

マッサージ動作中に AC アダプターを抜かない。
けがのおそれがあります。

本体生地を外したり破れた状態では使用しない。
けがのおそれがあります。

使用中は眠らない。
無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。

本体の上に立たない。
故障やけがのおそれがあります。

ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火の原因になります。


マッサージの目的以外には使用しない。
故障や事故のおそれがあります。

他の治療器を同時に使用しない。
事故や体調をくずすおそれがあります。



各部のなまえとはたらき


本 体

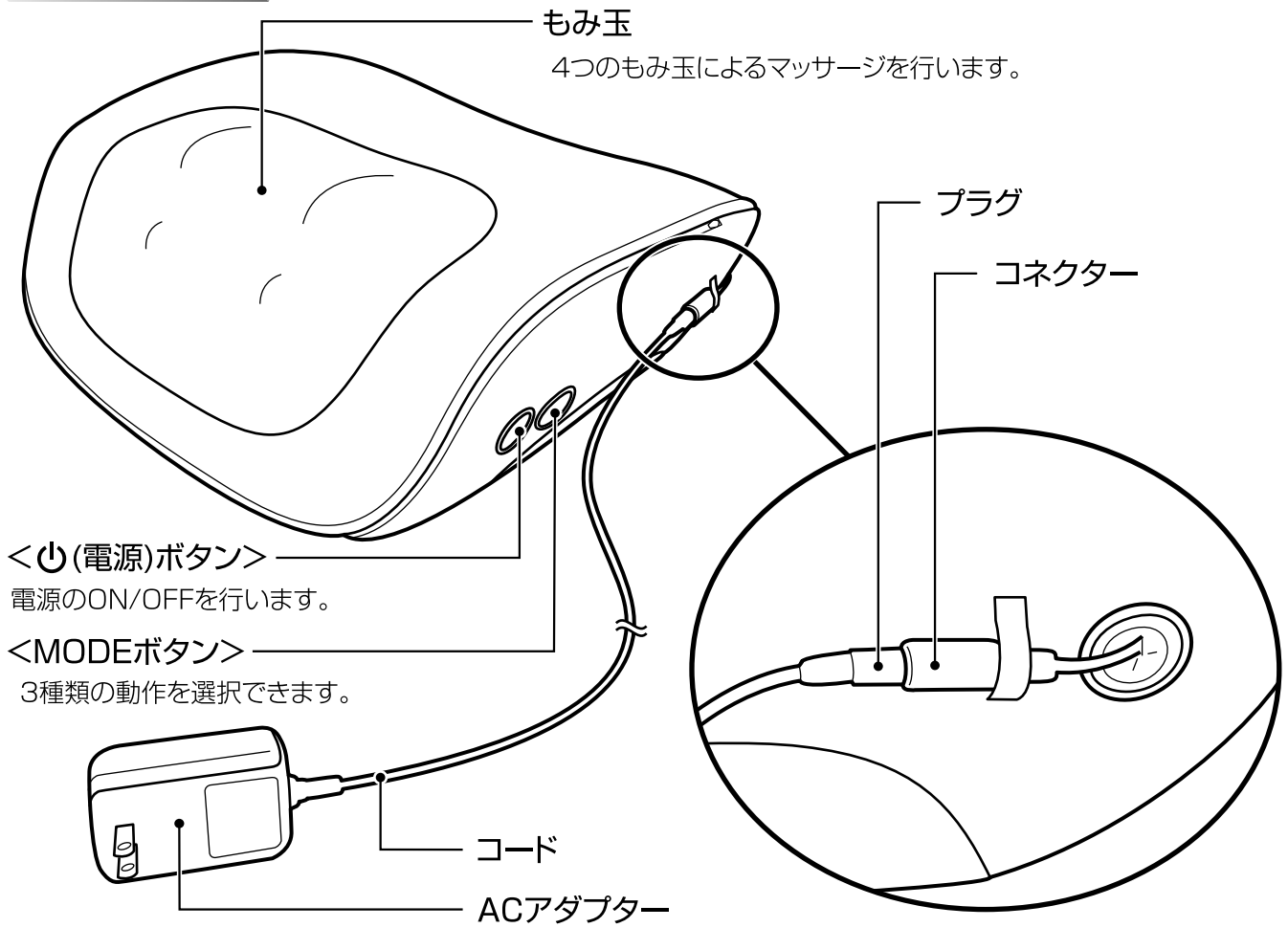


本体カバー着用時

表側

裏側

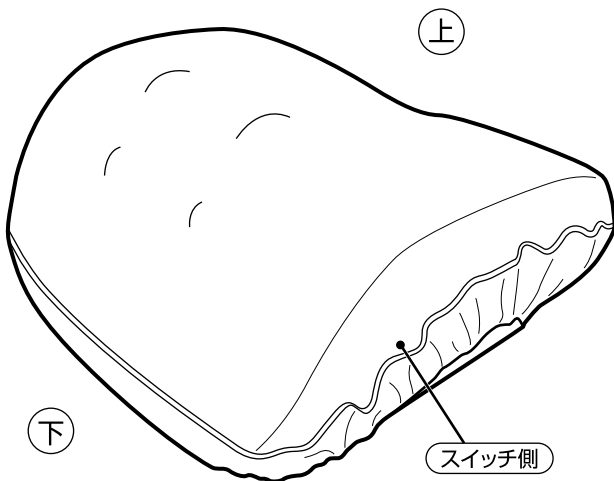

- 生地合わせ目が中央に来るように本体カバーを装着してください。
- 洗濯タグが付いている方を上側にして装着してください。

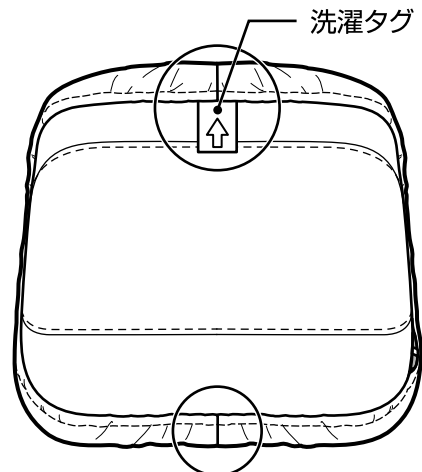

ご使用の前に

設置について

本体は凹凸のない平らなところに設置してください。

設置できない場所


次の場所には設置しないでください

- 浴室など湿気が多い場所
- 布団の中
- ホットカーペットの上
- 暖房器具の近く
- 直射日光の当たる場所(変色するおそれがあります)

マッサージを始める前に

1. プラグとコネクターを接続する。


- プラグとコネクターを持って、まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。
- コネクターはゴムに通してください。

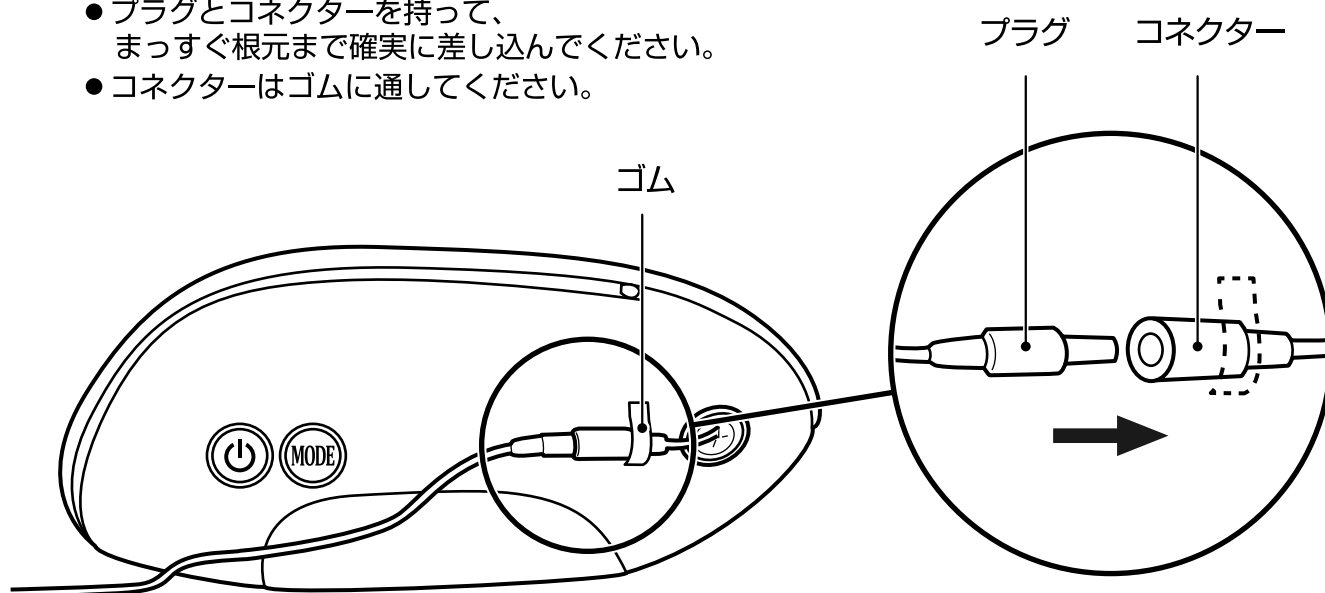

2. ACアダプターをコンセントに差し込む。

⚠ 警告

- 交流100V以外は使用しない。
火災や感電のおそれがあります。
- 破損している電源コードやACアダプターを使用しない。
感電やショート、火災のおそれがあります。
破損している場合は、ご購入先または
当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- ACアダプターは確実に根元まで差し込み、
ゴミを付着させない。
感電やショート、発火のおそれがあります。
- めれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。

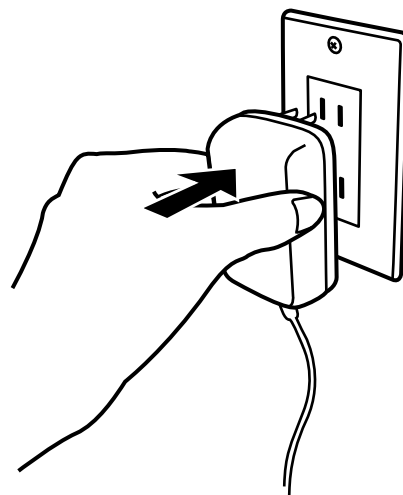

マッサージャーの使い方

ご使用の手順

! 注意

- マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。けがのおそれがあります。
- 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。けがのおそれがあります。

1.  ボタンを押し、電源を入れる。

2.  ボタンで3種類の中から好みの動作を選択する。

- ボタンを押すごとに、「自動コース」→「正転」→「反転」の順に切り替わります。


※コース説明

自動コース	正転・反転・速・遅の組合せ
正 転	正転 速・遅の組合せ
反 転	反転 速・遅の組合せ



マッサージは動作開始から約15分で自動的に終了します。

3. マッサージ終了後、ACアダプターを抜く。

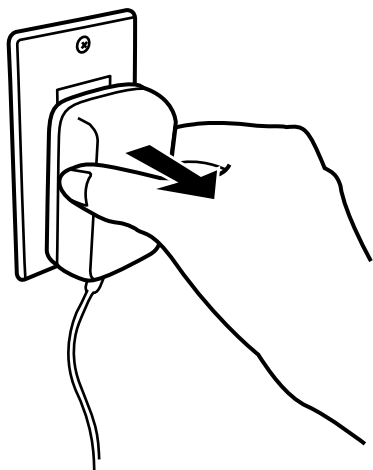

! 警告

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。感電のおそれがあります。



保管とお手入れ・故障かなと思ったら

保管のしかた

- 汚れやホコリを取った後、湿気の少ない所に保管してください。
カビやシミが発生するおそれがあります。
- 長い間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。

⚠ 注意

- 直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの近くの高温になる所には保管しないでください。
変色・変質のおそれがあります。

お手入れについて

本 体

- 中性洗剤を浸し固く絞った布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふいてください。

⚠ 警告


- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。



本体カバー

素材：ポリエステル・ポリウレタン

- ぬるま湯にて手洗いしてください。
(色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はおさげください。)

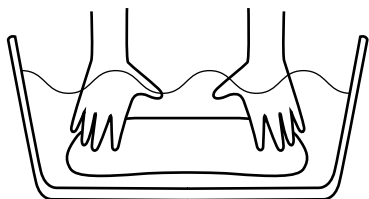

- 陰干しで十分に乾燥させた後、本体に取り付けてください。

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。
- 本体生地が破れた状態では使用しない。
けがのおそれがあります。
- アイロンがけはしない。
生地を傷めるおそれがあります。

故障かなと思ったら

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた
動作しない	AC アダプターが抜けていませんか？	AC アダプターのプラグを本体のコネクタに差し込んでいるか、AC アダプターをコンセントに差し込んでいるか確認してください。
	長時間連続で使用していませんか？	長時間連続で使用するとモーターの温度が上昇し、安全装置が働きます。 1 時間程度、本体を停止させてください。
	タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか？	もう一度スイッチを操作してください。 続けて使用する場合は 30 分以上あけてから使用してください。
動作時の音が気になる	マッサージ動作時のモーター音 もみ玉と布のすれる音	構造上のもので異常ではなく寿命などに影響はありません。

⚠ 警告

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

保証とアフターサービス

愛情点検

⚠ 注意

- しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、ACアダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのACアダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

- **保証書（取扱説明書の裏表紙にあります。）**
お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

- **補修用性能部品の保有期間**
当社はこのマッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

9 ページに従ってしらべていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。電源スイッチを「OFF」にし、ACアダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

- **保証期間中に修理を依頼される場合**
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
- **保証期間を過ぎて修理を依頼される場合**
まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

- **その他ご不明な場合**
アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

仕様

品名	マッサージャー		
品番	MK-100		
種別	機械器具 77 バイブレーター 管理医療機器		
一般的名称	家庭用電気マッサージ器		
医療機器認証番号	226AKBZX00151000		
電源	アダプター定格	入力	AC100V 50/60Hz
		出力	DC12V
	本体定格	消費電力	10W
オートタイマー	15分		
回転数	遅い：約18回/分 速い：約27回/分		
本体寸法	約 幅400mm × 奥行き350mm × 高さ150mm		
本体重量	約 2.8kg		
材質	クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル、PVC		
製造元	Ningbo Comfort Health Equipment Co., Ltd.		
製造販売元	株式会社 フジ医療器 大阪府南河内郡太子町太子2372-95		

商品名	マッサージャー MK-100	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間	保証対象	本体（但し、消耗品は除く）
ご購入者	フリガナ	ご購入日	年 月 日
	ご芳名		様
ご購入者	〒	ご購入先	
	ご住所		
	電話 ()		電話 ()

【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
 - ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - 本書の表示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

- ※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-027612

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

☎0120 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mail での受け付けも行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。

フジ医療器ホームページ <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mail での受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL