

# FUJIIRYŌKI

## RelaxSolution

### マッサージチェア OH-3500 (DX)

医療用具許可番号: 27BZ0878  
類別: 機械器具 77 バイブレーター  
管理医療機器 一般的名称: 家庭用電気マッサージ器

#### 取扱説明書

安全上のご注意	2
ご使用前の準備	5
各部のなまえとはたらき	9
毎回マッサージをはじめる前に	11
椅子の調節のしかた	12
自動コースの使い方	14
自動コース・クイックモード 動作中の調節のしかた	15
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方	19
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた	20
エアーによるマッサージ機能の使い方	22
エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた	23
肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方	24
メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた	25
途中でマッサージを変更するとき	29
お手入れと保管のしかた	33
故障かなと思ったら	34
愛情点検	35
アフターサービスについて	35
仕様	35



#### 効能・効果 あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。




# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。




 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または*物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>





\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は一般的な警告・注意)
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	
	次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師からマッサージを禁じられている人                      (例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)</li> </ul>
	次の人は、使用前に医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人</li> <li>● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人</li> <li>● 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人</li> <li>● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li> <li>● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人</li> <li>● 体温38℃以上(有熱期)の人                      (例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱している時。)</li> <li>● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人</li> <li>● 背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人</li> <li>● 捻挫、肉離れなど炎症性の人</li> <li>● 上記以外に身体に特に異常を感じているとき</li> </ul> 動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼すること。感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

## ⚠ 警告





	脚部をさげるときは、脚部の下に足や手を挟まないようにすること。また、脚部の下に子供や動物がいないこと、および物がなくを確認すること。けがの原因になります。
	首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強いマッサージはしない。事故やけがの恐れがあります。
	リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、物がなくを確認すること。事故やけが、家財を傷める恐れがあります。
	リクライニングするときは、背もたれ部と座部・肘掛部の間に手や腕・足・頭を挟まないようにすること。けがの原因になります。
	ポイントナビで体形検出したときは、必ず肩位置が合っているか確認すること。合っていないときは高さ調節ボタンで合わせてください。 (自動コース、選択機能の「全体」のとき) 事故やけがのおそれがあります。
	ご使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認すること。(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼して下さい) 布地が破れた状態で使用すると、けがや感電の恐れがあります。
	交流100V以外は使用しないこと。火災・感電の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。感電、ショート、発火の原因になります。
	電源コードを傷めないこと。 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないこと。また、重いものを載せたり、特に移動中は挟み込んだりしないこと。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないこと。また、幼児を近づけないこと。感電・けがをする恐れがあります。
	子供に椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせないこと。けがや故障の原因になります。
	浴室など湿気が多い場所で使ったり、保管しないこと。 感電・火災・故障・カビの原因になります。
	絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 火災、感電の原因になります。

## ⚠ 注意

	使用時間は15分以内に。また、同一個所への使用は5分以内に。 長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 〈お願い〉 1日の使用は30分以内にしてください。
	使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
	ご使用後は電源スイッチを切ること。 子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。
	水平な場所で使用すること。故障や事故の原因になります。
	停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。 再通電されたとき事故の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くこと。感電やショートして発火することがあります。
	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと。また、ぬれた手で抜き差ししないこと。感電やけがをすることがあります。

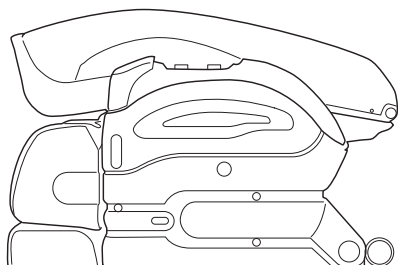
# 安全上のご注意

## 注意

	腕をマッサージするときは時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しない。けがのおそれがあります。	
	しり・ももをマッサージするときはズボンのポケットに硬いものを入れたままにして使用しない。事故やけがのおそれがあります。	
	マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。けがのおそれがあります。	
	本機をご使用になりながら他の治療器と同時に使用しないこと。	
	使用中は眠らないこと。無意識での使用は、けがや体調不良の原因になります。	
	治療目的以外には使用しないこと。故障や事故の原因になります。	
	電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させないこと。感電・ショート・発火の原因になります。	
	ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないこと。又ホットカーペット等の暖房器具の上で使わないこと。火災の恐れがあります。	
	生地を無理に引張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしないこと。けがや故障の原因になります。	
	 アースを確実に取り付けること。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、アースの取り付けはご購入先にご相談ください。	
	ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけないこと。感電・引火の原因になります。	
	背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らないこと。けがや故障の原因になります。	
	木床や畳など傷つきやすい床面でのキャスター移動や引きずっての移動はしないこと。床面に傷がつきます。	
	椅子を倒したり、強い衝撃を与えないこと。けがや故障の原因になります。	
	食後すぐに使用しないこと。気分が悪くなる場合があります。	
	飲酒後の使用はしないこと。事故やけがのおそれがあります。	
	人や物を乗せて移動しないこと。けがや故障の原因になります。	
	椅子に2人以上乗らないこと。けがや故障の原因になります。	
	素肌で使用しないこと。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛める場合があります。	
	ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しないこと。また、もみ玉部に手や足をはさまないこと。けがをしたり、体調不良をおこす場合があります。	
	頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない。けがのおそれがあります。	
	脚部や椅子の下側に手や頭などを入れないこと。事故やけがの恐れがあります。	
		使用しても、効果が現れない場合、医師または専門家に相談すること。
		リモコンコードに足を引っ掛けないように気をつけること。けがの原因になります。
もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座ること。事故やけがの恐れがあります。		
本体移動は静かに設置すること。傷の原因になります。		


## 梱包箱から本体と付属品を取り出す

### 本体




### 付属品
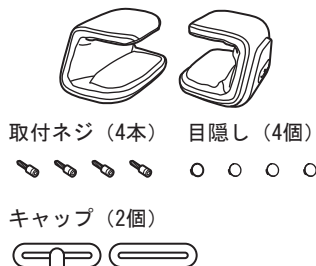
#### 腕ユニット



#### 肩ユニット

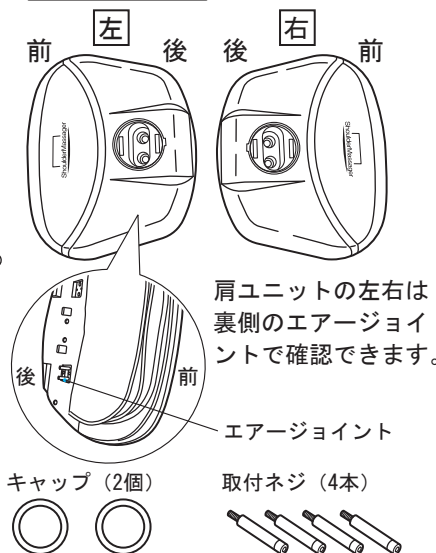

#### パット



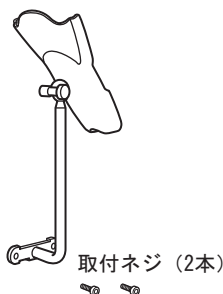
#### 枕



#### 背パット




#### リモコンスタンド



#### 六角レンチ


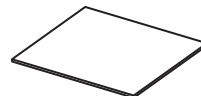
#### 取扱説明書




#### アース線




## 背もたれの組み立て・折りたたみ方

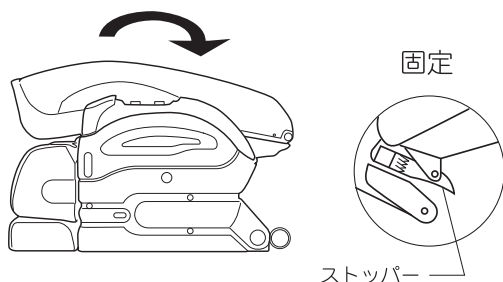背もたれ部を矢印の方向に起こし、ストッパー (○部分) が固定されるのをご確認ください。(カチッと音がします。)



背もたれ部の下にあるストッパー (○部分) を矢印のように押し下げ、背もたれ部を前にゆっくり倒してください。

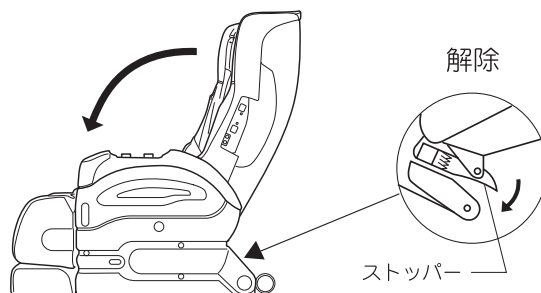※急に倒れないように注意してください。  
 ※肩ユニット・腕ユニットが取り付けられている状態では背もたれは折りたたみません。



### ⚠ 注意



背もたれ部を動かすときに、肘掛部と背もたれ部の間に手や指を入れないでください。

### ⚠ 注意



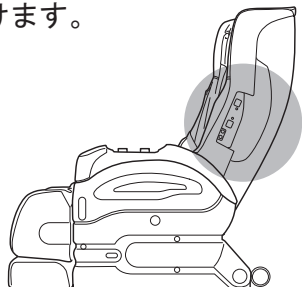
ストッパーの操作時には○部分以外にはふれないでください。




# ご使用前の準備

## 肩ユニットの取り付け方

1. 肩ユニットは背もたれを起こした状態で取り付けます。



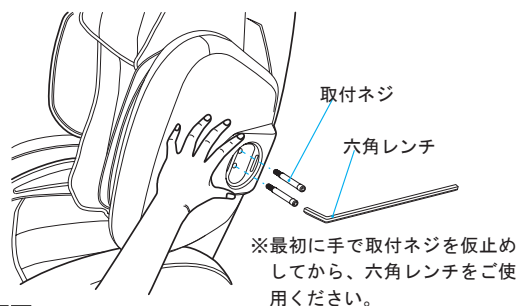
3. 取付ネジで2箇所しっかりと止めてください。




### お願い

反対側も同じ方法で取り付けてください。  
取りはずしの際は、取り付け方を参考に行ってください。

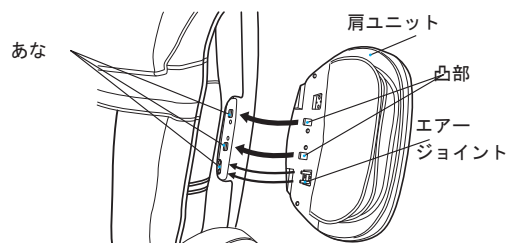2. 背もたれのあな部分に肩ユニットの凸部、エアージョイントを差し込みます。



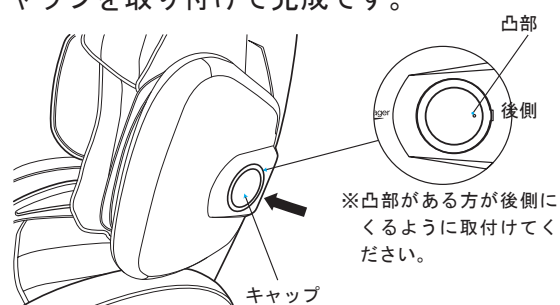4. キャップを取り付けて完成です。




### ⚠ 注意

しっかりと取り付けしていないと、エアーが漏れたり、肩ユニットが落下し、けがや故障の原因になります。


## 腕ユニットの取り付け方

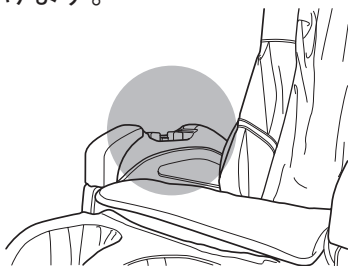1. 腕ユニットは背もたれを起こした状態で取り付けます。



3. 取付ネジで2箇所しっかりと止めてください。

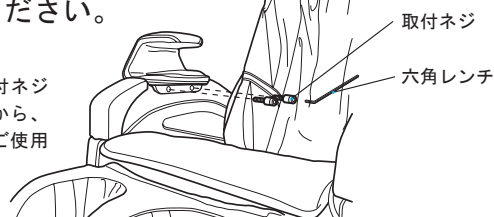※最初に手で取付ネジを仮止めてから、六角レンチをご使用ください。




### お願い


反対側も同じ方法で取り付けてください。  
取りはずしの際は、取り付け方を参考に行ってください。

2. 肘掛部のあな部分に腕ユニットのエアージョイントを差し込みます。

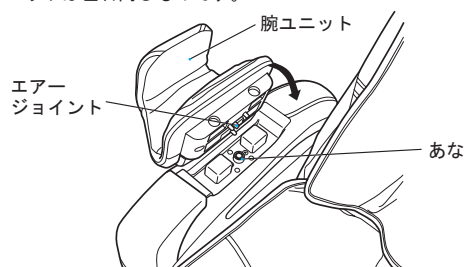※腕ユニットは左右同じものです。



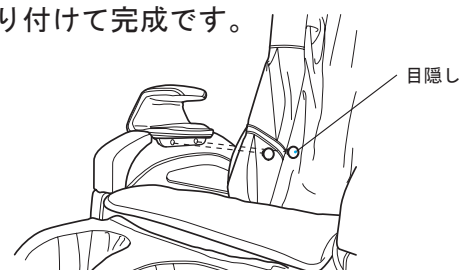4. 目隠しを取り付けて完成です。






### ⚠ 注意

しっかりと取り付けしていないと、エアーが漏れたり、腕ユニットが落下し、けがや故障の原因になります。

## リモコンスタンドの取り付け方

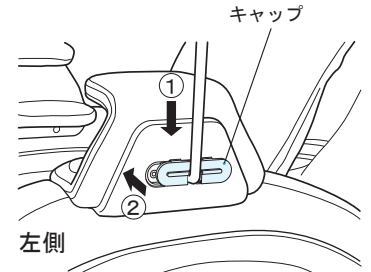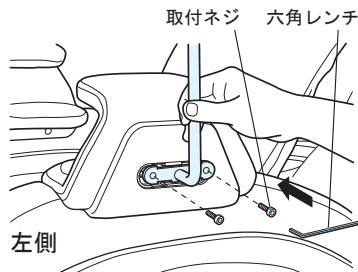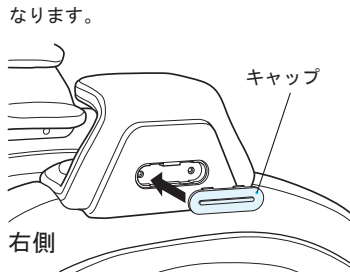1. 本体右側の腕ユニットにキャップを取り付けます。  
※本体右側にはリモコンスタンドを取り付けないでください。リモコンコードがとどかなくなります。
2. リモコンスタンドを本体左側の腕ユニットに取付ネジで2箇所しっかり止めてください。
3. キャップを取り付けて、完成です。



### リモコンホルダーの調節

固定ネジを回して、お好みの位置で固定してください。



### お願い

取りはずしの際は、取り付け方を参考に行ってください。

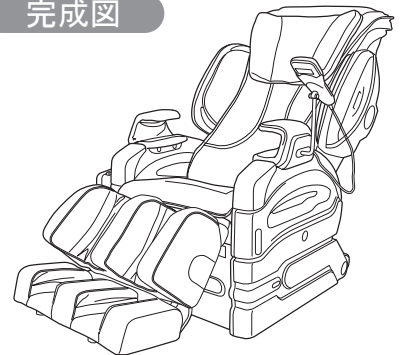
### リモコンの取り付け方・はずし方

取り付け方  
上から差し込むように取り付けてください。

はずし方  
上へ引き上げてください。



### 完成図






### ⚠ 注意

しっかりと取り付けていないと、リモコンスタンドが落下し、けがや故障の原因になります。

## 背パット・パット・枕の取り付け方

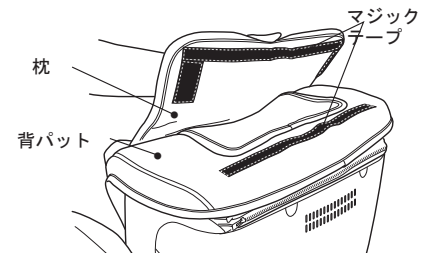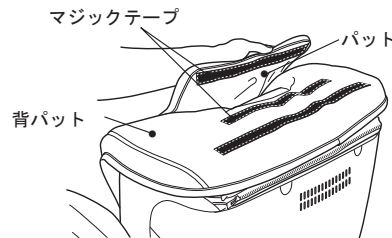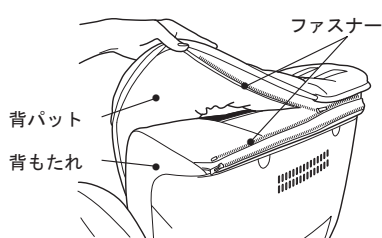- 1 背もたれに背パットを取り付けます。
- 2 背パットにパットを取り付けます。
- 3 背パットに枕を取り付けて完成です。



- マッサージが強く感じる場合は枕を付けてお使いください。
- マッサージを行うときは、枕を後ろに回してお使いください

### ⚠ 警告



ご使用前に必ず背パットを上げて、背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認すること。  
(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)

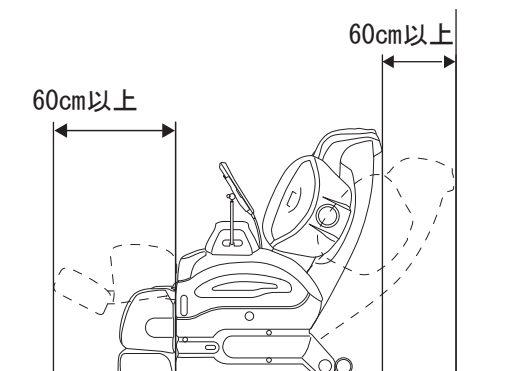
# ご使用前の準備

## 本体の設置のしかた

周囲にすき間をあけて、水平なところに設置します。

**お願い** リクライニングしたとき脚部も上がりますので、あたらないようあらかじめ、前後に60cm以上のすき間をあけてください。

**お願い** たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。




## 本体の移動のしかた

本体の前面を浮かし、押して移動します。

### ⚠ 注意

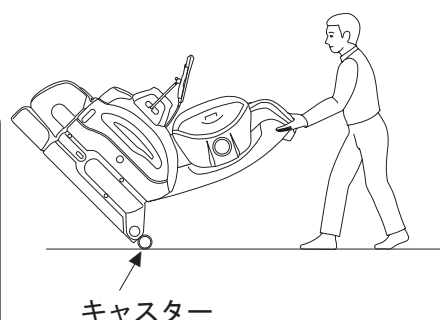- 人や物を乗せて移動しないでください。転倒の恐れがあります。
- 傷つきやすい床面でのキャスター移動や、引きずっての移動はしないでください。
- 座部や脚部、肩部は持たないでください。
- 前面を浮かせる際は重量がありますのでご注意ください。



## アースについて

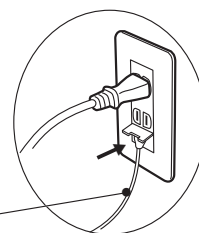
### ⚠ 注意

アースを確実に取り付ける。  
アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、ご購入先にご相談ください。



電源コンセントにアース端子がある場合

- アース線（付属）を本体のアース端子ネジ電源コンセントのアース端子に取り付けてください。



接続してはいけないところ

ガス管……爆発や引火の危険があります。  
電話線や避雷針……落雷のとき危険です。  
水道管……途中がプラスチックの場合はアースになりません。

電源コンセントにアース端子がない場合

- ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事（第3種接地工事・有料）をしてください。



# 各部のなまえとはたらき

つづく

## 本体

**背パット**  
この上にゆったりと  
もたれてください。

**肩部**  
肩部のエア  
マッサージを行います。

**腕部**  
腕部のエア  
マッサージを行います。

**肘掛部**

**座パット**

**座部**  
尻・もものエア・パイプ  
マッサージを行います。

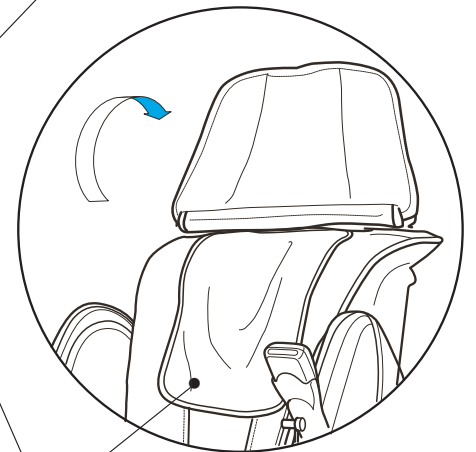
**脚部**  
脚部のエアマッ  
サージを行います。

**枕**  
マッサージするときは後ろに  
回してください。


**背もたれ部**  
背中全体のマッサージに加え、  
背・腰部のエアーマッサージを  
行います。

**注意シール**

**注意タグ**




**パット**  
**リモコンスタンド**


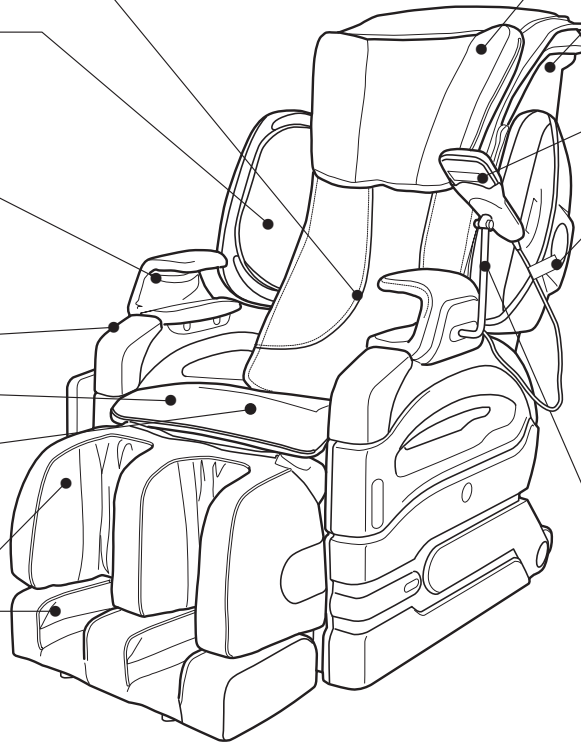


## マッサージの位置

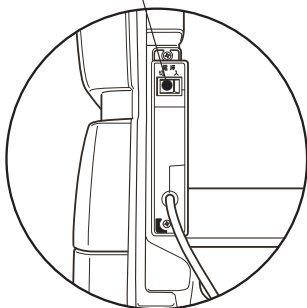**電源スイッチ**  
ご使用後は「切」に  
してください。



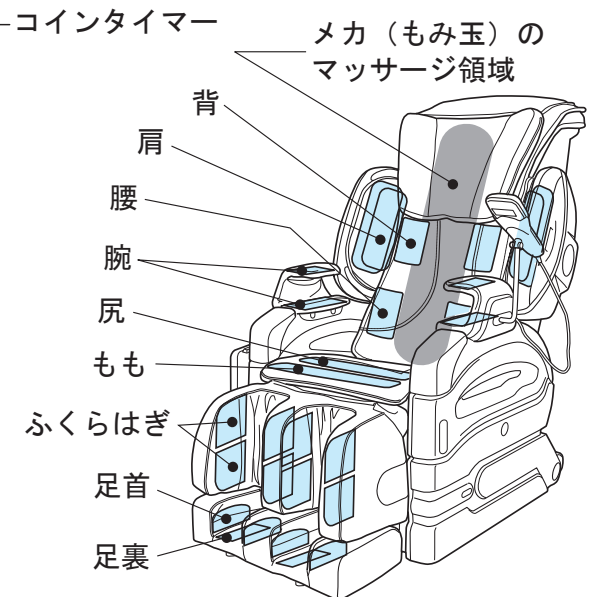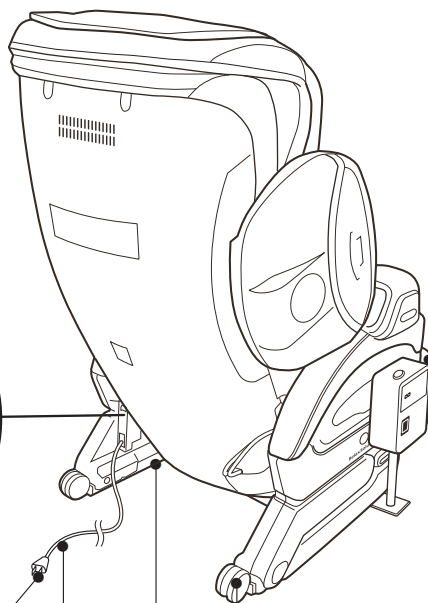**電源プラグ**  
**電源コード**  
**アース端子**  
※アースを取り付けてください。  
**キャスター**



# 各部のなまえとはたらき

## リモコン

### 液晶表示部

情報を表示します。

### 「スタート/収納」ボタン

マッサージの開始、並びに終了し、もみ玉の収納を行います。

### 「自動コース」ボタン

マッサージしたい部位あるいはマッサージの内容を11種類の自動コースから選べます。

### 「エアー」ボタン

エアーマッサージしたい部位を4種類の中から選択できます。

脚
もも・尻
腰
背

### 「リピート」ボタン

自動コース中に現在行っているマッサージを再度行うことができます。

### 「スキップ」ボタン

自動コース中に現在行っているマッサージを中止し、次のマッサージ部位に移ることができます。

### 「肩」ボタン

肩のエアーマッサージの

「入/切」または強さを5段階に調節ができます。

### 「メニュー」ボタン

現在行っているマッサージの調節ができます。

### 「十字キー」

様々な場面で選択を行うときに使用します。

### 「決定」ボタン

選択を決定します。

### 「上げる」「下げる」ボタン

脚部の角度を調節できます。

### 「クイック」ボタン

あらかじめプログラムされた身体別の標準体型に合わせた自動コースが選べます。

### 「停止」ボタン

全ての動作を停止します。  
(すぐにマッサージを停止したいときに押してください。)

### 「機能」ボタン

22種類のマッサージの中から好みの機能を選択することができます。

もみ上げ	首ほぐし
もみ下げ	極もみ
たたき	極たたき
さざなみ	腰極もみ
さすり	腰極たたき
深もみ上げ	背筋のばし
深もみ下げ	ストレッチ
指圧	3D

ストレッチ
ストレッチもみ上げ
ストレッチたたき
ストレッチさざなみ

3Dもみ上げ
3Dもみ下げ
3Dたたき
3Dさざなみ

### 「高さ調節」ボタン

自動コース中と選択機能時の肩位置設定時に肩位置微調節ができます。  
※選択機能時にもみ玉の位置移動もできます。  
※自動コースの使用途中でも肩位置調節はできます。

### 「腕」ボタン

腕のエアーマッサージの「入/切」または強さを5段階に調節ができます。

### 「起こす」「倒す」ボタン

背もたれと脚部の角度を調節できます。脚部は背もたれと連動します。  
※リクライニング中は「エアー」「たたき」「さざなみ」の動作は停止します。

# 毎回マッサージをはじめる前に

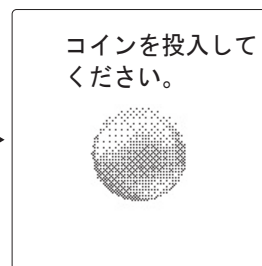
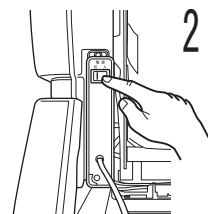
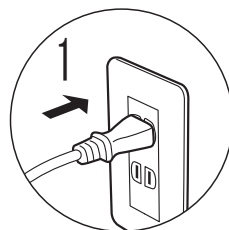
## 電源を入れる

1 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

2 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは、左の肘掛部の後ろにあります。

- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。




## 確認する内容

1 周囲を確認する

- ① 本体のうしろや脚部の下など、周囲に人やペット、物がないことを確認する。  
〈スタンバイ位置〉

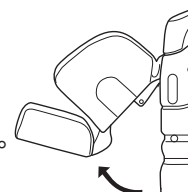マッサージを開始するときコインを投入すると、自動的に脚部が約50°まで上がります。  
※周囲の確認は必ず行ってください。




2 本体を確認する

- ① 背パットを上げて背もたれの布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認する。

※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。


- ② 電源コードやリモコンコード、または物が本体に挟まっていないか確認する。

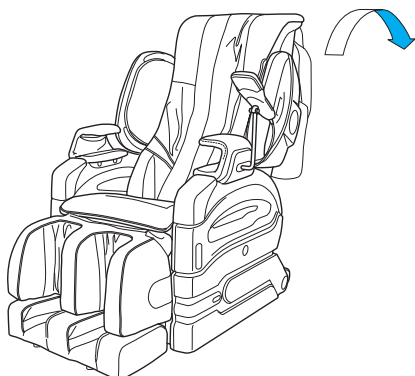- ③ 電源コードやリモコンコード、電源プラグが傷んだり、プラグにピンやゴミが付いていないか確認する。





- ④ 座る前にもみ玉の位置を確認する。

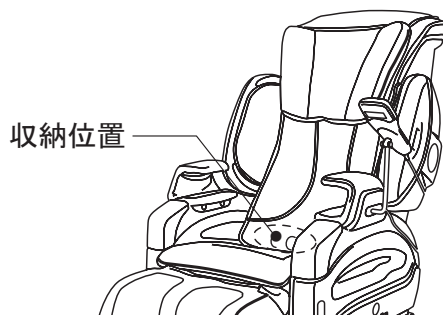- もみ玉は通常、収納位置（背もたれの最下部に引っ込んだ状態）にあります。



- ⑤ 座る前に脚部の位置を確認する。

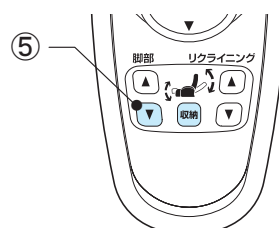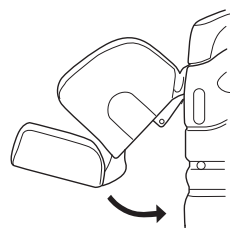- 脚部が上がった状態で、無理に座ろうとすると、けがをする恐れがあります。脚部の▼を押す。



# 椅子の調節のしかた

\* コインタイマー動作中に調節ができます。

## リクライニングの使い方



1 背もたれを倒すときは、リクライニングの ▼ を押します。

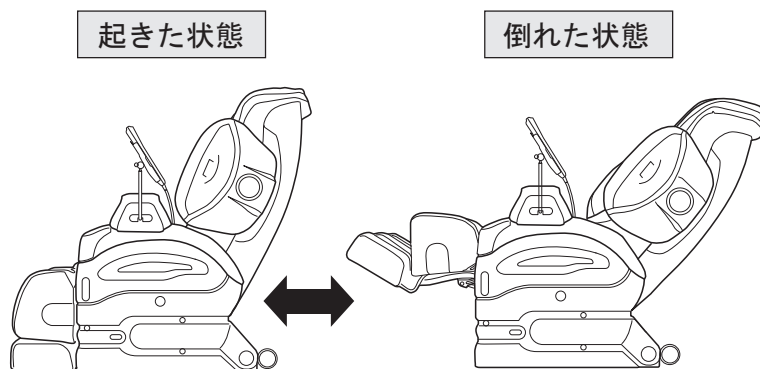
- リクライニングの ▼ を押し続けると背もたれが倒れ、脚部が上がります。
- 深く倒すほど、もみ玉の刺激が強くなります。

2 お好みの角度でリクライニングの ▼ から手を離します。

- 背もたれのリクライニング角度によって、脚部の角度も変わります。


3 背もたれを起こすときは、リクライニングの ▲ を押します。

- リクライニングの ▲ を押し続けると背もたれが起き、脚部が下がります。



## 警告

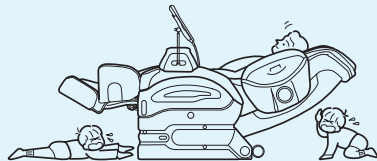リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、物がないことを確認すること。事故やけが、家財を傷める恐れがあります。



## 注意

背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らない。使用者、本体が転倒して、事故やケガの原因になります。



お願い マッサージ中にリクライニングするときは、マッサージの強さをみながら徐々に倒してください。

\* コインタイマー動作中に調節ができます。

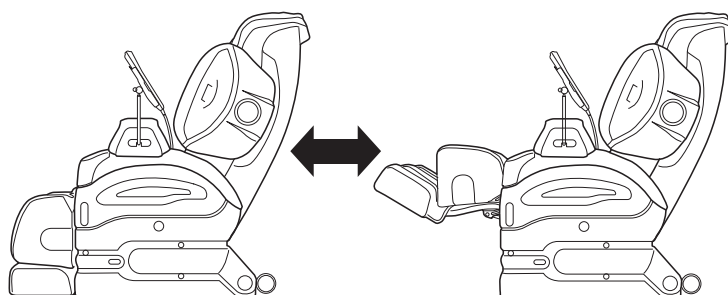
## 脚部の使い方



- 1 脚部を上げるときは脚部の ▲ を押します。
  - 脚部の ▲ を押し続けると脚部が上がります。
- 2 お好みの角度で脚部の ▲ から手を離します。
- 3 脚部を下げるときは脚部の ▼ を押します。
  - 脚部の ▼ を押し続けると脚部下がります。


下げた状態

上げた状態



### 警告

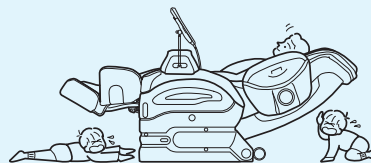リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の下などに人やペット、物がないことを確認すること。  
事故やけが、家財を傷める恐れがあります。







# 自動コースの使い方

## はじめに

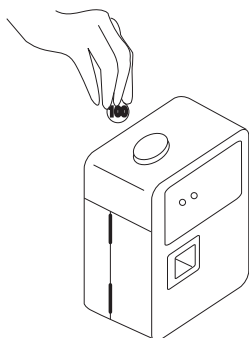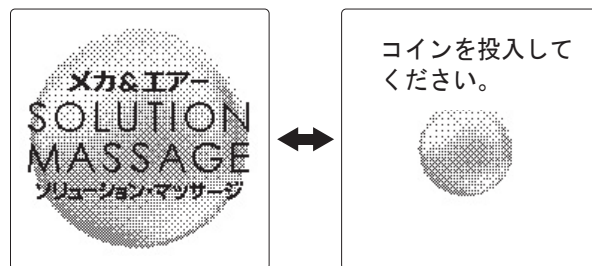- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。



## 1 コインタイマーにお金を入れます。

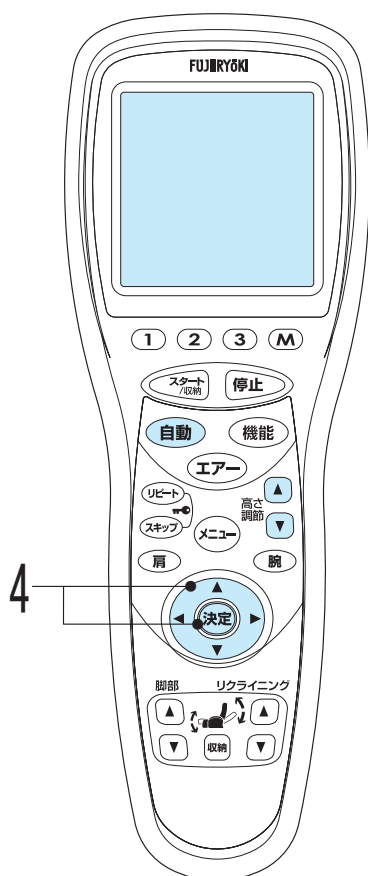
- 全身コースの「疲労回復」が表示され、自動コースがスタートするとともに体形検出動作が始まります。




## 2 体形検出中は、検出ポイントが点灯し、検出インジケータで検出レベルを表示します。


- ※人が座っていない時や、体形検出できなかった時は「体形検出ができませんでした。」が表示されますのでもう一度 **自動** を押して体形検出を行ってください。

## 3 体形検出後につづいて所定の肩位置に移動します。

## 4 所定の肩位置が合わないときは、お好みの肩位置に合わせて微調節できます。「ピッ、ピッ…」のブザーが鳴っている間に、 を押して調節し、**決定** を押す。



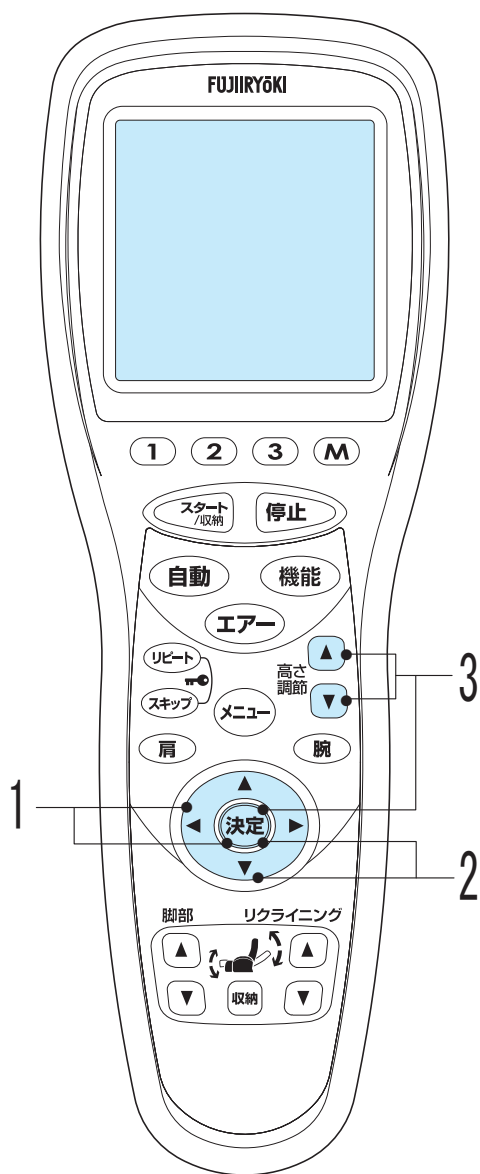
- このとき、 でもみ玉の前後位置も調節できます。自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作時に調節した位置でマッサージします。（「全身」と「首・肩」の「疲労回復」コース時のみ有効）
- 肩位置の微調節は高さ調節の   でも調節できます。



## 1 メカ（もみ玉）によるマッサージの強さを調節したいとき

◀▶⬆️⬆️⬆️▶ を押して調節し、**決定** を押す。

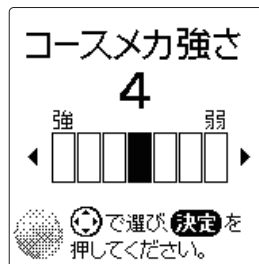- メカ（もみ玉）によるマッサージの強さは7段階に調節できます。
- 最初は強さ「4」に設定されています。



## 2 エアーによるマッサージの強さを調節したいとき

◀▶⬆️⬆️⬆️▶ を押して調節し、**決定** を押す。

- エアーの強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 肩/腕のエアーマッサージの強さを調節したいときはP24を参照してください。



## 3 肩位置・もみ玉位置を調節したいとき

高さ調節の ▲ ▼ を押して調節し、**決定** を押す。

- 肩位置の調節は高さ調節の ▲ ▼ を一度押した後、

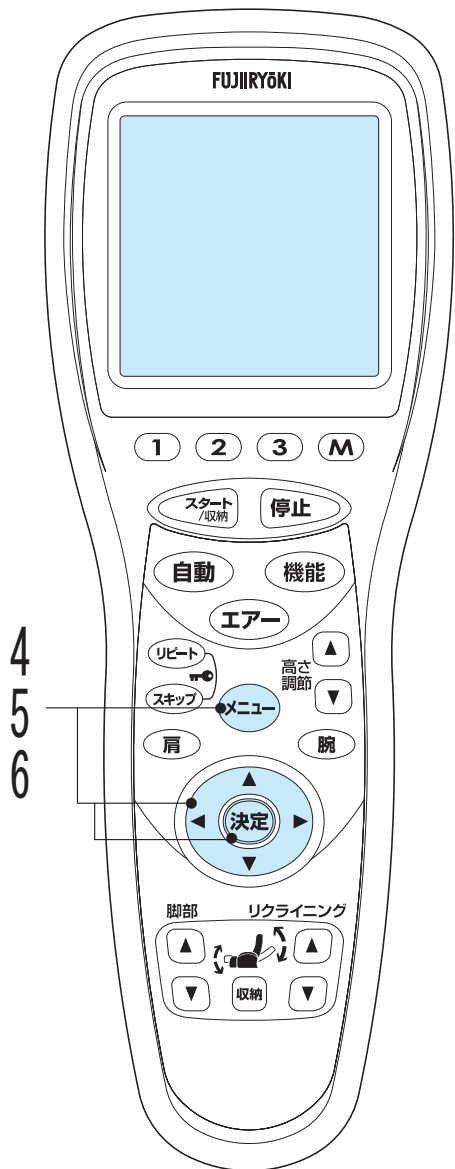
◀▶⬆️⬆️⬆️▶ でも調節できます。

このとき、◀▶⬆️⬆️⬆️▶ でもみ玉の前後位置も調節できます。

自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作時に調節した位置でマッサージします。（「全身」と「首・肩」の「疲労回復」コース時のみ有効）



# 自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた



## 4 「パルス」を入/切したいとき

メニューを押してで「パルス」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- 最初は「ON」に設定されています。
- 選択されている部分は反転表示されます。



## 5 「脚同時」を入/切したいとき

メニューを押してで「脚同時」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- 脚同時とフットストレッチは同時に使用できません。
- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚エア-「OFF」のとき、脚同時を「ON」にすると、脚エア-も「ON」になります。

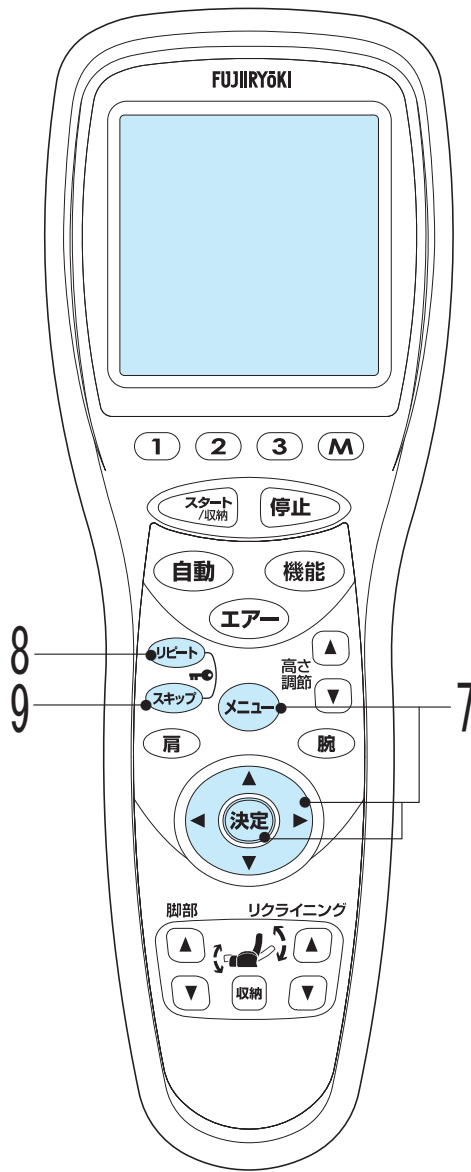


## 6 「フットストレッチ」を入/切したいとき

メニューを押してで「フットストレッチ」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- フットストレッチと脚同時は同時に使用できません。
- 最初は「ON」に設定されています。
- 脚エア-「OFF」のとき、フットストレッチを「ON」にすると、脚エア-も「ON」になります。





## 7 「脚エア」を入/切したいとき

メニューを押して、方向キーで「脚エア」に合わせ、方向キーで「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

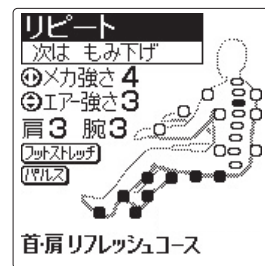
- 最初は「ON」に設定されています。
- 脚エア、脚同時が「ON」のとき、脚エアを「OFF」にすると、脚同時も「OFF」になります。
- 脚エア、フットストレッチが「ON」のとき、脚エアを「OFF」にすると、フットストレッチも「OFF」になります。



## 8 現在行っているマッサージをもう一度したいとき

リピートを押す。


- 現在行っているマッサージを再度約30秒間続けて行うことができます。
- ※エアーマッサージはリピートできません。
- ※リピート中に再度リピートを押すと、さらに約30秒間続けてマッサージを行います。
- ※リピート中にスキップを押すとリピートは解除されます。



## 9 現在行っているマッサージから次に進みたいとき


スキップを押す。

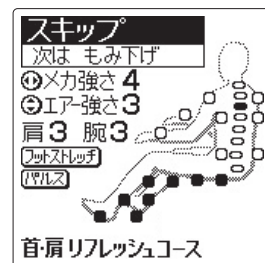- 現在行っているマッサージを中止し、次のマッサージ、部位に移ることができます。
- ※エアーマッサージはスキップできません。




# 自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた
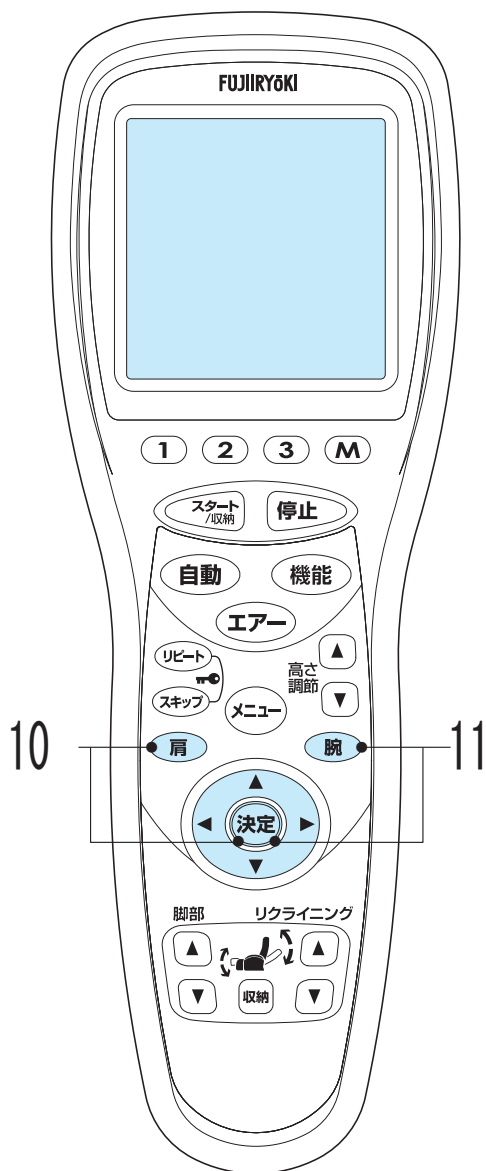
## 10 肩のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき




● **肩** を一度押してから ● **肩** を繰り返し押すと調節できます。● **決定** を押し、決定します。

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は ● **肩** を一度押した後、でも調節できます。


※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアも膨らみます。  
 ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなる場合があります。

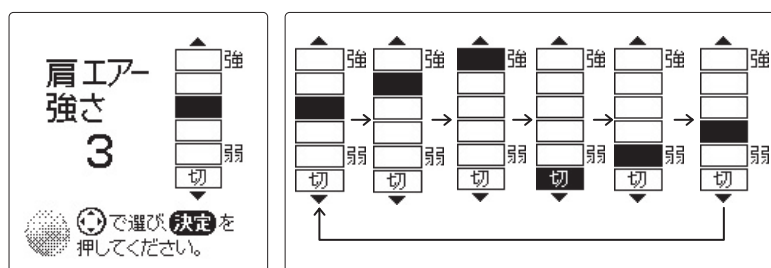※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装はおさげください。




## 11 腕のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき

● **腕** を一度押してから ● **腕** を繰り返し押すと調節できます。● **決定** を押し、決定します。

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は ● **腕** を一度押した後、でも調節できます。

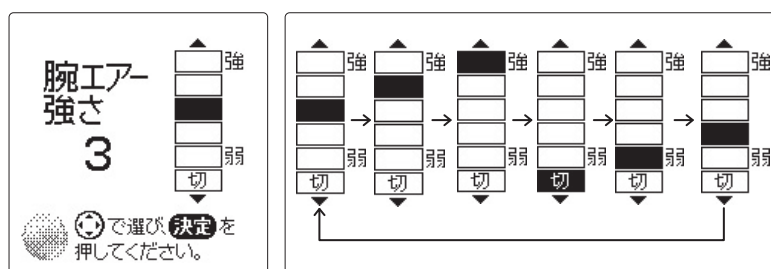※腕のエアーマッサージをするときは、時計、装飾品などの硬いものを装着したまま使用しないでください。

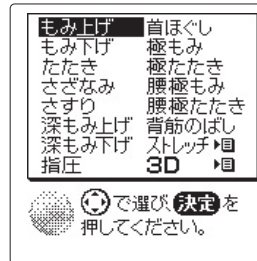





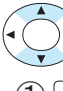
# メカ（もみ玉）によるマッサージ機能の使い方




- 1 **機能** を押す。  または **機能** でお好みの機能を選択し、 **決定** を押す。

※ **決定** を押さなくても5秒後にはスタートします。  
(以後も全て同じ。)





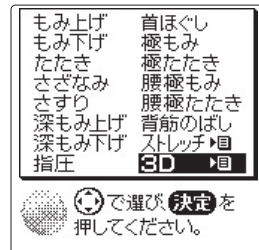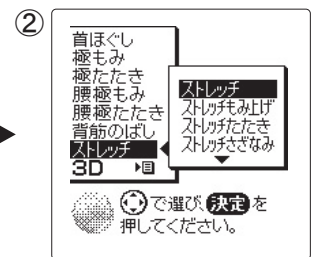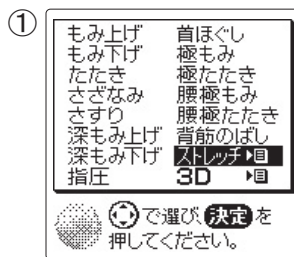
- 「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は

- ① 「ストレッチ」または「3D」を選択し、
- ②  または **決定** を押し、詳細画面を表示させ、  
 または **機能** でお好みの機能を選択し、 **決定** を押す。



- 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ有効です。

-  または高さ調節の  で肩位置の調節、  
 でもみ玉の前後位置を調節します。



- 2 選択した機能を開始します。




- 「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「さすり」「深もみ上げ」「深もみ下げ」「指圧」「ストレッチ」「3D」を選ぶと「背筋のばし」と複合動作になります。

# メカ（もみ玉）によるマッサージ機能動作中の調節のしかた




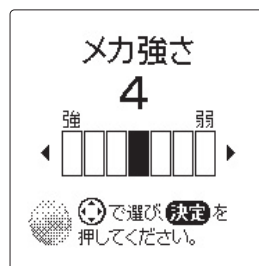
## 1 メカ（もみ玉）によるマッサージの強さを調節したいとき


 を押して調節し、 を押す。

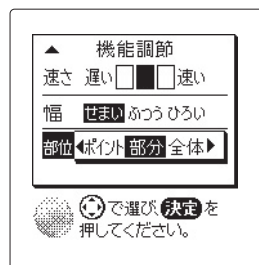- メカ（もみ玉）によるマッサージの強さは7段階に調節できます。
- 最初は強さ「4」に設定されています。
- 「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「指圧」「背筋のばし」「ストレッチ」動作時のみ設定できます。







## 2 マッサージ部位（ポイント/全体/部分）を選択したいとき

 を押して  で「部位」に合わせ、  
 で「ポイント/部分/全体」を選択し、  
 を押す。

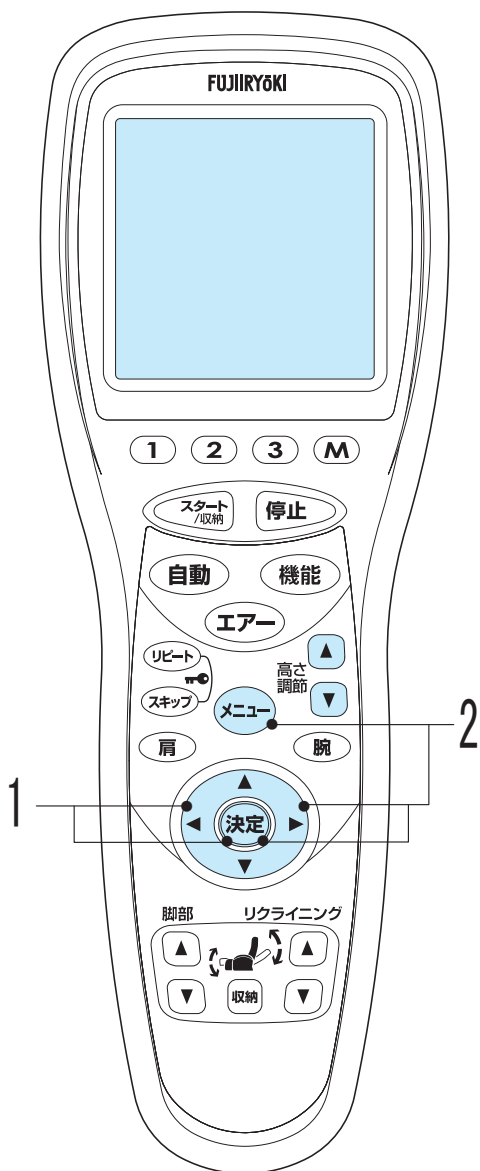


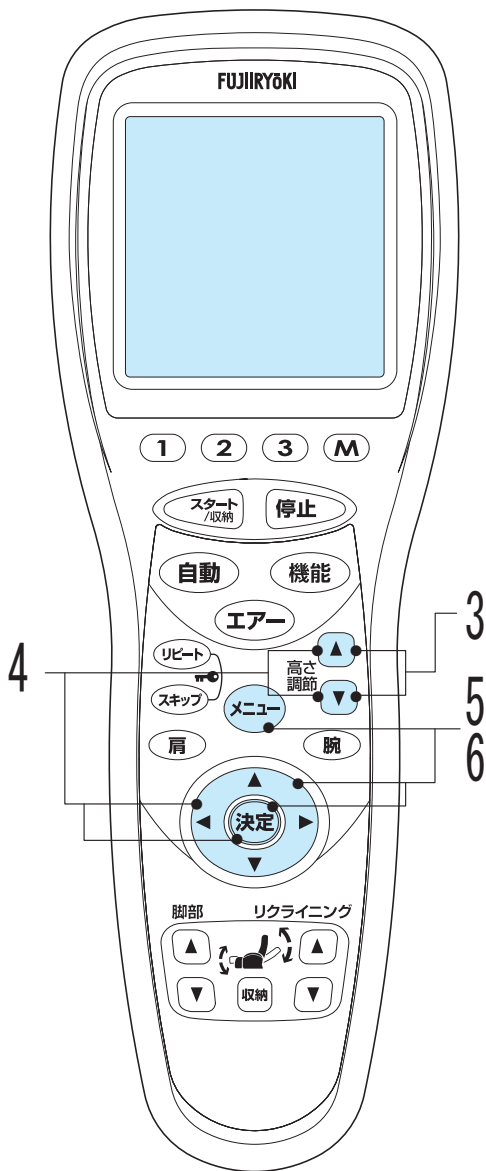
- 「全体」を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ有効です。

 または高さ調節の   で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。



※すでに「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」でマッサージを行っていた場合は、肩位置設定を行っていませんので、設定をする必要はありません。





### 3 マッサージ部位（ポイント/部分）の高さを調節したいとき

高さ調節の ▲ ▼ を押して調節します。

- マッサージ部位が「ポイント」または「部分」でご使用のとき、調節できます。

### 4 首ほぐし/極もみ/極たたきの肩、前後位置を調節したいとき

高さ調節の ▲ ▼ を一度押すと調節画面が表示されます。

◀▶ または高さ調節の ▲ ▼ で肩位置の調節、◀▶でもみ玉の前後位置を調節します。



### 5 メカ（もみ玉）によるマッサージの速さを調節したいとき

メニューを押して◀▶で「速さ」に合わせ、◀▶で「遅い/速い」を選択し決定を押す。

- ※ 「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「さすり」「深もみ上げ」「深もみ下げ」「ストレッチもみ上げ」「ストレッチたたき」「ストレッチさざなみ」動作時のみ設定できます。



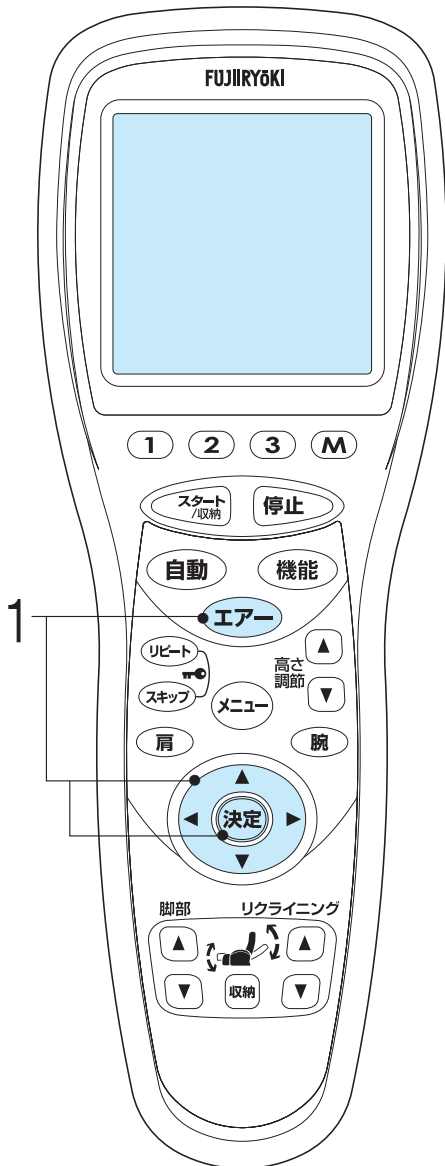
### 6 メカ（もみ玉）によるマッサージの幅を調節したいとき

メニューを押して◀▶で「幅」に合わせ、◀▶で「せまい/ふつう/ひろい」を選択し、決定を押す。

- ※ 「たたき」「指圧」「背筋のぼし」「ストレッチ」「3Dたたき」「ストレッチたたき」動作時のみ設定できます。




# エアーによるマッサージ機能の使い方



1 **エアー** を押します。 または **エアー** で  
お好みの機能を選択し、 で「ON/OFF」  
を選択し、**決定** を押す。


※ **決定** を押さなくても5秒後にはスタートします。  
(以後も全て同じ。)

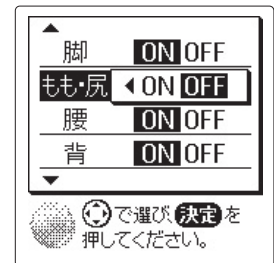- 最初はすべて「ON」に設定されています。




もも・尻を選んでOFFにした例

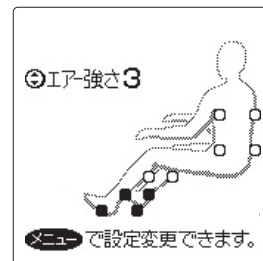2 選択した機能を開始します。



# エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた

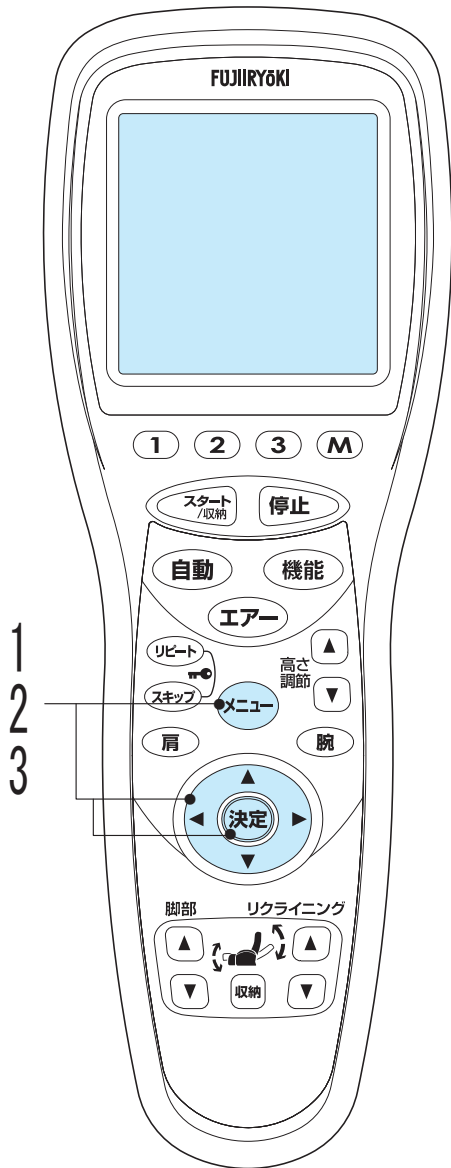

## 1 「パルス」を入/切したいとき

メニューを押してで「パルス」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- 最初は「OFF」に設定されています。



## 2 「脚同時」を入/切したいとき

メニューを押してで「脚同時」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚同時とフットストレッチは同時に使用できません。
- 脚のエアーマッサージをしていないときに「脚同時」を「ON」にすると、脚のエアーマッサージを行います。



## 3 「フットストレッチ」を入/切したいとき

メニューを押してで「フットストレッチ」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、決定を押す。

- 最初は「OFF」に設定されています。
- フットストレッチと脚同時は同時に使用できません。
- 脚のエアーマッサージをしていないときに「フットストレッチ」を「ON」にすると、脚のエアーマッサージを行います。






# 肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方

## 肩のエアーマッサージをしたいとき

- 1 **肩** を一度押してから **肩** を繰り返し押すと選択、強さの調節ができます。  
**決定** を押し、決定します。

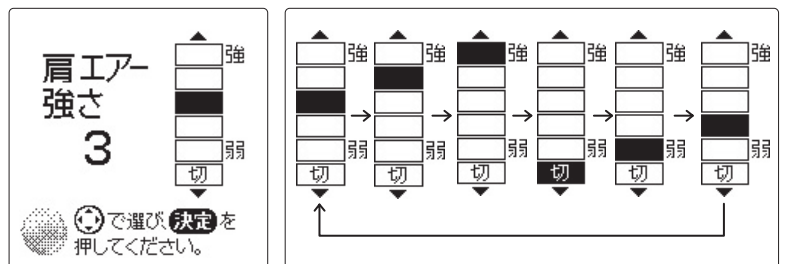
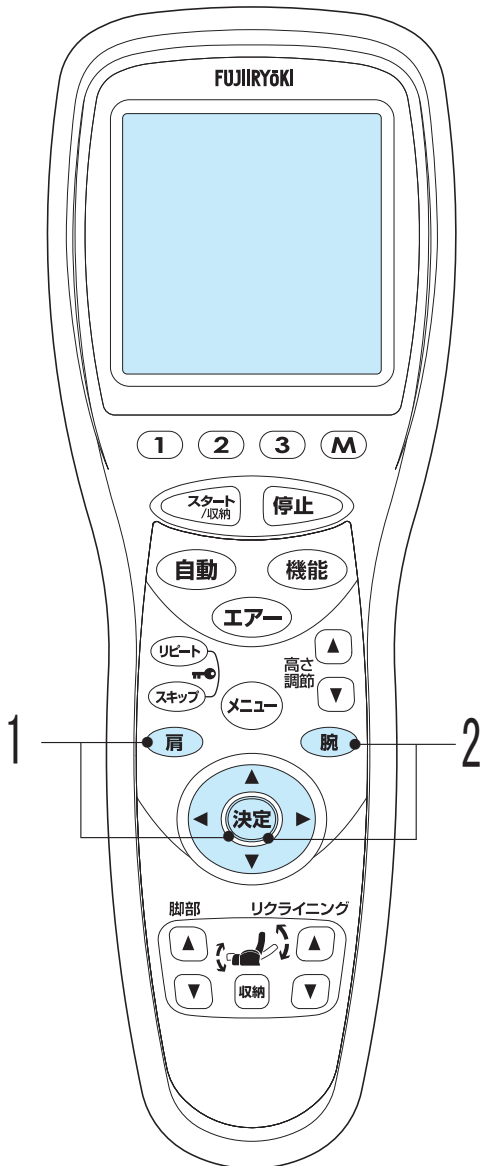
※ **決定** を押さなくても5秒後にはスタートします。  
(以後も全て同じ。)

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は **肩** を一度押した後、 でも調節できます。

※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。


※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなる場合があります。

※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は  
おさげください。




## 2 腕のエアーマッサージをしたいとき

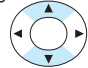- 2 **腕** を一度押してから **腕** を繰り返し押すと選択、強さの調節ができます。  
**決定** を押し、決定します。

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は **腕** を一度押した後、 でも調節できます。

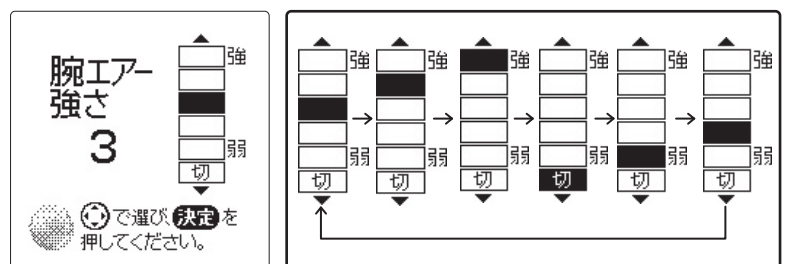
※腕のエアーマッサージをするときは、時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しないでください。



# メカ（もみ玉）とエアーの複合マッサージのしかた つづく

メカ（もみ玉）によるマッサージ機能動作中にエアーによるマッサージを複合したいとき

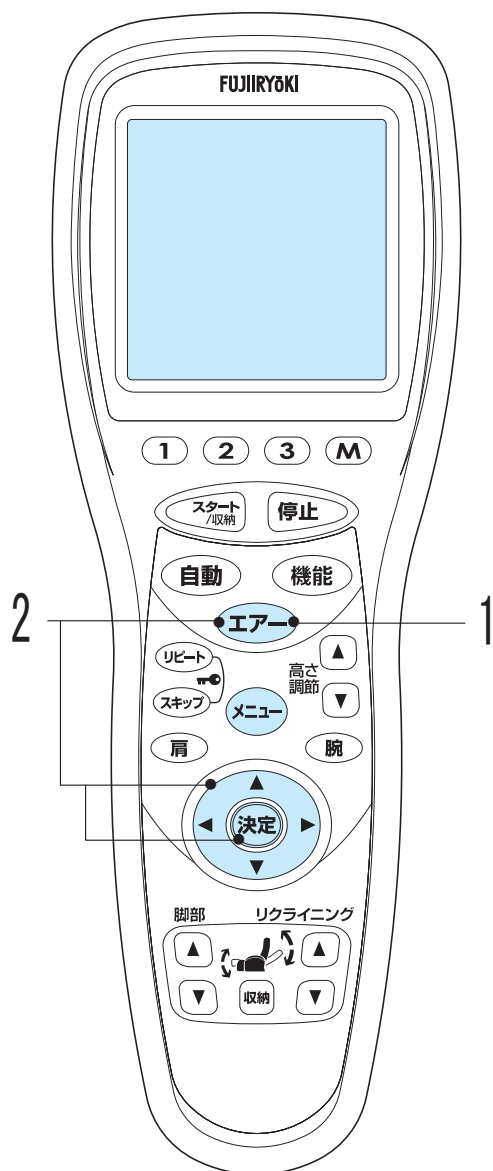脚/もも・尻/腰/背のエアーマッサージを複合する場合



## 1 エアー を押す。

- 機能の一覧が表示されます。



## 2 または エアー で好みの機能を選択し、決定を押す。

- 最初はすべて「ON」に設定されています。



もも・尻を選んでOFFにした例

## 3 選択した機能を開始します。



- マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節のしかたを参照ください。

メカ（もみ玉）によるマッサージ機能動作中の調節のしかた（P20参照）

エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた（P23参照）

※ 複合マッサージ中に **メニュー** を押して、機能の調節を行うときの表示は右のようになります。



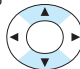
# メカ（もみ玉）とエアーの複合マッサージのしかた

メカ（もみ玉）/エアーによるマッサージ機能動作中に  
肩/腕のエアーマッサージを複合したいとき

## 肩のエアーマッサージを複合する場合

1 **肩** を一度押してから **肩** を繰り返し  
押すと選択、強さの調節ができます。



**決定** を押し、決定します。

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は **肩** を一度押した後、 でも調節  
できます。

※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。

※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサー  
ジが強くなることがあります。

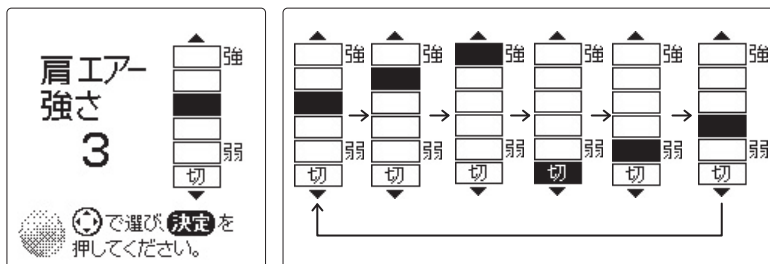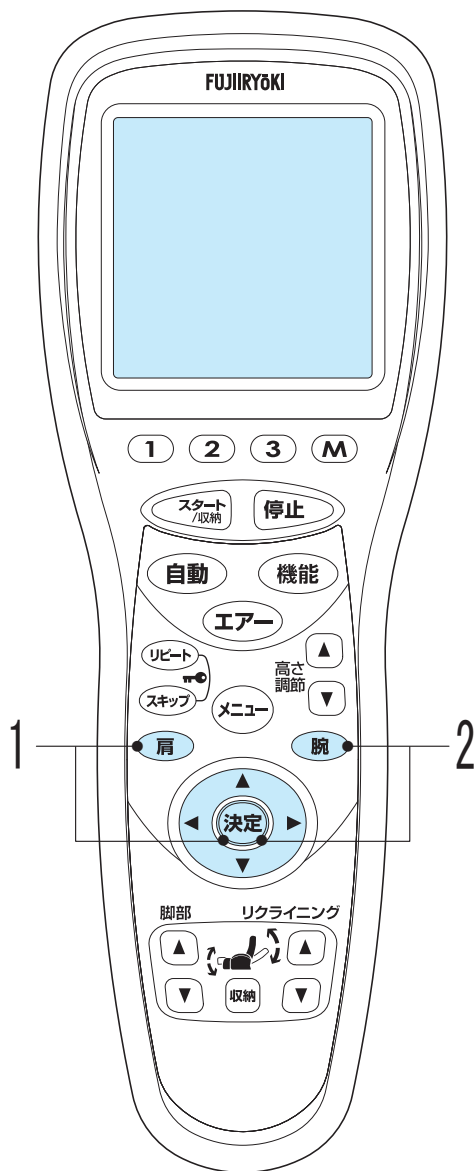
※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は  
おさげください。




## 腕のエアーマッサージを複合する場合

2 **腕** を一度押してから **腕** を繰り返し  
押すと選択、強さの調節ができます。


**決定** を押し、決定します。

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 強さの調節は **腕** を一度押した後、 でも調節  
できます。

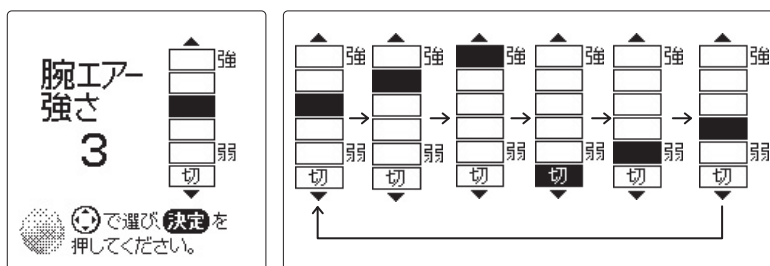※腕のエアーマッサージをするときは、時計・装飾品など  
の硬いものを装着したまま使用しないでください。



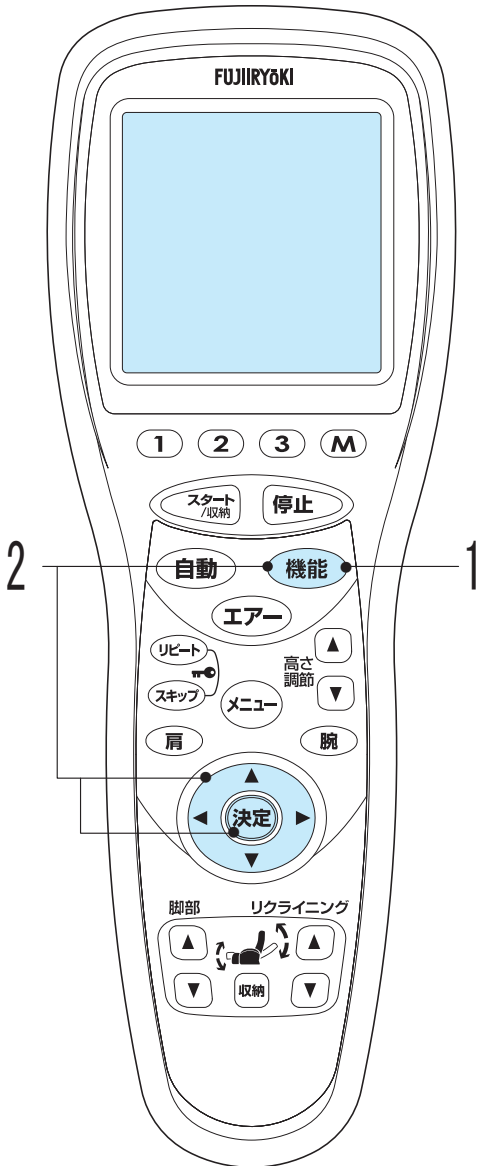エアーによるマッサージ機能動作中に  
メカ（もみ玉）によるマッサージを複合したいとき






1 機能 を押す。

- 機能の一覧が表示されます。



2 または 機能 で好みの機能を選択し、決定 を押す。

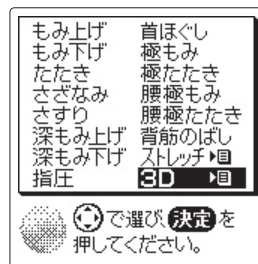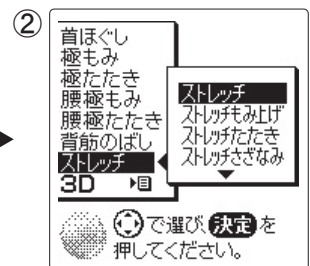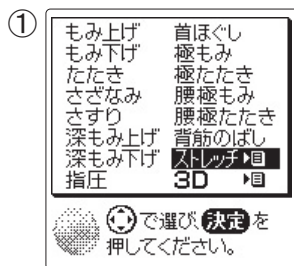- 「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は
  - 「ストレッチ」または「3D」を選択し、
  - または 決定 を押し、詳細画面を表示させ、
    - または 機能 で好みの機能を選択し、決定 を押す。




次ページへ つづく

# メカ（もみ玉）とエアーの複合マッサージのしかた



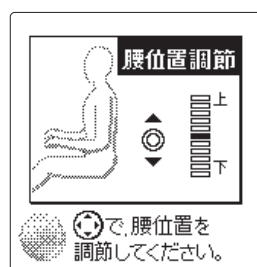
- 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のぼし」を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ有効です。


 または高さ調節の   で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。



- 「背筋のぼし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「さすり」「深もみ上げ」「深もみ下げ」「指圧」「ストレッチ」「3D」を選ぶと「背筋のぼし」と複合動作になります。

## 3 選択した機能を開始します。

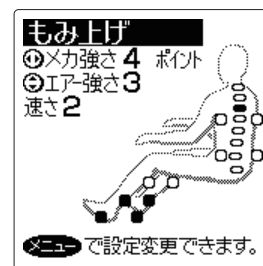

※ 複合マッサージ中に  を押して、機能の調節を行うときの表示は下のようになります。

機能・エアーオプション	
速さ	遅い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 速い
幅	せまい <input checked="" type="checkbox"/> ひろい
部位	ポイント 部分 全体
パルス	ON OFF
脚同時	ON OFF
フットストレッチ	ON OFF




# 途中でマッサージを変更するときは

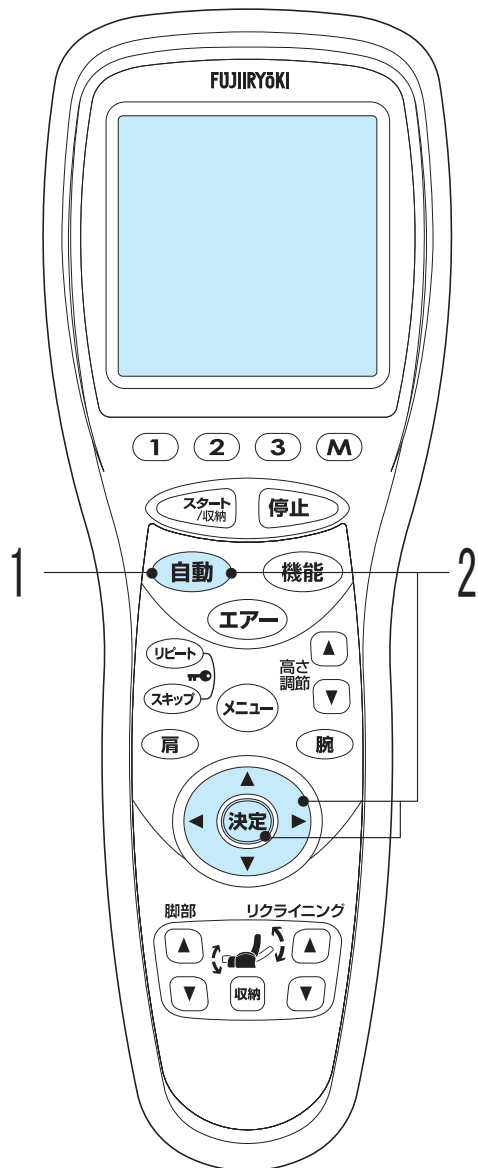つづく

- 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、ほかの動作に切り替えられます。

自動コース ▶ ほかの自動コースへの変更

自動コース以外のマッサージ ▶ 自動コースへの変更



1 **自動** を押す。

- 自動コースの一覧が表示されます。



2  または **自動** で好みのコースを選択し、**決定** を押す。



# 途中でマッサージを変更するときは

- 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、ほかの動作に切り替えられます。

クイックモード ▶ ほかのクイックモードへの変更

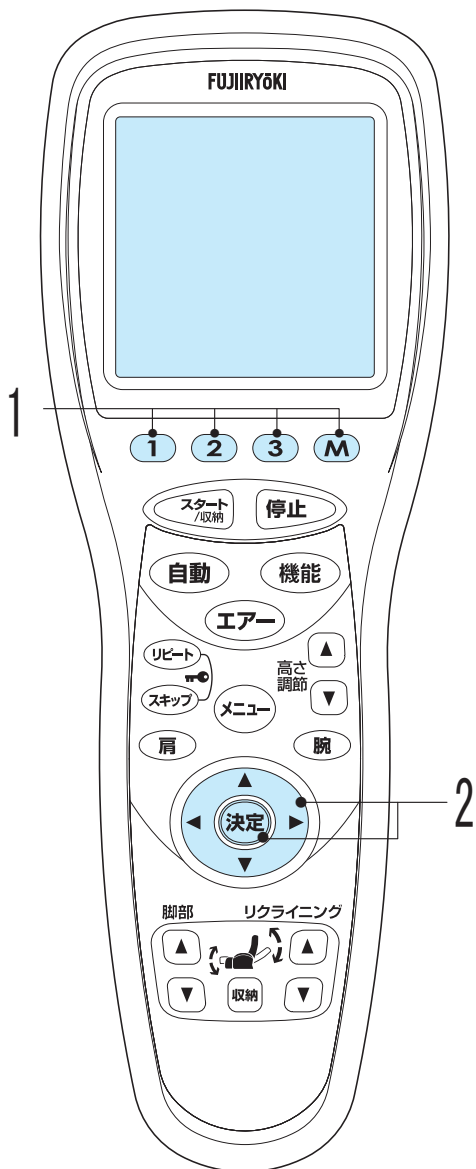
クイックモード以外のマッサージ ▶ クイックモード

1 ① ② ③ M のいずれかを押す。

- 自動コースの一覧が表示されます。



2 方向キーでお好みのコースを選択し、決定を押す。




- 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、ほかの動作に切り替えられます。

メカ（もみ玉）によるマッサージ ▶ ほかのメカ（もみ玉）によるマッサージへの変更


自動コース ▶ メカ（もみ玉）によるマッサージへの変更

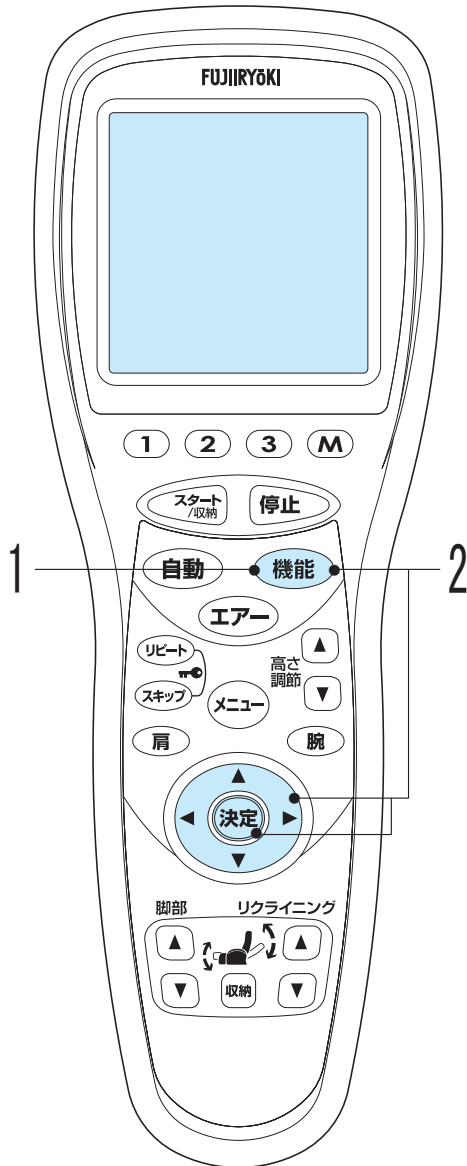クイックモード ▶ メカ（もみ玉）によるマッサージへの変更




## 1 機能 を押す。

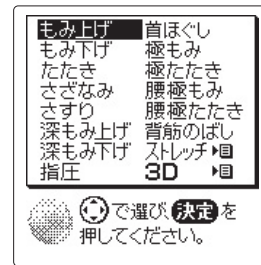- 機能の一覧が表示されます。



## 2 方向キー または 機能 でお好みの機能を選択し、決定 を押す。

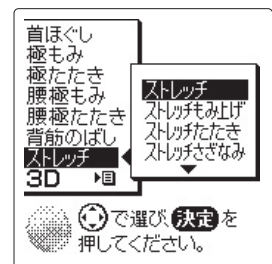- 詳細はメカ（もみ玉）によるマッサージ機能の使い方（P19参照）を確認ください。




# 途中でマッサージを変更するときは

- 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、ほかの動作に切り替えられます。

エアーによるマッサージ ▶ ほかのエアーによるマッサージへの変更

自動コース ▶ エアーによるマッサージへの変更

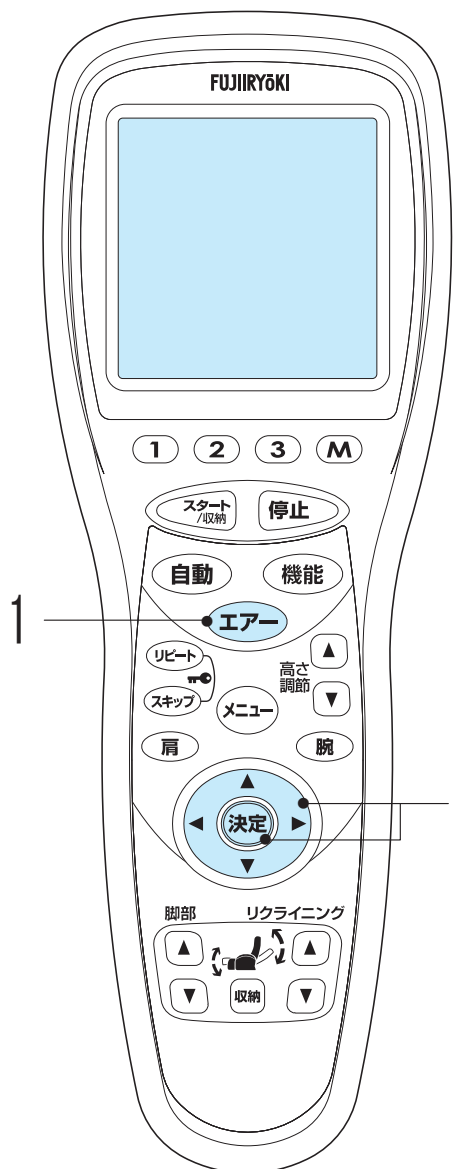

クイックモード ▶ エアーによるマッサージへの変更




1 **エアー** を押す。

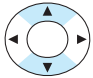- 機能の一覧が表示されます。



2  でお好みの機能を選択し、 で「ON/OFF」を選択し、**決定** を押す。

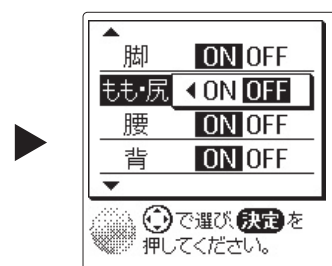- 最初はすべて「ON」に設定されています。




# お手入れと保管のしかた

本体：張地・背パット・パット・枕・座パット（PVCレザー）

**お願い** レザー部分のお手入れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふいて自然乾燥させてください。（使い過ぎるとレザー地をいためることがあります。）  
塗装部分は乾いた布でふいてください。

**お願い** 機器は清潔にし、温度・湿気・ほこりなどの悪影響が少ない所に保管してください。

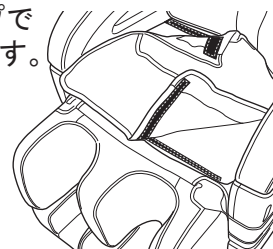※座パットはマジックテープで座部に取り付けられています。取り外すときは、マジックテープ部分を外してください。



## ⚠ 注意

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。また、濡れた手で抜き差ししないこと。  
感電やケガをすることがあります。



## ⚠ 注意

ベンジン、シンナー、アルコールでふいたり、殺虫剤をかけないこと。感電・引火の原因になります。



## 本体

プラスチック、パイプ、肘掛部の汚れは中性洗剤を浸し、固く絞った布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。  
※塗装部分は乾いた布でふいてください。

## 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、その他の溶剤やみがき粉などは使用しないでください。  
キズ、変色、ひび割れの原因になります。



## リモコン

リモコンの汚れは、乾いた布でふき取ってください。

## 注意

絶対に濡れたタオルなどでふかないでください。  
故障の原因になります。



## 背パット・パット・枕・座パット その他布地

汚れが付いたときは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふいて自然乾燥させてください。

## 注意

アイロンがけはしないでください。



## 保管のしかた

汚れやホコリを取った後、湿気の少ない所に保管してください。

長い間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリが付かないようにしてください。

## 注意

直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの近くの高温になる所には保管しないでください。  
変色・変質の原因になります。





# 故障かなと思ったら

## 警告

絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



ご使用中に下記のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではなく寿命などに影響はありません。

- もみ玉上下移動時のカタカタ音
- マッサージ作動時のギア・モーターの音
- もみ玉と布のすれる音（特に、もみ動作時）
- たたき、さざなみ動作時のガタガタ音（特に肩から背中への移動時）
- もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方によっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります。
- 「速さ」調節による音の違い
- 負荷をかけた時のモーターのうなり音
- 自動コースで使用者の体形に合わせてもみ玉を前後に自動調節している音（クックッ音）
- エアー作動時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
- エアーバッグが膨らむときに出る音
- 「肩」使用時のキシミ音
- リクライニング時の背もたれや座のこすれ音（グュー音）
- 左右のもみ玉の高さが異なる  
（交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。）

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた
作動しない	電源コードのプラグが抜けていませんか？	電源コードのプラグをコンセントに入れてください。
	肘掛部後ろの電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れてください。
動作が途中で止まる (リモコンを押しても作動しない)	背の部分が壁や障害物に当たっていませんか？	障害物に当たらないようにチェアを移動してください。 肘掛部の後ろの電源スイッチを一度「切」にし、再度「入」してください。
	無理な力がかかっていませんか？ (安全のため、もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き、全ての機能が停止します。)	一旦背もたれから体を離し、肘掛部の後ろの電源スイッチを一度「切」にし、再度「入」にし、動作スイッチを押し、もう一度初めからやり直してください。
リクライニングができない	電源コードのプラグが抜けていませんか？	電源コードのプラグをコンセントに入れてください。
	背の部分が壁や障害物に当たっていませんか？	障害物に当たらないようにチェアを移動してください。

### お願い

エラーが発生しました。



電源スイッチを「切」にし、再度「入」にし、スタートボタンを押してください。

リモコンの液晶に『エラーが発生しました。電源スイッチを「切」にし、再度「入」にし、スタートボタンを押してください』が表示された場合は、表示内容に従って、再度電源を入れなおしてください。

※上記の対応を行っても、動作を行わない場合には、本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いた上で、ご購入先もしくはフジ医療器までお申し付けください。

## 愛情点検



### 愛情点検

長年ご使用の場合は  
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご購入先、またはフジ医療器に点検・修理をご相談ください。

お願い しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

## アフターサービスについて

34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから、ご購入先にご連絡ください。

### ①保証書（別に添付してあります）

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ②保証期間中に修理を依頼される場合

この商品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。（なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。）

### ③保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

### ④その他ご不明な場合

保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、ご購入先、またはフジ医療器サービス網までお問い合わせください。

### ●補修用性能部品の保有期間

当社はこのマッサージ機の補修用性能部品を、製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


## 仕様

品名	マッサージチェア	
品番	OH-3500 (DX)	
類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器	
医療用具許可番号	27BZ0878	
定格	電源 (50-60Hz)	AC 100V
	定格時間	30分
	消費電力 (50-60Hz)	90W
メカ（もみ玉）マッサージの速さ	もみ (回転/分)	3段階調節 (約15～約35)
	たたき (回転/分)	3段階調節 (約350～約650)
メカ（もみ玉）マッサージの強さ	7段階調節	
エアーマッサージ強さ	5段階調節	
腕エアーマッサージ強さ	5段階調節	
肩エアーマッサージ強さ	5段階調節	
オートタイマー	コイントイマー設定時間	
リクライニング角度 (約)	背もたれ	120～132°
	オットマン	0～90°
寸法 (約)	リクライニングしていないとき	幅830×奥行1220×高さ1220mm
	リクライニングしたとき	幅830×奥行1700×高さ1090mm
質量 (約)	81Kg	
張地	PVCレザー	
製造元	株式会社フジ医療器 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号	
製造販売元	株式会社フジ医療器 大阪府堺市中区深井沢町284	

---

## お客様相談窓口

---

 フリーダイヤル

**0120-027612**

受付：月曜～金曜 午前10時～12時  
午後 1時～ 5 時

※但し、祝祭日、年末年始、夏期休暇は  
休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号：06-6644-9103

E-mail：fj\_soudansitu@fujiiryo.co.jp

※FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様への  
ご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2007年1月21日(第3版)



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号