

FUJIIRYŌKI

ほし美人

マッサージチェア

品番：PC-1000



使用目的・効能または、効果

〔あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用する〕

家庭用

取扱説明書

添付文書

医療機器認証番号：221AGBZX00076000
類別：機械器具 77 バイブレーター
管理医療機器 一般名称：家庭用電気マッサージ器

もくじ

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために…………… 2

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき…………… 7

ご使用前の準備

製品特長…………… 9

設置について…………… 10

設置の仕方…………… 10

組み立て方…………… 10

インナーパッドのはずし方…………… 10

リクライニング…………… 11

アースについて…………… 11

チャイルドロックについて…………… 11

使い方

ご使用の手順…………… 12

お手入れ・保管

お手入れについて…………… 16

保管について…………… 16

移動させるには…………… 16

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら…………… 17

仕様

仕様…………… 18



修理・サービスと保証…………… 裏表紙

- このたびは当社のマッサージチェアPC-1000をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に安全上のご注意（2～6ページ）はご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・ご購入先名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いいたします。

安全上のご注意




■製品を安全にお使いいただくために

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が傷害を負うことが想定されるか、または *物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

〈絵表示の例〉




	△記号は、 警告・注意 を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は一般的な警告・注意)
	⊘記号は、 禁止 の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を 強制 したり 指示 したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

お願い




- 機器本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、地方自治体にお問い合わせください。


警告


	<p>次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 医師からマッサージを禁じられている人 (例：血栓〔そく(塞)栓〕症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
	<p>次の人は、使用前に医師に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中の人または、出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人 (例：急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。衰弱している時。) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性〔とう(疼)痛性〕疾患の人 ● 背骨(脊椎)に異常のある人または、背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 <p>動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼する。感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> <p>使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。 (どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> <p>使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは、直ちに使用を中止する。</p> <p>首周辺をマッサージをするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強いマッサージをしない。事故やけがのおそれがあります。</p> <p>リクライニングをするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。 事故やけがのおそれがあります。</p> <p>リクライニングをするときは、背もたれ部と座部・ひじ掛け部との間に手や腕・足・頭をはさまないようにする。けがのおそれがあります。</p>
	<p>交流100V以外は使用しない。火災や感電の原因になります。</p> <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電、ショート、発火の原因になります。</p> <p>電源コードを傷めない。 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、特に移動中ははさみ込みたりしない。電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>

安全上のご注意



警告

	<p>子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させない。 また、幼児を近づけない。感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>背もたれ部や肘掛部に乗らない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体の上に立って使用しない。転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体とモミボードおよび足裏たたき部のすき間に手や足などを入れない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、ご購入先または「お客様相談窓口」に修理を依頼する。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電、火災、故障、カビの原因になります。</p>
	<p>絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。 発火や、異常動作によるけがのおそれがあります。</p>

注意




	<p>使用時間は1回15分以内に。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。 長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 <お願い> 1日の使用は30分以内にしてください。</p>
	<p>健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。 (1) 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人 (2) 骨や内臓に起因する腰痛の人 (3) 打ち身やねんざしやすい人 (4) 乗り物酔いの激しい人 (5) 過去に心臓や内臓の手術をされた人 守らないと健康をそこなうおそれがあります。</p>
	<p>使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談する。</p>
	<p>本器の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。</p>
	<p>ご使用後は電源スイッチをOFFにする。 子供のいたずらなどによる事故の原因になります。</p>
	<p>水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。</p>

⚠ 注意

	<p>停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故の原因になります</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートによる発火のおそれがあります。</p>
	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしない。 感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本器を使用しながら他の治療器を同時に使用しない。</p>
	<p>使用中は眠らない。無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。</p>
	<p>マッサージの目的以外には使用しない。故障や事故の原因になります。</p>
	<p>電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させない。 感電やショート、発火の原因になります</p>
	<p>脚に装飾品をつけて使用しない。</p>
	<p>脚を本体部に入れたまま立ち上がらない。</p>
	<p>本器が動作中に脚を入れたり、抜いたりしない。</p>
	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 またホットカーペット等の暖房器具の上で使わない。 火災の原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。</p>
	<p>生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。 故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>布カバーが破れた状態では使用しない。けがの原因になります。</p>
	<p>ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない。 感電や引火の原因になります。</p>
	<p>木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずっての移動をしない。 床面に傷がつきます。</p>
	<p>本器を倒したり、強い衝撃を与えない。故障やけがのおそれがあります。</p>
	<p>食後すぐに使用しない。気分が悪くなることがあります。</p>
<p>飲酒後の使用はしない。事故やけがのおそれがあります。</p>	

安全上のご注意

注意


	人や物を乗せて移動しない。故障やけがのおそれがあります。
	本器に2人以上乗らない。故障やけがのおそれがあります。
	素肌で使用しない。素肌への直接のマッサージは皮膚を傷めることがあります。
	手、ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。体調不良やけがのおそれがあります。
	頭部に髪飾りなどの固いものをつけて使用しない。けがのおそれがあります。
	椅子の下側に手や頭などを入れない。事故やけがのおそれがあります。
	操作スイッチ、タイマーなどが正常に動作することを確認する。事故やけがのおそれがあります。
	しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。
	持ち運ぶときは、本体の指定された箇所を両手で持って運ぶ。また、角度調節レバーは必ずロックする。守らないと落下により、故障やけがのおそれがあります。
	使用しても効果が現れない場合、医師または、専門家に相談する。
	リモコンコードに足を引っ掛けないように気をつける。けがのおそれがあります。
	もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座る。事故やけがのおそれがあります。
	本体移動後は静かに設置する。傷の原因になります。
	アースを確実に取り付ける。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。また、アースの取付けはご購入先にご相談ください。

各部のなまえとはたらき


■各部のなまえとはたらき

マッサージチェア

本 体

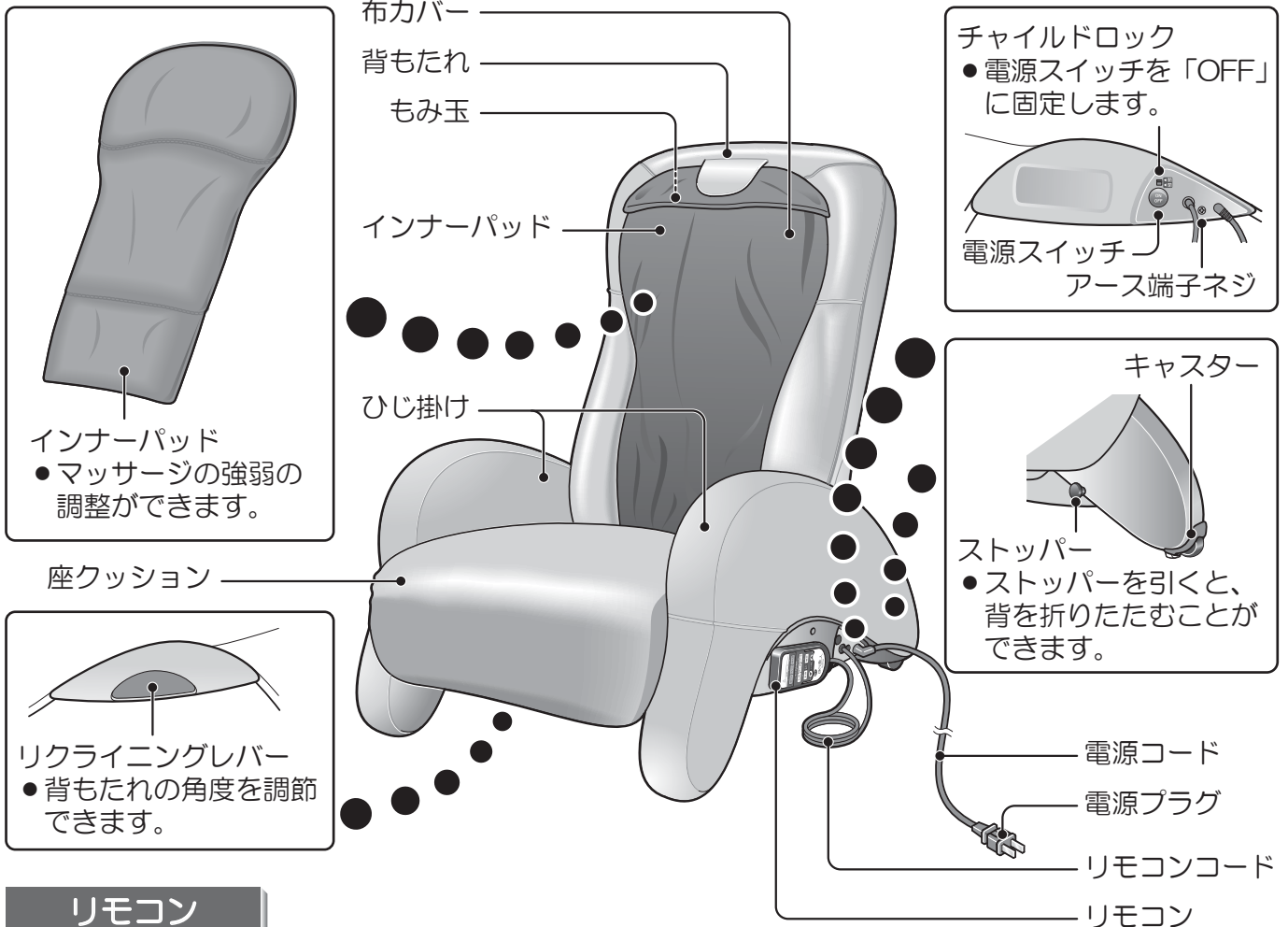


リモコン

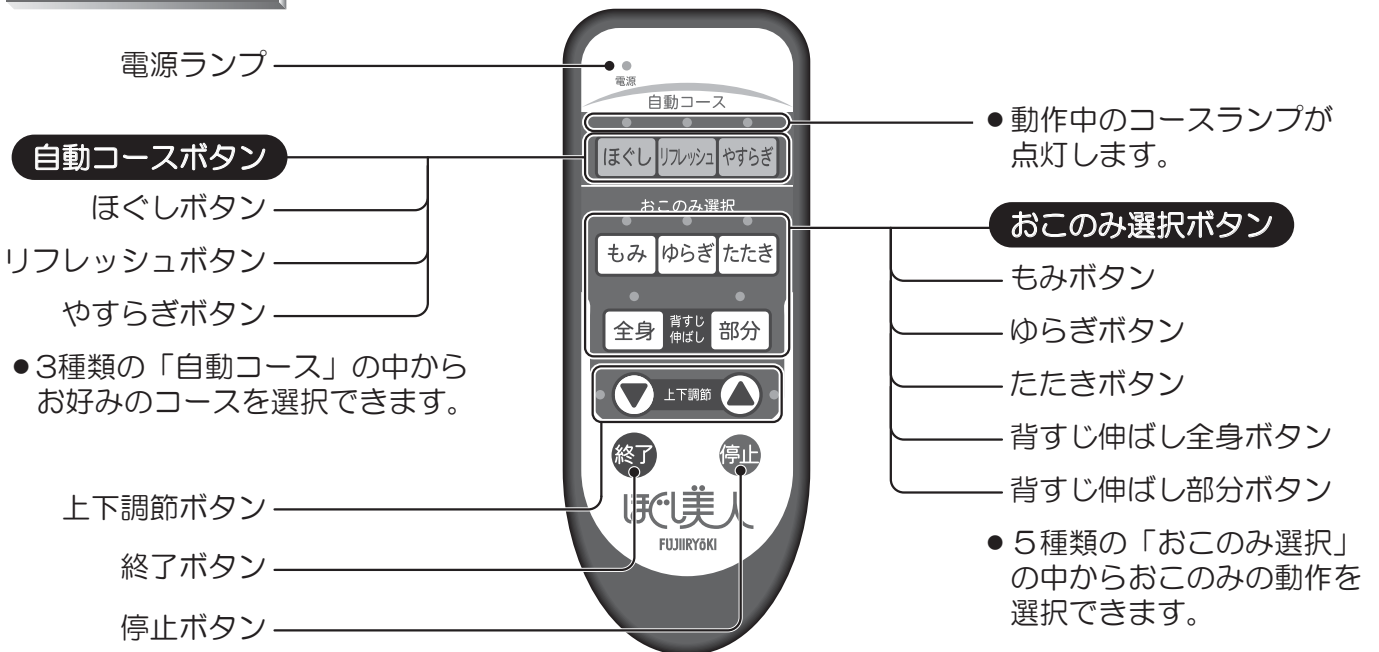


各部のなまえとはたらき

脚部オットマン

本 体

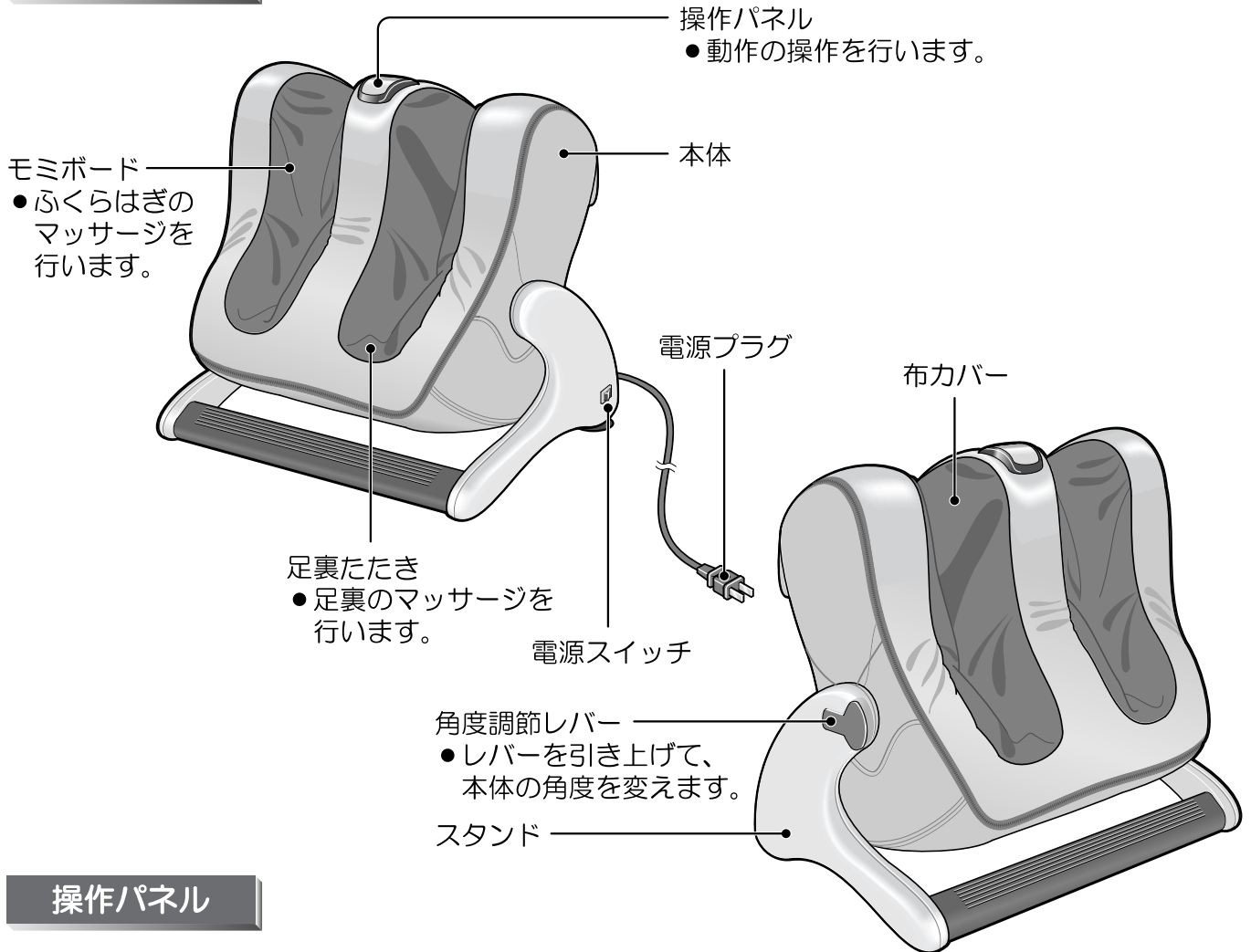

操作パネル

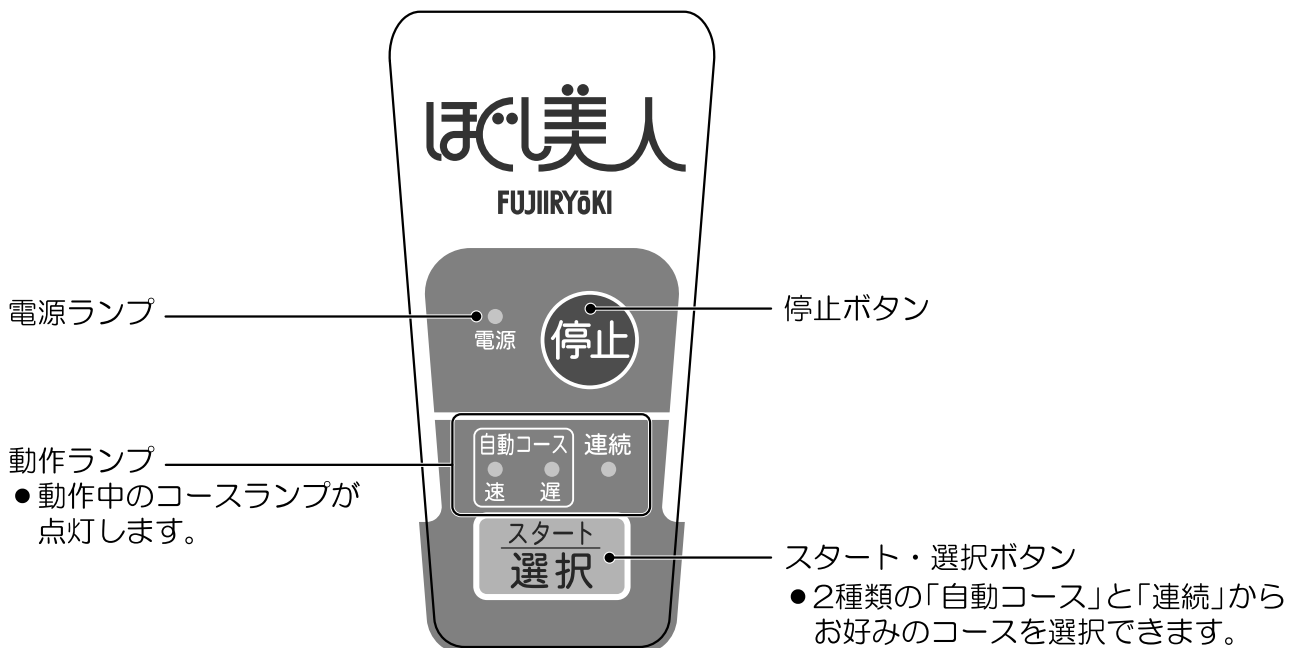

ご使用前の準備

つづく

⚠ ご使用の前に

- 背もたれ部の布地や布カバーが破れたり、はずれていないか確認してください。
- 電源コードが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

⚠ 警告



交流100V以外は使用しない。
電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電、ショート、発火の原因になります。

■ 製品特長

マッサージチェア

● 無段階リクライニング

リクライニング角度は床面に対して、約112°から約148°の間で無段階に調節できます。

● リモコン

大きな文字と大きなボタンで簡単操作。お好みの姿勢で操作できます。

● 多彩なマッサージ

「もみ」、「ゆらぎ」、「たたき」、「背すじ伸ばし」動作の組み合わせで、多彩なマッサージを行います。

● らくらく移動

背もたれ側のキャスターで、簡単に移動させることができます。

● もみ玉メカ

癒しを追求した独自の4つ玉メカで、しっかりほぐしながらリラックス。

● 座椅子タイプのコンパクトデザイン

和室や洋室リビングなど、どんな部屋にもマッチするスタイリッシュなデザイン。

● 強弱調整インナーパッド

背中ファスナーを外してインナーパッドを出し入れすることで、マッサージの強弱が調整できます。

● 安全設計

使いすぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分でもみ玉が最上部へ移動して自動的に止まります。

脚部オットマン

● 3種類のコース

2種類の自動コースと連続コースが、じっくり、しっかりマッサージします。

● 足先からふくらはぎまでリフレッシュ

ふくらはぎから足はもみマッサージ、足裏と土踏まずはたたきマッサージします。

● 角度調節

椅子の高さに合わせて本体の角度を調節できます。また、本体を反転させることで、脚おき台として使用できます。

ご使用前の準備

■設置について

- 本体は凹凸のない平らなところに設置してください。


※お願い

たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。
(マットはすべらない物をご使用ください。)

■設置の仕方

マッサージチェア

- 本体の周囲にすきまをあけてください。
- 背もたれの後に50cm以上のすき間をあけてください。

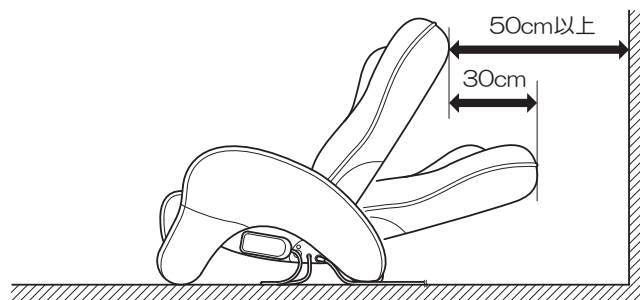

⚠ 設置できない場所


次の場所には設置しないでください

- 浴室など湿気の多い場所
- ホットカーペットの上
- 暖房器具のそば
- 布団の中
- 直射日光の当たる場所 (変色する場合があります)

■組み立て方

マッサージチェア

- 背もたれを起し、リモコンをひじ掛けのリモコン受け部にセットしてください。(マグネットの力でくっきます。)
- 背もたれを起こした後、背下カバーを座の下に面ファスナーで取付ける。

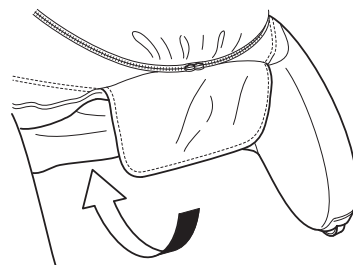


■インナーパッドの取りはずし方

マッサージチェア

- 背中ファスナーをはずして、インナーパッドを出し入れすることで、マッサージの強弱が調整できます。


取り外しかた

1. 背パッド上部の帯下のファスナーをあけてください。
2. ファスナー内のインナーパッド上部の面ファスナーをはずし、インナーパッドを引き出してください。
3. ファスナーを閉めてください。

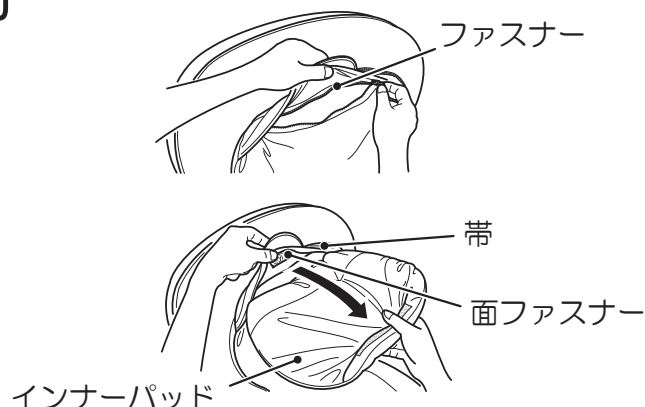

取り付けかた

1. インナーパッドの下側を持って、そのままファスナー内の奥へ押し込んでください。
 2. インナーパッドをすべて押し込んだあと、ファスナー内側の面ファスナーにインナーパッド上部の面ファスナーを取り付けて、ファスナーを閉めてください。
- ご使用時は、必ず背パッドのファスナーを閉めてください。

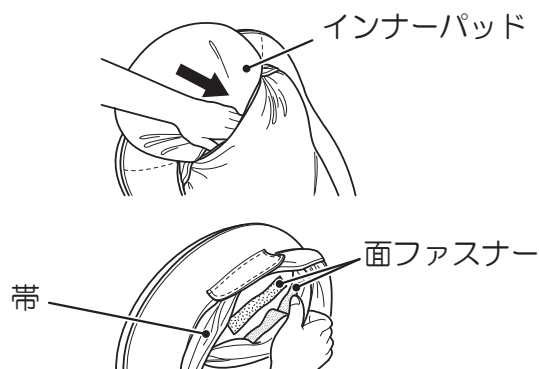

■リクライニング

マッサージチェア


リクライニング角度は床面に対して約112° から約148° の間で調節できます。

●背もたれを倒す場合

リクライニングレバーを引き上げながら、ご自身の力で背もたれを押してください。
お好みの角度でリクライニングレバーを離すと背もたれが固定されます。

●背もたれを起こす場合

体を浮かせて、リクライニングレバーを引き上げてください。背もたれが起き上がります。

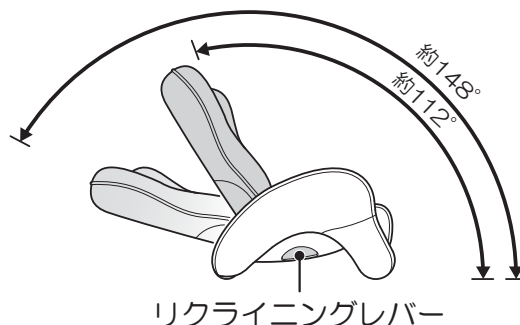

■アースについて

マッサージチェア

⚠ 注意

アースを確実に取り付ける。
アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、ご購入先に相談すること。




⚠ 接続してはいけないところ

ガス管・・・爆発や引火の危険があります。
電話線や避雷針・・・落雷のとき危険です。
水道管・・・途中がプラスチックの場合はアースになりません。

電源コンセントにアース端子がある場合

- アース線を本体のアース端子ネジと電源コンセントのアース端子に取り付けてください。
(アース線は付属していません)

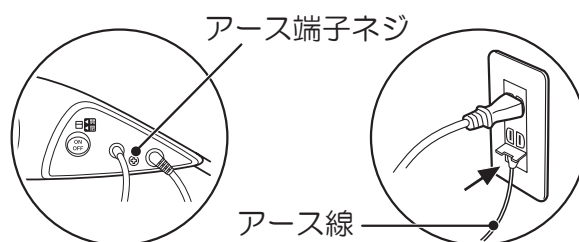

電源コンセントにアース端子がない場合

- ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事
(D種<第3種>接地工事・有料)をしてください。


■チャイルドロックについて

マッサージチェア

小さなお子さまの事故やけがを防止します。

「閉」にすることで、電源スイッチが「OFF」で固定されます。



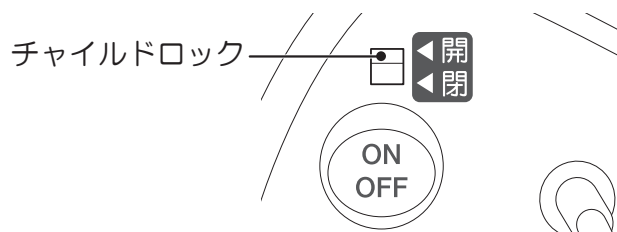

「開」から「閉」には、電源スイッチを「OFF」にして操作してください。



使い方

■ご使用の手順

マッサージチェア

 警告	 使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは直ちに使用を中止すること。
 注意	 使用時の健康状態など、必ず本取扱説明書の注意事項を守ること。

操作のしかた

● 電源を入れる

- ・電源プラグを差し込む前に、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- ・電源プラグを正確にコンセントに差し込んでください。
- ・チャイルドロックを「開」にしてください。
- ・電源スイッチを「ON」にしてください。
→ リモコンの電源ランプが点灯します。

● マッサージ動作を選ぶ

[リモコン]

おこのみ選択

1.おこのみ選択ボタンを押してください。

→ 選択された動作のランプが点灯します。

単独動作は、もみ ゆらぎ たたき 全身 部分

複合動作は、もみ + 全身 もみ + 部分

ゆらぎ + 全身 ゆらぎ + 部分

たたき + 全身 たたき + 部分

それぞれのボタンを用いて、マッサージを行うことができます。

[もみ]

4つのもみ玉が身体をつかんでしっかりともみほぐします。

[ゆらぎ]

もみ玉が平行に動くことで、体を押しながら揺らすようにもみます。

[たたき]

もみ玉の軽快な動きで、リズミカルにマッサージします。

[背すじ伸ばし]

肩から腰まで約52cm背すじをマッサージします。全身（約52cm間）と部分（約10cm間）マッサージを選択できます。



2. [全身] 以外の動作ボタンをお選びの場合は、上下調節 ▼ ▲ を押してもみ玉の高さを調節してください。
- 上下調節 ▼ を押している間、もみ玉が下へ移動します。下限まで下がると止まります。
- 上下調節 ▲ を押している間、もみ玉が上へ移動します。上限まで上がると止まります。
3. マッサージを止めたいときは、停止 又は 終了 を押してください。
- 終了 ボタンで、もみ玉が最上部へ移動して動作が停止します。
- 停止 ボタンでは、その場で停止します。

自動コース

- ・あらかじめ設定されたもみ、ゆらぎ、たたき、背すじ伸ばしの4つの動きで効果的にマッサージします。

1. ほぐし・リフレッシュ・やすらぎ を押してコースを選択してください。

ほぐしコース

- [もみ]・[ゆらぎ]・[たたき]・[背すじ伸ばし]の動作を組み合わせ、全身をしっかりもみほぐします。

リフレッシュコース

- 全身すっきりとマッサージします。

やすらぎコース

- 全身ゆったりとマッサージします。

2. マッサージを止めたいときは、停止 又は 終了 を押してください。

- 終了 ボタンで、もみ玉が最上部へ移動して動作が停止します。

- 停止 ボタンでは、その場で停止します。

- 背もたれを倒すことで刺激を強く感じ、背もたれを起こすことで刺激が弱く感じられます。
- 刺激の強さは、インナーパッドを入れたり、タオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。
※通常はインナーパッドをご使用ください。
- もみ玉が適切な位置に当たらないときは、身体をずらして調節してください。


● 動作開始から約15分で自動的に停止します

- ※使用途中に停止する場合は、停止 又は 終了 を押してください。

● 電源を切る

- ・電源スイッチをOFFにしてください。
→ リモコンの電源ランプが消灯します。
- ・電源プラグをコンセントから抜いてください。

[リモコン]

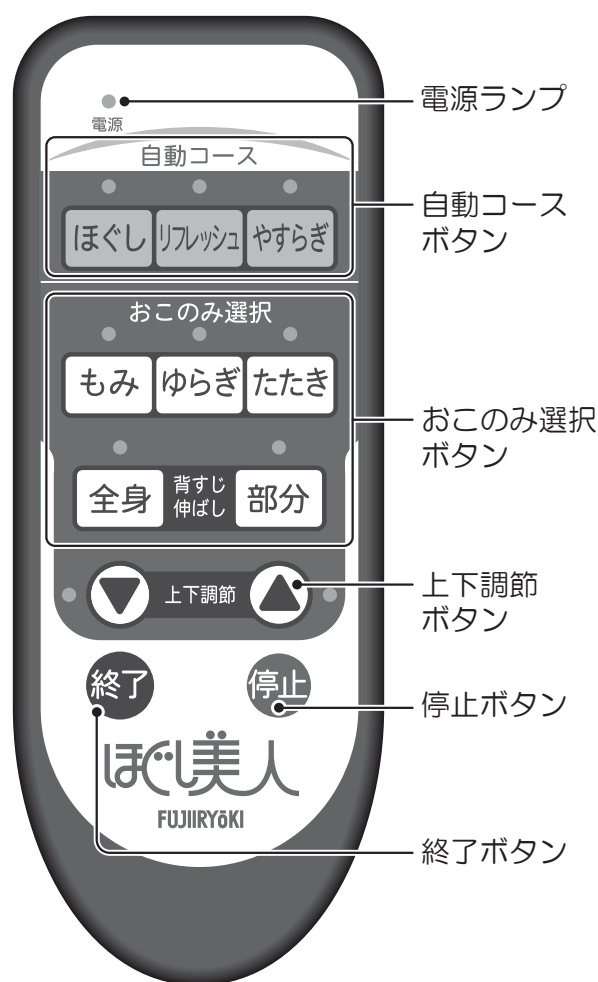

⚠ 注意



使用中以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。

使い方


脚部オットマン

⚠ 警告	
❗	使用中、身体の痛みやしびれ、めまい、動悸などの異常を感じたときは直ちに使用を中止する。
🚫	キャスター付きの椅子や回転椅子などで使用しない。

⚠ 注意	
❗	使用時の健康状態など、必ず本取扱説明書の注意事項を守る。
🚫	脚を本体部に入れたまま、立ち上がらない。

操作のしかた

[操作パネル]

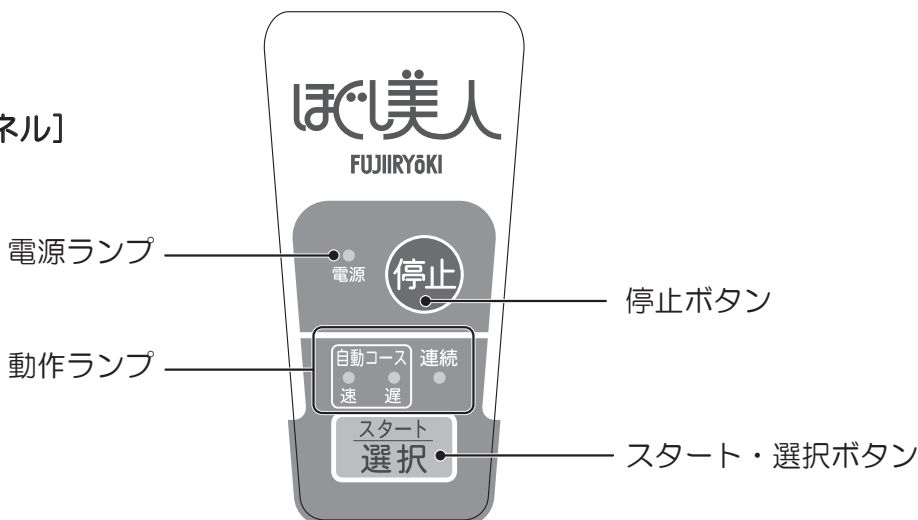

● 電源を入れる

- ・電源プラグを差し込む前に、電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ・電源プラグを正確にコンセントに差し込んでください。
- ・電源スイッチをONにしてください。
→ 操作パネルの電源ランプが点灯します。
- ・足を入れてください。

⚠ 注意	
🚫	本機が動作中に脚を入れたり、抜いたりしない。

● マッサージ動作を選ぶ

- ・スタート/選択ボタンを押してください。
押すごとに[自動コース(速)]→[自動コース(遅)]→[連続]→[停止]の順に切り替わります。

[自動コース]

【連続もみ運動】 【しぼりあげ運動】 【静止】 を自動設定で動作します。

→ 選択したコースの動作ランプが点灯します。

自動コース(速) → 少し速めのコース

自動コース(遅) → 少し遅めのコース

[連続]

【もみ運動】 を一定の速度で動作します。

→ [連続] の動作ランプが点灯します。

● 動作開始から約15分で自動的に停止します

※使用途中に停止する場合は、【停止】ボタンを押してください。


● 電源を切る

- ・電源スイッチをOFFにしてください。
→ 操作パネルの電源ランプが消灯します。
- ・電源プラグをコンセントから抜いてください。


⚠ 注意	
❗	使用中以外は、電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

■本体の角度を変える

1. 角度調節レバーを引き上げ、本体の角度を調節してください

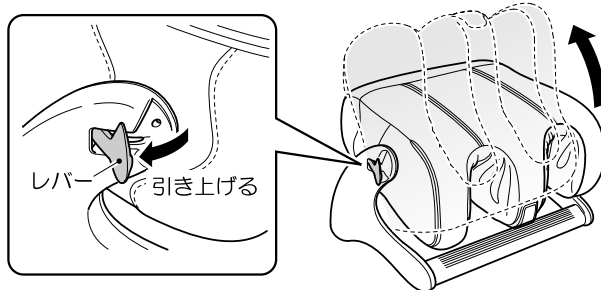


2. お好みの角度でレバーをおろし、本体を固定してください。

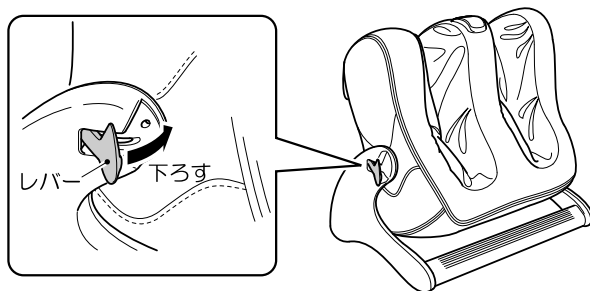


■使用例

・ お好みの角度に本体を調節し、ご使用ください。


●低い椅子での使用例

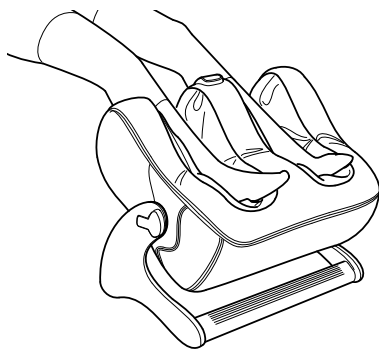

●高い椅子での使用例

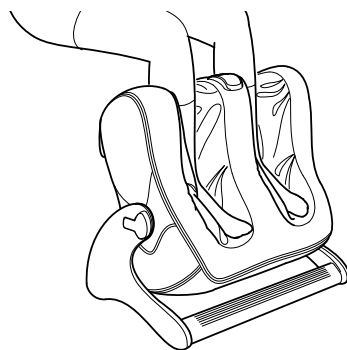

●オットマンとしての使用例

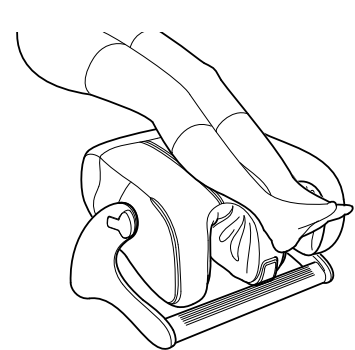

■緊急停止時について

停電などにより使用中に脚をはさんだままモミボードが閉じた状態で停止した場合は、本体ケースを両手で押えて、片脚ずつ抜き出してください。

また、停電復帰時の事故やけがを防止するため、電源スイッチを[OFF]にしてください。



お手入れ・保管

■お手入れについて

日常のお手入れを定期的に行ってください。

●本体

レザー部分のお手入れは、中性洗剤を含ませ硬くしぼった布でふいた後、水を含ませ硬くしぼった布でふきとり、乾いた布でふいて自然乾燥させてください。（中性洗剤を使いすぎると、レザー地をいためることがあります。）
塗装部分は乾いた布でふいてください。

●布カバー（本体背部・脚部オットマン）


ブラシをかけた後、中性洗剤を浸した布を硬くしぼり、汚れをふいた後、乾いた布で洗剤が残らないようにふきとってください。

●リモコン

乾いた布で拭いてください。

■保管について

1. 電源プラグをコンセントから抜き、アース線（マッサージチェア）を取り外してください。
2. 右肘掛け裏側にあるストッパーを引き、背もたれ（マッサージチェア）を前に倒してください。
3. 汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
※カビやシミの原因になります。
4. 直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所はさけてください。
※樹脂部・レザー部の変色・変質の恐れがあります。
5. しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

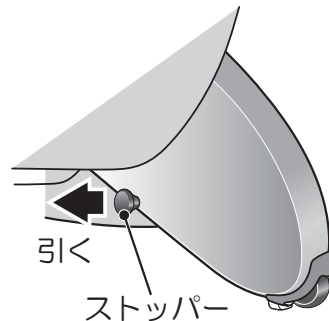

⚠ 注意



しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する。


■移動させるには マッサージチェア

1. 背もたれを起してください
2. 背もたれ側を押し下げながら本体の前面を浮かし、移動したい方向に歩けば、簡単に移動できます。

⚠ 注意



畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で移動させる場合は、マットなどを敷いてから移動させてください。

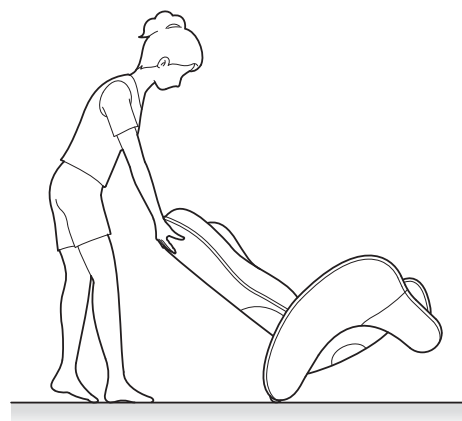

脚部オットマン


- 角度調節レバーをロックし、本体スタンド部を両手で持ち運んでください。

⚠ 注意



持ち運ぶときは両手で持って運ぶ。また、角度調節レバーは必ずロックする。

角度調節レバー

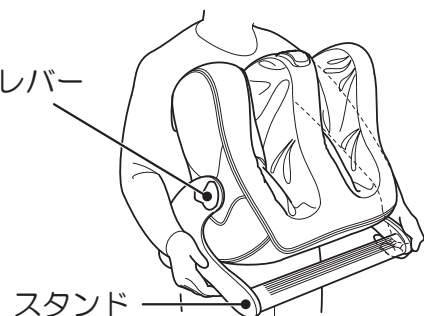

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、この章をご覧になり次のことをお確かめください。

マッサージチェア

症 状	原 因	対 処 方 法
<ul style="list-style-type: none"> ●もみ玉と布がすれる音 ●布地とその他がすれる音 ●マッサージ動作時のモーター音 	◆構造上のもので機能等に影響ありません	
●もみ玉が止まる	◆無理な力がかかっていますか 下記「※安全装置について」を参照	➔ 本体を2時間程度休ませてから再度動作を確認する
●動作しない	◆電源プラグが抜けていませんか ◆本体電源スイッチが切れていませんか ◆オートタイマーが動き、停止状態になっていませんか	➔ 電源プラグが抜けていないか、本体電源スイッチが切れていないか、またはオートタイマーが働いていないか確認する
●連続使用後にマッサージが止まる (リモコンランプは点灯している)	◆モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています	➔ 本体を2時間程度休ませてから再度動作を確認する
<ul style="list-style-type: none"> ●動作せず、リモコンからピッ、ピッ、と連続音がする ●動作せず、リモコンのランプが点滅する 	◆外来雑音による誤動作が考えられます	➔ 電源スイッチを入れなおしてください
●たたきを使用すると、背パッドが暖くなる	◆構造上のもので機能等に影響ありません	

※安全装置について

もみ玉に無理な力がかかると安全装置が動き、動作が止まることがあります。そのときは一度電源を切り、少し置いてから再度電源スイッチを入れてください。

脚部オットマン

症 状	原 因	対 処 方 法
●布カバーとその他がすれる音、 マッサージ動作時のモーター音	◆構造上のもので機能等に影響ありません	
●動作しない	◆電源プラグが抜けていませんか ◆本体電源スイッチが切れていませんか ◆オートタイマーが動き、停止状態になっていませんか	➔ 電源プラグが抜けていないか、本体電源スイッチが切れていないか、またはオートタイマーが働いていないか確認する
●連続使用後にマッサージが止まる	◆モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています	➔ 本体を2時間程度休ませてから再度動作を確認する

⚠ 機器に故障が発見された場合

ただちに使用を中止し、電源を切り『ご購入先』または『お客様相談窓口』に点検、修理を依頼してください。

仕様



■仕様


品名		マッサージチェア	
品番		PC-1000	
類別		機械器具 77 バイブレーター 管理医療機器	
一般的名称		家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)	
医療機器認証番号		221AGBZX00076000	
マ ッ サ ー ジ チ ェ ア 本 体	電 源	定格電圧 (50/60Hz)	AC100V
		定格消費電力	90W
		定格時間	20分
		電源コード	約2m
	機 能	もみ速さ	約65回/分
		ゆらぎ速さ	約65回/分
		たたき速さ	約270回/分
		上下移動	約1.6cm/秒
	オートタイマー		約15分
	リクライニング角度		約112°~148° (ガス圧式シリンダー)
	本体寸法 (約)	リクライニングしている時	幅 720mm X 奥行 1180mm X 高さ 640mm
		リクライニングしていない時	幅 720mm X 奥行 960mm X 高さ 910mm
	本体質量		約33kg
材質		本体: ABS樹脂 (周囲PULゼー貼付) 布カバー: 外側 (ナイロン) 内側 (ポリエステル)	
脚 部 オ ツ ト マ ン	電 源	定格電圧 (50/60Hz)	AC100V
		定格消費電力	50W
		定格時間	20分
		電源コード	約2m
	機 能	もみ速さ	約23回/分
		たたき速さ	約 138回/分
	オートタイマー		約15分
	本体寸法 (約)	水平時	幅 600mm X 奥行 470mm X 高さ 360mm
		垂直時	幅 600mm X 奥行 390mm X 高さ 510mm
	本体質量		約15kg
材質		本体: 合成皮革 布カバー: ポリエステル スタンド: ABS樹脂	
製造元		DAITO-OSIM HEALTHCARE APPLIANCES(SUZHOU) CO.,LTD (CHINA)	
製造販売元		株式会社フジ医療器 大阪府南河内郡太子町太子2372-95 電話番号 0721-98-6870 (代表)	

MEMO

修理・サービスと保証

愛情点検

 <p>愛情点検 長年ご使用の場合は 点検をぜひ！</p>	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none">● こげくさい臭いがする。● 電源コード、プラグが異常に熱い。● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。● その他の異常がある。	 <p>故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。</p>
---	--	--

 <p>注意</p>	<p>しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。</p>
--	--

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください


- **保証書（別に添付してあります。）**
お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間 お買い上げ日から1年間
- **補修用性能部品の保有期間**
当社はこのマッサージ機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

- 17ページに従ってしらべていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。
- **保証期間中に修理を依頼される場合**
ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)
 - **その他ご不明な場合**
アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。
- **保証期間を過ぎて修理を依頼される場合**
まずご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。
 - **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

 フリーダイヤル
0120-027612

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号 06-6644-9103 **E-mail** fj_soudansitu@fujiiryo.co.jp

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

地球の環境保護の為、破棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL