


家庭用電気磁気治療器

# Relaxation Park SFA

リラクゼーションパーク SFA

特許・実用新案・意匠登録各種登録済

取扱説明書  
添付文書

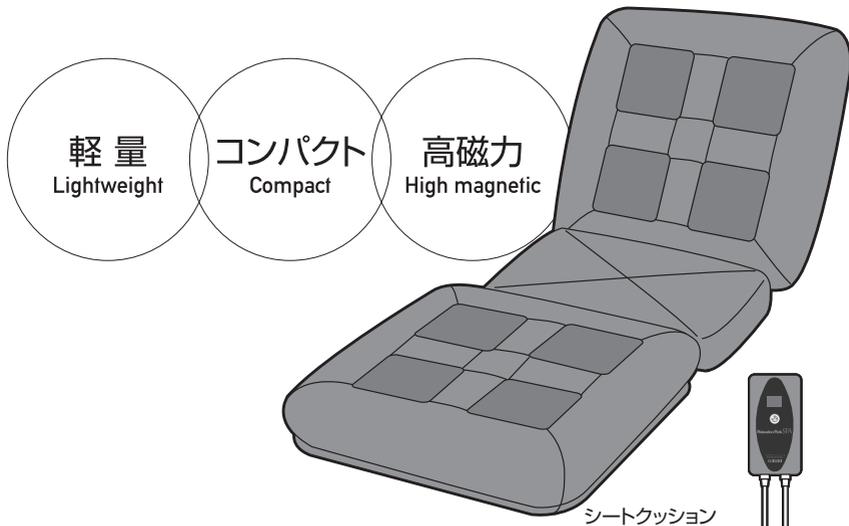

- ご使用になる前に、必ず「取扱説明書」をお読みいただき、安全に正しくご使用ください。
- また、お読みになった後も、いつでもご覧いただける場所で大切に保管してください。

## 【安全上のご注意】

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように絵表示を使って説明しています。表示の内容は次のように区分しています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 警告

- ペースメーカーなどの体内植え込み型医用電気機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している人は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。
- 低温やけどを防ぐために温度過昇防止装置がついていますが、個人差もございますので、熱いと感じられた方は使用を中止し、一旦冷ましてからご使用ください。

## 注意

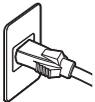

電源プラグやコネクターは根元まで確実に差し込むこと。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



ぬれた手で、電源プラグやコネクターの抜き差しはしないこと。感電の原因になります。



電源コード、電源プラグやコネクターを破損するようなことはしないこと。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。




コンセントや配線器具の定格を超える使い方や  
交流100V以外での使用はしないこと。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

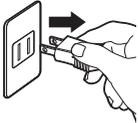

電源プラグやコネクターを抜くときは、  
コードを持たずにプラグを持って抜くこと。

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。




CHECK!

電源プラグやコネクター受けのほこりなどは定期的にとること。

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

OFF!

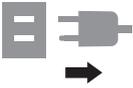

次の場合は直ちに電源プラグを抜き、

ご購入先またはお客様相談窓口にご連絡ください。

そのまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

変色・変形・異臭・異常な音、煙が出ているなどの異常な場合。

落下などにより、破損した場合。作動しなくなった場合。



本体及びコード、タイマーに水をかけないでください。

本体及びコード、タイマーは水がかかるような所、湿度の高い所では  
使わないでください。



分解や修理・改造の禁止

本体及びコード、タイマーを開けて分解したり、改造したりしないでください。



本体やタイマーを落とすなど強い衝撃を加えないでください。

故障の原因になります。



磁気発生ユニットに膝などで体重をかけないでください。

故障の原因になります。

ご使用の際は次の点にご注意ください。



ご使用中は、時計・磁気カードなど磁気の影響を受けるものは近づけないでください。



病気療養中や医師による治療を受けている人は、医師にご相談の上ご使用ください。


ご使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。



30min

他の治療器との併用はさけてください。  
治療器の目的以外にはご使用しないでください。

1回の治療時間は30分です。

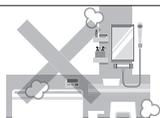

浴室などの湿度の高いところでは使用しないでください。

医師の治療を受けている人や下記の人は必ず医師と相談の上ご使用ください。



- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に感染症及び／または創傷のある人
- 温度感覚喪失が認められる人




- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人  
例1:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期  
例2:衰弱している時
- ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人

低温火傷の恐れがありますので、衣服の上からご使用ください。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

## 各部の名称

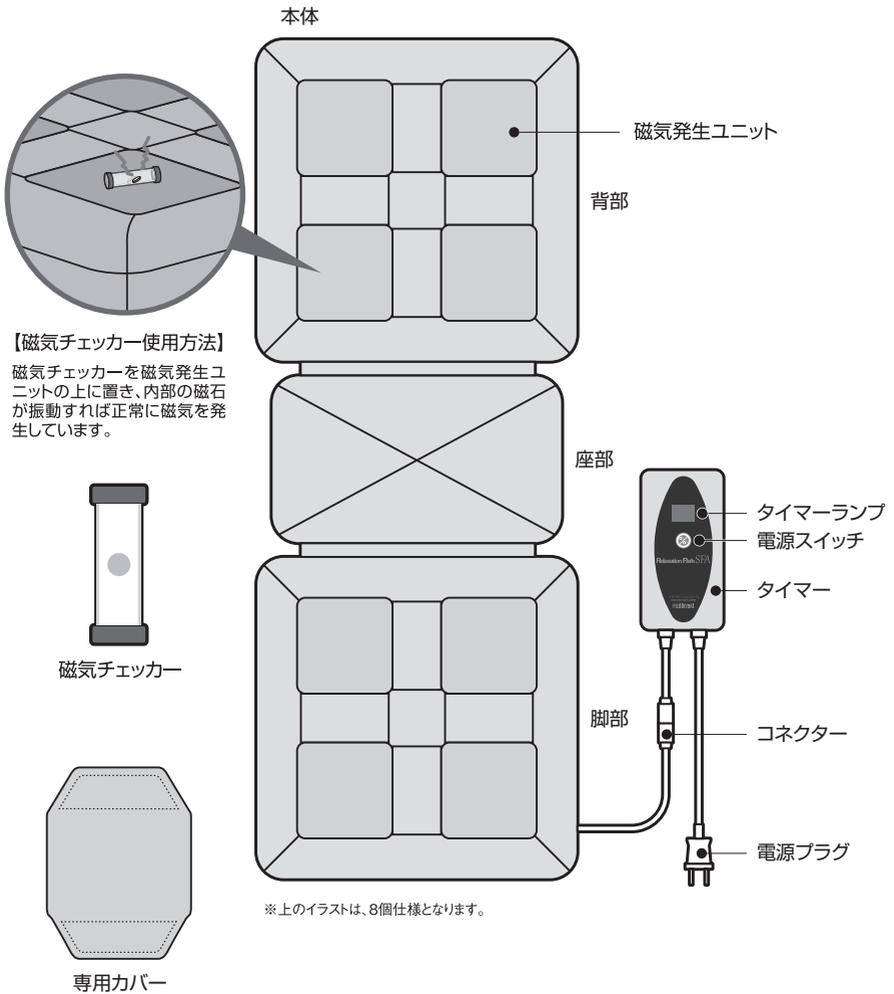

### 同梱品

開封したらすぐに商品がそろっているかご確認ください。

●本体 ●タイマー ●取扱説明書(本書) ●保証書


●磁気チェッカー ●専用カバー ※専用カバーは磁気発生ユニットと同じ数だけ付属しています。

## ご使用方法

図のように  
お手持ちの椅子や  
オットマンの上に  
置いてお使いください。



**1** 電源プラグをコンセントに差し込む。  
(タイマーランプに「—」が表示される。)

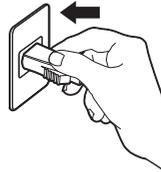


**2** タイマーの電源スイッチを押す。  
(ピッ!!と1回音が鳴り運転開始。  
タイマーランプに「30」  
(残りの治療時間)が表示される)



**3** 30分で運転が終了。  
(ピピッ!!と2回音が鳴り、  
タイマーランプに「00」が表示され、運転終了)

※途中で運転を中止する場合は、電源スイッチを押す。  
(ピッ!!と1回音が鳴り、タイマーランプに「—」が表示される)

**4** コンセントから電源プラグを抜く。

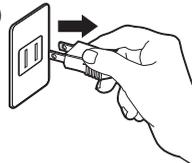

※付属品は指定されたものをご使用ください。

- ご使用前にタイマーが正常に作動するか確認してください。
- しばらく使用しなかった機器を使用する時は、製品が正常かつ安全に作動することを確認してください。

ご使用の際は、  
衣服を着用してご利用ください。  
肌に磁気発生ユニットを  
直接当てなくても磁気は届きます。



## 1日1回30分で。

本製品を使い始めでは、1日1回30分のご使用にとどめてください。体調などを考慮の上、徐々に使用時間や使用回数を増やしてください。1日のご使用は、1回30分で3回までとしてください。タイマーは1回の連続使用時間が設定されており、30分で自動的に運転が止まります。

## 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状をお確かめください。  
いずれにも当てはまらない場合は、ご購入先またはお客様相談窓口  
までご相談ください。

### 本体が動かない（磁気チェッカーが作動しない）

タイマーランプに表示がない

電源プラグがコンセントに  
差し込まれていますか？

電源プラグをコンセントに  
確実に差し込んでください。

タイマーランプに  
「—」または「00」の表示がある

タイマーの電源スイッチを  
押しましたか？

タイマーの電源スイッチを  
押してください。

※本体とタイマーをつなぐコネクターも接続されているかご確認ください。



### 故障ではありません

**磁気発生ユニットが熱くなりすぎると  
作動を自動的に停止します。**

磁気発生ユニットが熱くなりすぎると温度過昇防止装置が働き、タイマーランプが作動中でも自動的に運転を中断していることがあります。磁気発生ユニットの温度が下がるまでしばらく時間をおき再度電源スイッチを入れ、磁気チェッカーで作動を確認してください。

※磁気発生ユニットの温度過昇防止装置は、1ユニットごとに作動します。  
作動停止になったユニット以外は、運転しますが故障ではありません。


## お手入れ方法 大切に長くご使用いただくために

### 本体のお手入れ




- ゴミ、汚れは乾拭きを行ってください。  
(保護剤や艶出し剤は使用しないでください)

- お茶、コーヒー、ジュースなどがかった場合には、素早く水分を取り除き、柔らかい布に水に浸し硬く絞って汚れを取り除き、最後に乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。  
(余分な水分が縫製されたミシン目などから内側に染み込み、製品の不具合などの原因になる場合があります)

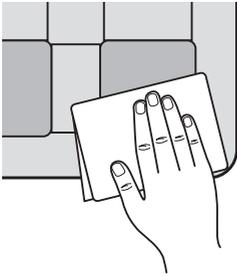


- 食品、油、化粧品などの汚れは中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に染み込ませ汚れを拭き取り、その後は柔らかい布を水に浸し硬く絞って汚れを取り除き、最後に乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- その他ボールペン、マジックなどの特殊な汚れは、上述同様の処置を手早く行ってください。

### コード・タイマーのお手入れ

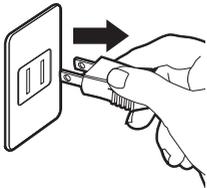

- コンセントから電源プラグを抜いた後、中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ってください。シンナー・みがき粉などは絶対に使用しないでください。水洗いは絶対にしないでください。

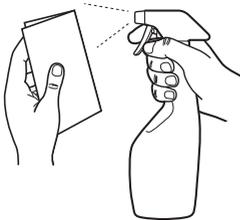

## 保管上のご注意


**OFF!**



使用しない場合は必ず  
電源スイッチを切り  
電源プラグを  
抜いて保管ください。



ぐらついた台の上や、  
傾いた場所など  
不安定な場所には  
置かないでください。

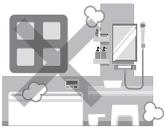

浴室など湿度の  
高いところやほこりの  
多いところには  
保管しないでください。



調理台のそばなど  
油煙や湯気の  
当たるところには  
保管しないでください。



暖房器具のそばなど  
高温になるところには  
保管しないでください。



直射日光の当たる  
場所には保管しないで  
ください。



ナフタリン・防虫剤は  
劣化を促進しますので  
ご使用を  
お避けください。



機器を廃棄するときには、  
お住まいの市区町村の  
廃棄方法に  
従ってください。

## 製品仕様

- 一 般 的 名 称 ● 家庭用電気磁気治療器  
販 売 名 名 ● シートクッション  
管理医療機器 認証番号 ● 第219AFBZX00049000号  
使用目的・効 能 効 果 ● 装着部位のコリ、及び血行改善。一般家庭で使用すること。  
動 作 原 理 ● 交流電気によって磁場を作り、人体に磁力線を浸透させて治療します。  
販 売 元 ● 株式会社フジ医療器  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
製 造 販 売 元 ● ㊤ 株式会社 ホ-コー-エン  
〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町2628番地998  
Tel 0877-49-6310  
製 造 元 ● ㊤ 株式会社 ホ-コー-エン

### 本体仕様

定格電圧	AC100V
安全装置	温度過昇防止装置
定格周波数	50Hz/60Hz
寸法	約1,680×510×80mm
最大磁束密度	180mT

磁気発生ユニット数	定格容量	消費電力	重 量
4個	80/68VA	18.0/13.0W	約10,780g
6個	125/101VA	26.0/18.0W	約12,540g
8個	168/135VA	37.0/24.0W	約14,300g

※消費電力はタイマーを接続した場合。

### タイマー仕様

出力電圧	AC100V
入力電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
運転表示	7セグメントLED

定格時間	30分
寸法	約180×80×38mm
重量	約400g

※本製品に関しては、改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

## アフターサービスについて

### ●修理サービス

- ・ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入先またはお客様相談窓口にご連絡ください。
- ・保証期間経過後の修理については、ご購入先にご相談ください。

### ●保証書について

- ・リラクゼーションパーク SFA には、「保証書」がついています。
  - ・保証書にお買い上げ日、ご購入先名など所定事項の記入がないと無効となります。
  - ・万一故障した場合には、保証記載内容により、保証期間内は無償修理いたします。但し、製品を勝手に改造した場合は無効となります。
  - ・リラクゼーションパーク SFA の保証期間は、お買い上げから 1 年間です。
  - ・この保証については、日本国内のみに適用されます。
  - ・補修用性能部品の保有期間は、当製品製造中止後 6 年間です。
- ※補修用性能部品とは、機能を維持する為に必要な部品です。

## お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 30 分  
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・Web での受付も行っております。

 FAX番号 **06-4793-0818**

 Web **フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。**  
フジ医療器ホームページ **www.fujiiryoki.co.jp**

FAX・Web での受付は 24 時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
www.fujiiryoki.co.jp