

SYNCA

株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

☎ 0120-027-612

[www.synca-wellness.jp](http://www.synca-wellness.jp)



●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。

23.10.2S.JHC.A [注文No.1716]

シンカ ネック & ショルダー マッサージャー

SYNCA NECK & SHOULDER MASSAGER



SYNCA

## いつでもどこでも本格マッサージ

肩にのせるだけで首や肩をもみほぐします。

忙しく時間がないときでも自宅や外出先で簡単マッサージ。

もみ心地にこだわった  
8つのもみ玉

首、肩はもちろん  
全身マッサージ

持ち運びに便利な  
充電式コードレス

ネック&ショルダーマッサージャーの使用目的または効果  
あんま、マッサージの代用

疲労回復

血行をよくする

筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす

神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



## もみ心地にこだわった8つのもみ玉

従来品はもみ玉4つが主流でしたが、ネック&ショルダーマッサージャーは大小のもみ玉が合計8つ、そしてうち4つにヒーター機能を搭載しています。

これにより首や肩のこりのより深いところにもだもみ玉が行き届き、まるで人の手のような温かく細やかなもみ心地を実現しました。




### 人肌のような温かさで優しくほぐします

8つのもみ玉のうち4つに温熱ヒーターを内蔵しています。人肌程度の温もりによる心地よいマッサージは血行促進にも効果があります。



### 気になるこりにもみ玉がフィット

ネック&ショルダーマッサージャーを体押し当てることで、もみ玉の動きは深さ最大1.5cm、幅最大1cmの範囲で可変します。気になるこりのより深いところにもだもみ玉が行き届きます。

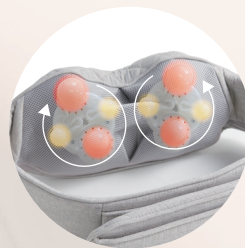

### 回転方向の自動反転とスピード調整

マッサージの回転方向は約1分で自動で反対回転に切り替わります。(回転方向の固定もボタン操作で可能です) また回転スピードも3段階の切り替えが可能です。

## 首、肩はもちろん、全身マッサージ

首、肩はもちろん、腰やふともも、ふくらはぎ、足裏など、こりや疲れが気になるさまざまな部位にお使いいただけます。



## 持ち運びしやすい充電式コードレス

充電式のコードレスタイプで重さわずか約1.6kg。

ベッドルームやリビングはもちろん、屋外でもマッサージを楽しめます。

### 製品仕様

販売名	ネック&ショルダーマッサージャー SM260
医療機器認証番号	301AGBX00051000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード:34662000)
電源	AC100V 50/60Hz・Li-ion充電電池(DC11.1V 2,200mAh)
定格電力	24W(ヒーター12W)
製品サイズ	約W400×D160×H170mm
製品質量	約1.6kg
材質	ABS樹脂、ポリアセタール樹脂(布カバー:リネン、ポリエステル、綿)
保証期間	お買い上げ日から1年間(本体のみ)